

# PROTETTUR LI FIIH MA JIDHOLX ILMA

minnu għal ġibs u infaxxaturi



## GWIDA GHALL-KURA U UŻU

**MT** Il-protettur Bloccs<sup>®</sup> li fih ma jidholx l-ilma hu ddissinjat apposta biex jiproteġi l-ġibs, infaxxatura jew faxex biex min jilbes dawn ikun jista' jgħum jew jiehu doċċa bhas-soltu. Dan il-protettur li ma jidhol ebda qatra ilma fih u li hu kompletament sommerġibbli jista' jintuża hdejn il-baħar jew pixxina jew paddling pool.

**⚠️ TWISSIJA:** Gomma latex naturali tista' tikkawża reazzjoni allergjika. Jekk qiegħed taħt kura medika, jekk jogħġbok ġib l-approvazzjoni tal-professionist mediku tiegħek qabel ma tuża l-protettur. TUŻAX JEKK INT ALLERGĪKU GHAL-LATEX.



**Precision Dippings  
Manufacturing Ltd**  
Unit J, Lawrence Drive  
Stover Trading Estate, Yate,  
Bristol, BS37 5PG  
UK



Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
B-1030, Brussels  
Belgium



Obelis SWISS GmbH  
Ruessenstrasse 12  
6340 Baar/ZG  
Switzerland

### Magħmul fir- Renju Unit

Il-prodotti kollha huma magħmula skont l-istandard kurrenti approvat ISO 9001 Sistema tal-Amministrazzjoni tal-Kwalità  
©Bloccs<sup>®</sup> 2023



### Bloccs<sup>®</sup>

Precision Dippings  
Manufacturing Ltd, Unit J,  
Lawrence Drive, Stover Trading  
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK  
Telefown: +44 (0) 1454 318197  
Email: [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)

[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)



Riproduzzjoni, kopji, xogħolijiet derivattivi, distribuzzjoni u wiri għall-pubbliku ta' dan il-manwal huma permessi biss bil-kunsens bil-miktub bil-quddiem ta' Bloccs<sup>®</sup>.

# KURA U UŽU TAL-PROTETTUR BLOCCS® TIEGHEK

Grazzi talli għazilt Bloccs®. Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa l-istruzzjonijiet li ġejjin qabel ma tuża l-protettur Bloccs® tiegħek jew qabel tissorvelja t-tfal waqt li jużaw tagħhom. Dan ser jassigura li l-protettur ikun qed jintuża b'mod sigur u li s-sigill li support hu issikkat sew biex ma jhallix l-ilma jidhol hu effettiv.

Id-deċijoni li tilbes l-protettur Bloccs® meta tiehu banju, doċċa jew tużah għal kwalunkwe attività oħra bbażata fuq l-ilma tittiehed b'riskju għalik. Għandek tikseb parir mediku biex tassigura li l-attività ma taffettwax il-ferita.

## Kif tilbes il-protettur Bloccs® tiegħek

Peress li l-protettur Bloccs® hu magħmul minn gomma latex naturali, għandek tneħhi kull ġojjellerija b'xifer u oqgħod attent li ma jittaqqabx b'difrejks stess. Għatti t-trufijiet horox bit-tape jew b'faxxa li tiġġebbed.

Qabel ma tuża, oġhrok is-sigill flimkien b'idejk u ġebdu f'it bil-mod. Biex tivverifika kif jidhol is-sigill, ipprova l-għata tiegħek fuq id-driegħ jew ir-riġel bla ġibs. Jekk is-sigill jinħass wisq issikkat jew mahlul meta tippruvah, jekk jogħġbok aghżel protettur ta' daqs differenti.

Is-sigill lixx, inkaxxat mal-ġilda li ma jidhol ilma minnu għandu jiġġebbed bla tfixkil fuq l-infaxxatura.

Segwi l-gwidi tagħna b'erba' passi faċli inklużi f'dan il-fuljett biex jgħinuk tilbes il-Bloccs® tad-driegħ/riġel u minkeb/irkoppa tiegħek.

## Kif tuża l-protettur Bloccs® tiegħek

Il-protettur Bloccs® hu maħsub biex iżomm l-infaxxatura niexfa meta tkun esposta jew mġaddsa fl-ilma.

Il-protetturi Bloccs® jużaw l-istess tip ta' sigill bħal dak li nsibu fuq dry suits.

Qabel ma tidhol fl-ilma, neħhi l-arja kollha mill-protettur Bloccs® billi timmassaġġja l-għata 'l fuq lejn is-sigill biex tohroġ l-arja kollha maqbuda ġewwa. Dan jista' jsir ukoll b'mod gradwali billi tniżżel il-parti ġol-ilma ħalli l-pressjoni tal-ilma tressaq l-arja lejn in-naħa ta' fuq tal-protettur.

Igħbed is-sigill bil-mod minn mal-ġilda biex tneħhi l-arja qabel ma tgħaddas u assigura li l-ilma ma jidholx ġol-protettur.

Il-protettur għandu jintlibes eżatt qabel ma tidhol fl-ilma u jitneħħa hekk kif tohroġ mill-ilma.

Id-deċijoni li tidhol fl-ilma hi għar-riskju tiegħek. M'għandekx taqbeż jew togħdos fil-pixxina. Il-protetturi ma kinux maħsuba għal għadis, snorkeling jew għal sports ieħor tal-ilma.

Nirakkomandaw li l-protettur Bloccs® ikun ivverifikat regolarment waqt l-użu biex tassigura li s-sigill baqa' ma jistax jidhol ilma fih u li jkun komdu.

Il-protettur jista' jintlibes sa 30 minuta - sakemm ikun għadu komdu biex tilbsu, ma jinħassx issikkat u hu vverifikat regolarment. Jekk tilbes il-protettur għal iktar minn 30 minuta jista' jkollok arja maqbuda ġewwa u dan iwassal għal għaraq u skumdità.

IT-TFAL GħANDHOM IKUNU  
SORVELJATI L-HIN KOLLU ĠO PIXXINA  
JEW FIL-BAĦAR

# Kif tneħhi l-protettur tiegħek

Biex tneħhi l-protettur Bloccs® tiegħek, żerżqu bil-mod fuq l-infaxxatura jew l-ġibs ta' fuq idek jew riġlek. Ogħhod attent u kun żgur li s-siġilli ma saritilhomx ħsara bid-dwiefer jew gojjellerija.

## Kura tal-protettur Bloccs®

Il-protettur Bloccs® hu suġġett għal ħsara waqt l-użu imma għandu jservi għal madwar 4 ġimgħat ta' użu normali.

Il-protettur għandu jkun iwerifikat qabel kull użu biex tassigura li ma jkunx hemm sinjali ta' ħsara jew gheja kbira.

Jekk il-protettur ddeterjora jew b'xi mod jew iehor kellu l-ħsara, għandek tixtri iehor minflok.

Il-protetturi għandhom jiġu maħżuna f'temperatura inqas minn 26°C (78.8 F) u 'l bogħod minn heaters. F'bard estrem, il-protettur jista' jsir iebes: dan mhux permanenti u jekk issaħħnu, jerġa' jiġi tajjeb.

Kundizzjonijiet umdi ta' hażna għandhom jiġu evitati. Evita li tesponi l-protettur għal perjodu itwal ta' dawl, speċjalment id-dawl tax-xemx diretta u dawl artifiċjali b'ammont għoli ta' UV.

Il-protettur Bloccs® jista' jinħasel f'ilma sħun u wara trid tnixxfu minn ġewwa u barra bil-galbu. Jekk timsaħ ġewwa bi ftit terra, ikun iktar faċli li tneħhi il-protettur Bloccs®. Tnixxif il-protettur go tumble drier jew fuq radiator.

Evita kuntatt ma' ram, liga li jkollha r-ram, solventi, żjut u grassijiet għax jistgħu jikkaġunaw ħsara lill-protettur Bloccs®.

Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufa għax dan jista' jwassal għal korriment serju fuq il-persuna u anki mewt.

*Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar il-protettur Bloccs® tiegħek, jekk jogħġbok żur [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) jew ibgħat email lil [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com).*

*Kopja ta' dan il-manwal, il-grafika tagħna tal-qisien u l-garanzija Bloccs® huma disponibbli fuq il-website tagħna [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)*

*Bloccs® iżżomm d-dritt li timmodifika il-manwal kif tqis li hu xieraq. Bħala konsumatur, hi r-responsabbiltà tiegħek li tverifika l-verżjoni onlajn tal-manwal għal modifikazzjonijiet.*

**TIWISSIJA:** Bloccs® jista' jsir jiżloq meta jkun imxarrab. Uża tapit tal-banju li ma jiżloqx fid-doċċa jew banju u żomm tapit iehor li ma jiżloqx jew xugaman għal meta toħroġ. M'għandekx timxi mal-ġenb tal-pixxina meta jkollok fuqek protettur Bloccs® u ogħhod iktar attent meta tuża taraġ tal-pixxina għax jista' jiżloq. Żomm tajjeb mal-poġġaman.

**TIWISSIJA:** Protetturi Bloccs® mhumiex ġugarelli. Biex tevita periklu ta' soffokazzjoni, żomm il-prodott u l-ippakkjar tiegħu fejn ma jilħquhomx it-tfal u t-trabi.

**TIWISSIJA:** Gomma latex naturali tista' tikkawża reazzjoni allergjika. Jekk qiegħed taħt kura medika, jekk jogħġbok ġib l-approvazzjoni tal-professjonist mediku tiegħek qabel ma tuża l-protettur. TUŻAX JEKK INT ALLERĠIKU GĦAL-LATEX.

**TIWISSIJA:** Għandek tiehu iktar ħsieb meta ddaħħal ġibs tar-riġel fl-ilma għax jistgħu jkunu tqal u jirrestringu l-moviment. M'għandekx tipprova tgħum b'ġibs tar-riġel.

**TIWISSIJA:** Ogħhod attent għal-linji PICC jew IV.

*Mhux possibbli niprovdu twissijiet dwar kull periklu possibbli relatat mal-użu ta' dan il-prodott. Il-konsumaturi huma avzati allura biex jużaw is-sens komun u ġudizzju tajjeb meta jużaw protettur Bloccs®.*

*Kull incident serju li jseħħ relatat ma' dan it-tagħmir għandu jkun irrapportat lill-fabbrikant u l-awtorità kompetenti fil-pajjiż minn fejn inxtara.*

# BLOCCS®

## KIF TILBES IL-PROTETTUR BLOCCS® FID-DRIEGH JEW RIĠEL MINGHAJR ASSISTENZA

Il-protettur għandu jintuża skont l-istruzzjonijiet kollha tal-kura u tal-użu. Jekk jogħġbok żur [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) biex tara l-video tad-dimostrazzjoni u l-Mistoqsijiet Frekwenti.



Nehhi l-protettur tiegħek mill-imballaġġ u ifthu. Nehhi ċ-ċrieket bil-ponta, eċċ.



Qabel ma tuża, oġhrok is-siġill flimkien b'idejk u gebdhu f'tit bil-mod.



Itwi l-protettur lura nofs triq mit-tarf miftuħ.



Biex tivverifika kif jidhol is-siġill, l-ewwel ipprova l-ghata tiegħek fuq id-driegh jew ir-riġel bla ġibs jew infaxxatura.

Poġġi d-driegh jew riġel li trid fit-tarf miftuħ biex is-sieq jew l-id tkun fit-tarf tal-protettur.



Rembel l-protettur lura fuq id-driegh jew ir-riġel sakemm is-siġill ikun ċatt mal-ġilda. Jekk is-siġill jinħass wisq issikkat jew maħlul meta tippruvah, jekk jogħġbok aghżel protettur ta' daqs differenti.


Halli f'tit arja toħroġ biex tevita li jzomm f'wiċċ l-ilma.

# BLOCCS®

## KIF TILBES BLOCCS® TAL -MINKEB JEW TAL-IRKOPPA MINGHAJR ASSISTENZA

Il-protettur għandu jintuża skont l-istruzzjonijiet kollha tal-kura u tal-użu. Jekk jogħġbok żur [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) biex tara l-video tad-dimostrazzjoni u l-Mistoqsijiet Frekwenti.

1

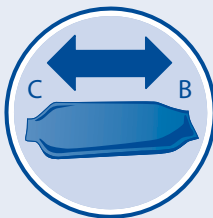

Nehhi l-protettur tiegħek mill-imballaġġ u ifthu. Nehhi ċ-ċrieket bil-ponta, eċċ.

Il-protettur għandu żewġ itruf; tarf wiesa' biex jissigilla madwar il-biċipite jew koxxa (B) u tarf iżgħar biex jissigilla madwar il-polz jew il-pexxun iktar isfel (C).

2




Qabel ma tuża, oġhrok is-siġilli flimkien b'idejk u ġebbidhom f'tit bil-mod.

3



Biex tilbes il-protettur faċilment, hu t-tarf B u dawwar nofs il-protettur minn ġewwa għal barra halli jkun eżatt fuq it-tarf C.


4

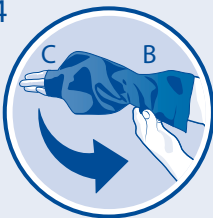

Biex tivverifika kif jidhol is-siġill, l-ewwel ipprova l-ghata tiegħek fuq id-driegħ jew ir-riġel bla ġibs jew infaxxatura.



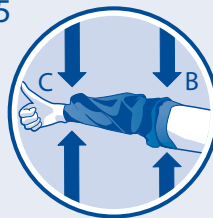


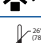





Imbotta bil-mod jew idek jew sieqek miż-żewġ trufijiet B u mbagħad C. Imbagħad tella' t-tarf B sakemm jissigilla tajjeb fuq id-driegħ jew il-koxxa.

5



Iż-żona kollha tal-infaxxar għandha tkun miksija u siġill lixx issikkat mal-ġilda li ma jidholx l-ilma fih għandu jifforma madwar id-driegħ jew riġel fiż-żewġ trufijiet tal-protettur. Jekk is-siġill jinhass wisq issikkat jew wisq mahlul meta tippruvah, jekk jogħġbok aghżel protettur ta' daqs differenti.

Halli f'tit arja toħroġ biex tevita li jżomm f'wiċċ l-ilma.

	Manifattur
	Markatura tal-konformità CE
	Konformità tar-Renju Unit vwalutata
	Apparat Mediku
	Identifikatur Uniku tal-Apparat
	Numru ta' Apparati
	Kodiċi tal-lott
	Data tal-Manifattura
	Distributur
	Rappreżentant Awtorizzat fl-Unjoni Ewropea
	Rappreżentant awtorizzat Żvizzeru
	Importatur
	ATTENZJONI
	Fih preżenza ta' gomma naturali latex
	Wiċċ li jżloq
	Riskju ta' soffokazzjoni
	Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx
	Aħżen bejn 5 - 26°C (41-78°F)
	Pazjent wiehed - użu multiplu
	Mhux sterili
	Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu
	Imballaġġ riċiklabbli
	L-ebda fjammi mikxufa