

BLOCCS®



WODOODPORNY OCHRANIACZ BLOCCS® do gipsów i opatrunków



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

PL Wodoodporny ochraniacz Bloccs® służy do zabezpieczenia gipsu, opatrunku lub bandaża przed wodą podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Ten w pełni wodoszczelny ochraniacz można zanurzać w wodzie podczas pobytu na plaży, w basenie lub w brodziku.

UWAGA: Lateks może powodować reakcję alergiczną. Jeśli jesteś pod opieką lekarza lub terapeuty, przed użyciem ochraniacza zalecamy konsultację. **NIE UŻYWAĆ W PRZYPADKU UCZULENIA NA LATEKS.**



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie produkty powstają zgodnie z obowiązującą normą ISO 9001 dotyczącą systemów zarządzania jakością.

©Bloccs® 2023

Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Telefon: +44 (0) 1454 318197
Email: info@bloccs.com

www.bloccs.com



Reprodukowanie, kopiowanie, odtwarzanie, dystrybuowanie i publiczne prezentowanie tej instrukcji jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Bloccs®.

INSTRUKCJA PIELEGNACJI I UŻYWANIA OCHRANIACZA BLOCCS®

Dziękujemy za zakup produktu marki Bloccs®. Przed założeniem ochraniacza Bloccs® lub użyciem go przez dziecko uważnie przeczytaj poniższe instrukcje. To pozwoli bezpiecznie korzystać z ochraniacza oraz zadbać o jego szczelność.

Decyzję o użyciu ochraniacza Bloccs® podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem lub innej czynności związanej z wodą użytkownik podejmuje na własne ryzyko. Aby upewnić się, czy takie działanie nie będzie szkodliwe w przypadku danego urazu, skonsultuj się z lekarzem.

Zakładanie ochraniacza Bloccs®

Ochraniacz Bloccs® jest wykonany z lateksu, dlatego też najpierw zdejmij biżuterię z ostrymi krawędziami oraz zachowaj ostrożność, aby nie przebić ochraniacza paznokciami. Ostre krawędzie zakryj taśmą lub bandażem elastycznym.

Przed użyciem potrzyj uszczelnienie w dłoniach i lekko je rozciągnij. Aby sprawdzić, czy ochraniacz szczelnie przylega do skóry, załóż go najpierw na nogę lub rękę bez gipsu ani opatrunku. Jeśli ochraniacz jest zbyt ciasny lub zbyt luźny, wybierz inny rozmiar.

Ochraniacz powinien gładko i ciasno przylegać do opatrunku lub gipsu oraz skóry.

Instrukcja zamieszczona w tej ulotce w przejrzysty sposób wyjaśnia, jak w pięciu krokach założyć ochraniacz Bloccs® na ramię, nogę, łokieć lub kolano.

Używanie ochraniacza Bloccs®

Ochraniacz Bloccs® chroni opatrunek lub gips przed wilgocią podczas kontaktu z wodą lub zanurzenia w niej. Ochraniacze Bloccs® wykorzystują ten sam typ uszczelnienia, który jest stosowany w suchych skafandrach do nurkowania.

Przed wejściem do wody dłonią rozmasuj ochraniacz Bloccs® w górę, w stronę uszczelnienia, aby usunąć z niego powietrze. W tym celu można też stopniowo wkładać nogę lub rękę do wody, tak aby ciśnienie wody wypychało powietrze ku górze ochraniacza.

Przed zanurzeniem ochraniacza delikatnie odchyl uszczelnienie, aby wypuścić powietrze ze środka.

Ochraniacz należy zakładać tuż przed wejściem do wody i zdejmować tuż po wyjściu z niej.

Decyzję o wejściu do wody podejmujesz na własne ryzyko. Do wody ani basenu nie wolno wskakiwać. Ochraniacze nie są przeznaczone do skakania, nurkowania, snorkelingu ani innych sportów wodnych.

Podczas używania ochraniacza Bloccs® zalecamy regularnie sprawdzanie, czy uszczelnienie przylega ciasno do skóry oraz czy jest on nadal wygodny.

Ochraniacz można nosić przez maksymalnie 30 minut, o ile jest on wciąż wygodny, nie jest zbyt ciasny i jest regularnie sprawdzany. W przypadku noszenia ochraniacza przez ponad 30 minut powietrze wewnątrz może powodować pocenie się i dyskomfort.

**PODZAS KĄPIELI W BASENIE LUB
MORZU DZIECI MUSZĄ BYĆ POD STAŁYM
NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ**

Zdejmowanie ochraniacza

Aby zdjąć ochraniacz Bloccs®, ostrożnie go zsuń przez opatrunek lub gips. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić uszczelnienia pokrowca biżuterią lub paznokciami.

Pielęgnacja ochraniacza Bloccs®

Ochraniacz Bloccs® zużywa się z czasem, ale powinien wystarczyć na około 4 tygodni normalnego użytkowania.

Przed każdym użyciem sprawdzaj ochraniacz pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego zużycia.

Jeśli ochraniacz jest zużyty lub uszkodzony, wymień go.

Ochraniacze przechowuj w temperaturze poniżej 26° oraz z dala od źródeł ciepła (np. kaloryferów). W skrajnie niskiej temperaturze ochraniacz może być sztywny, ale po ogrzaniu znów stanie się miękki.

Unikaj przechowywania go w wilgotnych warunkach. Unikaj wystawiania ochraniacza na długotrwałe działanie światła, zwłaszcza bezpośredniego nasłonecznienia lub sztucznego światła o wysokiej zawartości promieniowania UV.

Unikaj przechowywania go w wilgotnych warunkach. Unikaj wystawiania ochraniacza na długotrwałe działanie światła, zwłaszcza bezpośredniego nasłonecznienia lub sztucznego światła o wysokiej zawartości promieniowania UV.

Ochraniacz Bloccs® można myć w ciepłej wodzie, a następnie dokładnie wysuszyć od wewnątrz i zewnątrz. Nałożenie niewielkiej ilości talku na wewnętrzną powierzchnię ochraniacza Bloccs® ułatwi jego nakładanie. Ochraniacza nie wolno suszyć w suszarce ani na kaloryferze.

Miedź, stopy miedzi, rozpuszczalniki, oleje i smary mogą uszkodzić ochraniacz Bloccs®, dlatego należy unikać kontaktu z nimi.

Trzymaj ochraniacz z dala od otwartego ognia, ponieważ może on spowodować poważne urazy lub nawet śmierć.

Jeśli masz pytania dotyczące ochraniacza Bloccs®, zapraszamy na stronę www.bloccs.com. Można też do nas napisać na adres info@bloccs.com.

Ta instrukcja, tabela rozmiarów oraz gwarancja Bloccs® są dostępne na naszej stronie www.bloccs.com

Bloccs® zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji według uznania. To konsument ponosi odpowiedzialność za sprawdzanie instrukcji online pod kątem zmian.

UWAGA: Wilgotny ochraniacz Bloccs® może być bardzo śliski. W związku z tym ułóż pod prysznicem lub w wannie matę antypoślizgową. Przygotuj też drugą matę lub ręcznik przy wyjściu z prysznica lub wanny. Nie należy chodzić wokół basenu w ochraniaczu Bloccs®. Podczas wchodzenia do basenu zachowaj ostrożność, ponieważ schodki i drabinki bywają śliskie. Trzymaj się mocno poręczy.

UWAGA: Ochraniacze Bloccs® nie są zabawkami. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, produkt i jego opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

UWAGA: Lateks może powodować reakcję alergiczną. Jeśli jesteś pod opieką lekarza lub terapeuty, przed użyciem ochraniacza zalecamy konsultację. **NIE UŻYWAĆ W PRZYPADKU UCZULENIA NA LATEKS.**

UWAGA: Podczas zanurzania nogi w gipsie zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ gips może być ciężki i ogranicza swobodę ruchów. Nie należy próbować pływać z nogą w gipsie.

UWAGA: W przypadku dojść centralnych PICC lub kaniuli do kroplówki należy zachować szczególną ostrożność.

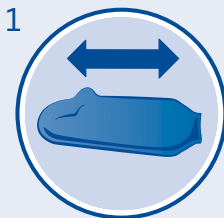
Nie da się ostrzec przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem produktu. Dlatego też użytkownicy podczas korzystania z ochraniacza Bloccs® powinni kierować się zdrowym rozsądkiem i przemyślaną oceną sytuacji.

Wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi w kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.

BLOCCS®

ZAKŁADANIE OCHRANIACZA BLOCCS® NA RAMIĘ LUB NOGĘ BEZ POMOCY DRUGIEJ OSOBY


Ochraniacza należy używać zgodnie ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i pielęgnacji. Instruktaż wideo oraz odpowiedzi na popularne pytania znajdziesz na stronie www.bloccs.com.



Wymij ochraniacz z opakowania i go rozłóż. Zdejmij pierścionki i inną biżuterię z ostrymi krawędziami.



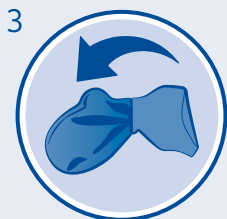Przed użyciem potrzyj uszczelnienie w dłoniach i lekko je rozciągnij.



Zwiń ochraniacz na lewą stronę od otworu do połowy.



Aby sprawdzić, czy ochraniacz szczelnie przylega do skóry, załóż go najpierw na nogę lub rękę bez gipsu ani opatrunku.

Wsuń ramię lub nogę w otwór, tak aby stopa lub dłoń znalazła się na końcu ochraniacza.



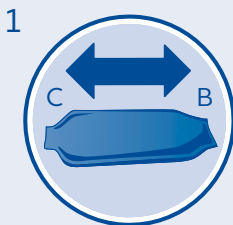
Rozwiń ochraniacz z powrotem wzdłuż ramienia lub nogi, tak aby ciasno przylegał do skóry. Jeśli ochraniacz jest zbyt ciasny lub zbyt luźny, wybierz inny rozmiar.

Usuń powietrze z wnętrza ochraniacza, aby nie unosił się na wodzie.

BLOCCS®

ZAKŁADANIE OCHRANIACZA BLOCCS® NA ŁOKIEĆ LUB KOLANO BEZ POMOCY DRUGIEJ OSOBY

Ochraniacza należy używać zgodnie ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i pielęgnacji. Instruktaż wideo oraz odpowiedzi na popularne pytania znajdziesz na stronie www.bloccs.com.




Wymij ochraniacz z opakowania i go rozłóż. Zdejmij pierścionki i inną biżuterię z ostrymi krawędziami.


Ochraniacz nie jest symetryczny: jest szerszy od strony, która ma przylegać do bicepsa lub uda (B), oraz węższy od strony, która ma przylegać do nadgarstka lub dolnej części łydki (C).



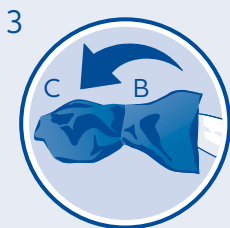Przed użyciem potrzyj uszczelnienie w dłoniach i lekko je rozciągnij.



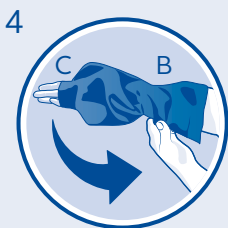
Aby założyć ochraniacz, zwiń go do połowy od strony B na lewą stronę, tak aby znajdował się tuż nad otworem C.



Aby sprawdzić, czy ochraniacz szczelnie przylega do skóry, załóż go najpierw na nogę lub rękę bez gipsu ani opatrunku.

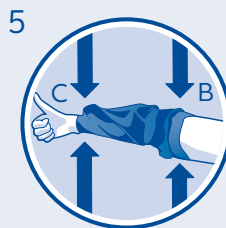Powoli wsuń dłoń lub stopę przez oba otwory B i C.







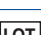



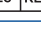
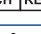











Następnie ostrożnie odwiń ochraniacz od strony B, aż będzie on ciasno przylegał do ramienia lub uda.



Ochraniacz powinien zakrywać cały gips lub opatrunek. Wokół ramienia lub nogi po obu stronach powinien on ciasno, gładko i szczelnie przylegać do skóry. Jeśli ochraniacz przylega zbyt ciasno lub zbyt luźno, wypróbuj inny rozmiar.

Usuń powietrze z wnętrza ochraniacza, aby nie unosił się na wodzie.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznaczenie zgodności CE
	Oceniono zgodność w Wielkiej Brytanii
	Wyrób medyczny
	Unikalny identyfikator wyrobu
	Liczba wyrobów
	Kod partii
	Data produkcji
	Dystrybutor
	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
	Autoryzowany przedstawiciel Szwajcarii
	Importer
	OSTRZEŻENIE
	Zawiera lateks naturalny
	Śliska powierzchnia
	Ryzyko uduszenia
	Przechowywać w zacienionym miejscu
	Przechowywać w temperaturze 5–26°C (41–78°F)
	Pojedynczy pacjent – wielokrotne użycie
	Produkt nie jest sterylny
	Zapoznać się z instrukcją obsługi
	Opakowanie przeznaczone do recyklingu
	Trzymać z dala od źródeł ognia