

PROTECȚIE IMPERMEABILĂ

pentru bandaje gipsate și pansamente



GHID DE ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

RO Protecția impermeabilă Bloccs[®] este special concepută pentru a proteja un bandaj gipsat, un pansament sau un bandaj, permițând persoanei care o poartă să facă baie sau duș în mod obișnuit. Această protecție integral impermeabilă și complet submersibilă se poate folosi la plajă, la piscină sau în piscine pentru copii.

⚠️ AVERTISMENT: Latexul din cauciuc natural poate cauza o reacție alergică. Dacă vă aflați sub îngrijire medicală, vă rugăm să obțineți aprobarea furnizorului de servicii medicale înainte de a folosi protecția.
NU FOLOSIȚI DACĂ SUNTEȚI ALERGIC(Ă) LA LATEX.



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Fabricat în Regatul Unit

Toate produsele sunt fabricate în conformitate cu standardul curent aprobat ISO 9001 privind Sistemul de Management al Calității.

©Bloccs[®] 2023



Bloccs[®]

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Telefon: +44 (0)1454 318197
E-mail: info@bloccs.com

www.bloccs.com



Reproducerea, realizarea unor copii ale acestui Manual, a unor lucrări derivate din acesta, distribuirea și afișarea publică a Manualului sunt permise doar cu acordul prealabil scris al Bloccs[®].

ÎNTREȚINEREA ȘI UTILIZAREA PROTECȚIEI BLOCCS®

Vă mulțumim că ați ales Bloccs®. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos înainte de a utiliza protecția dumneavoastră Bloccs® sau de a supraveghea un copil care o poartă. În acest fel se asigură folosirea în siguranță a protecției și eficiența marginii etanșe.

Decizia de a purta protecția Bloccs® când faceți baie, duș sau de a o folosi în orice altă activitate acvatică o veți lua pe propria răspundere. Se recomandă să cereți sfatul medicului pentru a vă asigura că activitatea nu va afecta leziunea.

Cum trebuie să poziționați protecția Bloccs®

Întrucât protecția Bloccs® este fabricată din latex pe bază de cauciuc natural, trebuie să îndepărtați orice bijuterii ascuțite și să aveți grijă să nu perforați produsul cu unghiile. Acoperiți marginile aspre cu bandă sau un bandaj elastic.

Înainte de utilizare, frecați între mâini și întindeți ușor marginea etanșă. Pentru a verifica modul în care se potrivește marginea etanșă, probați protecția pe mâna sau piciorul fără bandaj gipsat. Dacă marginea etanșă este prea strânsă sau prea lejeră când o probați, alegeți o protecție de altă mărime.

Marginea etanșă netedă, mulată pe piele și impermeabilă se va întinde ușor peste un bandaj.

Respectați ghidurile noastre cu cinci pași ușori incluse în această broșură, care vă ajută să vă puneți protecțiile Bloccs® pentru braț/picior și cot/genunchi.

Utilizarea protecției Bloccs®

Protecția Bloccs® are rolul de a menține un bandaj uscat în timp ce vă expuneți la sau vă scufundați în apă. Protecțiile Bloccs® folosesc același tip de etanșare precum cea a costumelor de scufundări.

Înainte de a intra în apă, scoateți tot aerul din protecția Bloccs® masând protecția în sus, către

marginea etanșă, pentru a elimina aerul din interior. Acest lucru este posibil și prin coborârea treptată a membrului în apă pentru ca presiunea apei să forțeze aerul către partea superioară a protecției.

Îndepărtați ușor marginea etanșă de piele pentru a elimina aerul înainte de scufundare, asigurându-vă că nu pătrunde apă în protecție.

Protecția se va pune fix înainte de a intra în apă și se va îndepărta imediat după ce ieșiți afară.

Decizia de a intra în apă o veți lua pe propria răspundere. Nu se recomandă săriturile sau scufundările în piscină. Protecțiile nu au fost concepute pentru scufundări, snorkeling sau orice alte sporturi acvatice.

Recomandăm verificarea periodică a protecției Bloccs® în timpul utilizării, pentru a vă asigura că aceasta este în continuare etanșă și confortabilă.

Protecția poate fi purtată până la 30 de minute - cu condiția să vă simțiți confortabil, să nu se simtă prea strânsă și să o verificați periodic.

Purtarea protecției mai mult de 30 de minute poate duce la captarea aerului ce poate cauza astfel transpirație și disconfort.

COPIII AFLAȚI ÎN PISCINĂ SAU ÎN MARE TREBUIE SĂ FIE ÎN PERMANENȚĂ SUPRAVEGHEAȚI.

Cum trebuie să vă îndepărtați protecția

Pentru a îndepărta protecția Bloccs®, o veți împinge peste pansamentul sau ghipsul de pe braț sau picior. Manevrați cu grijă pentru a vă asigura că marginile etanșe nu sunt deteriorate de unghii sau bijuterii.

Întreținerea protecției Bloccs®

Protecția Bloccs® este supusă uzurii, însă va rezista aproximativ 4 săptămâni în condiții de utilizare normală.

Protecția se va verifica înainte de fiecare utilizare pentru a se asigura că nu prezintă semne de deteriorare sau uzură.

Dacă protecția suferă deteriorări sau avarii de orice fel, se recomandă achiziționarea alteia noi.

Protecțiile se vor păstra la temperaturi sub 26 °C (78.8F) și se vor depozita departe de radiatoare. În condiții de frig extrem, protecția poate deveni rigidă: starea nu este una permanentă, putând fi corectată prin încălzire.

Se va evita depozitarea în spații umede. Evitați expunerea îndelungată a protecției la lumină, în

special lumina directă a soarelui și lumină artificială cu conținut UV ridicat.

Protecția Bloccs® se poate spăla în apă caldă, după care se va usca cu grijă la interior și la exterior. Pudrarea ușoară cu talc la interior va facilita aplicarea protecției Bloccs®. Nu uscați protecția în uscător sau pe un calorifer.

Evitați contactul cu cupru, aliaje care conțin cupru, solvenți, uleiuri și grăsimi, acestea putând deteriora protecția Bloccs®.

Păstrați produsul departe de flăcări deschise, acest lucru putând duce la vătămări corporale sau chiar deces.

Dacă aveți întrebări privind protecția Bloccs®, accesați www.bloccs.com sau trimiteți un email la adresa info@bloccs.com

O copie a acestui manual, tabelul nostru cu dimensiuni și garanția Bloccs® sunt disponibile pe site-ul nostru web www.bloccs.com

Bloccs® își rezervă dreptul de a modifica manualul după cum consideră adecvat. În calitate de client, aveți responsabilitatea de a verifica versiunea online a manualului pentru eventuale modificări.

AVERTISMENT: Produsul Bloccs® poate deveni alunecos când este ud. Folosiți un covoraș de baie antiderapant în duș sau în cadă și pregătiți unul similar sau un prosop pentru când ieșiți afară. Vă recomandăm să nu vă plimbați pe marginea piscinei când purtați o protecție Bloccs® și să pășiți cu grijă pe treptele piscinei deoarece pot fi alunecoase. Țineți-vă bine de balustradă.

AVERTISMENT: Protecțiile Bloccs® nu sunt jucării. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați produsul și ambalajul său la îndemâna copiilor și a bebelușilor.

AVERTISMENT: Latexul din cauciuc natural poate cauza o reacție alergică. Dacă vă aflați sub îngrijire medicală, vă rugăm să obțineți aprobarea furnizorului de servicii medicale înainte de a folosi protecția. NU FOLOSIȚI DACĂ SUNTEȚI ALERGIC(Ă) LA LATEX.

AVERTISMENT: Acordați o atenție sporită când scufundați bandaje gipsate pentru picioare în apă întrucât acestea pot fi grele și pot restricționa mișcarea. Nu se recomandă să înotați dacă aveți piciorul în ghips.

AVERTISMENT: Manevrați cu atenție dacă se aplică PICC (cateter central cu inserție periferică) sau perfuzii. *Nu pot fi precizate avertismente pentru fiecare pericol posibil legat de utilizarea acestui produs. De aceea, se recomandă clienților să folosească bunul simț și să judece înțelept când folosesc o protecție Bloccs®.*


Orice incident grav produs în legătură cu dispozitivul se va raporta producătorului și autorității competente din țara în care acesta a fost achiziționat.

BLOCCS®

CUM SE POZIȚIONEAZĂ O PROTECȚIE BLOCCS® PENTRU BRAȚ SAU PICIOR FĂRĂ AJUTOR

Protecția se va utiliza în conformitate cu toate instrucțiunile privind întreținerea și utilizarea. Vă rugăm să accesați www.bloccs.com pentru a viziona materialul nostru video și a consulta secțiunea de întrebări adresate frecvent.

1

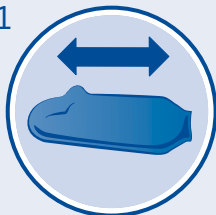

Scoateți protecția din ambalaj și desfăceți-o. Scoateți-vă inelele cu muchii ascuțite etc.

2



Înainte de utilizare, frecați între mâini și întindeți ușor marginea etanșă.

3



De la capătul deschis, împăturiți înapoi protecția până la jumătate.

4



Pentru a verifica modul în care se potrivește marginea etanșă, probați mai întâi protecția pe mâna sau piciorul fără ghips sau pansament.

Puneți brațul sau piciorul dorit în capătul deschis, astfel încât acesta să se afle la capătul protecției.

5




Rulați protecția în sus pe braț sau pe picior până când marginea etanșă se lipește cu totul pe piele. Dacă marginea etanșă se simte prea strânsă sau prea lejeră când o probați, alegeți o protecție de altă dimensiune.

Scoateți aerul rămas pentru a evita plutirea produsului.

BLOCCS®

CUM SE POZIȚIONAEAZĂ O PROTECȚIE BLOCCS® PENTRU COT SAU GENUNCHI FĂRĂ AJUTOR


Protecția se va utiliza în conformitate cu toate instrucțiunile privind întreținerea și utilizarea. Vă rugăm să accesați www.bloccs.com pentru a viziona materialul nostru video și a consulta secțiunea de întrebări adresate frecvent.

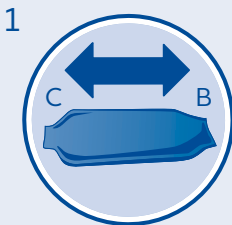

Scoateți protecția din ambalaj și desfăceți-o. Scoateți-vă inelele cu muchii ascuțite etc. Protecția are două capete; un capăt mai larg care se etanșează pe biceps sau coapsă (B) și un capăt mai îngust care se etanșează pe încheietură sau gambă (C).



Înainte de utilizare, frecați între mâini și întindeți ușor marginile etanșe.

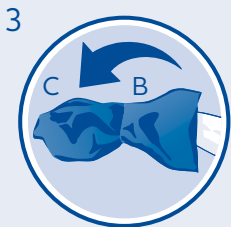


Pentru a poziționa protecția cu ușurință, luați capătul B și întoarceți pe dos jumătate de protecție pentru a-l aduce deasupra capătului C.







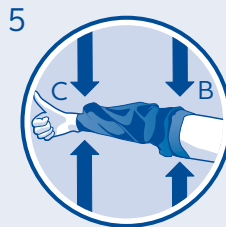









Pentru a verifica modul în care se potrivește marginea etanșe, probați mai întâi protecția pe mâna sau piciorul fără ghips sau pansament.

Împingeți ușor mâna sau piciorul prin ambele capete, întâi B și apoi C. După aceea rulați cu grijă capătul B până când se etanșează perfect în jurul brațului sau al piciorului.



Se va acoperi întreaga suprafață a pansamentului și se va crea o etanșare netedă, mulată pe piele și impermeabilă în jurul brațului sau al piciorului, la ambele capete ale protecției. Dacă marginea etanșe se simte prea strânsă sau prea lejeră când o probați, alegeți o protecție de altă dimensiune.

Scoateți aerul rămas pentru a evita plutirea produsului.

	Producător
	Marcaj de conformitate CE
	Marea Britanie Conformitate evaluată
	Dispozitiv medical
	Cod unic de identificare a dispozitivului
	Cantitatea de dispozitive
	Codul lotului
	Data fabricației
	Distribuitoare
	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
	Reprezentant autorizat elvețian
	Importator
	ATENȚIE
	Are în componență latex din cauciuc natural
	Suprafață alunecoasă
	Risc de sufocare
	A se feri de lumina soarelui
	A se depozita la temperaturi între 5 - 26 °C (41-78 °F)
	Utilizare multiplă pentru un singur pacient
	Nesteril
	A se consulta instrucțiunile de utilizare
	Ambalaj reciclabil
	A se feri de flăcări deschise