



VODOTESNA ZAŠČITA

za mavec in povoje



NAPOTKI ZA NEGO IN UPORABO

SL Vodotesna zaščita Bloccs® je posebej zasnovana za zaščito mavca, obveze ali povoja, da se uporabnik lahko normalno kopa ali tušira. Popolnoma vodotesno in potopljivo zaščito lahko uporabljate na plaži ali v plavalnem ali veslaškem bazenu.

⚠ OPOZORILO: Naravni lateks lahko povzroči alergijsko reakcijo. Če ste pod zdravniškim nadzorom, pred uporabo zaščite pridobite dovoljenje zdravnika. **NE UPORABLJAJTE, ČE STE ALERGIČNI NA LATEKS.**



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Proizvedeno v Združenem kraljestvu

Vsi izdelki so izdelani v skladu z veljavnim in odobrenim standardom sistema vodenja kakovosti ISO 9001.

©Bloccs® 2023



Razmnoževanje, kopiranje, izdelava izpeljank, distribucija in javni prikaz priročnika so dovoljeni le s predhodnim pisnim soglasjem družbe Bloccs®.

Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Telefon: +44 (0) 1454 318197
E-pošta: info@bloccs.com

www.bloccs.com



NEGA IN UPORABA ZAŠČITE BLOCCS®

Hvala vam, ker ste se odločili za nakup izdelka Bloccs®. Pred uporabo izdelka Bloccs® skrbno preberite naslednja navodila oziroma nadzirajte svojega otroka glede upoštevanja navodil za uporabo. S tem boste zagotovili varno uporabo zaščite in učinkovito vodotesnost izdelka.

Za uporabo zaščite Bloccs® med kopanjem, tuširanjem ali pri kateri koli drugi dejavnosti v vodi se odločate na lastno odgovornost. Priporočamo, da se posvetujete z zdravnikom in se prepričate, da aktivnost ne bo vplivala na poškodbo.

Nameščanje zaščite Bloccs®

Ker je zaščita izdelana iz naravnega lateksa, morate odstraniti vse ostre kose nakita in paziti, da zaščite ne prebodete z nohti. Grobe robove prekrijte s trakom ali raztegljivim povojem.

Pred uporabo podrgnite tesnilo med dlanmi in ga rahlo raztegnite. Če želite preveriti prileganje tesnila, zaščito najprej preizkusite na roki ali nogi, na kateri nimate mavca. Če čutite, da je rob tesnila med nameščanjem zaščite pretesen ali preohlapien, izberite drugo velikost zaščite.

Gladko, tesno prilegajoče in vodotesno tesnilo se mora zlahka raztegniti čez povoj.

Sledite preprostim navodilom v petih korakih, ki so priložena v tej brošuri, za lažjo namestitev zaščite Bloccs® za roko/nogo ter komolec/koleno.

Uporaba zaščite Bloccs®

Zaščita Bloccs® vam omogoča, da ostane povoj suh, če je izpostavljen vodi ali potopljen vanjo. Zaščite Bloccs® uporabljajo enako vrsto tesnjenja, kot jo najdemo pri nepremočljivih oblekah.

Preden greste v vodo, iz zaščite Bloccs® odstranite ves zrak tako, da drgnete pokrivalo navzgor proti tesnilu,

da sprostite ves ujeti zrak. To lahko storite tudi tako, da okončino postopoma spuščate v vodo, tako da pritisk vode potisne zrak proti vrhu zaščite.

Pred potopitvijo nežno povlecite tesnilo stran od kože, da izpustite zrak, in pri tem pazite, da v zaščito ne pride voda.

Zaščito si nadenite tik pred vstopom v vodo in jo odstranite takoj, ko pridete iz vode.

Za vstop v vodo se odločate na lastno odgovornost. V bazen ne smete skakati ali se potapljati. Zaščite niso zasnovane za potapljanje, snorklanje ali druge vodne športe.

Priporočamo, da zaščito Bloccs® med uporabo redno preverjate in se prepričate, da je tesnilo ostalo vodotesno in je še vedno udobno.

Zaščito lahko uporabljate do 30 minut, če je še vedno udobna za nošenje, ni pretesna in jo redno preverjate.

Če zaščito uporabljate dlje kot 30 minut, lahko ujeti zrak povzroči znojenje in nelagodje.

OTROCI MORAJO BITI V BAZENU ALI MORJU VES ČAS POD NADZOROM.

Odstranjevanje zaščite

Ko želite odstraniti zaščito Bloccs®, jo previdno potegnite čez povoj ali mavec na roki ali nogi. Paziti morate, da tesnila ne poškodujete z nohti ali nakitom.

Nega zaščite Bloccs®

Zaščita Bloccs® je podvržena obrabi, vendar naj bi zdržala približno 4 tedne običajne uporabe.

Zaščito je treba pred vsako uporabo preveriti za morebitne znake poškodb ali obrabe.

Če se je zaščita obrabila ali kakor koli poškodovala, morate kupiti drugo zaščito.

Zaščite je treba hraniti pri temperaturi do 26 °C (78,8 F), stran od grelnikov. V izjemnem mrazu lahko zaščita postane toga: to ni trajno, s segrevanjem bo spet postala mehkejša.

Izogibati se je treba vlažnim pogojem skladiščenja. Zaščito za daljši čas ne izpostavljajte svetlobi, zlasti neposredni sončni svetlobi in umetni svetlobi z visoko vsebnostjo UV-žarkov.

Zaščito Bloccs® lahko operete v topli vodi in jo nato skrbno posušite na zunanji in notranji strani. Če notranjo stran rahlo posujete s smukcem, boste zaščito Bloccs® lažje namestili. Zaščite ne sušite v sušilnem stroju ali na radiatorju.

Izogibajte se stiku z bakrom, zlitinami, ki vsebujejo baker, topili, olji in maščobami, saj lahko poškodujejo zaščito Bloccs®.

Ne približujte se odprtemu ognju, saj lahko pride do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z zaščito Bloccs®, obiščite www.bloccs.com ali pišite na info@bloccs.com.

Izvod tega priročnika, naša tabela velikosti in garancija Bloccs® so na voljo na naši spletni strani www.bloccs.com

Družba Bloccs® si pridržuje pravico, da priročnik spremeni po lastni presoji. Potrošnik je sam dolžan preveriti morebitne spremembe v spletni različici priročnika.

OPOZORILO: Ko je zaščita Bloccs® mokra, lahko postane spolzka. Pri prhanju ali kopanju uporabljajte neдрsečo kopalno podlogo in si pripravite dodatno neдрsečo podlogo ali brisačo, ko izstopate iz kadi. Če uporabljate zaščito Bloccs®, ne smete hoditi ob robu bazena in bodite še posebej previdni pri uporabi stopnic bazena, saj so lahko spolzke. Trdno se oprimate ograje.

OPOZORILO: Zaščite Bloccs® niso igrača. Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, izdelek in embalažo hranite zunaj dosega otrok in dojenčkov.

OPOZORILO: Naravni lateks lahko povzroči alergijsko reakcijo. Če ste pod zdravniškim nadzorom, pred uporabo zaščite pridobite dovoljenje zdravnika. NE UPORABLJAJTE, ČE STE ALERGIČNI NA LATEKS.

OPOZORILO: Pri potapljanju noge v mavcu v vodo morate biti še posebej previdni, saj je lahko mavec na nogi težek in omejuje gibanje. Ne poskušajte plavati z mavcem na nogi.

OPOZORILO: Pazite na morebitni periferno vstavljen centralni kateter ali intravenozno cevko.


Opozoril za vse možne nevarnosti, povezane z uporabo tega izdelka, ni mogoče zagotoviti. Potrošnikom zato svetujemo, da pri uporabi zaščite Bloccs® ravnajo razsodno in preudarno.

O vseh resnih incidentih v zvezi s pripomočkom je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v državi, v kateri je bil pripomoček kupljen.

BLOCCS®

NAMEŠČANJE ZAŠČITE BLOCCS® NA ROKO ALI NOGO BREZ POMOČI


Zaščito je treba uporabljati v skladu z vsemi navodili za nego in uporabo. Obiščite spletno stran www.bloccs.com in si oglejte naš predstavitveni videoposnetek ter pogosta vprašanja in odgovore.

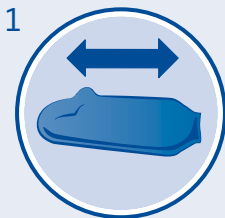

Vzemite zaščito iz embalaže in jo razgrnite. Snemite ostre prstane ipd.



Pred uporabo podrgnite tesnilo med dlanmi in ga rahlo raztegnite.

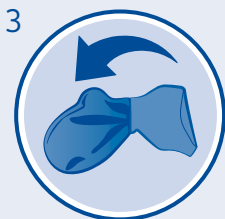

Na odprtem koncu zaščito prepognite do polovice.



Če želite preveriti prilaganje tesnila, najprej preizkusite zaščito na roki ali nogi, na kateri nimate mavca ali povoja.

Roko ali nogo vstavite v odprt konec, tako da se stopalo ali dlan nahaja na koncu zaščite.



Raztegnite zaščito čez roko ali nogo tako, da se tesnilo tesno prilaga koži. Če se vam zdi, da je tesnilo pretesno ali preohlapno, izberite drugo velikost zaščite.

Iztisnite zrak, da zaščita ne bo plavala na vodi.

BLOCCS[®]

NAMEŠČANJE ZAŠČITE BLOCCS[®] ZA KOMOLEC ALI KOLENO BREZ POMOČI


Zaščito je treba uporabljati v skladu z vsemi navodili za nego in uporabo.

Obiščite spletno stran

www.bloccs.com in si

oglejte naš predstavitveni videoposnetek ter pogosta vprašanja in odgovore.

1

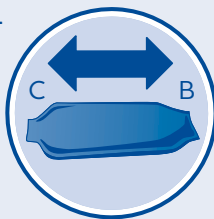

Vzemite zaščito iz embalaže in jo razgrnite. Snemite ostre prstane ipd.


Zaščita ima dva konca; širši konec, ki tesni okoli bicepsa ali stegna (B), in ožji konec, ki tesni okoli zapestja ali spodnjega dela meč (C).

2



Pred uporabo podrgnite tesnila med dlanimi in jih rahlo raztegnite.

3

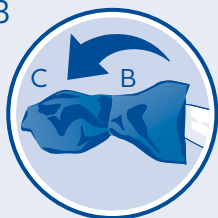

Za enostavno nameščanje zaščite primite konec B in obrnite polovico zaščite navzven tako, da sega tik nad konec C.


4



Če želite preveriti prileganje tesnila, najprej preizkusite zaščito na roki ali nogi, na kateri nimate mavca ali povoja.

Počasi potisnite roko ali nogo najprej skozi konec B in nato skozi konec C. Nato previdno odvijte konec B, da se gladko prilaga roki ali stegnu.

5

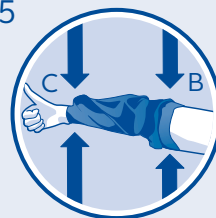

Pokrita mora biti celotna površina povoja, okoli roke ali noge na obeh koncih zaščite pa mora na koži nastati gladka, tesno priliegajoča se vodotesna zapora. Če se vam zdi, da je tesnilo pretesno ali preohlapno, izberite drugo velikost zaščite.

Iztisnite zrak, da zaščita ne bo plavalala na vodi.

BLOCCS®

GLOSAR SIMBOLOV

	Proizvajalec
	Oznaka skladnosti CE
	Ocenjena skladnost za Združeno kraljestvo
	Medicinski pripomoček
	Edinstveni identifikator pripomočka
	Količina pripomočkov
	Koda serije
	Datum proizvodnje
	Distributer
	Pooblaščen zastopnik v Evropski uniji
	Švicarski pooblaščen zastopnik
	Uvoznik
	POZOR
	Vsebuje naravni lateks
	Spolzka površina
	Nevarnost zadržitve
	Hranite stran od sončne svetlobe
	Shranjujte pri temperaturi od 5 do 26 °C (41 do 78 °F)
	En bolnik – večkratna uporaba
	Nesterilno
	Glejte navodila za uporabo
	Embalaza, ki jo je mogoče reciklirati
	Brez odprtega ognja