

# INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO

## **EASY CLEAN**





MICROWAVE BAG

BOLSA PARA MICROONDAS





Ardo medical AG  
Gewerbstrasse 19  
6314 Unterägeri  
Switzerland  
T +41(0)41 754 70 70  
F +41(0)41 754 70 71  
info@ardo-usa.com  
www.ardo-usa.com

Distributed in USA by:  
Comit Developers  
116 Toledo Drive  
Lafayette, LA 70506, USA  
T 844-411-ARDO (2736)  
www.ardo-usa.com  
customer-service@ardo-usa.com

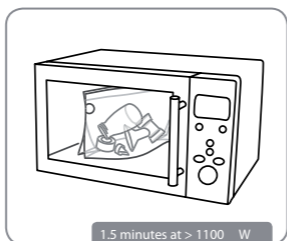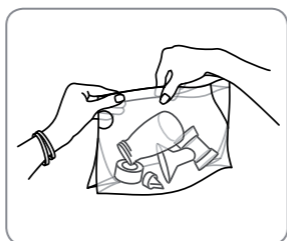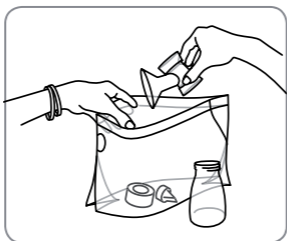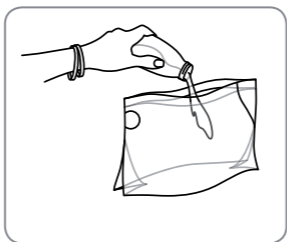

1.5 minutes at > 1100 W  
3 minutes at 800 - 1100 W  
5 minutes at 600 - 750 W

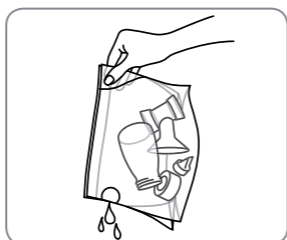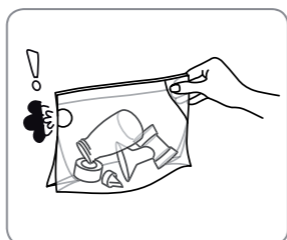

## INSTRUCTIONS FOR USE

### EASY CLEAN MICROWAVE BAG

#### Instructions for use

1. Clean all parts after use with warm soapy water and rinse them with clean water.
2. Add 60 ml (2 ounces) of water to the bag.
3. Place the parts to be steam-cleaned in the bag. Seal the bag tightly.
4. Place the bag in the centre of the microwave.
5. Set the microwave to the correct power and time and start it:
  - 1.5 minutes at > 1100 W
  - 3 minutes at 800 – 1100 W
  - 5 minutes at 600 – 750 W
6. Open the microwave when it has finished and let the bag cool down for at least 2 minutes.  
**CAUTION: Bag will be hot. Do not touch the bag.**
7. Pick up the bag using the safe grip and remove it from the microwave.
8. Hold the bag away from you and carefully pour out the remaining water through the steam vent.  
**CAUTION: Avoid contact with hot water.**
9. Open the bag and remove the steam-cleaned parts.  
**CAUTION: Let components cool before touching them.**
10. The bag can be used up to 20 times. Tick a box after each use so you can check how many times are left.

#### Warnings

- Always add at least 60 ml (2 ounces) of water to the bag to avoid damaging the parts.
- Do not overfill the bag.
- Do not place the bag into the microwave on a metal rack.
- Do not exceed the stated times for steam cleaning to prevent the parts from damage.
- If the microwave does not have a turntable, rotate the bag halfway through the cleaning process.
- **CAUTION: When removing the bag from the microwave and opening it, hot steam or water may escape.**
- Only use the bag with items deemed suitable for microwaving.
- Do not use the bag in a conventional oven and do not grill it.
- **WARNING: To avoid danger of suffocation, keep the plastic bag away from babies and children.**
- To prevent limescale, you can add a drop of citric acid.
- Certain parts may discolour when used. This has no effect on their function.
- Follow the instructions for the microwave.

Instructions for use in other languages are available at [www.ardomedical.com](http://www.ardomedical.com)

## INSTRUCCIONES DE USO

**EASY CLEAN** BOLSA PARA MICROONDAS**Uso**

1. Limpie inmediatamente todos los objetos tras su uso con agua caliente con jabón y aclare con agua limpia.
2. Vierta 60 ml (2 onzas) de agua en la bolsa.
3. Meta en la bolsa los objetos a limpiar por vapor. Cierre la bolsa correctamente con el cierre a presión.
4. Coloque la bolsa en el centro del microondas.
5. Configure la potencia y duración adecuadas e inicie el proceso:
  - 1,5 minutos a más de 1100 W
  - 3 minutos a 800-1100 W
  - 5 minutos a 600-750 W
6. Abra el microondas al terminar el proceso y deje enfriar la bolsa al menos 2 minutos.  
**PRECAUCIÓN: La bolsa estará caliente. No toque la bolsa.**
7. Tome la bolsa para microondas por la sujeción segura y extraígalas del microondas.
8. Mantenga la bolsa alejada y vierta con cuidado el agua sobrante a través de la salida de vapor.  
**PRECAUCIÓN: Evite el contacto con agua caliente.**
9. Abra la bolsa y extraiga los objetos limpiados por vapor.  
**PRECAUCIÓN: para poder tocar los componentes, deje que estos se enfríen después de haber hervido.**
10. La bolsa se puede usar hasta 20 veces. Para control personal, marque una casilla tras cada uso.

**Aviso de seguridad**

- Llene siempre la bolsa con al menos 60 ml (2 onzas) de agua potable; en caso contrario, los objetos pueden verse dañados.
- No llenar demasiado la bolsa.
- No colocar nunca la bolsa sobre la rejilla del microondas.
- No superar la duración indicada de limpieza por vapor; en caso contrario, los objetos podrían deformarse.
- Si el microondas no tiene plato giratorio, dé la vuelta a la bolsa a la mitad del tiempo.
- **PRECAUCIÓN: Al sacar y abrir la bolsa, puede salir vapor o agua caliente.**
- Usar la bolsa solo con objetos adecuados para microondas.
- No usar la bolsa en un horno convencional o con la función grill.
- **ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de asfixia, mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños.**
- Para evitar cúmulos de cal, se puede añadir una gota de ácido cítrico.
- Algunos objetos pueden decolorarse con el uso. Esto no influye en la funcionalidad.
- Respetar las instrucciones de uso del microondas.

Instrucciones de uso en otros idiomas están disponibles en [www.ardomedical.com](http://www.ardomedical.com).