



ENGLISH INSTRUCTIONS

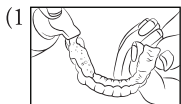

Apply one-half to one pump of EverSmile® WhiteFoam to trays.

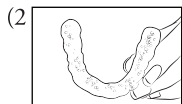

Spread foam evenly to cover all areas.



Place trays in mouth and spit out excess foam. Wear as directed.

Description: EverSmile® WhiteFoam is a patented cleaning formulation designed to clean and freshen orthodontic aligners and clear retainers (trays). EverSmile® WhiteFoam utilizes EverClean™ (anionic technology) powered by hydrogen peroxide and kills 99.999% of bacteria.

Directions:

On-The-Go Tooth Whitening and Cleaning: Remove trays. Dispense 1/2 to 1 full pump of foam inside each tray, spreading evenly with a finger. Place trays back into mouth and spit out excess foam. Wipe off fingers. Use up to 4 times daily to whiten, clean, and freshen trays and teeth.

Outside of Mouth Cleaning: Remove trays and place them inside their storage case. Cover trays with foam and let them sit for up to 5 minutes. Rinsing and brushing trays before replacing them in mouth is optional.

CAUTION & First Aid: If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Adult supervision is required for use by children under 12. Avoid contact with eyes, skin, or hair; flush with water if contact is made. Avoid swallowing; do not induce vomiting. Do not apply to gums or under tongue. Do not use if nursing or pregnant. Keep away from sunlight and heat as contents may pressurize. Use only with orthodontic aligners and clear vacuum formed plastic retainers. Prolonged use may require dentist supervision. US Poison Control Center: (800) 222-1222. Australia Poisons Info Centre: 13 11 26. New Zealand Poisons Info Center: 0800 764 766. Canada Emergencies: 911. EU Poison Centres: echa.europa.eu

Ingredients: water, hydrogen peroxide, glycerine, PVP, PEG, sodium lauryl sulfate, sucralose, sodium citrate, sodium benzoate, etidronic acid, mentha arvensis (mint) oil.

How Supplied: 50ml, 25ml, 15ml. Mint flavor.

Compatibility: (visit eversmilewhite.com/compatibility for full list)

- Invisalign® Aligner Trays
- ClearCorrect® Aligner Trays
- Bleaching Trays
- Essix® Retainers
- Vivera® Retainers


EverSmile® WhiteFoam™ is not affiliated in any way with Align Technology, Inc., Clear Correct Holdings, Inc., or Dentsply Sirona, Inc.

Manufactured By:


EverSmile, Inc.
10547 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064
+1 (855) 595-2999
info@eversmilewhite.com

www.eversmilewhite.com


DEUTSCH ANWEISUNGEN

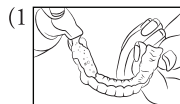

Tragen Sie 1/2 bis 1 volle Sprühladung EverSmile® WhiteFoam™ auf jede Zahnschiene auf.

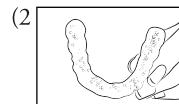

Verteilen Sie die Masse gleichmäßig und

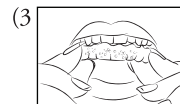

Stecken Sie die Zahnschiene zurück in Ihren Mund und spucken Sie den überschüssigen Schaum aus. Tragen Sie die Zahnschiene laut Anweisungen.

Beschreibung: EverSmile® WhiteFoam ist eine patentierte Reinigungsrezeptur, die zur Reinigung und Auffrischung von kieferorthopädischen Zahnrichtungsbögen und unsichtbaren Zahnsparungen (Zahnschienen) entwickelt wurde. EverSmile® WhiteFoam benutzt EverClean™ (anionische Technologie), die mit Wasserstoffperoxid wirkt und 99,999% der Bakterien abtötet.

Gebrauchsanleitung:

On-the-Go Zahnaufhellung und Reinigung: Entfernen Sie Ihre Zahnschiene. Tragen Sie 1/2 bis 1 volle Sprühladung Schaum auf jede Zahnschiene auf und verteilen Sie die Masse gleichmäßig mit Ihrem Finger. Stecken Sie die Zahnschiene zurück in Ihren Mund und spucken Sie den überschüssigen Schaum aus. Wischen Sie nun Ihre Finger ab. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis zu 4-mal täglich, um die Zahnschiene und Ihre Zähne aufzufrischen, zu reinigen und zu erfrischen.

Reinigung, die nicht im Mund stattfindet: Entfernen Sie Ihre Zahnschiene und geben Sie sie in den Aufbewahrungsbehälter. Bedecken Sie die Zahnschiene mit Schaum und lassen Sie sie für bis zu 5 Minuten einwirken. Sie können die Zahnschiene spülen und bürsten, bevor Sie sie erneut in den **WARNHINWEISE und Erste Hilfe:** Wenn Reizungen (z.B. Rötung, Schwellung, Schmerzen) des Zahnfleisches oder im Mund auftreten, brechen Sie den Gebrauch ab und konsultieren Sie einen Zahnarzt. Kinder unter 12 Jahren benötigen die Aufsicht von Erwachsenen. Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Haut oder Haaren; bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Vermeiden Sie es, das Produkt zu schlucken; führen Sie kein Erbrechen herbei. Verwenden Sie das Produkt nicht auf dem Zahnfleisch oder unter der Zunge. Bei Schwangerschaft oder in der Stillzeit nicht verwenden. Vor Sonnenbestrahlung und Hitze schützen, da der Inhalt unter Druck steht. Verwenden Sie das Produkt nur mit kieferorthopädischen Zahnrichtungsbögen und durchsichtigen, vakuumgeformten Plastikzahnsparungen. Bei längerem Gebrauch kann zahnärztliche Überwachung erforderlich sein. Vergiftungszentrale in den USA: (800) 222-1222. Vergiftungszentrale in Australien: 13 11 26. Vergiftungszentrale in Neuseeland: 0800 764 766. Notrufnummer in Kanada: 911. Vergiftungszentren-

Inhaltsstoffe: Wasser, Wasserstoffperoxid, Glycerin, PVP, PEG, Natriumlaurylsulfat, Sucralose, Natriumcitrat, Natriumbenzoat, Etidronsäure, Mentha Arvensis (Minze) Öl.

Lieferumfang: 50ml, 25ml, 15ml. Minzgeschmack.

Kompatibilität: (Besuchen Sie eversmilewhite.com/compatibility für die vollständige Liste)

- Invisalign® Alignern
- ClearCorrect® Alignern
- Bleischalen
- Essix® Zahnsperre
- Vivera® Zahnsperre


EverSmile® WhiteFoam™ ist in keiner Weise mit Align Technology, Inc., Clear Correct Holdings, Inc. oder Dentsply Sirona, Inc. verbunden.

www.eversmilewhite.com


Hersteller:

EverSmile, Inc.
10547 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064
+1 (855) 595-2999

INSTRUCTIONS FRANÇAIS

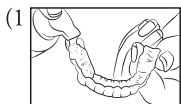

Appliquer entre une demie et une pompe complète d'EverSmile® WhiteFoam sur les coquilles.

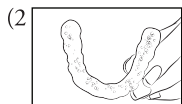

Étaler la mousse de manière homogène pour couvrir toutes les zones.



Placer les coquilles dans la bouche et cracher l'excès de mousse. Porter les dispositifs selon les instructions.

Description: EverSmile® WhiteFoam est une formule nettoyante brevetée conçue pour nettoyer et rafraîchir les appareils de rétention amovibles transparents (coquilles) ou autres. EverSmile® WhiteFoam utilise EverClean™ (technologie anionique) fonctionnant à l'aide du peroxyde d'hydrogène et élimine 99,999 % des bactéries.

Instructions :

Nettoyage et blanchiment des dents nomades : Enlever les coquilles. Verser de 1/2 à 1 pression complète de mousse à l'intérieur de chaque coquille, puis étaler de manière uniforme avec le doigt. Remplacer les coquilles dans la bouche et cracher l'excès de mousse. Sécher vos doigts. Utiliser jusqu'à 4 fois par jour pour blanchir, nettoyer et rafraîchir les coquilles ainsi que les dents.

Sans nettoyage buccal : Retirer les coquilles et les placer à l'intérieur de leur boîte de rangement.

Recouvrir les coquilles avec de la mousse et les laisser reposer jusqu'à 5 minutes. Rincer et brosser les coquilles avant de les replacer dans la bouche est optionnel.

DANGERS et premiers secours : Si de l'irritation (telles des rougeurs, des gonflements ou des douleurs) des gencives ou de la bouche se produisent, arrêter l'utilisation et consulter un dentiste. La surveillance d'un adulte est requise pour une utilisation par des enfants de moins de 12 ans. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les cheveux ; rincer abondamment avec de l'eau en cas de contact. Éviter d'avaler ; ne pas faire vomir. Ne pas appliquer sur les gencives ou sous la langue. Ne pas utiliser en cas d'allaitement ou de grossesse. Garder à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur, ceci pouvant engendrer une pressurisation du contenu. N'utiliser qu'avec des dispositifs de rétention orthodontiques et des coquilles plastiques formées sous vide. Une utilisation prolongée peut requérir la surveillance d'un dentiste. Centre antipoison américain : (800) 222-1222. Centre d'informations australien sur les poisons : 13 11 26. Centre d'informations empoisonnement de Nouvelle-Zélande : 0800 764 766. Urgences Canada : 911. Centres antipoison européens : echa.europa.eu

Ingredients : eau, peroxyde d'hydrogène, glycérine, PVP, PEG, sodium lauryl sulfate, sucralose, citrate de sodium, benzoate de sodium, acide étidronique, mentha arvensis (menthe) huile.

Conditionnement : 50ml, 25ml, 15ml. Saveur menthe.


Compatibilité : (visitez eversmilewhite.com/compatibility pour la liste complète)

- Invisalign® Aligners
- ClearCorrect® Aligners
- Plateaux de blanchiment
- Essix® Appareils Dentaire
- Vivera® Appareils Dentaire


EverSmile® WhiteFoam™ n'est aucunement affilié à Align Technology, Inc., à Clear Correct Holdings, Inc. ou à Dentsply Sirona, Inc.

www.eversmilewhite.com

ISTRUZIONI ITALIANO

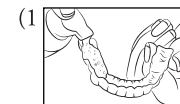

Applicare mezza o una pompa di EverSmile® WhiteFoam all'interno delle placche.

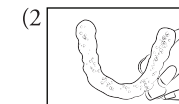

Distribuire uniformemente la schiuma in modo da coprire tutte le aree.



Posizionare le placche in bocca e sputare la schiuma in eccesso. Mettere come indicato.

Description: EverSmile® WhiteFoam è una formulazione detergente brevettata e progettata per pulire e rinfrescare gli allineatori ortodontici e i retainer (placche di contenzione). EverSmile® WhiteFoam utilizza EverClean™ (tecnologia anionica) alimentata da perossido di idrogeno, il quale uccide il 99,999% dei batteri.

Indicazioni:

Sbiancamento e pulizia dei denti: Rimuovere le placche. Spargere con un dito in modo uniforme 1/2 o 1 pompa piena di schiuma all'interno di ogni placca. Posizionare le placche in bocca e sputare la schiuma in eccesso. Togliere le dita. Utilizzare fino a 4 volte al giorno per sbiancare, pulire e rinfrescare le placche e i denti.

Pulizia esterna delle placche: Rimuovere le placche e collocarle all'interno del contenitore di stoccaggio. Coprire le placche con la schiuma e lasciare riposare per un massimo di 5 minuti. Non è necessario sciacquare e pulire le placche prima di metterle in bocca.

AVVERTENZE e Primo Soccorso: In caso di irritazione (come arrossamento, gonfiore o dolore) delle gengive o della bocca, interrompere l'uso e consultare un dentista. È necessaria la supervisione da parte di un adulto per l'utilizzo da parte dei bambini di età inferiore ai 12 anni. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o i capelli; in caso contrario, sciacquare la parte con acqua. Evitare di deglutire; non indurre il vomito. Non applicare sulle gengive o sotto la lingua. Non usare in caso di allattamento o gravidanza. Tenere lontano dalla luce solare e dal calore poiché i contenuti possono pressurizzare. Utilizzare solo con allineatori ortodontici e retainer vuoti in plastica. L'uso prolungato può richiedere una supervisione da parte di un dentista. Centro Controllo Veleni USA: (800) 222-1222. Centro Informazioni Veleni in Australia: 0800 764 766. Centro Informazioni Veleni in Nuova Zelanda: 0800 764 766. Numero per le emergenze in Canada: 911. Centro Veleni Europeo: echa.europa.eu

Ingredients: acqua, perossido di idrogeno, glicerina, PVP, PEG, laurilsolfato di sodio, sucralosio, citrato di sodio, benzoato di sodio, acido etidronico, olio di mentha arvensis (menta).

Come si presenta: 50ml, 25ml, 15ml. Sapore di menta.

Compatibilità: (visita eversmilewhite.com/compatibility per l'elenco completo)

- Invisalign® Aligners
- ClearCorrect® Aligners
- Vassoio sbiancanti
- Essix® Retainers
- Vivera® Retainers


EverSmile® WhiteFoam™ non è affiliato in alcun modo con Align Technology, Inc., Clear Correct Holdings, Inc., o Dentsply Sirona, Inc.

www.eversmilewhite.com


Fabbricante:

EverSmile, Inc.
10547 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064
+1 (855) 595-2999
info@eversmilewhite.com

中文说明

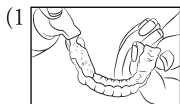

用1/2泵至全泵的EverSmile® WhiteFoam 泡沫去清洗托盘。

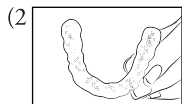

均匀地涂抹泡沫，覆盖所有表面。



把托盘放回口中，吐出多余的泡沫。按指示戴上。

产品说明：EverSmile® WhiteFoam是一种具有专利的清洁配方，专为清洁和清新正畸矫正器以及清洗牙齿固位体（托盘）而设计。EverSmile® WhiteFoam使用以过氧化氢为动力的EverClean™（负离子技术），并且能杀死99.999%的细菌。

用法说明书：

便携式的牙齿美白和清洗工具：拆卸托盘。在每个托盘内分配1/2泵到全泵的泡沫，用手指均匀地涂抹。把托盘放回口中，吐出多余的泡沫。清洗手指。每天最多使用4次，美白，清洁以及清新托盘和牙齿。

口腔外清洁：拆下托盘并放置在存放盒内。用泡沫覆盖托盘并让其至少竖立5分钟。在将它们放入口中之前，可自行选择是否冲洗并洗刷托盘。

注意事项与急救措施：如果牙龈或口腔出现红肿、肿胀、疼痛等症状，请停止使用并咨询牙医。

12岁以下儿童需在成人监督下使用该产品。避免接触眼睛、皮肤或头发；如有接触，请用水冲洗。避免吞咽；禁止催吐。不适用于牙龈或舌下。请勿在哺乳期或怀孕时使用。远离阳光和高温，因为可能会产生压迫。只使用正畸矫正器以及真空成型的塑料固位体。长期使用可能需要牙医的监督和指导。美国中毒控制中心：(800) 222-1222。澳大利亚中毒信息中心：13 11 26。新西兰中毒信息中心：0800 764 766。加拿大急救：911。欧盟中毒中心：echa.europa.eu。

主要成分：水、过氧化氢、甘油、聚乙二醇、月桂醇硫酸酯钠盐、蔗糖素、柠檬酸钠、羟乙磷酸、苯甲酸钠、薄荷油（薄荷）油。

供应规格：50ml, 25ml, 15ml. 薄荷香味

兼容性：(请访问eversmilewhite.com/compatibility获取完整列表)


- Invisalign® 矫正
- ClearCorrect® 矫正
- 漂白托盘
- Essix® 固定器
- Vivera® 固定器

EverSmile® WhiteFoam™ 与 Align Technology, Inc., Clear Correct Holdings, Inc., 或 Dentsply Sirona, Inc. 不存在任何关联。


www.eversmilewhite.com

生产厂家：
EverSmile, Inc.
10547 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064
+1 (855) 595-2999
info@eversmilewhite.com

한국어 지침

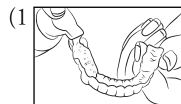

에버스마일® 화이트폼 1/2 펌프를 틀에 넣으세요.

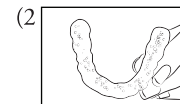

거품을 모든 곳에 도포하세요.



틀을 다시 입안에 끼우고 빠져나오는 거품을 내뱉습니다. 지시에 따라 착용하세요.

세부 사항: 에버스마일® 화이트폼™은 치열교정기와 치아 고정기(틀)를 깨끗이 하기 위해 고안된 특허 클리닝 제품입니다. 에버스마일® 화이트폼™은 과산화수소 99.999% 박테리아를 죽여버리는 에버클린™(음이온 공법)을 이용합니다.

사용법:

종일 유지되는 치아 화이트닝, 클리닝: 틀을 제거합니다. 틀 각각의 내부에 거품 펌프를 1/2에서 1번 뿌린 후 손가락으로 골고루 퍼뜨립니다. 틀을 다시 입 안에 끼우고 빠져나오는 거품을 내뱉습니다. 손가락으로 닦아내십시오. 틀과 치아의 화이트닝, 클리닝, 상쾌한 효과를 위해 하루 4번까지 사용합니다.

입 외부 클리닝: 틀을 제거하고 보관 케이스 안에 넣습니다. 거품으로 틀 위를 덮고 5분 동안 그대로 둡니다. 입 안에 끼우기 전 틀을 깨끗이 닦아도 좋습니다.

성분: 물, 과산화수소, 글리세린, 폴리에틸렌글리콜, 소듐 로릴 설페이트, 수크라로스, 소듐 시트레이트, 에티드로닉 산, 소듐 벤조네이트, 천연 민트 오일.

주의 사항 및 응급 조치: 만약 입 혹은 잇몸에 부작용(홍조, 구토, 쓰러짐)이 일어난다면 복용을 중지하고 시카고의사와 상담하십시오. 12세 이하의 어린이는 성인의 감독이 필요합니다. 눈, 피부, 머리카락과의 접촉을 피하고 만약 접촉했다면 물로 씻어내십시오. 삼키지 마시고 구토 유도제로 쓰시지 마십시오. 인물 또는 혀 아래에 분포하지 마십시오. 임신 후에는 수유 중에는 사용하지 마십시오. 내용물이 조상할 수 있으나 햇볕과 고온을 피해 보관하십시오. 치열교정기와 깨끗한 진공 상태의 플라스틱 용기에만 사용하십시오. 장기 사용은 의사와 상담하십시오. 미국 독극물 관리 센터: (800) 222-1222 호주 독극물 정보 센터: 13 11 26. 뉴질랜드 독극물 정보 센터: 0800 764 766. 캐나다 응급실: 911. 유럽 독극물 센터: echa.europa.eu

성분: 물, 과산화수소, 글리세린, 폴리에틸렌글리콜, 소듐 로릴 설페이트, 수크라로스, 소듐 시트레이트, 에티드로닉 산, 소듐 벤조네이트, 천연 민트 오일.

제공 방법: 50ml, 25ml, 15ml. 민트 향.

적합 성: (전체 목록을 보려면 eversmilewhite.com/compatibility를 방문하십시오.)


- Invisalign®
- ClearCorrect®
- 포백제 트레이
- Essix® 보유자
- Vivera® 보유자

EverSmile® WhiteFoam™은 Align Technology, Inc., Clear Correct Holdings, Inc. 또는 Dentsply Sirona, Inc.와 아무런 관련이 없습니다.


제조사:
EverSmile, Inc.
10547 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064
+1 (855) 595-2999
info@eversmilewhite.com

www.eversmilewhite.com

INSTRUÇÕES PORTUGUESES

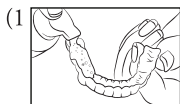

Aplicar entre meia e uma bomba de EverSmile® WhiteFoam às placas.

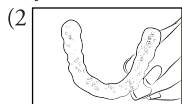

Espalhar a espuma uniformemente para cobrir todas as áreas.



Colocar as placas na boca e cuspir o excesso de espuma. Usar as placas conforme instruído.

Descrição: EverSmile® WhiteFoam é uma formulação patenteada projetada para limpar e refrescar aparelhos ortodônticos transparentes e limpar placas de retenção. EverSmile® WhiteFoam utiliza EverClean™ (tecnologia aniônica) baseada em peróxido de hidrogênio, matando 99,999% das bactérias.

Instruções:

Branqueamento e limpeza em qualquer lugar: Retirar as placas. Aplicar entre 1/2 e 1 bomba de espuma em cada placa, espalhando uniformemente com os dedos. Colocar as placas de volta na boca e cuspir o excesso de espuma. Limpar os dedos. Usar até 4 vezes ao dia para branqueamento, limpeza e frescor dos dentes e das placas.

Limpeza fora da boca: Retirar as placas e colocá-las no estojo. Cobrir as placas com espuma e deixar reagir por até 5 minutos. É opcional enxaguar e escovar as placas antes de recolocá-las na boca.

CUIDADOS e primeiros socorros: Em caso de irritação (vermelhidão, inchaço, dor, etc.) das gengivas ou da boca, interromper o uso e consultar um dentista. É necessária a supervisão por adultos no caso de uso por menores de 12 anos. Evitar o contato com os olhos, pele ou cabelo; enxaguar com água em caso de contato. Evitar engolir; não induzir vômito. Não aplicar nas gengivas ou sob a língua. Não deve ser usado por grávidas ou lactantes. Manter fora da luz solar e do calor, pois o conteúdo pode se pressurizar. Usar apenas com aparelhos ortodônticos transparentes e placas de retenção plásticas moldadas a vácuo. O uso prolongado pode exigir supervisão por dentista. Centro de Controle de Venenos dos EUA: (800) 222-1222. Centro de Informações de Venenos da Austrália: 13 11 26. Centro de Informações de Venenos da Nova Zelândia: 0800 764 766. Emergências no Canadá: 911. Centros de Venenos da UE: echa.europa.eu

Ingredientes: água, peróxido de hidrogênio, PVP, PEG, lauril sulfato de sódio, sucralose, citrato de sódio, benzoato de sódio, ácido etidróico, óleo de mentha arvensis (hortelã).

Apresentação: 50ml, 25ml, 15ml. Sabor hortelã.


Compatibilidade: (visite eversmilewhite.com/compatibility para a lista completa)

- Invisalign® Aligners
- ClearCorrect® Aligners
- Bandejas de alvejante
- Essix® Retainers
- Vivera® Retainers

EverSmile® WhiteFoam™ não está afiliado de forma alguma à Align Technology, Inc., Clear Correct Holdings, Inc. ou Dentsply Sirona, Inc.

www.eversmilewhite.com

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

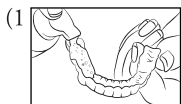

Presione la bomba para dispensar medio a un chorrito de EverSmile® WhiteFoam en los moldes.



Extienda la espuma uniformemente para cubrir todas las áreas.



Vuelva a ponerse los moldes en la boca y escupa el exceso de espuma. Úselo según lo indicado.

Descripción: EverSmile® WhiteFoam es una formulación de limpieza patentada, diseñada para limpiar y refrescar los alineadores de tratamiento de ortodoncia y los retenedores transparentes (moldes). EverSmile® WhiteFoam emplea EverClean™ (tecnología aniônica) cuyo efecto se debe al agua oxigenada y mata el 99,999% de las bacterias.

Instrucciones:

Blanqueamiento y limpieza dental en marcha: Quite los moldes. Presione la bomba para dispensar 1/2 a 1 chorrito de espuma dentro de cada molde, extendiendo la espuma uniformemente con un dedo. Vuelva a ponerse los moldes en la boca y escupa el exceso de espuma. Límpiense los dedos. Siga estas instrucciones hasta 4 veces al día para blanquear, limpiar y refrescar los moldes y los dientes.

Limpeza fuera de la boca: Quite los moldes y colóquelos dentro de su estuche. Cubra los moldes con espuma y permita que reposen por 5 minutos. Es opcional enjuague y cepille los moldes antes de volvérselos a poner en la boca.

PRECAUCIÓN y primeros auxilios: En caso de irritación (presentada como enrojecimiento, hinchazón, dolor) de las encías o la boca, suspenda su uso y consulte a un dentista. Los niños menores de 12 años deben ser supervisados por un adulto. Evite el contacto con los ojos, la piel o el cabello. Si alguno de esto entra en contacto con el agente, enjuague con agua. Evite ingerir; no induzca el vómito. No lo aplique en las encías o debajo de la lengua. No use este producto si está amamantando o embarazada. Manténgalo fuera de la luz solar y del calor, ya que puede pressurizar el contenido. Empléelo sólo con alineadores de tratamiento de ortodoncia y retenedores de plástico formados por vacío. El uso prolongado puede requerir la supervisión de un dentista. Centro de control de envenenamiento de los Estados Unidos: (800) 222-1222. Centro de información sobre venenos de Australia: 13 11 26. Centro de información sobre venenos de Nueva Zelanda: 0800 764 766. Emergencias en Canadá: 911. Centros de envenenamiento de la UE: echa.europa.eu

Ingredientes: agua, agua oxigenada, glicerina, polietileno glicol, lauril sulfato de sodio, sucralosa, citrato de sodio, benzoato de sodio, ácido etidróico, menta arvensis (menta) aceite.

Presentación: 50ml, 25ml, 15ml. Sabor a menta.

Compatibilidad: (visite eversmilewhite.com/compatibility para ver la lista completa)

- Invisalign® Aligners
- ClearCorrect® Aligners
- Bandejas de blanqueo
- Essix® Retainers
- Vivera® Retainers

EverSmile® WhiteFoam™ no está afiliado de ninguna manera con Align Technology, Inc., Clear Correct Holdings, Inc. o Dentsply Sirona, Inc.

Fabricante:
EverSmile, Inc.
10547 W. Pico Blvd.
Los Angeles, CA 90064
+1 (855) 595-2999
info@eversmilewhite.com

www.eversmilewhite.com