


## ENGLISH INSTRUCTIONS

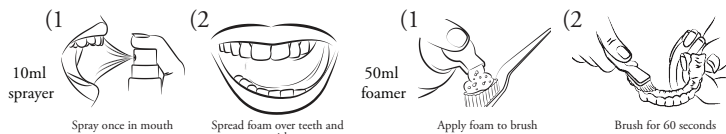

**Description:** EverSmile® FreshDent™ is a patented, deep cleaning, on-the-go denture and partial cleaner that kills bacteria and freshens dentures and partials.

**Directions: 50ml Foamer**

**Brushing:** Remove dentures or partials & pump foam on all surfaces or on toothbrush then brush for 60 seconds. Rinse with water.

**Rinsing:** Dispense 1 to 2 pumps inside mouth and swish for up to 60 seconds, then spit out foam and rinse mouth with water.

**Directions: 10ml Sprayer**

**On-The-Go:** Spray 1 pump into mouth on dentures and tongue. Use tongue to spread solution over teeth and swish with product for up to 20 seconds.

**CAUTION & First Aid:** If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Adult supervision is required for use by children under 12. Avoid contact with eyes, skin, or hair; flush with water if contact is made. Avoid swallowing; do not induce vomiting. Do not apply to gums or under tongue. Do not use if nursing or pregnant. Keep away from sunlight and heat as contents may pressurize. Prolonged use may require dentist supervision. U.S. Poison Control Center: (800) 222-1222. Australia Poisons Info Centre: 13 11 26. New Zealand Poisons Info Center: 0800 764 766. Canada Emergencies: 911. EU Poison Centres: echa.europa.eu.

**Ingredients:** water, hydrogen peroxide, glycerine, PVP, PEG, sodium lauryl sulfate, sucralose, sodium citrate, sodium benzoate, etidronic acid, mentha arvensis (mint) oil.


**Compatibility:** (visit [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility) for full list)

- Dentures
- Partial
- Dental Implants
- False Teeth

**Manufactured By:** EverBrands, Inc. 401 N. Oak St. Inglewood, CA 90302 +1 (855) 595-2999 info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)

## DEUTSCH ANWEISUNGEN

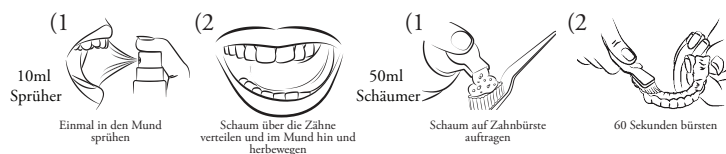

**Beschreibung:** EverSmile® FreshDent™ ist ein patentierter, tiefwirkender Reiniger für Gebisse und Teilprothesen, der Bakterien abtötet und Gebisse und Teilprothesen erfrischt.

**Anweisung: 50ml Schäumler**

**Bürsten:** Das Gebiss oder die Teilprothese aus dem Mund nehmen, den Schaum auf sämtliche Oberflächen oder auf die Zahnbürste pumpen und das Gebiss oder die Teilprothese 60 Sekunden lang damit bürsten. Mit Wasser abspülen.

**Ausspülen:** 1 bis 2 Pumpstöße in den Mund spritzen, bis zu 60 Sekunden lang im Mund hin- und herbewegen, dann den Schaum ausspucken und den Mund mit Wasser ausspülen.

**Anweisung: 10ml Sprüher**

**Für unterwegs:** 1 Pumpstoß in den Mund auf das Gebiss und die Zunge sprühen. Mit der Zunge die Lösung über die Zähne verteilen und bis zu 20 Sekunden im Mund hin- und herbewegen.

**VORSICHT & Erste Hilfe:** Wenn Reizungen (wie z. B. Rötung, Schwellung, Entzündung) des Zahnfleisches oder des Mundes auftreten, die Anwendung beenden und den Zahnarzt konsultieren. Kinder unter 12 Jahren müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Kontakt mit Augen, Haut oder Haaren vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser aus- oder abspülen. Nicht verschlucken; kein Erbrechen herbeiführen. Nicht direkt auf das Zahnfleisch oder unter der Zunge auftragen. Während der Stillzeit oder in der Schwangerschaft nicht verwenden. Von Sonnenlicht und Hitze fernhalten, da der Inhalt unter Druck stehen kann.

Giftnotrufzentrale in den USA: (800) 222-1222. Giftinformationszentrale in Australien: 13 11 26. Giftinformationszentrale in Neuseeland: 0800 764 766. Bei Notfällen in Kanada: 911. Europäische Chemikalienagentur: echa.europa.eu

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Wasserstoffperoxid, Glycerin, PVP, PEG, Natriumlaurylsulfat, Sucralose, Natriumcitrat, Natriumbenzoat, Etidronsäure, Minzeöl (Mentha arvensis)


**Kompatibilität:** (Besuchen Sie [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility) für die vollständige Liste)

- Gebiss
- Teilprothese
- Zahnimplantate
- Dritte Zähne

**Hersteller:** EverBrands, Inc. 401 N. Oak St. Inglewood, CA 90302 +1 (855) 595-2999 info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)

## INSTRUCTIONS FRANÇAIS

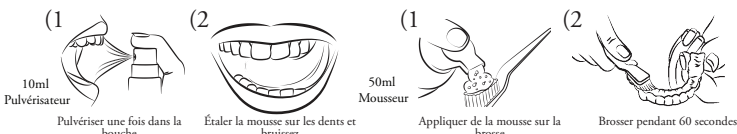

**Description :** EverSmile® FreshDent™ est un nettoyant pour prothèses et partiels dentaires breveté avec un nettoyage en profondeur qui tue les bactéries et rafraîchit les prothèses et les partiels dentaires.

**Instructions :**

**Mousseur de 50 millilitres**

**Brossage :** Retirer les prothèses ou les partiels dentaires et pomper la mousse sur toutes les surfaces ou sur la brosse à dents, puis brosser pendant 60 secondes. Rincer à l'eau.

**Rinçage :** Distribuer 1 à 2 pompes à l'intérieur de la bouche et agiter jusqu'à 60 secondes, puis recracher la mousse et rincer la bouche avec de l'eau.

**Pulvérisateur de 10 millilitres**

**En déplacement :** Pulvériser 1 pompe dans la bouche sur les prothèses dentaires et la langue. Utiliser la langue pour répandre la solution sur les dents et agiter avec le produit jusqu'à 20 secondes.

**AVERTISSEMENT et premiers soins :** En cas d'irritation (telle que rougeur, gonflement, douleur) des gencives ou de la bouche, cesser l'utilisation et consulter votre dentiste. La surveillance d'un adulte est requise pour les enfants de moins de 12 ans. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les cheveux ; rincer à l'eau en cas de contact. Éviter d'avaler; ne pas faire vomir. Ne pas appliquer directement sur les gencives ou sous la langue. Ne pas utiliser en cas d'allaitement ou de grossesse. Tenir à l'écart de la lumière du soleil et de la chaleur car le contenu peut être sous pression.

Centre d'antipoison des États-Unis : (800) 222-1222. Centre d'informations sur les poisons de l'Australie : 13 11 26. Centre d'informations sur les poisons de Nouvelle Zélande : 0800 764 766. Canada Emergencies: 911. Centres antipoison de l'UE : echa.europa.eu.

**Ingédients :** Eau, peroxyde d'hydrogène, glycérine, PVP, PEG, laurylsulfate de sodium, sucralose, citrate de sodium, benzoate de sodium, acide étidronique, huile de mentha arvensis (menthe).


**Compatibilité :** (visitez [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility) pour la liste complète)

- Prothèses dentaires
- Partiels
- Implants dentaires
- Fausses dents

**Fabricant :** EverBrands, Inc. 401 N. Oak St. Inglewood, CA 90302 +1 (855) 595-2999 info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)

## ISTRUZIONI ITALIANO

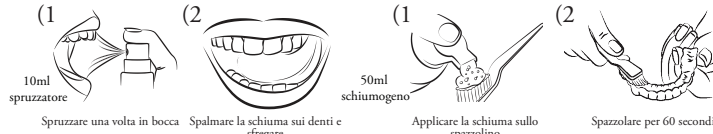

**Descrizione:** EverSmile® FreshDent™ è un detergente brevettato per la pulizia profonda, le dentiere mobili e la pulizia parziale che uccide i batteri e rinfresca le protesi dentarie e i parziali.

**Indicazioni: Schiumogeno da 50ml**

**Spazzolino:** Rimuovere le protesi dentarie o i parziali e spruzzare la schiuma su tutte le superfici o sullo spazzolino, quindi spazzolare per 60 secondi. Sciacquare con acqua.

**Risciacquo:** Spruzzare 1 o 2 volte all'interno della bocca e sfregare per un massimo di 60 secondi, poi sputare la schiuma e sciacquare la bocca con acqua.

**Indicazioni: Spruzzatore mobile da 10 ml**

**Mobile:** Spruzzare 1 volta nella bocca su dentiere e lingua. Usare la lingua per stendere la soluzione sui denti e sfregare il prodotto per massimo 20 secondi.

**AVVERTENZE e Primo Soccorso:** In caso di irritazione (come arrossamento, gonfiore, indolenzimento) delle gengive o della bocca, interrompere l'uso e consultare il dentista. È necessaria la supervisione di un adulto in caso di utilizzo da parte di bambini di età inferiore ai 12 anni. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o i capelli; in caso di contatto, sciacquare con acqua. Evitare l'ingestione; non indurre il vomito. Non applicare direttamente sulle gengive o sotto la lingua. Non utilizzare in caso di allattamento o gravidanza. Tenere lontano dalla luce del sole e dal calore poiché il contenuto potrebbe pressurizzarsi. Centro antiveleni degli Stati Uniti: (800) 222-1222. Centro antiveleni dell'Australia: 13 11 26. Centro antiveleni della Nuova Zelanda: 0800 764 766. Emergenze nel Canada: 911. Centri antiveleni dell'Unione Europea: echa.europa.eu

**Ingredienti:** acqua, perossido di idrogeno, glicerina, PVP, PEG, laurilsolfato di sodio, sucralosio, citrato di sodio, benzoato di sodio, acido etidronico, olio di mentha arvensis (menta).


**Compatibilità:** (visita [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility) per l'elenco completo)

- Protesi dentarie
- Parziali
- Impianti dentali
- Denti finti

**Fabricante:** EverBrands, Inc. 401 N. Oak St. Inglewood, CA 90302 +1 (855) 595-2999 info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)

## 中文说明

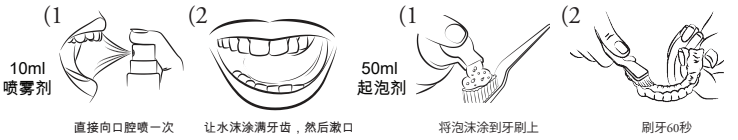

描述: EverSmile® FreshDent™ 是持有专利的便携式清洁剂, 可深度清洁全口义齿及部分义齿, 可杀灭细菌, 并保持全口义齿及部分义齿的清新。

### 使用说明:

#### 50ml 起泡剂

刷洗: 将全口义齿或部分义齿取下, 将泡沫挤压到义齿的各个表面上, 或将泡沫挤压到牙刷上, 然后刷牙 60 秒。用清水漱口。

漱口: 向口腔直接挤入 1 至 2 泵的量, 然后漱口 60 秒, 随后吐出泡沫, 用清水漱口。

#### 10ml 喷雾剂

便捷清洁: 按压泵头, 向口腔内的义齿和舌头部位喷入一次剂量。用舌头将溶液覆盖满牙齿, 然后漱口 20 秒。

注意事项以及急救措施: 如牙龈或口腔出现刺激反应(如发红、肿胀、疼痛), 请停用产品, 并咨询牙医。12 岁以下的儿童需在成人监督下使用。请避免接触眼睛、皮肤或头发; 如发生接触, 请用水冲洗。请避免吞入产品; 请勿催吐。请勿直接用于牙龈或舌下。哺乳期或孕早期女性请勿使用本产品。请避光保存, 并避免高温, 以免内容物增压。  
美国毒物控制中心: (800) 222-1222. 澳洲毒物信息中心: 13 11 26. 新西兰毒物信息中心: 0800 764 766. 加拿大急救电话: 911. 欧盟毒物中心: echa.europa.eu

成份: 水、过氧化氢、甘油、PVP、PEG、月桂基硫酸钠、三氯蔗糖、柠檬酸钠、苯甲酸钠、羟乙磷酸、薄荷油


适用范围: (请访问 [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility), 获取完整的清单)

- 全口义齿
- 部分义齿
- 种植牙
- 假牙

生产商:   
EverBrands, Inc.  
401 N. Oak St.  
Inglewood, CA 90302  
+1 (855) 595-2999  
info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)

## INSTRUÇÕES PORTUGUESES

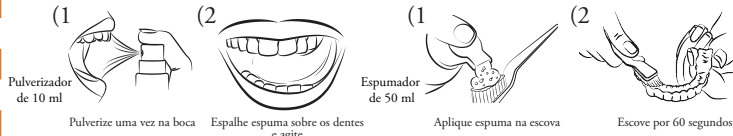

Descrição: FreshDent™ da EverSmile® é uma prótese patenteada de limpeza profunda, limpador em viagem de dentaduras e parciais que mata bactérias e refresca próteses e parciais.

### Instruções:

#### Espumador de 50 ml

Escovação: Remova dentaduras ou parciais e bombeie espuma em todas as superfícies ou na escova de dentes e, em seguida, escove por 60 segundos. Enxágue com água.

Lavagem: Distribua 1 a 2 bombas na boca e agite por até 60 segundos, depois cuspa espuma e lave a boca com água.

#### Pulverizador de 10 ml

Em viagem: Borrife 1 bomba na boca nas dentaduras e na língua. Use a língua para espalhar a solução sobre os dentes e agite com o produto por até 20 segundos.

**CUIDADOS e primeiros socorros:** Se ocorrer irritação (como vermelhidão, inchaço, dor) nas gengivas ou na boca, interrompa o uso e consulte o seu dentista. A supervisão de um adulto é necessária para crianças menores de 12 anos. Evite o contato com os olhos, pele ou cabelo; lave com água se houver contato. Evite engolir; não provoque vômito. Não aplique diretamente nas gengivas ou sob a língua. Não use se estiver amamentando ou grávida. Mantenha longe da luz solar e do calor, pois o conteúdo pode pressurizar. Centro de Controle de Envenenamento dos EUA: (800) 222-1222. Centro de Informações sobre Venenos da Austrália: 13 11 26. Centro de Informações sobre Venenos da Nova Zelândia: 0800 764 766. Emergências no Canadá: 911. Centros de Envenenamento da UE: echa.europa.eu

**Ingredientes:** água, peróxido de hidrogênio, glicerina, PVP, PEG, lauril sulfato de sódio, sucralose, citrato de sódio, benzoato de sódio, ácido etidróico, óleo de mentha arvensis (hortelã)


Compatibilidade: (visite [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility) para a lista completa)

- Dentaduras
- Parciais
- Implantes dentários
- Dentes falsos

Fabricante:   
EverBrands, Inc.  
401 N. Oak St.  
Inglewood, CA 90302  
+1 (855) 595-2999  
info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)

## 한국어 지침

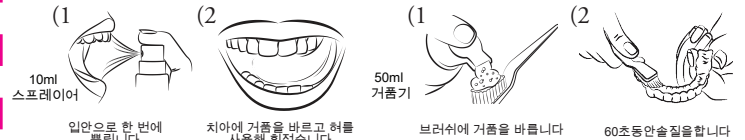

설명: EverSmile® FreshDent™ 은 이동식 의치 및 부분 틀니 세척기로서 박테리아를 죽이고 의치 및 부분 틀니를 상쾌하게 만들어 속까지 깨끗하게 청소해 주는 특허받은 제품입니다.

### 사용법:

#### 50ml 거품기

칫솔질, 의치 또는 부분 틀니를 제거하고 모든 표면 또는 칫솔에 거품을 펴포한 다음 60 초 동안 칫솔질합니다. 물로 헹굽니다.

헹구기: 입안쪽으로 1~2 차 펴포하여 분사한 다음 혀를 사용해 최대 60 초 동안 휘젓고 다시 거품을 내뿜고 물로 입을 헹굽니다.

#### 10ml 스프레이어

이동성: 입안에 1 차 펴포하여 의치와 혀에 분사합니다. 혀를 사용하여 치아에 응액을 바르고 제품을 최대 20 초 동안 휘젓습니다.


주의 사항 및 응급처치: 잇몸이나 입에 자극(염증, 부기, 쓰림 등)이 생기면 사용을 중지하고 치과 의사와 상담하세요. 12 세 이하의 어린이가 사용 시 반드시 성인의 지도를 따라야 합니다. 눈, 피부 또는 머리카락에 접촉하지 마세요. 접촉했을 경우 물로 씻어 내십시오. 삼키지 말고 억지로 구토하여 하지 마세요. 잇몸이나 혀 아래에 직접 바르지 마세요. 긴병 중이거나 임신부인 경우에 사용하지 마세요. 내용물에 압박감을 줄 수 있으므로 햇빛과 열을 멀리하세요.

미국 독극물 통제 센터: (800) 222-1222. 오스트레일리아 독극물 정보 센터: 13 11 26. 뉴질랜드 독극물 정보 센터: 0800 764 766. 캐나다 응급처치 센터: 911. 유럽 독극물 센터: echa.europa.eu

성분: 물, 과산화수소, 글리세린, PVP, PEG, 라우릴황산나트륨, 수크랄로스, 구연산 나트륨, 벤조산 나트륨, 에티드론릭에시드, 멘타 아벤시스 (민트) 오일


호환성: (전체 목록을 보려면 [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility)를 방문하십시오.)

- 의치
- 부분 틀니
- 치아 임플란트
- 틀니

제조업체:   
EverBrands, Inc.  
401 N. Oak St.  
Inglewood, CA 90302  
+1 (855) 595-2999  
info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)

## INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

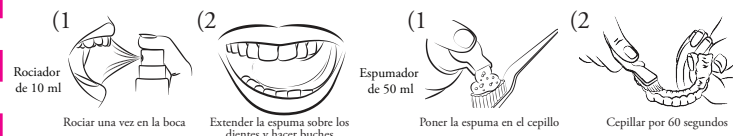

Descripción: FreshDent™ de EverSmile® es un limpiador de dentaduras postizas completas y parciales patentado, para usar sin sacar las dentaduras, que limpia profundamente, eliminando las bacterias y refrescando las dentaduras postizas completas y parciales.

### Instrucciones:

#### Espumador de 50 ml

Cepillar: Quite las dentaduras completas o parciales y bombee espuma por toda la superficie de las mismas o en el cepillo de dientes y luego cepille por 60 segundos. Enjuague con agua.

Enjuagar: Bombe de 1 a 2 veces en la boca y haga buches por 60 segundos, luego escupa la espuma y enjuague la boca con agua.

#### Rociador de 10 ml

Sin quitar: Rocíe en la boca una vez sobre las dentaduras postizas y la lengua. Extienda la solución sobre los dientes con la lengua y haga buches con el producto por un máximo de 20 segundos.

**PRECAUCIÓN y primeros auxilios:** En caso de irritación (como enrojecimiento, hinchazón o dolor) de las encías o la boca, deje de usar y hable con su dentista. El uso por niños menores de 12 años debe ser supervisado por un adulto. Evite el contacto con los ojos, la piel o el cabello; en caso que haya contacto, enjuague con agua. Evite tragar; no induzca el vómito. No aplique directamente sobre las encías ni debajo de la lengua. No apto para uso por mujeres lactantes o embarazadas. Mantenga fuera de la luz solar y el calor ya que puede pressurizar el contenido.

Centro de control de envenenamiento de los EE.UU.: (800) 222-1222. Centro de información sobre venenos de Australia: 13 11 26. Centro de información sobre venenos de Nueva Zelanda: 0800 764 766. Asistencia de emergencia en Canadá: 911. Centros de envenenamiento de la UE: echa.europa.eu

**Ingredientes:** agua, peróxido de hidrógeno, glicerina, PVP, PEG, laurilsulfato de sodio, sucralosa, citrato de sodio, benzoato de sodio, ácido etidróico, aceite de mentha arvensis (menta)

Compatibilidad: (visite [eversmilewhite.com/compatibility](http://eversmilewhite.com/compatibility) para ver la lista completa)

- Dentaduras postizas
- Dentaduras parciales
- Implantes dentales
- Dientes falsos

Fabricante:   
EverBrands, Inc.  
401 N. Oak St.  
Inglewood, CA 90302  
+1 (855) 595-2999  
info@eversmilewhite.com

[www.eversmilewhite.com](http://www.eversmilewhite.com)