

SELECT

PROFCARE



Classified as category 1
EU 2016/425
Conformity Declaration: this product meets the regulation
EU 2016/425.



Made in China
SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com

UK

Knee Support with splints - Art. 6204

Function:

- Warmth and support
- Preventive protection against tenderness around the kneecap
- Increase stability
- For protection against minor impacts from falling, protection against bruises, abrasions and light burns

Instruction for use:

Use the Velcro-straps to tighten the bandage around the knee to ensure the right compression and improve stability. The aluminium splints can be adjusted slightly at the ends by bending them.

Material:

- Lining: 100% Polyamide Jersey
- Foam: 70% SBR Neoprene, 30% CR Neoprene
- Fastener: Velcro
- Splint: Aluminium

Important information:

- Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/248°F.
- The function of the product must not be changed or compromised
- The product should only be used for its original purpose as described above
- Time of use should not exceed 3-4 hours
- If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support
- If you are allergic to heat, we advise you to use a product that does not contain SBR Neoprene

To ensure correct fit, try the product on.

Washing instructions:

1. Close all Velcro
2. Remove splint
3. Mesh laundry bag is recommended
4. Stretch product while wet and let dry



DK

Knæbind med sideskiner - Art. 6204

Funktion:

- Varmer og støtter
- Forebyggende beskyttelse mod ømhed omkring knæskallen
- Forøger stabiliteten
- Beskytter mod mindre skader fra fald, stød og hudafskrabninger

Brugsanvisning:

Brug velcro-båndene til at stramme bindet omkring knæet for at sikre det rigtige kompression og forbedre stabiliteten. Aluminiumsstiverne kan justeres lidt i enderne ved at bøje dem.

Materiale:

- For: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Spænde: Velcro
- Skinne: Aluminium

Vigtige oplysninger:

- Må ikke bruges til patienter med kendt overfølsomhed over for nogle af produkternes komponenter
- Produktet er ikke brandsikkert. Undgå temperaturer over 120° C/248° F
- Produktets funktion må ikke ændres eller kompromitteres
- Produktet bør kun bruges til det oprindelige formål som beskrevet ovenfor
- Bør ikke bruges mere end 3-4 timer ad gangen
- Hvis produktet indeholder latex eller gummi, og du er allergisk over for latex/gummi, anbefaler vi, at du rådfører dig med en behandler, før anvendelse
- Hvis du er allergisk over for varme, anbefaler vi, at du bruger et produkt, der ikke indeholder SBR Neopren

Prøv produktet for at sikre den korrekte pasform.

Vaskeanvisning:

1. Luk al velcro
2. Fjern skinne
3. Vaskepose anbefales
4. Træk produktet i facon, mens det er vådt, og lad det tørre



DE

Kniebandage mit seitenschiene - Art. 6204

Funktion:

- Wärme und Stütze
- Vorbeugender Schutz gegen Empfindlichkeiten um die Knie Scheibe
- Erhöhte Stabilität
- Schutz vor geringfügigen Einwirkungen durch Stürze sowie vor Blutergüssen, Prellungen und Abrieb

Gebrauchsanweisung:

Befestigen Sie die Bänder mit den Klettverschlüssen um das Knie, um die richtige Kompression sicherzustellen und die Stabilität zu erhöhen. Die Aluminium-Schiene können am Ende durch leichtes Verbiegen angepasst werden.

Material:

- Futter: 100% Polyamid Jersey
- Schaumstoff: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Befestigung: Velcro
- Schiene: Aluminium

Wichtige Informationen:

- Nicht bei Patienten anwenden, die eine Überempfindlichkeit gegen die Produktkomponenten aufweisen
- Nicht feuerfest. Vermeiden Sie Temperaturen über 120°C/248°F
- Die Funktion des Produkts darf nicht geändert oder beeinträchtigt werden
- Das Produkt sollte nur für seinen ursprünglichen Zweck verwendet werden
- Die Anwendungszeit sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten
- Wenn das Produkt Latex oder Gummi enthält und Sie darauf allergisch sind, empfehlen wir Ihnen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren
- Sollten Sie wärmeempfindlich sein, empfehlen wir Ihnen, ein Produkt zu verwenden, das kein SBR Neopren enthält

Um einwandfreien Sitz zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt ausprobieren.

Washanleitung:

1. Velcro schließen
2. Schiene entfernen
3. Ein Wäschesack aus Netz wird empfohlen
4. Dehnen Sie das Produkt während es nass ist und lassen Sie es trocknen



SE

Knäskydd med sidoskenor - Art. 6204

Funktion:

- Värme och stöd
- Förebyggande skydd mot ömhet runt knäskålen
- Ökad stabilitet
- Skyddar mot mindre stötar vid fall, skrubbsår, bulor och skav

Instruktion för användning:

Använd karborerremarna för att spänna bandaget runt knät för att ge rätt kompression och förbättra stabilitet. Aluminiumskenorna kan justeras något vid ändarna genom att böja dem.

Material:

- Foder: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Fästansordning: Velcro
- Skena: Aluminium

Viktig information:

- Får ej användas på patienter med känd överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten
- Inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur över 120° C/248° F.
- Produktens funktion får inte ändras eller äventyras
- Produkten bör endast användas för sitt syfte som beskrivs ovan
- Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar
- Om produkten innehåller latex eller gummi och du är allergisk mot latex/gummi, råder vi dig att konsultera en läkare innan du använder stöd
- Om du är känslig mot värme, råder vi dig att använda en produkt som inte innehåller SBR Neopren

Prova produkten så att du vet att den passar dig.

Tvättråd:

1. Stäng velcro
2. Ta bort skena
3. Mesh tvättpåse rekommenderas
4. Sträck produkten när den är våt och låt torka



NO

Knestøtte med sideskiner - Art. 6204

Funksjon:

- Varme og støtte
- Forebyggende beskyttelse mot ømhet rundt kneskålen
- Økt stabilitet
- Beskytter mot mindre støt ved fall, beskytter mot blåmerker, støt og slitasje

Brukerveiledning:

Bruk borerlåsstrøpene for å stramme bandasjen rundt kneet for å sikre rett kompresjon og økt stabilitet. Aluminiumsplintene kan justeres i endene ved å bøye dem.

Material:

- For: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Festeansordning: Velcro
- Skinne: Aluminium

Viktig informasjon:

- Må ikke brukes på pasienter som er folsomme for en eller flere av produktkomponentene
- Produktet er ikke flammesikkert. Unngå temperaturer over 120 °C/248 °F.
- Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes
- Produktet må bare brukes til det det ment for som beskrevet over
- Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer
- Hvis produktet inneholder lateks eller gummi og du er allergisk mot dette, råder vi deg til å snakke med en lege før du tar i bruk produktet
- Hvis du er allergisk mot varme, råder vi deg til å bruke et produkt som ikke inneholder SBR Neopren

Prøv produktet for å sørge for at det sitter skikkelig.

Vaskeinstruksjoner:

1. Lukk velcro
2. Fjern skinne
3. Bruk av vaskepose anbefales
4. Dra i produktet mens det er vått, og la det tørke



FIN

Lastallinen polvituki - Art. 6204

Käyttötarkoitus:

- Lämmittää ja tukee
- Polvilumpion ympärillä esiintyvän arkuuden ennaltaehkäisyyn
- Parantaa tasapainoa
- Tarkoitettu suojaamaan kaatumisen aiheuttavilta lieviltä vammoilta, kuten ruhjelta, kuumuulta ja hiertymiltä

Käyttöohjeet:

Tiukenna polvitukiremmejä Velcro-nauhoilla polven ympärillä halutunlaisen tuen saamiseksi ja tasapainon parantamiseksi. Alumiinitukia voidaan säätää hieman taivuttamalla niiden päitä.

Materiaali:

- Vuori: 100 % Polyamidi Jersey
- Vaahtomuovi: 70% SBR Neopreeni, 30% CR Neopreeni
- Kiinnikkeet: Velcro
- Kiskot: Alumiini


Tärkeää tietoa:

- Älä käytä potillailla, joilla tiedetään esiintyvän yliherkkyyttä tuotteen sisältäville aineille
- Tuote ei ole palosuojakäsittely, välttä yli 120 °C:n/248 °F:n lämpötiloja
- Tuotteen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa tai vaarantaa
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen
- Käyttöaika ei saa ylittää 3-4 tuntia
- Jos tuote sisältää lateksia tai kumia ja olet allerginen lateksille/kumille, pyydämme kääntymään asiantuntijan puoleen ennen tuen käyttöä
- Jos olet allerginen kuumuudelle, suosittellemme käyttämään tuotetta, joka ei sisällä SBR:ää Neopreeniä

Varmista oikea istuvuus sovittamalla tuotetta.

Pesuohteet:

1. Sulje velcro
2. Poista kiskot
3. Pesupussin käyttöä suositellaan
4. Venytä tuotetta, kun se on vielä märkä. Anna kuivua.

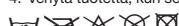

FR

Genouillère avec attelles - Art. 6204

Fonction:

- Chaleur et soutien
- Protection préventive contre la sensibilité autour de la rotule
- Accroître la stabilité
- Pour une protection contre les impacts mineurs liés aux chutes, comme les ecchymoses, les bosses et les effets de l'abrasion

Mode d'emploi:

Utilisez les bandes Velcro pour serrer le bandate autour du genou, assurer ainsi la bonne compression et améliorer la stabilité. Les attelles en aluminium peuvent être légèrement ajustées aux extrémités. Il suffit pour cela de les courber.

Matériau:

- Doublure: 100% Polyamide Jersey
- Mousse: 70% SBR Néoprène, 30% CR Néoprène
- Fixation: Velcro
- Attelle: Aluminium

Informations importantes:

- Ne pas utiliser sur les patients souffrant d'une sensibilité connue à n'importe lequel des composants du produit
- N'est pas ignifuge. Évitez les températures supérieures à 120°C/248°F.
- Le fonctionnement du produit ne doit pas être modifié ou compromis
- Le produit ne doit être utilisé que conformément à son but d'origine
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures
- Si le produit contient du latex ou du caoutchouc, et que vous y êtes allergique, nous vous conseillons de consulter un médecin avant utilisation
- Si vous êtes allergique à la chaleur, nous vous conseillons d'utiliser un produit qui ne contient pas de SBR Néoprène

Pour vous assurer de choisir la bonne taille, essayez le produit.

Instructions de nettoyage:

1. Fermer Velcro
2. Retirez attelle
3. L'utilisation d'un sac de lavage est recommandé
4. Étirer le produit encore humide et laisser sécher



ES**Rodillera con tablillas - Art. 6204****Función:**

- Calor y compresión
- Protección para prevenir dolores alrededor de la rótula
- Aumenta la estabilidad
- Para la protección contra impactos menores por caídas y protección contra contusiones, golpes y abrasiones

Instrucciones de uso:

Usar las correas de Velcro para apretar las bandas alrededor de la rodilla y garantizar una compresión correcta que mejore la estabilidad. Las tablillas de aluminio puede ajustarse ligeramente en los extremos doblándolos.

Material:

- Forro: 100% Jersey de Poliamida
- Espuma: 70% SBR Neopreno, 30% CR Neopreno
- Sujeciones: Velcro
- Tablilla: Aluminio

Información importante:

- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a cualquier de los componentes del producto
- El producto no es ignífugo, evitar temperaturas superiores a 120°C/248°F.
- La función del producto no debe cambiarse ni ponerla en peligro
- El producto debe utilizarse solamente para la función original
- El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- Si el producto contiene látex o caucho y usted es alérgico al látex o caucho, le recomendamos que consulte con el profesional que le ha recomendado
- Si es alérgico al calor, le recomendamos que utilice un producto que no contenga SBR Neopreno

Para garantizar un ajuste correcto, pruebe el producto.

Instrucciones de lavado:

1. Cerrar velcro
2. Quitar tablilla
3. Se recomienda el uso de una bolsa de malla para lavadora
4. Estirar el producto mientras está húmedo y dejar secar

**PL****Stabilizator stawu kolanowego z szynami - Art. 6204****Funkcja:**

- Ciepło i stabilizacja
- Ochrona przed nadwrażliwością wokół rzepki
- Zwiększona stabilność
- Ochrona przed niewielkimi uderzeniami na skutek upadku, ochrona przed siniakami, stłuczeniami i obtarciami.

Instrukcja użytkowania:

Pasami Velcro zawiązać bandaż wokół kolana i sprawdzić, czy zapewnia on prawidłową kompresję i zwiększoną stabilność. Aluminiowe szyny można nieznacznie regulować na końcach poprzez wygięcie.

Materiał:

- Podszewka: 100% Poliamidowy Jersey
- Pianka: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Zapięcia: Velcro - Szyna: Aluminium

Ważne informacje:

- Nie używać na pacjentach, którzy są wrażliwi na działanie jakichkolwiek komponentów produktu
- Produkt nie jest ognioodporny. Unikać temperatury powyżej 120°C/248° F
- Nie stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikować
- Używać produktu wyłącznie do opisanych wyżej celów zgodnych
- Czas użycia nie powinien przekraczać 3–4 godzin
- Jeśli produkt zawiera lateks lub gumę, a użytkownik jest uczulony na lateks/gumę, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem używania stabilizatora
- Jeśli użytkownik jest uczulony na ciepło, zaleca się używanie produktu, który nie zawiera SBR Neoprenu

Aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie, próbnie założyć produkt.

Instrukcje mycia:

1. Zamknij Velcro
2. Usuń szynę
3. Zaleca się stosowanie worka siatkowego do mycia
4. Rozciągnąć wilgotny produkt i pozostawić do wyschnięcia

**IT** **Ginocchiera con aste - Art. 6204****Indicazioni:**

- Calore e supporto
- Protezione preventiva contro la dolorabilità dell'area intorno alla rotula
- Aumento della stabilità
- Per la protezione contro gli impatti di lieve entità conseguenti a cadute nonché ematomi, urti e abrasioni

Istruzioni per l'uso:

Utilizzare la chiusura in velcro per stringere il supporto intorno al ginocchio in modo da ottenere il giusto livello di compressione e incrementare la stabilità. Le aste di alluminio possono essere regolate leggermente piegandone le estremità.

Materiale:

- Rivestimento interno: 100% Jersey di Poliammide
- Espanso: 70% SBR Neoprene, 30% CR Neoprene
- Chiusure: Velcro - Asta: Alluminio

Informazioni importanti:

- Evitare l'uso nel caso di pazienti che presentino sensibilità a uno o più dei materiali di cui è composto il prodotto
- Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature superiori a 120°C/248°F
- È essenziale rispettare le indicazioni del prodotto, senza alcuna modifica
- Il prodotto va utilizzato solamente per lo scopo originariamente previsto
- La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore
- Se il prodotto contiene lattice o gomma, e se si soffre di allergie a lattice/gomma, si consiglia di consultare un medico prescrittore prima di indossare il supporto
- Se si soffre di intolleranza al calore, è consigliabile l'uso di un prodotto che non contenga SBR Neoprene

Per verificarne la vestibilità, provare il prodotto.

Istruzioni per il lavaggio:

1. Chiudere velcro
2. Rimuovere l'asta smontabile
3. Si consiglia l'uso di una rete salvabucato
4. Ridare forma al prodotto quando è ancora umido e lasciare asciugare.

**PT****Protetor de joelho com talas - Art. 6204****Indicazioni:**

- Calor e apoio
- Previna a sensibilidade em torno da rótula
- Reforço da estabilidade
- Para proteção contra impactos mínimos resultantes de quedas, proteção contra hematomas, colisões e abrasões

Modo de usar:

Use as fitas de velcro para apertar a faixa à volta do joelho, de modo a assegurar a compressão correta e o reforço da estabilidade. As talas em alumínio podem ser ligeiramente dobradas nas extremidades para um melhor ajuste.

Materiale:

- Forro: 100% Jersey de Poliamida
- Espuma: 70% SBR Neopreno, 30% CR Neopreno
- Elementos de aperto: Velcro - Tala: Aluminio

Informações importantes:

- Não deve utilizar-se em pacientes com sensibilidade a certos componentes do produto
- Não é resistente ao fogo. Evite temperaturas acima de 120°C/248°F
- As funções do produto não devem ser alteradas ou prejudicadas
- O produto deverá ser utilizado para os fins a que foi destinado
- Não deve ser utilizado acima de 3-4 horas de cada vez
- Recomendamos a consulta ao terapeuta antes de utilizar o produto quando este contiver látex ou borracha, e for alérgico a esses materiais
- Se for alérgico ao calor, recomendamos a utilização de um produto que não contenha SBR Neopreno

Experimente o produto para assegurar a posição correta.

Recomendações para lavagem:

1. Fechar velcro
2. Remova a tala
3. É recomendada a lavagem num saco de rede
4. Estique o produto ainda molhado e deixe secar

**RU****Фиксатор для поддержки колена с планками - Арт. 6204****Назначение:**

- Тепло и поддержка
- Профилактическая защита против болезненности вокруг коленной чашечки
- Повышать стабильность
- Для защиты от незначительных ударов при падении, защиты от ушибов, шишек и ссадины

Инструкция по применению:

Используйте ремни с застежками «липучка» Velcro («Велкро»), чтобы затянуть бандаж вокруг колена для обеспечения правильной компрессии и улучшения стабильности. Алюминиевые планки могут быть слегка подогнаны на концах путем их сгибания.

Материал:

- Подкладка: 100% Полиамид-джерси
- Пена: 70% SBR Неопрен, 30% Неопрен
- Застежки: Велкро - Планка: Алюминий

Важная информация:

- Не применяйте на пациентах, о которых известно, что у них чувствительность к любым компонентам изделия
 - Не жароустойчивым, избегайте температуры выше 120°C/248°F
 - Изменения или нарушения в назначении изделия недопустимы
 - Изделие следует применять только по его оригинальному назначению,
 - Время использования не должно превышать 3–4 часа
 - Если изделие содержит латекс или каучук и у вас аллергия на латекс/каучук, мы советуем вам перед использованием фиксатора для поддержки проконсультироваться у медицинского работника
 - Если у вас аллергия на тепло, мы советуем вам использовать изделие, которое не содержит БСК/неопрен
- Чтобы убедиться в правильной посадке, примерьте изделие.

Инструкции по стирке:

1. Закрыть Велкро
2. Вытащите съемную планку
3. Рекомендуется сетчатый мешок для стирки
4. Растяните изделие, пока влажное, и дайте высохнуть



SELECT
PROFCARE