

Version : November 2021


SELECT

PROFCARE



Classification
Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and non-invasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745

Basic UDI: 5703543U1009LJ

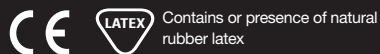

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact:

SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com • (+45) 43 96 96 66 • select@select.dk

UK

Profcare Plaster - Style no: 720053

Intended use:

The PROF CARE Plaster is intended to be used to cover injuries and wounds. To protect the wound and scab from contamination and friction to aid in the healing process. It is for use on the skin only. It is for single, short-term use and is a non-sterile device.

Instructions for use:

Skin needs to be cleaned before use. Duration of use should not exceed 3-4 hours, change the plaster if necessary.

Warnings and contraindications:

Do not use the tape if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients. Contraindications: Use of the product is contraindicated when:
- there is swelling at the application site
- do not stick on the wound directly
- the duration of use should not exceed 3-4 hours, change the plaster if necessary
- Skin needs to be cleaned before use.
- has known allergies to rubber

Warnings:

Do not apply too tight
Ensure that the skin is cleaned before application
Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.
Contains or presence of natural rubber latex
Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.
Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light.

Profcare Plaster consists of:

- Fabric Material: 100% Rayon, weight 140-150 g/m²
- Pad: Viskose + PE film
- Glue: Acrylic acid adhesive 60-70 g/m²
- Component: 70% fabric, 30% adhesive

DK

Profcare Plaster - Style no: 720053

Tilsigtet brug:

PROFCARE-plasteret er beregnet til at dække skader og sår. Beskytter sår og sårskorper mod kontaminering og friktion for at fremme helingsprocessen. Det er kun beregnet til brug på huden. Det er til kortvarig og enkeltstående brug, og det er ikke steril.

Brugsanvisning:

Huden skal renses inden brug. Må ikke anvendes i mere end 3-4 timer, udskift om nødvendigt plasteret.

Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke tapen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne. Kontraindikationer: Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:
- anvendelsesområdet er hævet
- klæb ikke direkte på såret
- brugstiden bør ikke overstige 3-4 timer, skift om nødvendigt plasteret
- Huden skal renses inden brug.
- brugeren har kendte allergier over for gummi

Advarsler:

Må ikke påføres for stramt
Sørg for at rense huden inden brug
Brug ikke tapen, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel. Indeholder eller tilstedeværelse af naturlig gummi latex
Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.
Må ikke opbevares under forhold over 25 °C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys.

PROFCARE-plaster består af:

- Stofmateriale: 100% rayon, vægt 140-150 g/m²
- Pude: Viskose + PE-film
- Lim: Acrylsyreklæbemiddel 60-70 g/m²
Sammensætning: 70 % stof, 30 % klæbemiddel

DE

Profcare Plaster - Style no: 720053

Verwendungszweck:

Das PROF CARE Pflaster ist für die Abdeckung von Verletzungen und Wunden vorgesehen. Zum Schutz der Wunde und des Schorfs vor Kontamination und Reibung und zur Unterstützung des Heilungsprozesses. Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut. Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

Gebrauchsanweisung:

Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden. Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten, wechseln Sie das Pflaster, falls nötig.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie das Klebeband nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren. Kontraindikationen: Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:
- an der Verwendungsstelle eine Schwellung ist
- Nicht direkt auf die Wunde kleben.
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten, wechseln Sie das Pflaster, falls nötig.
- Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.
- Nicht verwenden, wenn bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen. Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde. Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist. Enthält oder verwendet Naturkautschuklatex. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten. Nicht über 25 °C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

Profcare Plaster besteht aus:

- Gewebe: 100 % Rayon, Gewicht 140-150 g/m²
- Polster: Viskose + PE-Folie
- Klebstoff: Acrylsäurekleber 60-70 g/m²
Bestandteile: 70 % Gewebe, 30 % Klebstoff

SE

Profcare Plaster - Style no: 720053

Avsedd användning:

PROFCARE Plaster är avsedd att användas för att täcka skador och sår. För att skydda såret och sårskorpan från kontaminering och friktion för att underlätta läkningsprocessen. Den ska endast användas på huden. Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

Bruksanvisning:

Huden måste rengöras före användning. Användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar, byt plåster vid behov.

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte tejen om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna. Kontraindikationer: Användning av produkten är kontraindicerad när:
- det finns svullnad där tejen appliceras
- fäst inte direkt på såret
- användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar, byt plåster vid behov
- huden måste rengöras före användning
- användaren får inte vara allergisk mot gummi

Varningar:

Applicera inte för hårt
Se till att huden rengörs före applicering
Använd inte tejen om förpackningen är skadad eller har påverkats av fukt och mögel. Innehåll eller närvaro av naturgummi latex
Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.
Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

Profcare Plaster består av:

- Tyg: 100 % rayon, vikt 140-150 g/m²
- Dyna: Viskos + PE-film
- Klister: Akrylsyralim 60-70 g/m²
Material: 70 % tyg, 30 % klister

NO

Profcare Plaster - Style no: 720053

Bruksområde:

PROFCARE Plaster skal dekke skader og sår. For å beskytte såret og skorpen mot forurensning og friksjon og bidra til helingsprosessen. Kun til bruk på huden. For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

Bruksanvisning:

Huden skal rengjøres før bruk. Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer, bytt bandasje hvis nødvendig.

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk tapen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene. Kontraindikasjoner: Bruk av produktet er kontraindisert når:
- påføringsteden er hevet
- unngå å hefte direkte på såret
- brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer, skift plaster om nødvendig
Huden skal rengjøres før bruk.
- brukeren har kjent allergi mot gummi

Advarsel:

Påføres ikke for stramt
Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring
Ikke bruk tapen hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.
Innhold eller forekomst av naturgummi latex
Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon.
Må ikke oppbevares over 25 °C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys.

Profcare Plaster består av:

- Stoffmateriale: 100 % rayon, vekt 140-150 g/m²
- Pute: Viskose + PE-film
- Lim: Akrylsyrelim 60-70 g/m²
Komponent: 70 % stoff, 30 % lim

FIN

Profcare Plaster - Style no: 720053

Käyttötarkoitus:

PROFCARE-laastari on tarkoitettu vammojen ja haavojen peittämiseen. Suojaa haavaa ja harsoa kontaminaatioilta ja kitkalta, mikä edistää paranemisprosessia. Käytä vain iholla. Kertakäyttöinen ei-steriili teippi lyhytkestoiseen käyttöön.

Käyttöohje:

Puhdista iho ennen käyttöä. Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia. Vaihda laastari tarpeen mukaan.

Varoitukset ja kiellot:

Älä käytä teippiä, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin sen ainesosille. Kiellot: Tuotteen käyttöä ei suositella, jos
- iho on turvoksissa.
- Älä kiinnitä suoraan haavaan.
- Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia. Vaihda laastari tarpeen mukaan.
- Puhdista iho ennen käyttöä.
- Käyttäjän tiedetään olevan allerginen kumille

Varoitukset:

Älä vedä liian tiukalle. Puhdista iho ennen käyttöä
Älä käytä teippiä, jos pakkaus on vaurioitunut tai jos siinä on kosteutta ja hometta. Sisältää luonnonkumilateksia
Ota yhteyttä lääkäriin, jos tuote aiheuttaa reaktioita.
Älä säilytä yli 25 asteen lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Profcare-laastarin osat:

- kangas: 100 % rayon, paino 140-150 g/m²
- pehmuste: viskoosi + PE-kalvo
- liima: akryylihappoliima 60-70 g/m².
Osien suhde: 70 % kangasta, 30 % liimaa

FR

Profcare Plaster - Style no: 720053

Usage prévu :

N'appliquez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants. Contre-indications : L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :
- Le site d'application est gonflé
- Ne pas coller directement sur la plaie
- La durée d'utilisation ne doit pas dépasser 3-4 heures, changer le pansement si nécessaire
Le produit doit être nettoyé avant utilisation. Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Mode d'emploi :

La peau doit être nettoyée avant utilisation. Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants. Contre-indications : L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :
- Le site d'application est gonflé
- Ne pas coller directement sur la plaie
- La durée d'utilisation ne doit pas dépasser 3-4 heures, changer le pansement si nécessaire
La peau doit être nettoyée avant utilisation. L'utilisateur est allergique au caoutchouc

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré
Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application
Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure. Contient ou présence de latex de caoutchouc naturel
En cas de réaction, consultez votre médecin. Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil

Le pansement Profcare est composé de :

- Matériau du tissu : 100 % rayon, poids 140-150 g/m²
- Coussinet : Viskose + film PE
- Adhésif : Adhésif à l'acide acrylique 60-70 g/m²
Composants : 70 % tissu, 30 % adhésif

ES**Profcare Plaster - Style no: 720053****Uso previsto:**

El yeso PROF CARE Plaster está diseñado para cubrir lesiones y heridas. Proteger la herida y la costra de la contaminación y la fricción para facilitar el proceso de cicatrización. Uso exclusivo sobre la piel. Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

Instrucciones de uso:

La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda. El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas; en caso necesario, se puede cambiar la banda.

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes. Contraindicaciones: El uso del producto está contraindicado si: - hay hinchazón en el lugar de aplicación - no se pega directamente a la herida. - el tiempo de uso no debe exceder de 3-4 horas; en caso necesario, se puede cambiar la escayola -La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda. - tiene alergias conocidas al caucho

Advertencias:

No apretar excesivamente. Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda. No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho. Contiene o hay presencia de látex de caucho natural. Si experimenta alguna reacción, acuda al médico. No almacenar por encima de 25 °C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

El yeso Profcare Plaster consta de:

- Material del tejido: 100 % rayón, peso 140-150 g/m²
 - Almohadilla: Viscosa + película de PE
 - Adhesivo: Adhesivo de ácido acrílico, 60-70 g/m²
- Componentes: 70% tejido, 30% adhesivo

IT**Profcare Plaster - Style no: 720053****Destinazione d'uso:**

Il cerotto PROF CARE Plaster è indicato per la copertura di lesioni e ferite. Proteggere la ferita e la crosta dalla contaminazione e dall'attrito e favorire il processo di guarigione. È destinata solamente all'uso sulla pelle. È un dispositivo non sterile monouso, destinato all'uso a breve termine.

Istruzioni per l'uso:

La pelle deve essere pulita prima dell'applicazione. La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore, cambiare il cerotto se necessario.

Avvertenze e controindicazioni:

Non utilizzare il nastro se si soffre di allergie o se si è sensibili ad alcuni degli ingredienti. Controindicazioni: Il prodotto non è indicato per l'uso se: - il sito di applicazione presenta gonfiore; - il cerotto non aderisce direttamente alla ferita - la durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore, sostituire il cerotto se necessario - la pelle deve essere pulita prima dell'applicazione. - l'utente presenta allergie note alla gomma.

Avvertenze:

Non applicare in maniera troppo stretta. Verificare che la pelle sia pulita prima dell'applicazione. Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o se sono presenti umidità e muffa. Contiene o presenta lattice di gomma naturale. Consultare un medico se si dovessero manifestare reazioni o allergie. Non conservare a temperature superiori ai 25 gradi Celsius. Conservare nella confezione originale, al riparo dalla luce del sole.

Il cerotto Profcare Plaster è composto da:

- Tessuto: 100% Rayon, peso 140-150 g/m²
 - Imbottitura: Viscosa + Film in PE
 - Colla: Adesivo in acido acrilico 60-70 g/m²
- Componenti: 70% tessuto, 30% adesivo

PT**Profcare Plaster - Style no: 720053****Utilização a que se Destina:**

O Penso PROF CARE destina-se a ser utilizado para cobrir lesões e feridas. Proteger a ferida e a crosta de contaminação e fricção para ajudar no processo de cicatrização. Destina-se a ser usada apenas na pele. Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

Instruções de utilização:

A pele tem de ser limpa antes da utilização. A utilização não deve exceder 3 a 4 horas, mude o penso se for necessário.

Advertências e contraindicações:

Não utilize a fita se tiver alergias ou sensibilidade a alguns dos ingredientes. Contraindicações: A utilização do produto é contraindicada quando: - existe inchaço no local da aplicação - não aplique diretamente na ferida - a duração da utilização não deve exceder 3 a 4 horas; substitua o penso, se necessário - A pele tem de ser limpa antes da utilização. - tem alergias conhecidas à borracha

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada. Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação. Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e calor. Contém ou está presente borracha de látex natural. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação. Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz.

O Penso Profcare é composto por:

- Material do tecido: 100% Rayon, peso 140-150 g/m²
 - Almofada: Viscose + película PE
 - Cola: Adesivo de ácido acrílico 60-70 g/m²
- Componente: 70% tecido, 30% adesivo

PL**Profcare Plaster - Style no: 720053****Przeznaczenie:**

Plaster PROF CARE jest przeznaczony do opatrzywania skaleczeń i ran. Aby chronić ranę i otarcia przed zanieczyszczeniem i tarciem, wspomagając proces gojenia. Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórze. Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Instrukcja użytkowania:

Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy. Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin, w razie potrzeby zmień plaster.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki. Przeciwwskazania: Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach: - opuchnięcie w miejscu zastosowania - nie przyklejać bezpośrednio na ranę - czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin, w razie potrzeby zmień plaster - skórę należy oczyścić przed użyciem - alergią na gumę

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno. Przed zastosowaniem upewnij się, że skóra jest oczyszczona. Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń. Zawartość lub obecność naturalnego lateksu kauczukowego. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Plaster Profcare składa się z:

- Tkanina: 100% sztuczny jedwab, waga 140-150 g/m²
 - Wkładka: Wiskoza + folia PE
 - Klej: Klej akrylowy kwasowy 60-70 g/m²
- Kompozycja: 70% tkaniny, 30% kleju

RU**Profcare Plaster - Style no: 720053****Назначение:**

Пластырь PROF CARE предназначен для закрывания повреждений и ран. Для защиты раны и струппев от загрязнения и трения, что способствует процессу заживления. Предназначается для применения только на коже. Предназначается для одноразового, кратковременного применения и является нестерильным средством.

Инструкция по применению:

Кожу следует очистить перед применением. Длительность применения не должна превышать 3–4 часа, затем при необходимости смените пластырь.

Предупреждения и противопоказания:

Не используйте изделие, если у вас аллергия или имеется чувствительность к отдельным компонентам. Противопоказания: Противопоказания к использованию изделия: - имеется отек в месте применения - не накладывайте изделие непосредственно на рану - длительность применения не должна превышать 3–4 часа, затем при необходимости смените пластырь - кожу следует очистить перед применением. - имеется подтвержденная аллергия на каучуковый латекс

Предупреждения:

Не накладывайте слишком туго. Убедитесь, что кожа очищена перед применением. Не используйте изделие, если упаковка повреждена либо подверглась воздействию влаги или плесени. Содержится или присутствует натуральный каучуковый латекс. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг, если наблюдается какая-либо реакция. Не храните при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Храните в оригинальной упаковке для защиты от солнечного света.

В состав пластыря Profcare Plaster входят:

- Тканевый материал: 100 % вискоза, вес 140–150 г/м²
 - Прокладка: Вискоза + ПЭ пленка
 - Клей: Адгезив на основе акриловой кислоты 60–70 г/м²
- Компонент: 70 % ткань, 30 % клейкое вещество

SELECT
PROFCARE 