

QUICK USE GUIDE

HOW TO INSTALL

1. Slide the silicone cushion over the breast shield body, wrapping around the edge of the breast shield body, and then make sure both fit snugly.
2. Insert the diaphragm cup into the round hole at the upper end of the three-way vacuum cleaner, make sure that the edge of the diaphragm cup's groove covers the edge of the round hole of the three-way vacuum cleaner, and both are tightly fitted, then put the diaphragm cap and tighten it.
3. Put the duckbill valve into the bottom outlet of the breast shield body to ensure that the installation is in place without air leakage.
4. Screw in the breast shield body assembly into the wide-mouth baby bottle.
5. Install one or bilateral silicone cushion as required, and insert the tubing connector of the tubing into the diaphragm cap and the relative position of the host respectively to ensure the installation in place without air leakage. (Remove the dust cover when using the product, and put the dust cover back for better storage.)

PREPARATION BEFORE USE

1. Charge fully before using the product for the first time.
2. Before each use, all parts in direct contact with breast milk should be cleaned and sterilized in advance: wide-mouth baby bottle, silicone cushion, breast shield body, duckbill valve and baby bottle lid. And make sure that each component is clean without water droplet, the breast shield body connects with the host tightly.
3. Before milk suction, please use a wet hot towel to clean, apply hot compress and massage the breast and areola, and relax the body to relieve swelling and milk pain.
4. During milk suction, relax, sit in a comfortable place, and lean forward slightly (use a pillow to support your back).
5. In the process of milk suction, if it is difficult to pump milk, it is recommended to relax the body and try again. If you feel unwell, stop using and consult medical staff immediately.
6. It is recommended that a single use is for no more than 30 minutes.

KEY DESCRIPTION

Mode key: short press to switch modes between lactation, pumping, deep suction, lying suction.

Lactation mode: massage the breast, faster to stimulate the milk reflex. Adjustable suction intensity / frequency.

Pumping mode: imitate the pace and volume of the baby sucking, better milk discharge. Adjustable suction intensity / frequency.

Deep suction mode: increase the duration of suction, better discharge of the after-milk. Adjusts the suction intensity.

Lying suction mode: need to match with lying suction accessories for realizing lying suction. Adjusts the suction intensity.

Custom mode key: long press to start the operator program memory recording, custom mode icon goes into flashing. After the operation, long press the button again to finish recording, custom mode icon goes off.


After recording, short press the custom mode key to begin suction with the last recorded operation program, and the custom mode icon is steady on.

QUICK USE GUIDE


HOW TO USE

1. Long press the power key to turn on power. After boot, the default setting is bilateral function, lactation gear 1, frequency gear 3. 30 minutes countdown begins.
2. Select the corresponding functions (left, right, bilateral) and mode (lactation, pumping, deep suction, lying suction). Adjust the suction intensity / frequency.
3. After milk suction, long press the on / off button to shut down.


1

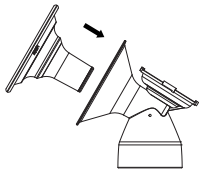


2

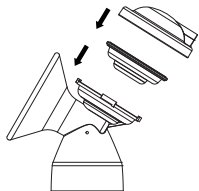


3

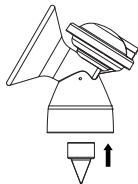

4

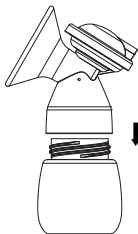


5

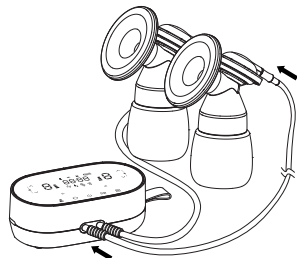

Note: Please double check that all the parts are properly assembled before using.

FLANGE FOR DOUBLE ELECTRIC BREAST PUMP QUICK USE GUIDE

COMPONENT DESCRIPTION

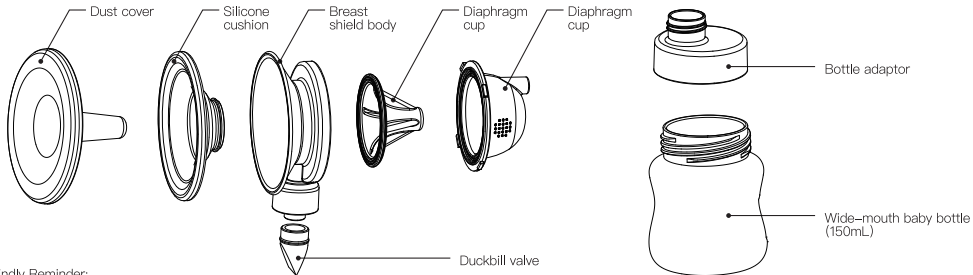


Kindly Reminder:

1. Before first use and after each use, disassemble and hand wash all parts of the pump set that have come into contact with the breast and breast milk. It can be sterilized by steam, ultraviolet light, or by boiling for 2–3 minutes. Sufficient water should be filled during boiling and sterilization to prevent the parts from contacting the bottom and wall of the pot.
2. Wash your hands thoroughly before handling the pump.

HELPFUL ADVICE


1. When pumping, please press the breast shield body tightly, and do not touch the bottle, so as to avoid the movement of the bottle, which may cause the breast shield body not to fit tightly to the breast;
2. Don't lie on your one side when lying down, keep 45° supine, and the supine position should not be lower than 45°;
3. Put a tissue under the breast before you take the breast shield body away, and you can wipe your breast with the tissue to prevent the breast milk from flowing down.

HOW TO USE

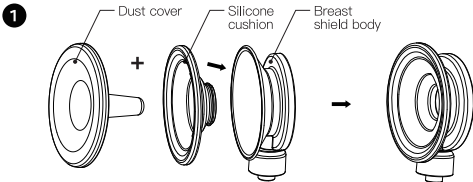


Push the dust cover onto the silicone cushion, and push the silicone cushion onto the breast shield body as far as it will go.

Dust cover, Silicone cushion, Breast shield body.

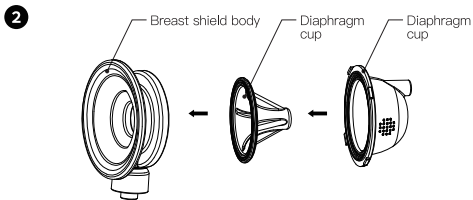

Push the diaphragm cup down into breast shield body as far as it will go and push diaphragm cap over the top as far as it will go.

Breast shield body with silicone cushion, Diaphragm cup, Diaphragm cap.

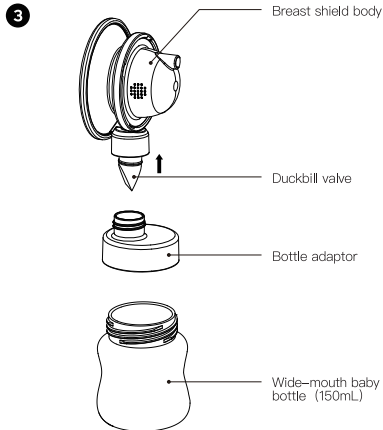

Push the duckbill valve onto the bottom of breast shield body, and push the bottle adaptor onto the duckbill valve as far as it will go.

Then screw the wide-mouth bottle onto the bottle adaptor.

Breast shield body with other parts, Duckbill valve, Bottle adaptor, Wide-mouth bottle.

KURZANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schieben Sie das Silikonkissen über den 3-Wege-Sauger, wickeln Sie es um den Rand des 3-Wege-Sauger und stellen Sie dann sicher, dass beide eng anliegen.
2. Setzen Sie den Membran becher in das runde Loch am oberen Ende des 3-Wege-Sauger ein, stellen Sie sicher, dass die Kante der Nut des Membrantopfs den Rand des runden Lochs des 3-Wege-Sauger bedeckt, und beide passen dann fest Membrankappe aufsetzen und festziehen.
3. Legen Sie das Entschnabelventil in den Milchauslass am Boden des 3-Wege-Sauger, um sicherzustellen, dass die Installation nicht austritt.
4. Schrauben Sie die 3-Wege-Sauger-Komponente in die Weitmundflasche.
5. Installieren Sie nach Bedarf ein oder zweiseitiges Silikonkissen und stecken Sie den Rohrverbinder des Rohrs in die Membrankappe und die relative Position der Pumpeneinheit, um sicherzustellen, dass die Installation an Ort und Stelle ohne Luftleckage erfolgt. (Entfernen Sie die Staubschutzhülle, wenn Sie das Produkt verwenden, und bringen Sie die Staubschutzhülle zur besseren Aufbewahrung wieder an.)

VORBEREITUNG VOR DER ANWENDUNG

1. Laden Sie den Rechner vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Vor jedem Gebrauch sollten die Teile, die in direktem Kontakt mit der Muttermilch stehen, vorgereinigt und desinfiziert werden: weitmundflasche, saugmaske, 3-Wege-Sauger, entschnabelventil, flaschenabdeckung. Und stellen Sie sicher, dass jede Komponente ohne Wassertropfen sauber ist, der 3-Wege-Sauger verbindet sich fest mit dem Host.
3. Vor dem Absaugen der Milch, verwenden Sie ein feuchtes und heißes Handtuch, heiße Kompresse und massieren Sie Ihre Brüste und Warzenhöfe, um Ihren Körper zu entspannen, um die Schmerzen der Schwellung zu lindern.
4. Der Körper entspannt sich beim Absaugen und sitzt in einem bequemen Platz, wobei der Körper leicht nach vorne gelehnt ist (Rückenkissen können verwendet werden, um den Rücken zu stützen).
5. Wenn Sie während des Milchsaugens Schwierigkeiten beim Milchsaugen haben, wird empfohlen, den Körper zu entspannen und wieder zu saugen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie sofort einen Arzt.
6. Es wird empfohlen, nicht länger als 30 Minuten für eine einzelne Anwendung.

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN

Modustaste: Kurze Tastenzyklen schalten zwischen Prolaktin-, Milchsaug-, Tiefensaug- und Liegesaugmodi um.

Prolaktinmodus: Massieren Sie die Brust und erreichen Sie schneller die Milchgruppe. Saugkraft/Frequenzintensität einstellbar.

Milchsaugmodus: Imitieren Sie die Geschwindigkeit des Saugens des Babys und die Größe der Milchaufnahme des Babys, um die Milch besser abzulassen. Saugkraft/Frequenzintensität einstellbar.

Tiefensaugmodus: Erhöhen Sie die Saugdauer und lassen Sie die Milch besser nach. Die Saugkraft ist einstellbar.

Liegender Saugmodus: Es ist notwendig, mit Liege- und Saugzubehör kombiniert zu werden, um Liegen und Saugen Die Saugkraft ist einstellbar.

Benutzerdefinierte Modustaste: Die lange Taste startet die Programmspeicheraufzeichnung und das benutzerdefinierte Modussymbol blinkt. Nachdem die Operation abgeschlossen ist, beenden Sie die lange Taste erneut

Für die Aufnahme wird das benutzerdefinierte Modus-Symbol gelöscht.


Nachdem die Aufnahme abgeschlossen ist, verwendet die kurze Taste das zuletzt aufgezeichnete Bedienprogramm, um Milch zu saugen, und das benutzerdefinierte Modussymbol ist oft hell.

KURZANLEITUNG ZUR VERWENDUNG


GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Lange Drücke auf die Stromversorgung, um den Schlüssel einzuschalten. Nach dem Einschalten ist die Standardfunktion bilateral, Prolaktin 1. Gang, Frequenz 3. Gang. Der 30-minütige positive Timing beginnt zu steigen.
2. Wählen Sie je nach Bedarf die entsprechende Funktion (links, rechts, beidseitig), den Modus (Prolaktin, Milchsaugen, Tiefensaugen, Liegensaugen) und stellen Sie die Saugkraft/Frequenzintensität ein.
3. Nachdem die Milchabsaugung abgeschlossen ist, drücken Sie die Stromversorgung, um den Schlüssel auszuschalten.


1

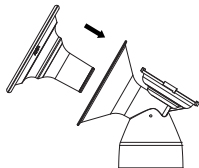


3

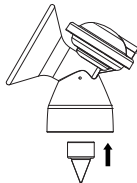


2

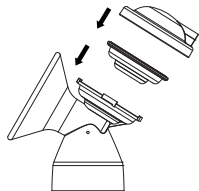

4

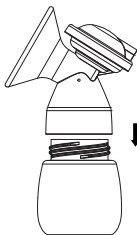

5

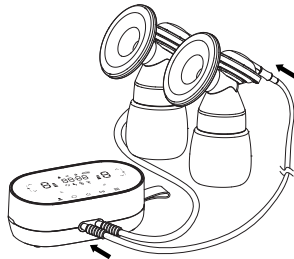


Anmerkung: Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile richtig zusammengebaut sind.

FLANSCH FÜR DOPPELTE ELEKTRISCHE MILCHPUMPE

KURZANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

KOMPONENTENBESCHREIBUNG

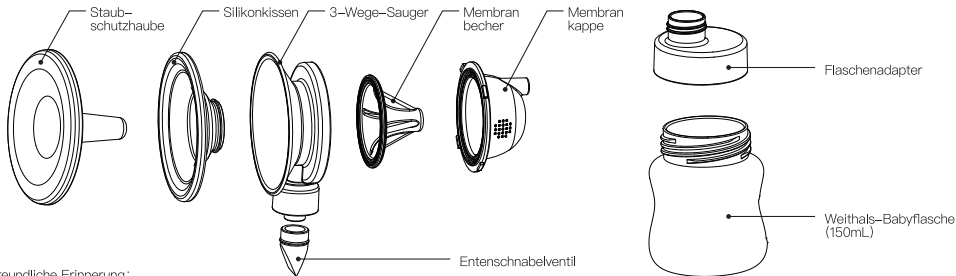


Freundliche Erinnerung:

1. Demontieren Sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch alle Teile des Pumpsets, die mit Muttermilch und Muttermilch in Berührung gekommen sind, und waschen Sie sie von Hand. Es kann durch Dampf, UV-Licht oder durch Kochen für 2–3 Minuten sterilisiert werden. Während des Kochens und Sterilisierens sollte ausreichend Wasser eingefüllt werden, um zu verhindern, dass die Teile den Boden und die Wand des Topfes berühren.
2. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie die Pumpe anfassen.

HILFREICHER RAT


1. Drücken Sie beim Abpumpen bitte fest auf den 3-Wege-Sauger und berühren Sie die Flasche nicht, um eine Bewegung der Flasche zu vermeiden, die dazu führen kann, dass der Brusthaubenkörper nicht fest an der Brust anliegt.
2. Legen Sie sich im Liegen nicht auf eine Seite, halten Sie 45° Rückenlage, und die Rückenlage sollte nicht niedriger als 45° sein;
3. Legen Sie ein Taschentuch unter die Brust, bevor Sie den Brusthaubenkörper abnehmen, und Sie können Ihre Brust mit dem Taschentuch abwischen, um zu verhindern, dass die Muttermilch nach unten fließt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

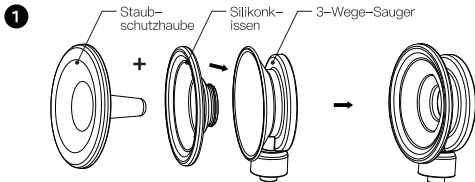


Bedecken Sie das Silikonkissen mit dem Staubschutzhaube und legen Sie dann die Silikonkisseneinheit in das 3-Wege-Sauger.

Staubschutzhaube, Silikonkissen, 3-Wege-Sauger.

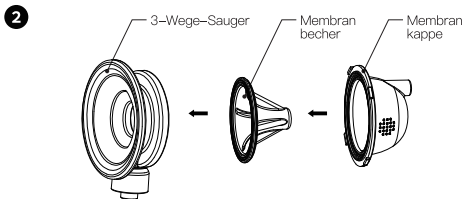

Stecken Sie am anderen Ende den Membranbecher in den 3-Wege-Sauger und ziehen Sie die Membrankappe fest.

3-Wege-Sauger und Silikonkissen, Membran becher Membran kappe.

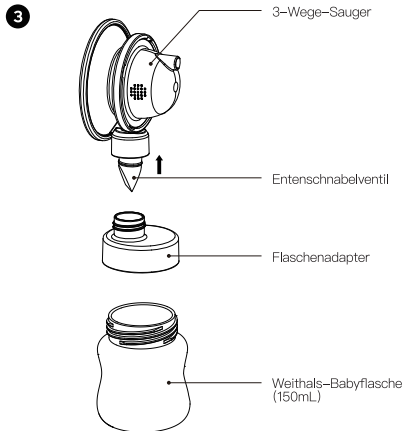

Setzen Sie das Entenschnabelventil in den 3-Wege-Sauger ein und installieren Sie den Flaschenadapter. Schrauben Sie schließlich die 3-Wege-Sauger in die Weithalsflasche.

3-Wege-Sauger und andere Teile, Entenschnabelventil, Flaschenadapter, Weithals-Babyflasche.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Faites glisser le coussin en silicone sur l'aspirateur à trois voies, en l'enroulant autour du bord de l'aspirateur à trois voies, puis assurez-vous que les deux sont bien ajustés.
2. Insérez la coupelle du diaphragme dans le trou rond à l'extrémité supérieure de l'aspirateur à trois voies, assurez-vous que le bord de la rainure de la coupelle du diaphragme couvre le bord du trou rond de l'aspirateur à trois voies, et les deux sont bien ajustés, puis placez le capuchon du diaphragme et serrez-le.
3. La valve à bec de canard dans le fond de la sortie de lait de l'aspirateur à trois voies, pour assurer que l'installation est en place sans fuite d'air.
4. Vissez l'ensemble d'aspirateur à trois voies dans le biberon à large ouverture.
5. Selon le besoin d'installer unilatéral/bilatéral, respectivement, le connecteur droit du tuyau dans le capuchon de diaphragme et le trou relatif du moteur principal, pour assurer que l'installation est en place sans fuite d'air. (Retirez le housse de protection lors de l'utilisation du produit et remettez le housse de protection pour un meilleur stockage.)

PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

1. Avant la première utilisation, chargez complètement le moteur principal s'il vous plaît.
2. Avant chaque utilisation, les composants en contact direct avec le lait maternel doivent être nettoyés et désinfectés à l'avance: biberon à large bouche, ventouse, aspirateurs à trois voies, valves à bec de canard, bouchons de biberon. Et assurez-vous que chaque composant est propre sans goutte d'eau, l'aspirateur en T se connecte étroitement à le moteur principal.
3. Avant la succion du lait, veuillez nettoyer avec une serviette chaude et humide, appliquer des compresses chaudes et masser les seins et l'aréole pour détendre le corps afin de soulager la douleur du gonflement du lait.
4. Lorsque vous tirez le lait, détendez-vous, asseyez-vous dans un endroit confortable et penchez-vous légèrement en avant (un oreiller peut être utilisé pour soutenir le dos).
5. Pendant le processus de succion, si vous avez des difficultés, il est recommandé de vous détendre avant la succion du lait. Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez de l'utiliser et consultez immédiatement un professionnel de la santé.
6. Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 30 minutes dans une seule utilisation.

DESCRIPTION DES TOUCHES DE FONCTION

Touches de mode : boutons courts pour commuter les modes de prolactine, d'aspiration, d'aspiration profonde et d'aspiration couchée.

Mode prolactine : masser les seins pour atteindre la matrice de lait plus rapidement. Aspiration/intensité de fréquence réglable.

Mode de succion : imite la vitesse du rythme de succion du bébé et la taille de la quantité de lait du bébé pour une meilleure évacuation du lait. Aspiration/intensité de fréquence réglable.

Mode d'aspiration profonde : Augmentez la durée de succion pour une meilleure évacuation du lait postérieur. Force d'aspiration réglable.

Mode d'aspiration couchée : besoin d'accessoires d'aspiration couchés, vous pouvez réaliser l'aspiration couchée. Force d'aspiration réglable.

Touches de mode personnalisé : les touches longues démarrent l'enregistrement de la mémoire du programme d'opération et l'icône de mode personnalisé clignote. Une fois l'opération terminée, le bouton long est à nouveau éteint.

Pour l'enregistrement, l'icône du mode personnalisé s'éteint.


Une fois l'enregistrement terminé, le bouton court utilise le dernier programme d'opération enregistré pour le travail d'aspiration du lait, et l'icône du mode personnalisé est toujours allumée.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE


CONDITIONS D'UTILISATION

1. Appuyez longuement sur la clé d'alimentation pour démarrer. Après la mise sous tension, la fonction bilatérale par défaut, prolactine 1ère vitesse, fréquence 3ème vitesse. Le timing positif de 30 minutes commence à augmenter.
2. Selon la demande, sélectionnez la fonction correspondante (gauche, droite, bilatéral), le mode (prolactine, aspiration, aspiration profonde, aspiration couchée) et ajustez l'intensité d'aspiration/fréquence.
3. Une fois le lait aspiré terminé, appuyez longuement sur la clé d'alimentation pour éteindre.


1

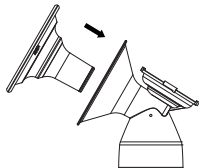


2

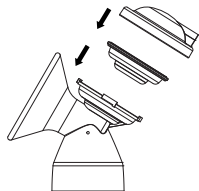


3

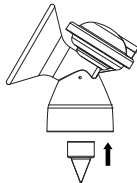

4

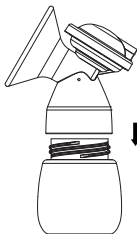

5

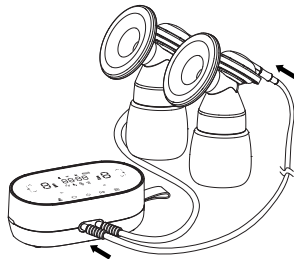


Remarque : veuillez vérifier que toutes les pièces sont correctement assemblées avant l'utilisation.

BRIDE POUR TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE DOUBLE

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

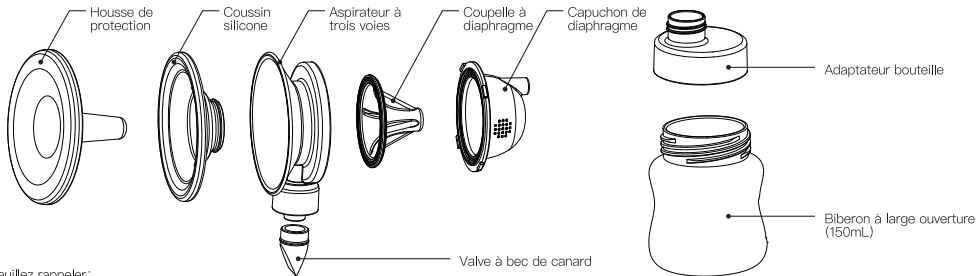


Veillez rappeler:

1. Avant la première utilisation et après chaque utilisation, démontez et lavez à la main toutes les pièces du tire-lait qui sont entrées en contact avec le sein et le lait maternel. Il peut être stérilisé à la vapeur, à la lumière ultraviolette ou en le faisant bouillir pendant 2 à 3 minutes. Une quantité suffisante d'eau doit être remplie pendant l'ébullition et la stérilisation pour éviter que les pièces n'entrent en contact avec le fond et la paroi du pot.
2. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler la pompe.

CONSEILS UTILES


1. Lors du pompage, veuillez appuyer fermement l'aspirateur à trois voies et ne pas toucher le biberon, afin d'éviter le mouvement du biberon qui pourrait provoquer l'inadaptation entre la housse de protection et le sein.
2. Ne vous allongez pas sur le côté pendant la mode d'aspiration couchée. Gardez une position optimale couchée 45 degrés et cette position ne doit pas être inférieure à 45 degrés.
3. Placez un mouchoir sous votre sein avant de retirer l'aspirateur à trois voies. Vous pouvez essayer votre sein avec le mouchoir pour éviter le lait qui coule.

HOW TO USE

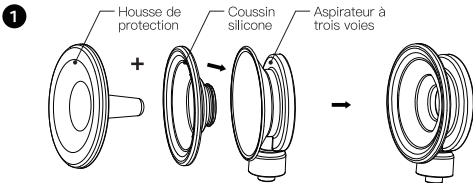


Couvrez le coussin silicone de la housse de protection et puis placez l'assemblage du coussin silicone dans l'aspirateur à trois voies.

Housse de protection, Coussin silicone, Aspirateur à trois voies.

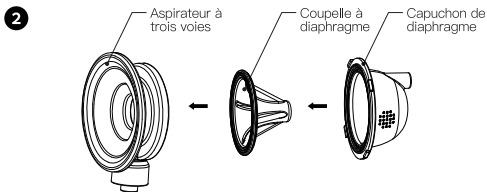

De l'autre bout, branchez la coupelle à diaphragme sur l'aspirateur à trois voies et serrez le capuchon de diaphragme.

Aspirateur à trois voies et coussin silicone, Coupelle à diaphragme, Capuchon de diaphragme.

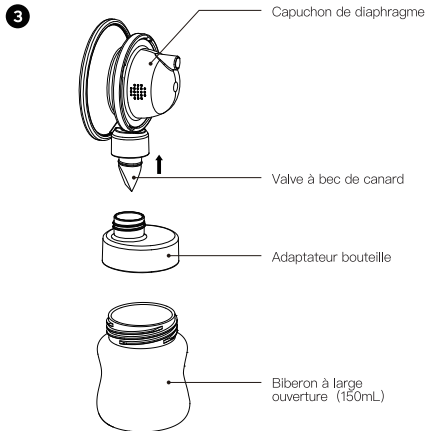

Placez la valve à bec de canard dans l'aspirateur à trois voies et installez l'adaptateur de bouteille, enfin vissez l'ensemble d'aspirateur à trois voies dans le biberon à large ouverture.

Aspirateur à trois voies et autres parties, Valve à bec de canard, Adaptateur bouteille, Biberon à large ouverture.