

hegen

珍爱每一滴 · 珍惜每一刻



Hegen 婴韵舒悦吸奶器
使用说明书

产品介绍

感谢您购买Hegen婴韵舒悦吸奶器。Hegen愿与您共同开启舒悦母乳喂养之旅，让您能够享受由Hegen带来的“宝宝般吮吸，老公般呵护”的美好体验。

Hegen婴韵舒悦吸奶器，36档吸乳力度组合，搭配升级版流线型的亲吮式吸乳护罩，采用柔韧硅胶材质，吸乳舒适，更有助于提升吸乳效率、保持乳腺通畅，给予妈妈如同亲喂宝宝的自然舒适吸乳体验。

Hegen“吸奶、储存、喂养”一体化多功能哺育方案，为母乳妈妈提供舒适、省心的母乳喂养体验，不浪费每一滴珍贵的母乳，减少因母乳转移造成的污染、浪费、氧化，从而给宝宝更好的营养，并且实现妈妈延长母乳喂养的愿望。附加手动吸奶器按压手柄，及舒悦揉捏按摩仪配件，可从电动吸奶器快捷切换至手动吸奶器及按摩仪器。多种功能，多种使用方式，可适用于更多的使用场景，提供更适合您的吸乳模式：

1. 36种组合的“亲喂”吮吸模式
2. 升级版亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)
3. 快捷切换成手动吸奶器 - 随叫随到“掌上通乳师”
4. M档促进自然健康的泌乳过程
5. 配件少，夜光LCD显示，静音吸乳
6. 革新性的婴韵舒悦吸乳器，内含舒悦揉捏按摩仪
7. 屡获殊荣的“吸奶、储存、喂养”一体化多功能哺育方案
8. PCTO“一按即关，一扭即开”的革新开关技术，组装便捷

请关注Hegen微信公众号，了解更多Hegen产品信息、使用教程、及官方购买渠道信息。

目录

1. 重要安全提示
2. 适用人群
3. 何时吸奶
4. 配件详情
5. 清洁
6. 消毒
7. 组装
8. 充电
9. 吸乳选择
10. 舒悦揉捏按摩仪
11. 储存母乳
12. 加热母乳
13. 给宝宝喂奶
14. 故障排除
15. 配件和替换部件
16. 保修期限
17. 技术规范
18. 使用环境
19. 丢弃
20. 其他语言

1. 重要安全提示

请在使用前仔细阅读以下说明并妥善保管以便后续查阅

警告：

- 本产品仅供一名用户反复使用，不得在多名用户之间共用，因为这样可能会带来健康风险或影响产品的性能。
- 怀孕期间禁止使用吸奶器吸奶功能，禁止在乳房区域使用按摩功能，避免因刺激乳头可能引起的宫缩而流产、早产现象。
- 禁止在开车时使用。
- **电动吸奶器主机**、其他电子部件、**手动吸奶器按压手柄(SoftSquard™)**和**硅胶管**无需高温消毒。首次使用前，所有部件（除上述无需高温消毒部件以外）都要彻底清洗消毒。请使用100°C沸水消毒，需在水煮沸后关火，然后将部件放入热水中浸泡5分钟。
- 如持续吸奶5分钟后仍未分泌乳汁，请停止吸奶。如果吸奶器产生的压力让您感到不适或疼痛，请用手指插入乳房和**亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)**之间，解除真空负压状态，然后从乳房上取下**亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)**和**泵体(SoftSquard™)**。
- 如产品无法正常运行，请勿使用。
- 请勿在高温环境下存放产品，避免阳光直射。
- 请勿将产品部件直接放置在有消毒液残留的物品上，避免因消毒液具有腐蚀性而导致吸奶器部件损坏的情况发生。
- 本设备不适合生理功能、感官或智力能力不足或有认知障碍的人员使用，除非由负责此类人员安全的人员予以监督或指导。
- 本产品并非玩具，请置于儿童不可触及之处，避免儿童玩耍。
- 为保障使用安全，延长主机电池使用寿命，建议使用Hegen电动吸奶器原装**电源适配器**充电。

- 不要将已接通电源的**电动吸奶器主机**处于无人看管的状态。
- 充电完成后请立即拔下电源插头，切勿过夜充电。
- 吸奶器设备和所有其他电子部件必须处于干燥状态。
- 请勿用水浸泡或冲洗**电动吸奶器主机**、其他电子部件和**硅胶管**。
- 请勿自行修理或改装**Hegen**婴韵舒悦吸奶器。
- 请使用原装**电源适配器**充电。

重要说明：

- 塑料部件及**母乳储存瓶**经冷冻后容易变脆，如不慎掉落可能会摔碎。
- 如操作不当（如掉落、碰撞、划擦），**泵体(SoftSquound™)**和**储奶瓶**可能会受损。
- 请小心拿放本产品的各个部件。
- 如**泵体(SoftSquound™)**或**母乳储存瓶**受损，请勿继续使用。
- 当环境温度在5°C以下或40°C以上时，请勿使用**电动吸奶器主机**或对其充电。

2. 适用人群

- 产后母乳妈妈可使用电动单边/电动双边吸乳功能，吸出并储存和喂养母乳。
- 舒悦揉捏按摩仪舒缓按摩全身肌肉（孕期妈妈不可按摩乳房及乳房周围的身体部位），全家可用。


3. 何时吸奶

- 产后母乳妈妈使用舒悦揉捏按摩仪，在吸奶前、吸奶中、吸奶后按摩乳房，舒悦身心，舒悦的感受能够刺激泌乳素和催产素的分泌，有助于刺激喷乳反射和乳腺通畅，降低乳腺堵塞或增生形成的风险。
- 产后初期生理性涨乳及周期性乳房肿胀、乳汁淤积等需通乳时，建议使用Hegen手动吸奶器。降低妈妈因涨乳而导致的乳房疼痛、乳腺炎、乳汁减少、宝宝吸不出来，导致乳头皴裂，宝宝开始抗拒的风险。
- 日常母乳过程中，妈妈可使用电动吸奶器或者亲喂搭配，来进行规律的吸乳，建立稳定的泌乳量。

*如有特殊生理情况，请咨询医生或专业母乳喂养顾问。


4. 配件详情

婴童舒悦吸乳器功能组件

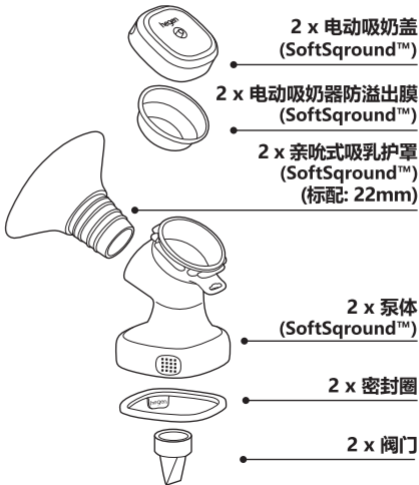


配件详情

婴童舒悦吸乳器功能组件

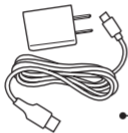

2 x 硅胶管

1 x 电源适配器

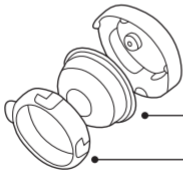

1 x 按摩仪专用真空吸力盖

1 x 电动吸奶器防溢出膜
(SoftSquround™)

1 x 舒悦揉捏按摩环

配件详情



2 x 母乳储存盖




2 x 密封圈



2 x PPSU母乳储存瓶身

手动吸奶器
功能组件

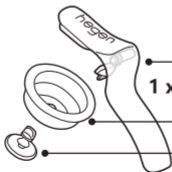

1 x 按压手柄
(SoftSground™)

1 x 手动吸奶器防溢出膜
(SoftSground™)


1 x 连接器

配件详情

部件	材料	耐热性
电动吸奶盖(SoftSquound™)/ 按摩仪专用真空吸力盖 / 泵体(SoftSquound™)/ 舒悦揉捏按摩环 / 按压手柄(SoftSquound™) / 连接器 / 母乳储存盖	聚丙烯 (PP)	-20°C 至 110°C
亲吮式吸乳护罩(SoftSquound™) / 电动吸奶器防溢出膜(SoftSquound™) / 密封圈 / 阀门 / 硅胶管 / 手动吸奶器防溢出膜(SoftSquound™)	硅胶	
母乳储存瓶身	PPSU	-20°C 至 180°C

配件详情

吸奶器主机

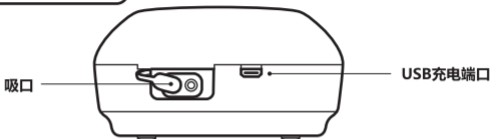

显示图标

- 计时器
- M档刺激奶阵模式
- 电池状态
- 吸奶韵律
- 低频率 中频率 高频率
- 吸力级别 [1-12]

控制按钮

- 增加吸力级别
- 降低吸力级别
- 选择吸奶韵律
- 开/关 [长按]
- 打开背光 [按一次]
- 切换到按摩模式 [按两次]



5. 清洁

- 第1步: 首次使用前及每次使用后, 请务必将吸奶器所有部件拆开 (**电动吸奶器主机、硅胶管**, 及其他所有电子部件除外), 使用奶瓶清洗剂清洗, 并在清水中冲洗干净。拆卸和清洗**阀门、亲吮式吸乳护罩 (SoftSground™)**时请格外小心, 切勿丢失或损坏。
- 第2步: 拆卸**阀门**时, 请轻轻地拉动取下, 将**阀门**置于温水中, 用手指配合奶瓶清洁剂轻柔地彻底清洁每处缝隙。请勿使用奶嘴刷、吸管刷或任何其他工具清洗**阀门**, 或是暴力清洁, 否则将可能导致**阀门**撕裂, 进而影响吸奶器吸力效果。当使用洗碗机清洗时 (仅可限于洗碗机上层), 请避免使用高温设置, 如“消毒清洁”或“高温清洁”, 否则可能导致产品配件变形损坏。
- 第3步: 可在**电动吸奶器主机**关机并且不在充电的状况下, 使用干净的湿布、湿巾或酒精棉片擦拭**电动吸奶器主机**。

6. 消毒

本产品配件（硅胶管、手动吸奶器按压手柄(SoftSquound™)、电动吸奶器主机和所有其他电子部件除外）适用于紫外线、蒸汽或沸水消毒。如果您选择用紫外线消毒器或电热蒸汽消毒器进行消毒，请仔细阅读消毒设备的操作指导。此外，应在消毒后从紫外线消毒器中取出所有配件，以免其过度接触紫外线。

沸水消毒：需在水煮沸后关火，然后将配件放入热水中，时间不超过5分钟。消毒前，应当将产品的所有配件拆开，避免各配件因材料不同而产生不同反应，进而导致变形。消毒前应当将所有残留油脂或者其他残留物彻底清洁，避免在配件上留下永久污渍。


温馨提示

请勿用水浸泡或冲洗**电动吸奶器主机**及其他所有电子部件。

7. 组装

注意:

- 每次组装前请务必检查配件是否有破损、裂缝或翘曲现象。一旦发现产品存在损坏或松动的迹象，请立即停止使用。
- 请务必正确组装，确保产品正常使用。
- 请在使用吸奶器前选择适合自己乳头尺寸的**亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)**，这是帮助舒悦吸乳的重要配件。
- **亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)**为易耗品，为保证更好的吸乳效果，请每三个月更换一次。

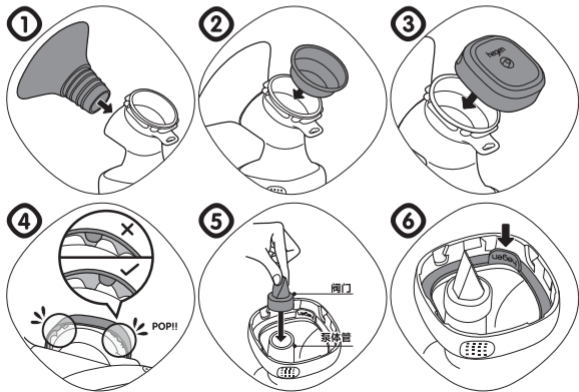

组装



第1步：将亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)完全插入泵体(SoftSquard™)中，确保两者紧密贴合。

第2步：将电动吸奶器防溢出膜(SoftSquard™)置入泵体(SoftSquard™)上，轻轻按压边缘确保两者完全贴合。

第3步：将电动吸奶盖(SoftSquard™)置于电动吸奶器防溢出膜(SoftSquard™)上方，“一按即关”安装到泵体(SoftSquard™)上。沿逆时针方向“一扭即开”。

第4步：请确保电动吸奶盖(SoftSquard™)的四个卡扣牢固地卡在泵体(SoftSquard™)上。

第5步：将阀门插入泵体(SoftSquard™)底部圆柱形接口，并顺着接口方向尽量往前推，使其贴合。

组装

第6步：确保泵体(SoftSquard™)开关处有可拆卸密封圈（密封圈上的Hegen标志朝外）。

第7步：将组装好的电动吸奶器组件，“一按即关”安装在Hegen母乳储存瓶上。按上卡扣后顺时针方向轻轻转动，确保开关拧紧；沿逆时针方向“一扭即开”。吸乳后，可搭配Hegen储存盖作为母乳储存瓶，或换上Hegen奶嘴作为奶瓶直接喂养。



第8步：单边吸乳时，用一根硅胶管连接电动吸奶盖(SoftSquard™)和电动吸奶器主机吸口。

第9步：单边吸乳时，请确保另一个电动吸奶器主机吸口用粉色密封盖堵住，保持封闭状态。

转换为手动吸奶器



组装

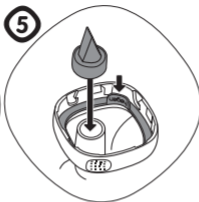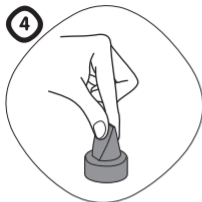

第1步：将粉色**连接器**安装在**手动吸奶器防溢出膜(SoftSquard™)**上。

第2步：将带有**连接器**的**手动吸奶器防溢出膜(SoftSquard™)**置于**泵体(SoftSquard™)**上，轻轻按压边缘确保两者完全贴合。

第3步：将**按压手柄(SoftSquard™)**上端U型槽与粉色**连接器**相连，并将**按压手柄(SoftSquard™)**粉色固定轴插入**泵体(SoftSquard™)**一字型开口中，听到咔嗒一声即组装完成。

第4步：将**阀门**插入**泵体(SoftSquard™)**底部圆柱形接口，并顺着接口方向尽量往前推，使其贴合。


第5步：确保**泵体(SoftSquard™)**开关处有可拆卸**密封圈**（**密封圈**上的Hegen标志朝外）。

第6步：将组装好的**手动吸奶器组件**，“一按即关”安装在**Hegen母乳储存瓶**上。按上卡扣后顺时针方向轻轻转动，确保开关拧紧；沿逆时针方向“一扭即开”。吸乳后，可搭配**Hegen储存盖**作为母乳储存瓶，或换上**Hegen奶嘴**作为奶瓶直接喂养。

8. 充电

Hegen电动吸奶器有三种灵活方便的充电方式：Micro USB电源适配器充电、Micro USB直冲、USB移动电源充电。

盒子中器件

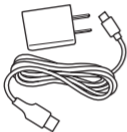

Micro USB交流电源适配器

5V Micro-B USB交流电源适配器

将适配器插入电源插座，然后将Micro-B USB插入吸奶器主机上的USB充电端口充电。

(大约充电时间：2.5小时)

安全指南


- 充电时，充电电流不要超过最大电流限制。确保充电电流不高于1.5A，否则可能会导致电池过热。
- 使用台式电脑或笔记本充电须知：请勿将吸奶器主机与其他USB连接的设备一起充电，请务必单独为吸奶器主机充电，避免台式电脑或笔记本电流波动对吸奶器主机电池造成损耗。
- 为避免吸奶过程中电量不足，请在使用前确保吸奶器主机已充电完成。
- 请勿将产品至于高温环境中，避免阳光直射。

充电

可替代充电方法

Micro USB线缆

吸奶器主机适配于大部分额定电压为5V的USB充电线（最大电流限制1.5A）。常见USB线充电时间：

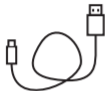

- USB 1.0 和 2.0 - 最大500毫安。（充电时间：4小时）
- USB 3.0 和 3.1 - 最大900毫安。（充电时间：2.5小时）
- USB电源适配器 -1A~1.5A 最大电流。（充电时间：2小时）

USB 移动电源


配合使用合适的USB连接线，大多数移动电源均可用于为吸奶器主机充电。移动电源适用于临时充电或备用电源，不建议用于过夜充电。



- 请勿在移动电源电量不足的情况下充电。
- 请勿在移动电源过热的情况下充电。

注：内置锂离子电池的充放电循环寿命约为 300 次，之后容量可能会降至 80% 以下。为了延长**吸奶器主机**的电池使用时间，建议妥善维护并定期充电。我们不建议将**吸奶器主机**一直使用至电量耗尽。反复耗尽电池电量可能会缩短电池寿命并降低其性能。请勿让电池整晚充电或在电池满电状态下连接至电源适配器，反复此类操作会缩短电池寿命。请将电池置于阴凉处。

9. 吸奶

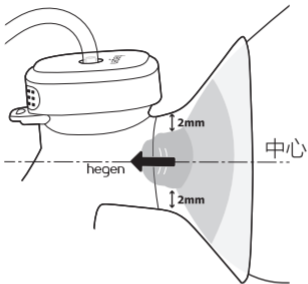

温馨提示






每次触摸乳房及泵体(SoftSquard™)部件前, 务必用清洗剂将双手彻底洗净。若无法吸奶、奶量极少或感觉疼痛, 请咨询您的医护专业人员或母乳喂养专家。如持续吸奶5分钟后仍未分泌乳汁, 请不要继续吸奶。如果吸奶器产生的压力让您感到不适或疼痛, 请用手指插入乳房和亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)之间, 解除密封状态, 然后从乳房上取下亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)及泵体(SoftSquard™)。

吸奶

温馨提示

适合的吸乳护罩，是进行有效吸乳的重要配件。如果吸乳护罩尺寸不合适，可能会影响吸乳效果，也可能导致吸乳时疼痛或损伤。吸乳过程和哺乳一样，不应该出现疼痛。如果您是孕妈妈，请在孕8-9个月时测量您的乳头尺寸，如果您是产后妈妈，请在首次使用Hegen吸奶器前测量您的乳头尺寸，并参照下方表格选择合适大小的**亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)**，享受舒适愉悦的吸乳体验。

注：Hegen婴韵舒悦吸奶器礼盒配有2个吸乳管径尺寸为22毫米的**亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)**，最大适用乳头直径尺寸为18毫米。其他尺寸的吸乳护罩为单独销售。

乳头直径	≤15mm	≤18mm	≤21mm	≤24mm	≤27mm
Hegen 亲吮式 吸乳护罩 管径尺寸 (ϕ 为直径)	 $\phi 19\text{mm}$	 $\phi 22\text{mm}$ (礼盒中标配)	 $\phi 25\text{mm}$	 $\phi 28\text{mm}$	 $\phi 31\text{mm}$

扫码激活注册

Hegen掌上母乳喂养中心
了解乳头测量指南，
领取专属福利，享受定制服务
开启舒悦母乳喂养之旅！



吸奶

婴韵舒悦吸奶器

提示

坐在舒适的椅子上，放松身体。可以使用靠垫支撑背部。请确保乳头对准亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)中心或更低位置，以免导致回流情况的发生。

第1步：将已装好的婴韵舒悦吸奶器组件中心对准乳头，压在乳房上，确保适当密封。

第2步：长按按钮 ，打开吸奶器主机。吸奶器就会进入按摩 **M** 模式，此模式将持续2分钟，以模拟喷乳反射并刺激母乳分泌。**M** 将显示在屏幕上。

第3步：2分钟后，按摩模式将自动切换到吸奶模式。吸奶力度的级别默认设置为3级，随后每次开机显示的均是上次使用之后的设置级别。吸力级别范围从**1到12**。该数值也会显示在屏幕上。

第4步：一旦进入吸奶模式，可通过按 **+** 按钮增加或 **-** 按钮来降低吸力，调整至舒适的吸力级别。吸奶舒适度，即吸力级别可由您根据自身情况来决定。

温馨提示

- 1、亲吮式吸乳护罩(SoftSquard™)按压乳房过紧可能妨碍乳汁流出。温馨提示：如果在开始吸奶 2 分钟内出现“喷乳”反射（母乳开始流出），请按 **+** 或 **-** 按钮进入吸奶模式。
- 2、电动吸奶器开机后，默认2分钟的按摩模式+28分钟吸奶模式。







吸奶

第5步：按下  按钮，可选择适合您的吸奶速度。





第6步：吸奶完成后，长按  按钮，关闭**电动吸奶器主机**。

Hegen 婴韵舒悦吸奶器一共有36档不同的吮吸韵律设置，能为妈妈们提供更舒适的吸乳体验，也可以模拟宝宝不同月龄的吮吸韵律。

妈妈们可以根据自己舒适的感觉选择12种吸力，然后再根据不同月龄宝宝的吮吸韵律选择 、、，“”适合0-3个月宝宝的吸奶速度，“”适合4-6个月的吸奶速度，“”适合6个月以上宝宝的吸奶速度。3种韵律，12种吸力，一共36档模式。

温馨提示

- 按一下按钮  可以重新点亮显示屏幕。如果您想在按摩和吸奶两种模式之间切换以获得第二次喷乳反射，请按两下按钮 ，即可切换至按摩模式 **M**。
- 您可根据自身的感受和舒适程度调整吸力。单边吸奶建议最高吸力为9档，双边吸奶建议最高吸力为12档。
- 最大舒适负压：尝试由最低档的吸力开始，逐渐调向高的档位，调到乳头轻微不舒服，再向下调一档，即最大舒适负压。

吸奶

转换为手动吸奶器

第1步：将已装好的**手动吸奶器**中心对准乳头，压在乳房上，确保适当密封。请注意：**亲吮式吸乳护罩(SoftSquound™)**按压乳房过紧可能妨碍乳汁流动。

第2步：开始吸奶时，先轻轻按动**手动吸奶器按压手柄(SoftSquound™)**，直至乳房能感觉到吸力。然后松开手柄，恢复原位，以确保乳头已对准**亲吮式吸乳护罩(SoftSquound™)**的中心位置，**亲吮式吸乳护罩(SoftSquound™)**与乳房的贴合效果良好。

注：对**手动吸奶器按压手柄(SoftSquound™)**施加的压力和按动速度可控制真空负压程度。请自行调整至最大舒适负压。


第3步：用两根手指握住**手动吸奶器按压手柄(SoftSquound™)**的末端，轻轻地快速地按照每分钟100-120次的频率，按动**手动吸奶器按压手柄(SoftSquound™)**不要到底，刺激泌乳，引发奶阵。

第4步：奶阵触发后，用四根手指握住**手动吸奶器按压手柄(SoftSquound™)**，以自己能够接受的力度，进入每分钟60-70次的频率，进入低频次有效吸乳，顺畅吸出更多乳汁。

第5步：吸奶完成后，轻轻从乳房上取下**手动吸奶器**。

注意：吸奶时，请务必确保吸出的最大母乳量未接触到**阀门**底端。如接触或没过**阀门**底端将影响**泵体(SoftSquound™)**性能。如您单次吸奶量超过150毫升，请使用 Hegen PPSU 240毫升/8盎司母乳储存瓶。

10. 舒悦揉捏按摩仪

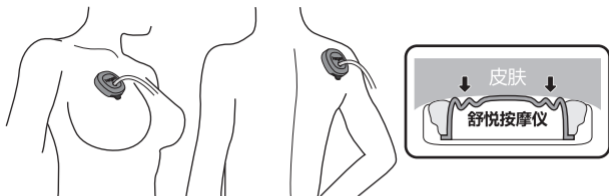

Hegen革新性的婴韵舒悦吸乳器，内含舒悦揉捏按摩仪。通过真空科技模拟指压按摩方式，帮助您在吸奶前、吸奶中、吸奶后按摩乳房，舒悦身心，舒悦的感受能够刺激泌乳素和催产素的分泌，有助于刺激喷乳反射和乳腺通畅，降低乳腺堵塞或增生形成的风险。每一次的吸乳都是一段身心愉悦的经历，不再是一项为了喂养而完成的任务。



扫码激活注册

Hegen掌上母乳喂养中心
如何使用舒悦揉捏按摩仪按摩身体
在吸乳前帮助放松身心

舒悦揉捏按摩环



*仅可使用按摩仪专用真空吸力盖

舒悦按摩揉捏环

- 步骤1：将**电动吸奶器防溢出膜(SoftSground™)**置于**按摩仪专用真空吸力盖**上，并确保**电动吸奶器防溢出膜(SoftSground™)**与**按摩仪专用真空吸力盖**表面保持完全贴合的密封状态。
- 步骤2：将**舒悦按摩揉捏环**安装到已经组装好的**电动吸奶器防溢出膜(SoftSground™)**与**按摩仪专用真空吸力盖**上，顺时针锁紧。请确保**按摩仪专用真空吸力盖**的三个卡扣牢固地卡在**舒悦揉捏按摩环**上。
- 步骤3：将**硅胶管**的一端连接到已装好的**按摩仪专用真空吸力盖**上，然后将另一端连接到**电动吸奶器主机**的吸口。
- 步骤4：打开**电动吸奶器**电源开关，开始使用按摩揉捏模式。将**舒悦揉捏按摩仪**置于皮肤表面，让**电动吸奶器防溢出膜(SoftSground™)**与皮肤充分接触。

温馨提示

- 舒悦揉捏按摩仪无法在关节区域发挥按摩功能。
- 将电动吸奶器的吸力设置为3档，此时应该能够感受到舒悦揉捏按摩仪正在轻柔地拉动皮肤，有如同拔罐与指压按摩的感觉。通过按下 **+** 或 **-** 按钮来增加或降低吸力，调整至舒适的模式。

安全指南

- 请勿在任何身体部位使用舒悦揉捏按摩仪按摩超过5分钟，否则可能会在皮肤上留下红色印记。
- 请务必确保**电动吸奶器主机**和所有其他电动部件都处于干燥状态。
- 请勿用水浸泡或冲洗**电动吸奶器主机**、其他电子部件和**电动吸奶器硅胶管**。
- 每次使用后，请及时清洗消毒所有部件（**电动吸奶器主机**、**硅胶管**、**手动吸奶器按压手柄(SoftSground™)**，及其他所有电子部件除外）。

11. 储存母乳

握住吸奶器泵体(SoftSquard™)，沿逆时针方向“一扭即开”，将泵体从**母乳储存瓶**身上取下。将消毒好的**母乳储存盖**“一按即关”盖在**母乳储存瓶**身上，向左扭锁紧，确保密封。详细使用说明可参考**母乳储存瓶**的说明书。

吸乳完成后，请立即将**母乳储存瓶**放入有冰袋的包中。回家后立即将**母乳储奶瓶**放入冰箱或冰柜。因为母乳冷冻后体积会增大，所以如冷冻存放，母乳的容量请不要超过**母乳储奶瓶**标示的最高刻度线。建议在**母乳储存瓶**上标示吸奶时间，每次优先使用存储时间较长的母乳。

温馨提示：**母乳储存瓶**在使用前请务必彻底清洗消毒，吸出的母乳应尽快冷冻或冷藏储存。已解冻的母乳不得再次冷冻，不得在冷冻的母乳中加入新鲜母乳。


存储条件	温度	保质期
室温	25°C	4 小时
冰箱冷藏室	4°C	48 小时
冰箱冷冻室	-5 至 -15°C	3 至 6 个月
冰柜	-18 至 -20°C	6 至 12 个月

12. 加热母乳

请不要用微波炉或沸水直接解冻冷冻母乳。微波炉加热可能会因受热不均，导致喂养时产生烫伤宝宝的风险，且用微波炉或沸水直接加热冷冻母乳，容易破坏母乳中的营养。

将冷冻的母乳放置在冰箱冷藏室中解冻一晚，解冻后的母乳可在冰箱冷藏室内保存24小时。

将母乳储存容器放在温水中（45°C左右）加热至少10分钟，让母乳恢复至40°C左右。

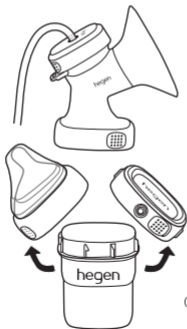

**吸乳、储存、喂养
一体化多功能哺育方案**

(*本产品礼盒中不包瓶颈，奶嘴与透明防尘盖)




13. 给宝宝喂奶

注意：建议在完全建立母乳亲喂规律之后，再使用母乳瓶喂。

将母乳储存盖换为已装好Hegen瓶领并且消毒过的Hegen奶嘴，将母乳储存瓶转换为奶瓶直接喂养。每次喂奶前请务必在手背处检查母乳温度是否合适，以免烫伤宝宝。

喂养完成后，剩余的母乳应立即丢弃。母乳解冻后，不可再次冷冻。

14. 故障排除

问题	检查	解决方案
吸奶器主机不工作	 按钮	确保您长按按钮  1秒钟以上
	电源适配器	检查您的电源适配器是否正确连接到吸奶器主机。
	吸力	检查您是否使用了较低的吸力级别。按 + 按钮增加吸力，或 - 按钮减小吸力。 双乳吸奶需要较高的吸力级别。(建议第6级别以上)
电池问题	电池	为吸奶器主机充电并检查屏幕上的电池状态  是否为已完全充电。 如果电池状态显示未充电，请检查电源适配器是否连接正确。
没有吸力或吸力较低	亲吮式吸乳护罩 (SoftSquard™)	确保亲吮式吸乳护罩 (SoftSquard™) 周与您的乳房紧密贴合，没有漏气的情况发生。
	硅胶管	请确保硅胶管正确连接电动吸奶器主机吸口处和电动吸奶盖 (SoftSquard™)。
	电动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™) / 手动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™)	查看电动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™) 是否有孔洞或裂痕。如果您使用的是手动吸奶器：请将连接器从手动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™) 中拆卸下来，检查连接器是否有裂纹或碎边，检查手动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™) 是否有破洞或裂痕。如有瑕疵或损坏，则需在吸奶前更换相应的部件。重新组装并确保手动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™) 紧贴在连接器的卡槽中。

问题	检查	解决方案
	<p>电动吸奶器主机吸口</p> <p>电动吸奶盖 (SoftSquard™)</p>	<p>单吸乳时，请确保另一个电动吸奶器主机吸口（用粉色密封盖）保持封闭状态。</p> <p>请确保电动吸奶盖 (SoftSquard™)、内侧的4个卡扣均已正确锁定在泵体 (SoftSquard™)上。卡扣不牢固会导致吸力不足。请检查电动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™)的边缘是否沿泵体 (SoftSquard™)的边缘正确密封。</p>
<p>感觉到疼痛或压力</p>	吸力级别	<p>检查您是否使用了较高的吸力级别。按下 — 按钮可减小吸力。</p> <p>对于单乳吸奶，建议最大吸力级别是9级。如果您在吸奶时持续感到不适，请联系母乳喂养专家。</p>
<p>乳汁不流入储奶瓶中</p>	阀门	<p>吸奶时，请务必确保吸出的最大母乳量未接触到阀门底端。如接触或没过阀门底端将影响泵体 (SoftSquard™)性能。</p> <p>从泵体 (SoftSquard™)卸下阀门。</p> <p>检查阀门是否有孔洞或裂纹。如有瑕疵或损坏，则需在吸奶前更换相应的部件。</p> <p>按照清洁章节清洗阀门。</p>
手动吸奶器	手动吸奶器按压手柄 (SoftSquard™) 和连接器	<p>将手动吸奶器按压手柄 (SoftSquard™)上端U型槽与手动吸奶器防溢出膜 (SoftSquard™)上的粉色连接器相连，并将按压手柄 (SoftSquard™)粉色固定轴插入泵体 (SoftSquard™)一字型开口中，听到咔嗒一声即组装完成。</p>

注意：如您单次吸奶量经常超过150毫升，请使用Hegen PPSU 240毫升/8盎司母乳存储容器，防止过量溢出。

15. 配件和替换配件

如需购买或更换配件，
请咨询Hegen各官方商城或社媒账号：

微信公众号：Hegen

微博：Hegen_Official

抖音：Hegen官方账号

小红书：Hegen

天猫hegen旗舰店：<https://hegen.tmall.com>

hegen官方微信商城：星妈联萌



扫码关注Hegen微信公众号
了解最新产品信息

16. 保修期限

本产品保修期从购买之日（发票、小票、
电商渠道购物信息截屏等所显示日期）开
始计算，为期18个月。详情请扫码激活注
册Hegen掌上母乳喂养中心，参见
Hegen婴韵舒悦吸奶器“保修条例”。




扫码激活注册
Hegen掌上母乳喂养中心
了解Hegen婴韵舒悦吸奶器“保修条例”

17. 技术规范

型号	: Hegen 婴韵舒悦吸奶器
吸奶器尺寸	: 95 x 98 x 51.1 毫米
重量 (吸奶器装置)	: 230 克
保护类型	: II类
最大真空吸力	: -300 毫米汞柱 ($\pm 20\%$)
吸力级别	: 12 级
输入 (电源适配器)	: 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.35A Max (HNDI050150WB), 或 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.35A Max (HNAA050150C1), 或 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.35A Max (KA12C-0501500EU)
输出 (电源适配器)	: 5 伏特, 1.5 安培
电池	: 2 x 3.7 伏特, 800 毫安 锂离子电池
最大工作时间	: 30 分钟 (自动关闭) / 每次吸奶时间
生产厂家	: Fitson Sdn Bhd 19 Jalan I-Park SAC 3, Taman Perindustrian I-Park SAC, 81400 Senai, Johor, Malaysia.

18. 使用环境

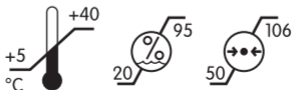

19. 弃置



本产品由各种金属和塑料制成。

请根据您当地的回收系统处理废旧电动和电子设备（包括电池）。
不当弃置可能会对环境和公共健康造成有害影响。

- 请勿将锂离子电池作一般废弃物处理。
- 在主机废弃前，必须先取出电池。
- 请送至合适的电池处理点或回收点。
- 拆卸电池时，必须断开主机的电源。
- 应确保对电池进行安全处理。

如何从设备上取出电池进行处理：

- 拧开底部壳体的 3 颗螺钉，打开底部外壳。
- 找到电池及其连接线。
- 从 PCB 连接器上小心拔下电池座。
- 取出电池，然后按照《处置指南》进行处理。

20. 其他语言



如需阅读其他语言的Hegen婴韵舒悦吸奶器使用说明
使用说明，请扫描此二维码：



ENGLISH / 简体中文 / DEUSTCH / ESPAÑOL / FRANÇAIS /
ITALIANO / BAHASA INDONESIA / РУССКИЙ / 日本語 /
한국어 / ภาษาไทย / اللغة العربية / NEDERLANDS

Hegen保留此商品与包装的所有知识产权。包括所有设计,图片和文字。
严禁转载任何材料,或将构成侵权。
版权所有,不许翻印。

All Rights Reserved.
Patent Pending.

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 546