



Somna Kedjetäcke Sensitive

Somna Blanket Sensitive

Bruksanvisning / Käyttöohje / User manual

500225 500226 500230 500235 500240 500245 500250 500255 500260 500265
500280-500285

SPECIAL NEEDS
COMPUTERS 
1-877-724-4922


SE FI EN 6.0


ABILIA

Somna Kedjetäcke Sensitive

Somna Kedjetäcke Sensitive är en produkt framtagen för att lindra sömnsvårigheter, anspänning i kroppen, oro och ångest, genom att ge en omslutande känsla och taktill stimulans. Placera kedjetäcket i ett påslakan och prova vilken sida av täcket som känns bäst mot kroppen. Börja med att använda täcket kortare stunder för tillvänjning och öka därefter användningen successivt.

Tyngdtäcket finns i både junior- och vuxenstorlekar samt i olika viktvarianter. Täcket har två olika sidor, en kedjesida (1) och en vadderad sida (2). Den vadderade sidan mot kroppen ger ett jämnt och mjukt tryck medan kedjesidan ger ökad taktill stimulans. Kedjesidan har en textil med halvmånar för att enklare kunna skilja sidorna åt.

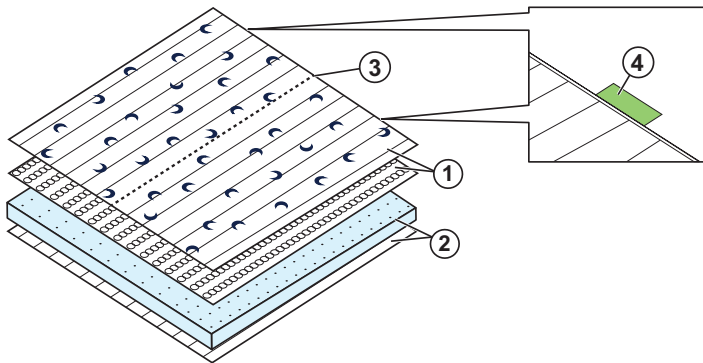

1. Kedjesida med stålkedjor
2. Vadderad sida
3. Blixtlås (för vissa varianter)
4. Färgmarkering (för vissa varianter) som anger vilka delar som hör ihop

Somna Kedjetäcke Sensitive uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.

För mer information och tillbehör, gå till www.abilia.se eller skanna QR-koden.



Skanna mig!

Skötsel

 **FÖRSIKTIGHET:** Använd medföljande tvättpåse. Om tvättpåsen inte används kan Somna Kedjetäcke Sensitive gå sönder.



Textil: 90% Polyester, 10% Polypropen


Fyllning: 100% Stålkedjor

Om produkten har blixtlås (3), tvätta delarna separat. Färgmarkeringen gör det enkelt att kombinera delar med samma vikt efter tvätt. Torka direkt efter tvätt. Torkskåp max 40 °C.

Rekonditionering

Skontvätt max. 70°C.

Viktig information

 **WARNING:** Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.

- Rådfråga läkare före användning av Somna Kedjetäcke Sensitive vid svag lungkapacitet, vid svag muskelkapacitet eller vid inopererad utrustning som kan påverkas av kedjorna.
- Använd inte Somna Kedjetäcke Sensitive för barn yngre än 3 år.
- Vid användning av hygienöverdrag, observera kvävningrisk.
- Rulla inte in användaren i Somna Kedjetäcke Sensitive.
- Risk att snubbla om Somna Kedjetäcke Sensitive ligger på golvet.


Allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Somna Blanket Sensitive

Somna Blanket Sensitive rauhoittaa ja lievittää univaikeuksia, kehon jännitystiloihin, levottomuutta ja ahdistusta tuottamalla sisään sulkevan tuntemuksen. Laita painopeitto pussilakanan sisään ja kokeile, kumpi peiton puoli tuntuu paremmalta kehoa vasten. Käytä alussa tuotetta lyhyitä aikoja kerrallaan, jotta totut siihen, ja lisää käyttöaikaa vähitellen.

Somna Blanket Sensitive on saatavana lapsille ja aikuisille sopivina kokoina. Peitossa on ketjupuoli (1) ja pehmustettu puoli (2). Pehmustettu puoli tuottaa kehoa vasten tasaisen ja pehmeän paineen, kun taas ketjupuoli antaa lisästimulaatiota tuntoaistille. Ketjupuolen kankaan kuvioinnissa on käytetty puolikuuta, jotta puolet on helpompi erottaa toisistaan.

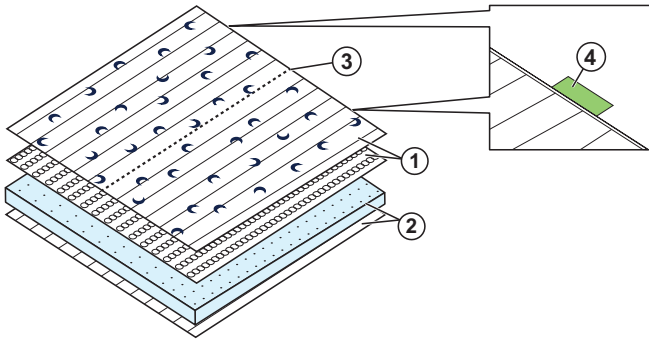

1. Ketjupuoli, teräsketjut
2. Pehmustettu puoli
3. Vetoketju (joissain malleissa)
4. Värimerkintä (joissain malleissa) osien yhdistämiseen

Somna Blanket Sensitive täyttää kaikki lääkinällisille laitteille asetetut vaatimukset, määräykset ja direktiivit. Vie tuote hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja lisävarusteista saat osoitteesta www.abilia.com tai lukemalla QR-koodin.



Skannaa minut!

Huolto

! **VAROVAISUUTTA:** Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Jos pesupussissa ei käytetä, Somna Blanket Sensitive voi rikkoutua.



Kangaspäällinen: 90% Polyesteriä, 10% Polypropeeni

Täyte: 100% Teräsketjut

Jos tuotteessa on vetoketju (3), pese osaa erikseen. Värimerkinnän avulla on helppo yhdistää saman painon osat pesun jälkeen. Kuivaa heti pesun jälkeen.

Raikastaminen

Hienopesu pesusykli enintään 70°C.

Tärkeää tietoa

! **VAROITUS:** Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Ota yhteys lääkäriin ennen tuotteen käyttöä, jos käyttäjän keuhkojen tai lihasten toiminta on vajavaista tai käyttäjällä on lääkinnällisiä apuvälineitä, joiden toimintaa ketjut saattavat haitata.
- Somna Blanket Sensitive ei sovellu käytettäväksi alle 3-vuotiaille lapsille.
- Suojapäällistä käytettäessä on varottava tukehtumisvaaraa.
- Älä kiedo käyttäjää Somna Blanket Sensitiveiin.
- Lattialla oleva Somna Blanket Sensitive voi aiheuttaa kompastumisriskin.


Vakavat tapaturmat

Jos tuotetta käytettäessä tapahtuu vakava tapahtuma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapahtuma on vakava, jos sen katsotaan olevan suoraan tai epäsuorasti johtanut, voivan johtaa tai esittää johtavan potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan, potilaan, käyttäjän tai henkilön terveydentilan tilapäiseen tai pysyvään tai vakavaan heikkenemiseen tai vakavaan uhkaan kansanterveydelle.

Somna Blanket Sensitive

Somna Blanket Sensitive is a product that is developed to relieve sleeping difficulties, tension in the body, agitation and anxiety by providing an enveloping feeling and tactile stimulation. Put the blanket in a duvet cover and try which side of the blanket feels best against the body. Start by using the blanket for a short time to get used to it and increase the use gradually.

The blanket is available in junior and adult sizes and in different weights. The blanket has two different sides, a chain side (1) and a padded side (2). The padded side against the body gives an even and soft pressure while the chain side gives more tactile pressure. The chain side has a fabric with crescents to make it easier to separate the sides.

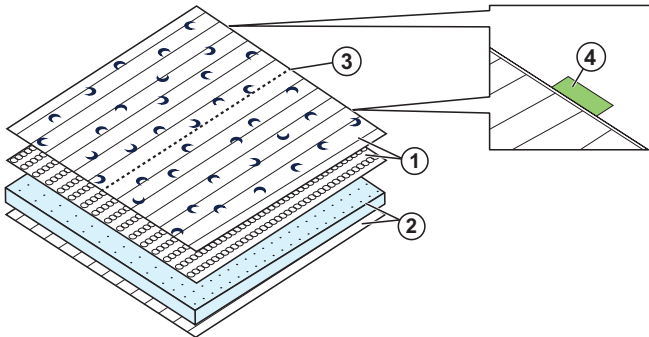

1. Chain side with steel chains
2. Padded side
3. Zipper (if applicable)
4. Colour marking (if applicable) that indicates which parts belong together


Somna Blanket Sensitive complies with all necessary requirements, regulations and directives for medical devices. Dispose the product at an applicable disposal location.

For more information and accessories, go to www.abilia.com or scan the QR code.



Scan me!

Maintenance

 **CAUTION:** Use the included laundry bag. If the laundry bag is not used, Somna Blanket Sensitive can break.




Textile: 90% Polyester, 10% Polypropylene **Filling:** 100% Steel chains

If the product has a zipper (3), wash the two parts separately. The colour marking makes it easy to combine parts with the same weight after washing. Dry immediately after washing.

Reconditioning

Gentle wash cycle max. 70 °C.

Important information

 **WARNING:** Read the following warning instructions before you use the product.

- Seek medical advice before using the product if the user has reduced lung or muscle capacity or any surgically inserted devices that can be affected by the chains.
- Do not use Somna Blanket Sensitive for children younger than 3 years.
- When using the hygiene cover, observe the risk of a choking hazard.
- Do not roll the user in the Somna Blanket Sensitive.
- Risk of tripping if Somna Blanket Sensitive is left on the floor.

Serious incidents

If a serious incident related to the product occurs, report this to the manufacturer and the competent authority of your country. A serious incident directly or indirectly led, might have led or might lead to the death of a patient, user or other person; the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health; or a serious public health threat.



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com



ABILIA