



Somna Kedjeväst 2.0

Somna Vest 2.0

Bruksanvisning / Käyttöohje / User manual

600770 600775 600780 600785 600790 600795 600800 600805

SPECIAL NEEDS
COMPUTERS 
1-877-724-4922

SE FI EN 4.0



ABILIA

Somna Kedjeväst 2.0


Somna Kedjeväst 2.0 används på dagen för att lugna sinnen och öka kroppsuppfattningen så att man lättare kan koncentrera sig på aktiviteter i vardagen. Den hjälper då till att bevara fokus och sälla bort onödiga intryck.

Använd västen så nära kroppen som möjligt, det går bra att ha den under en tröja eller jacka. Västen och kragen kan användas ihop eller var för sig.

Använd Somna Kedjeväst 2.0

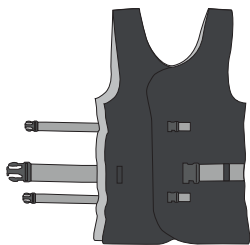

1. Öppna spännena.

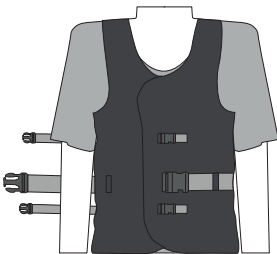

2. Ta på västen.



3. Stäng spännena och dra åt dem.

Somna Kedjeväst 2.0 uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.

För mer information och tillbehör, gå till www.abilia.se eller skanna QR-koden.



Skanna mig!

Skötsel

 **FÖRSIKTIGHET:** Använd medföljande tvättpåse. Om tvättpåsen inte används kan Somna Kedjeväst 2.0 gå sönder.

Väst:



Textil: 70% Polyester, 30% Bomull

Fyllning: 100% Stålkedjor

Krage:




Textil: 55% Polyester, 45% Bomull

Fyllning: 100% Polyester

Tål ej kemtvätt. Tål ej uppvärmning.

Viktig information

 **WARNING:** Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.

- Rådfråga läkare före användning av Somna Kedjeväst 2.0 vid svag lungkapacitet, vid svag muskelkapacitet eller vid inopererad utrustning som kan påverkas av kedjorna.
- Se till att Somna Kedjeväst 2.0 inte fastnar i något vid lek.

Allvarliga incidenter


Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Somna Vest 2.0


Somna Vest 2.0 on päivkäyttöön tarkoitettu tuote aistihakuisen henkilön ruumiinkuvan käsittelyn tukemiseen, jotta keskittyminen päivittäisiin rutiineihin on helpompaa. Se auttaa keskittymään ja suodattamaan ylimääräiset vaikutelmat.

Liivi on tarkoitus pitää niin lähellä kehoa kuin mahdollista. Liiviä voidaan käyttää vaatteiden alla tai päällä. Liiviä ja painokaulusta voi käyttää erikseen tai yhdistelmänä.


Käytä tuotetta Somna Vest 2.0

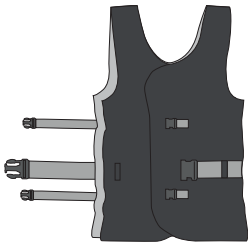

1. Avaa soljet.

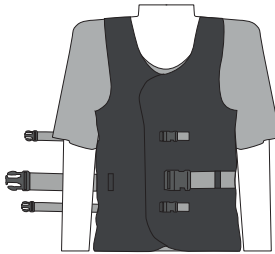

2. Pue liivi päälle.

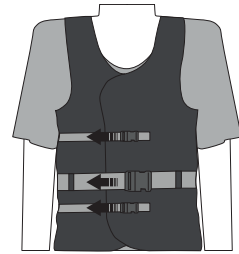

3. Sulje soljet ja kiristä nauhat.

Somna Vest 2.0 täyttää kaikki lääkinällisille laitteille asetetut vaatimukset, määräykset ja direktiivit. Vie tuote hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja lisävarusteista saat osoitteesta www.abilia.com tai lukemalla QR-koodin.



**Skannaa
minut!**

Huolto

! **VAROVAISUUTTA:** Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Jos pesupussissa ei käytetä, Somna Vest 2.0 voi rikkoutua.

Liivi:



Tekstiili: 70% Polyesteriä, 30% Puuvillaa

Täyte: 100% Teräsketjut

Kaulus:



Tekstiili: 55% Polyesteriä, 45% Puuvillaa

Täyte: 100% Polyesteriä

Ei kuivapesua. Älä lämmitä.

Tärkeää tietoa

! **VAROITUS:** Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Ota yhteys lääkäriin ennen tuotteen käyttöä, jos käyttäjän keuhkojen tai lihasten toiminta on vajavaista tai käyttäjällä on lääkinnällisiä apuvälineitä, joiden toimintaa ketjut saattavat haitata.
- Varottava, ettei Somna Vest 2.0 takerru leikkiessä kiinni mihinkään.

Vakavat tapaturmat


Jos tuotetta käytettäessä tapahtuu vakava tapahtuma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapahtuma on vakava, jos sen katsotaan olevan suoraan tai epäsuorasti johtanut, voivan johtaa tai esittää johtavan potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan, potilaan, käyttäjän tai henkilön terveydentilan tilapäiseen tai pysyvään tai vakavaan heikkenemiseen tai vakavaan uhkaan kansanterveydelle.

Somna Vest 2.0


Somna Vest 2.0 is used during the day to calm the senses and increase the body perception so that you can more easily concentrate on activities in everyday life. It helps to maintain focus and filter out unnecessary impressions.

Use the vest as close to the body as possible. The vest and weighted collar can be used together or separately.


Use Somna Vest 2.0

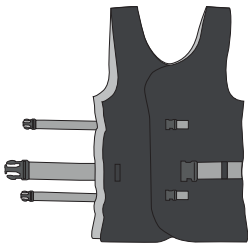

1. Open the buckles.

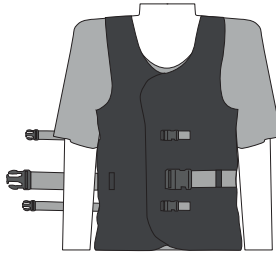

2. Put on the vest.

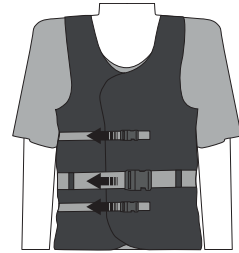

3. Close the buckles and tighten them.


Somna Vest 2.0 complies with all necessary requirements, regulations and directives for medical devices. Dispose the product at an applicable disposal location.

For more information and accessories, go to www.abilia.com or scan the QR code.



Scan me!

Maintenance

 **CAUTION:** Use the included laundry bag. If the laundry bag is not used, Somna Vest 2.0 can break.

Vest:



Textile: 70% Polyester, 30% Cotton

Filling: 100% Steel chains

Collar:




Textile: 55% Polyester, 45% Cotton

Filling: 100% Polyester

Do not dry clean. Do not heat.

Important information

 **WARNING:** Read the following warning instructions before you use the product.

- Seek medical advice before using the product if the user has reduced lung or muscle capacity or any surgically inserted devices that can be affected by the chains.
- Ensure that Somna Vest 2.0 does not catch on something when playing.

Serious incidents

If a serious incident related to the product occurs, report this to the manufacturer and the competent authority of your country. A serious incident directly or indirectly led, might have led or might lead to the death of a patient, user or other person; the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health; or a serious public health threat.



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com



ABILIA