



Somna Kedjetäcke Balance

Somna Blanket Balance

Bruksanvisning / Käyttöohje / User manual

SPECIAL NEEDS
COMPUTERS 
1-877-724-4922

600860 700590


SE FI EN 5.0



Somna Kedjetäcke Balance

Somna Kedjetäcke Balance är en produkt framtagen för att lindra sömnsvårigheter, anspänning i kroppen, oro och ångest, genom att ge en omslutande känsla och taktill stimulans. Placera kedjetäcket i ett påslakan och prova vilken sida av täcket som känns bäst mot kroppen. Börja med att använda täcket kortare stunder för tillvänjning och öka därefter användningen successivt.

Täcket har två olika sidor, en kedjesida (1) och en vadderad sida (2). Den vadderade sidan mot kroppen ger ett jämnt och mjukt tryck medan kedjesidan ger ökad taktill stimulans. Kedjesidan har en textil med halvmånar för att enklare kunna skilja sidorna åt.

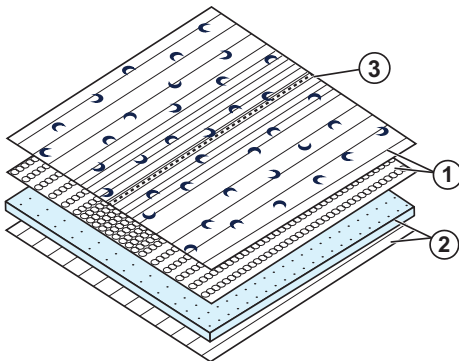

1. Kedjesida med stålkedjor
2. Vadderad sida
3. Blixtlås

Somna Kedjetäcke Balance uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.

För mer information och tillbehör, gå till www.abilia.se eller skanna QR-koden.



Skanna mig!

Skötsel

 **FÖRSIKTIGHET:** Använd medföljande tvättpåse. Om tvättpåsen inte används kan Somna Kedjetäcke Balance gå sönder.



Textil: 90% Polyester, 10% Polypropen


Fyllning: 100% Stålkedjor

Produkten har blyxtlås (3), tvätta delarna separat. Torka direkt efter tvätt. Torkskåp max 40 °C.

Rekonditionering

Skontvätt max. 70°C.

Viktig information

 **WARNING:** Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.

- Rådfråga läkare före användning av Somna Kedjetäcke Balance vid svag lungkapacitet, vid svag muskelkapacitet eller vid inopererad utrustning som kan påverkas av kedjorna.
- Vid användning av hygienöverdrag, observera kvävningrisk.
- Rulla inte in användaren i Somna Kedjetäcke Balance.
- Risk att snubbla om Somna Kedjetäcke Balance ligger på golvet.


Allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Somna Blanket Balance

Somna Blanket Balance rauhoittaa ja lievittää univaikeuksia, kehon jännitystiloihin, levottomuutta ja ahdistusta tuottamalla sisään sulkevan tuntemuksen. Laita painopeitto pussilakanan sisään ja kokeile, kumpi peiton puoli tuntuu paremmalta kehoa vasten. Käytä alussa tuotetta lyhyitä aikoja kerrallaan, jotta totut siihen, ja lisää käyttöaikaa vähitellen.

Peitossa on ketjupuoli (1) ja pehmustettu puoli (2). Pehmustettu puoli tuottaa kehoa vasten tasaisen ja pehmeän paineen, kun taas ketjupuoli antaa lisästimulaatiota tuntoaistille. Ketjupuolen kankaan kuvioinnissa on käytetty puolikuuta, jotta puolet on helpompi erottaa toisistaan.

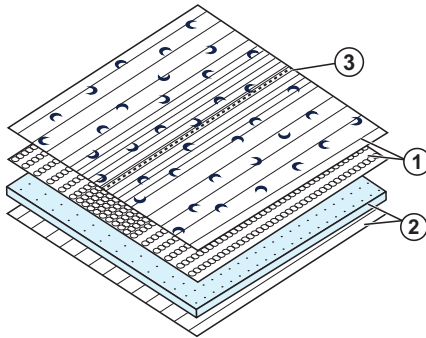

1. Ketjupuoli, teräsketjut
2. Pehmustettu puoli
3. Vetoketju

Somna Blanket Balance täyttää kaikki lääkinällisille laitteille asetetut vaatimukset, määräykset ja direktiivit. Vie tuote hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja lisävarusteista saat osoitteesta www.abilia.com tai lukemalla QR-koodin.



Skannaa minut!

Huolto

! **VAROVAISUUTTA:** Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Jos pesupussissa ei käytetä, Somna Blanket Balance voi rikkoutua.



Kangaspäällinen: 90% Polyesteriä, 10% Polypropeeni

Täyte: 100% Teräsketjut

Tuotteessa on vetoketju (3), pese osaa erikseen. Kuivaa heti pesun jälkeen.

Raikastaminen

Hienopesu pesusykli enintään 70°C.

Tärkeää tietoa

! **VAROITUS:** Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Ota yhteys lääkäriin ennen tuotteen käyttöä, jos käyttäjän keuhkojen tai lihasten toiminta on vajavaista tai käyttäjällä on lääkinällisiä apuvälineitä, joiden toimintaa ketjut saattavat haitata.
- Suojapäällistä käytettäessä on varottava tukehtumisvaaraa.
- Älä kiedo käyttäjää Somna Blanket Balanceiin.
- Lattialla oleva Somna Blanket Balance voi aiheuttaa kompastumisriskin.


Vakavat tapaturmat

Jos tuotetta käytettäessä tapahtuu vakava tapahtuma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapahtuma on vakava, jos sen katsotaan olevan suoraan tai epäsuorasti johtanut, voivan johtaa tai esittää johtavan potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan, potilaan, käyttäjän tai henkilön terveydentilan tilapäiseen tai pysyvään tai vakavaan heikkenemiseen tai vakavaan uhkaan kansanterveydelle.

Somna Blanket Balance

Somna Blanket Balance is a product that is developed to relieve sleeping difficulties, tension in the body, agitation and anxiety by providing an enveloping feeling and tactile stimulation. Put the blanket in a duvet cover and try which side of the blanket feels best against the body. Start by using the blanket for a short time to get used to it and increase the use gradually.

The blanket has two different sides, a chain side (1) and a padded side (2). The padded side against the body gives an even and soft pressure while the chain side gives more tactile pressure. The chain side has a fabric with crescents to make it easier to separate the sides.

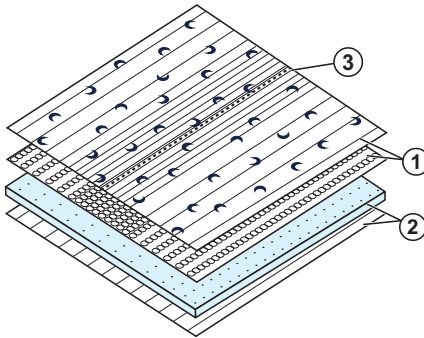

1. Chain side with steel chains
2. Padded side
3. Zipper


Somna Blanket Balance complies with all necessary requirements, regulations and directives for medical devices. Dispose the product at an applicable disposal location.

For more information and accessories, go to www.abilia.com or scan the QR code.



Scan me!

Maintenance

 **CAUTION:** Use the included laundry bag. If the laundry bag is not used, Somna Blanket Balance can break.



Textile: 90% Polyester, 10% Polypropylene


Filling: 100% Steel chains

The product has a zipper (3), wash the two parts separately. Dry immediately after washing.

Reconditioning

Gentle wash cycle max. 70 °C.

Important information

 **WARNING:** Read the following warning instructions before you use the product.

- Seek medical advice before using the product if the user has reduced lung or muscle capacity or any surgically inserted devices that can be affected by the chains.
- When using the hygiene cover, observe the risk of a choking hazard.
- Do not roll the user in the Somna Blanket Balance.
- Risk of tripping if Somna Blanket Balance is left on the floor.

Serious incidents

If a serious incident related to the product occurs, report this to the manufacturer and the competent authority of your country. A serious incident directly or indirectly led, might have led or might lead to the death of a patient, user or other person; the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health; or a serious public health threat.

