



Somna Kedjeväst Balance

Somna Vest Balance

Bruksanvisning / Käyttöohje / User manual

600910 600915 600920 600922 600925

SPECIAL NEEDS
COMPUTERS 
1-877-724-4922

SE FI EN 4.0



ABILIA

Somna Kedjeväst Balance


Somna Kedjeväst Balance används på dagen för att lugna sinnena och öka kroppsuppfattningen så att man lättare kan koncentrera sig på aktiviteter i vardagen. Den hjälper då till att bevara fokus och sälla bort onödiga intryck.

Använd västen så nära kroppen som möjligt, det går bra att ha den under en tröja eller jacka.


Använd Somna Kedjeväst Balance



1. Öppna höger sida.

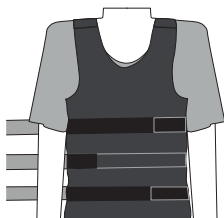

2. Ta på västen.

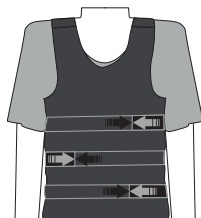

3. Stäng och dra åt banden.



4. Justera axelbanden.

Somna Kedjeväst Balance uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för medicintekniska produkter. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.

För mer information och tillbehör, gå till www.abilia.se eller skanna QR-koden.



Skanna mig!

Skötsel


 **FÖRSIKTIGHET:** Använd medföljande tvättpåse. Om tvättpåsen inte används kan Somna Kedjeväst Balance gå sönder.



Textil: 70% Polyester, 30% Bomull

Fyllning: 100% Stålkedjor

Viktig information

 **VARNING:** Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.

- Rådfråga läkare före användning av Somna Kedjeväst Balance vid svag lungkapacitet, vid svag muskelkapacitet eller vid inopererad utrustning som kan påverkas av kedjorna.
- Se till att Somna Kedjeväst Balance inte fastnar i något vid lek.

Allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patients, användares eller annan persons dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Somna Vest Balance


Somna Vest Balance on päivkäyttöön tarkoitettu tuote aistihakuisen henkilön ruumiinkuvan käsittelyn tukemiseen, jotta keskittyminen päivittäisiin rutiineihin on helpompaa. Se auttaa keskittymään ja suodattamaan ylimääräiset vaikutelmat.

Liivi on tarkoitus pitää niin lähellä kehoa kuin mahdollista. Liiviä voidaan käyttää vaatteiden alla tai päällä.

Käytä tuotetta Somna Vest Balance



1. Avaa oikea puoli.

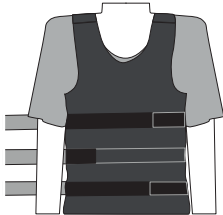

2. Pue liivi päälle.



3. Sulje soljet ja kiristä nauhat.



4. Säädä olkanauhat.


Somna Vest Balance täyttää kaikki lääkinällisille laitteille asetetut vaatimukset, määräykset ja direktiivit. Vie tuote hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja lisävarusteista saat osoitteesta www.abilia.com tai lukemalla QR-koodin.



Skanna minut!

Huolto


 **VAROVAISUUTTA:** Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Jos pesupussissa ei käytetä, Somna Vest Balance voi rikkoutua.



Tekstiili: 70% Polyesteriä, 30% Puuvillaa

Täyte: 100% Teräsketjut

Tärkeää tietoa

 **VAROITUS:** Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Ota yhteys lääkäriin ennen tuotteen käyttöä, jos käyttäjän keuhkojen tai lihasten toiminta on vajavaista tai käyttäjällä on lääkinnällisiä apuvälineitä, joiden toimintaa ketjut saattavat haitata.
- Varottava, ettei Somna Vest Balance takerru leikkiessä kiinni mihinkään.

Vakavat tapaturmat


Jos tuotetta käytettäessä tapahtuu vakava tapahtuma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapahtuma on vakava, jos sen katsotaan olevan suoraan tai epäsuorasti johtanut, voivan johtaa tai esittää johtavan potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan, potilaan, käyttäjän tai henkilön terveydentilan tilapäiseen tai pysyvään tai vakavaan heikkenemiseen tai vakavaan uhkaan kansanterveydelle.

Somna Vest Balance

Somna Vest Balance is used during the day to calm the senses and increase the body perception so that you can more easily concentrate on activities in everyday life. It helps to maintain focus and filter out unnecessary impressions.

Use the vest as close to the body as possible.

Use Somna Vest Balance

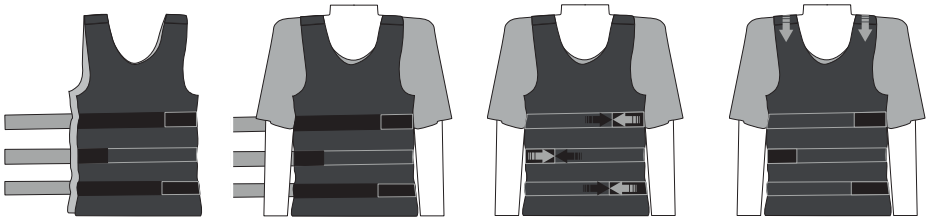

1. Open the right side.

2. Put on the vest.

3. Close and tighten the straps.

4. Adjust the shoulder straps.


Somna Vest Balance complies with all necessary requirements, regulations and directives for medical devices. Dispose the product at an applicable disposal location.

For more information and accessories, go to www.abilia.com or scan the QR code.



Scan me!

Maintenance


 **CAUTION:** Use the included laundry bag. If the laundry bag is not used, Somna Vest Balance can break.



Textile: 70% Polyester, 30% Cotton

Filling: 100% Steel chains

Important information

 **WARNING:** Read the following warning instructions before you use the product.

- Seek medical advice before using the product if the user has reduced lung or muscle capacity or any surgically inserted devices that can be affected by the chains.
- Ensure that Somna Vest Balance does not catch on something when playing.

Serious incidents

If a serious incident related to the product occurs, report this to the manufacturer and the competent authority of your country. A serious incident directly or indirectly led, might have led or might lead to the death of a patient, user or other person; the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health; or a serious public health threat.



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com



ABILIA