



V2T-10

Voice to Text converter for landline phone
Convertisseur Voix en Texte pour téléphone fixe



English P1

Français P14

!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

CONTENTS	1
INTRODUCTION	2
Unpacking the V2T-10	2
DESCRIPTION	3
General Description	3
INSTALLATION	5
Setting Up – How to set the battery or AC-DC power adaptor	5
Setting Up – How to connect the V2T-10 to the Telephone	6
Setting Up – How to connect the V2T-10 to the Smart-Phone or Tablet	6
USING THE V2T-10	7
Turning the V2T-10 ON or OFF	7
Battery Indicator	7
Voice to Text Converter	8
- Working with Text Hear Personal Hearing Aid App on your Smart-phone or Tablet	8
- Select and Convert Voices to your Smart-phone or Tablet	9
- Adjust Voice Volume send to your Smart-phone or Tablet	9
- Mute Function during Voice to Text Converting	9
TROUBLE SHOOTING	10
SAFETY INFORMATION	11
GUARANTEE	12
DECLARATIONS	13

Congratulations on purchasing your Geemarc V2T-10. The V2T-10 is an assistive listening device working with **Text Hear Personal Hearing Aid** App running on your smart-phone or tablet. It converts the speech to text and at same time you make/receive phone calls through your telephone line.

It is important that you read the instructions below in order to use your Geemarc V2T-10 to its full potential. Keep this user guide in a safe place for future reference.

Unpacking the V2T-10

When unpacking the V2T-10, you should find the following in the box:

- V2T-10 Piece.
- 9V ALKALINE BATTERY.
- RJ9 TO RJ9 Cord.
- 3.5mm Plug to 3.5mm Plug Audio Cord.
- 1 User Guide




For product support and help visit our website at


www.geemarc.com

Telephone **01707 387602**

Or fax **01707 832529**

General Description

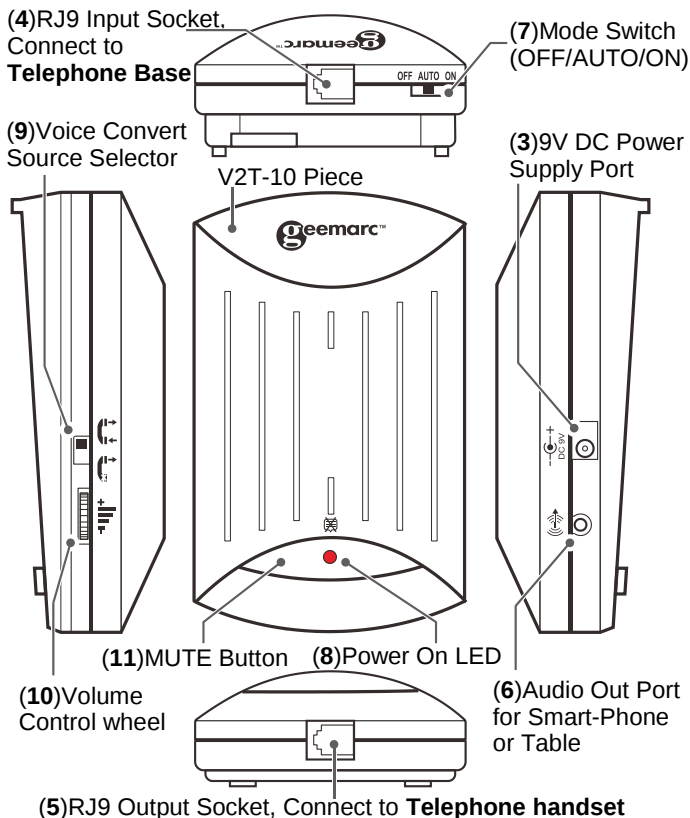

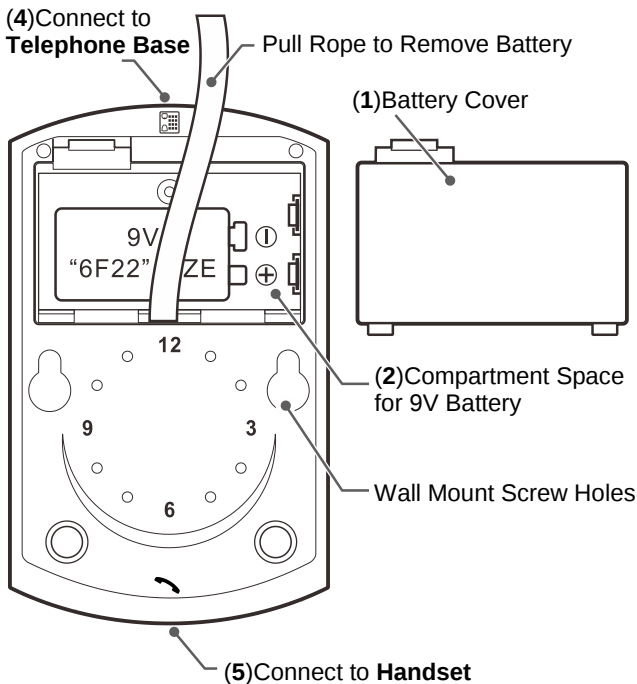

Setting Up – How to set the battery or AC-DC power Adaptor


Open the battery compartment by pressing the small plastic lock on battery cover **(1)** located on the rear of the V2T-10 Piece. Insert the supplied battery (9V PP3) into the battery compartment **(2)**, and then replace the battery cover.

NOTE: Insert battery with the correct polarity as shown in the battery compartment.

A 9V AC-DC Power Adaptor (not included) can be used to power the V2T-10 unit.

Plug the Power Adaptor into the mains supply and plug the other end of the lead into the DC Power Supply Port **(3)** () on the right hand side of the V2T-10. Switch the mains supply **on**.

NOTE: Make sure the correct polarity of Adaptor output plug, centre is “+”.

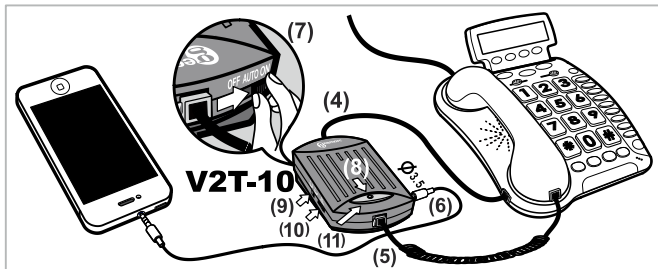

Setting Up – How to Connect the V2T-10 to the Telephone

To connect your phone to the V2T-10:

- Unplug the Handset cord from your telephone base socket.
- Connect one end of RJ9 to RJ9 cord supplied with the V2T-10 to the telephone base socket and one end to the input socket **(4)** () located at the top of your V2T-10 .
- Connect your handset cord to the output socket **(5)** () located at the front of your V2T-10.

IMPORTANT: The V2T-10 cannot be used with one-piece telephones which have a keypad on the handset.

Setting Up – How to Connect the V2T-10 to the Smart-Phone or Tablet

To connect your smart-phone or tablet to the V2T-10:

- Connect one end of 3.5mm to 3.5mm cord supplied with the V2T-10 to the 3.5mm socket of your smart-phone or tablet and one end to the Audio output port **(6)** () located at the right hand side of your V2T-10.
- Download our **Text Hear Personal Hearing Aid** App from **Google play** and run it on your smart-phone or tablet.

Turning the V2T-10 On and Off

Put the mode switch (7)  to **ON** position, The Power On LED (8) will display RED, and the V2T is ready to work.

To turn the V2T-10 off, put the mode switch (7) to **OFF** position. The RED LED will switch off.

AUTO mode: Put the mode switch (7) to **AUTO** position, The Power On LED (8) will display RED, if there has no phone call for a certain minutes, the V2T will auto power off to save battery life. When there is a phone call, the V2T-10 resumes automatically.

Battery Indicator

The Battery indicator (8) should illuminate every time you use V2T-10. If the LED start to fade or does not light when your V2T-10 is in use, you should change the battery to ensure optimum performance.

Making or Answering a phone call


When you want to make or answer a phone call, just do it as you do with your telephone!.

IMPORTANT: If you don't use the V2T-10 with Text Hear Personal Hearing Aid App, You can turn the V2T-10 off to save battery life. Turning V2T-10 to off will not affect your phone calls.


Voice to Text Convertor

- Working with Text Hear Personal Hearing Aid App on your Smart-phone or Tablet

- Download and run **Text Hear Personal Hearing Aid APP** on your smart-phone or tablet.
- Connect the V2T-10 to your smart-phone or tablet as instructed above.
- Put the V2T mode switch (7) () to **ON** or **AUTO** position.
- When you make, or answer a phone call, the speech will be converted to Text in **Text Hear Personal Hearing Aid APP** automatically.

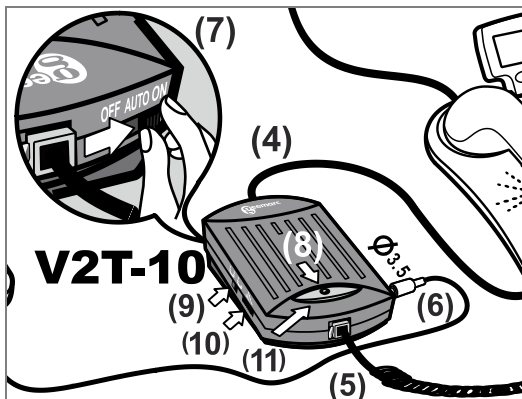

- Select and Convert Voices to your Smart-phone or Tablet

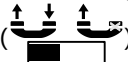You can convert **your voices to texts** () or **both you and friend's voices to text** () , using the voice convert source selector (9) () at the left side of V2T-10.

- Adjust Voice Volume send to your Smart-phone or Tablet

You can adjust the volume send to your Smart-phone or tablet by turning the wheel (10) () at the left side of V2T-10. Adjust the volume to get a best performance in the APP.

- MUTE function during voice to text converting

If you don't want to convert the voice to text during phone call, just press and hold down the **MUTE button (11)** on the top of the V2T-10

The V2T-10 appears not to be working

- Make sure that the handset is securely plugged in.
- Make sure that the telephone base is securely plugged in.
- Make sure that the battery is inserted correctly and is of the recommended type.
- Make sure that the power supply cord is plugged in correctly i.e. into a working wall socket and into the V2T-10 Piece.
- Make sure the mode switch is set to ON or AUTO if using V2T to convert the voice to text.

The Text Hear Personal Hearing Aid App appears not to be working correctly

- Make sure that the audio cord is securely plugged in V2T-10.
- Make sure that the audio cord is securely plugged in Smart-Phone or tablet.
- Make sure that the volume is correctly adjusted.
- Make sure speech clearly when you talking in the phone.

General

Do not open the unit. Contact the helpline for all repairs.

Cleaning

Clean the V2T-10 with a soft cloth. Never use polishes or cleaning agents - they could damage the finish or the electrics inside.

Environmental

Do not expose to direct sunlight.

Always ensure there is a free flow of air over the surfaces of the V2T-10.

Do not place any part of your product in water and do not use it in damp or humid conditions e.g. bathrooms.

Do not expose your product to fire or other hazardous conditions.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at **www.geemarc.com**.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts.

The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

**The guarantee applies to the
United Kingdom only.**

CE Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/UE.

The declaration of conformity may be consulted at
www.geemarc.com



Recycling directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive has been put in place so that products at the end of life are recycled in the best way.

When this product is out of order, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at

www.geemarc.com

Telephone **01707 387602**

Or fax **01707 832529**

!!!Vérifiez si une version plus récente de ce guide
d'utilisation est disponible sur notre site Internet
www.Geemarc.com !!!

Table des Matières	14
Introduction	16
Déballage de l'appareil V2T-10	16
Description	17
Description générale	17
Installation	19
Installation - Comment installer la batterie ou l'adaptateur électrique CA-CC.....	19
Installation - Comment connecter le V2T-10 au téléphone.....	20
Installation - Comment connecter le V2T-10 à un smartphone ou une tablette	20
Utilisation du V2T-10	21
Mise en marche et à l'arrêt du V2T-10	21
Indicateur de batterie	21
Passer un appel ou répondre au téléphone.....	21
Convertisseur Audio Texte	22
- Utiliser l'application TextHear Personal Hearing Aid sur votre smartphone ou votre tablette	22
- Sélectionner et convertir l'audio sur votre smartphone ou tablette.....	23

- Réglage du volume des données vocales envoyées à votre smartphone ou votre tablette	23
- Fonction SECRET au cours de la conversion des données audio en texte	23
Dépannage	24
Informations de Sécurité	25
Garantie	26
Directive de recyclage	27

Nous vous félicitons d'avoir choisi le modèle Geemarc V2T-10. Le V2T-10 est un appareil d'assistance auditive qui fonctionne avec l'application Text Hear Personal Hearing Aid installée sur votre smartphone ou votre tablette. Il convertit instantanément les conversations en données textuelles lorsque vous recevez ou passez un appel via votre ligne téléphonique.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par votre Geemarc V2T-10. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

Déballage de l'appareil V2T-10

Le carton contenant l'appareil V2T-10 renferme les éléments suivants :

- L'unité V2T-10
- Une batterie alcaline 9V
- Le cordon RJ9/ RJ9
- Un câble Audio 3,5 mm / 3,5 mm
- 1 Notice d'utilisation



Pour des informations et une assistance sur le produit,
rendez-vous sur notre site Web

www.geemarc.com
Téléphone **0328587599**

Description générale




(4) Prise d'entrée RJ9, branchement sur la **base du téléphone**

(9) Sélecteur de la source audio de conversion

(7) Commutateur de mode

(3) Alimentation électrique CC 9V
Port d'alimentation

V2T-10 Unité

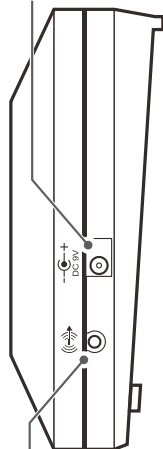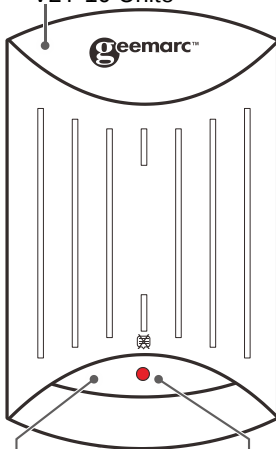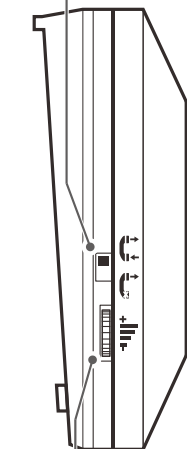



(11) Touche SECRET (8) Voyant de mise en marche

(10) Molette de commande du volume

(6) Port de sortie audio pour smartphone ou tablette

(5) Prise de sortie RJ9, branchement sur la **combiné du téléphone**

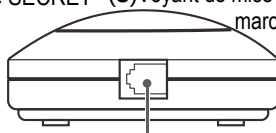

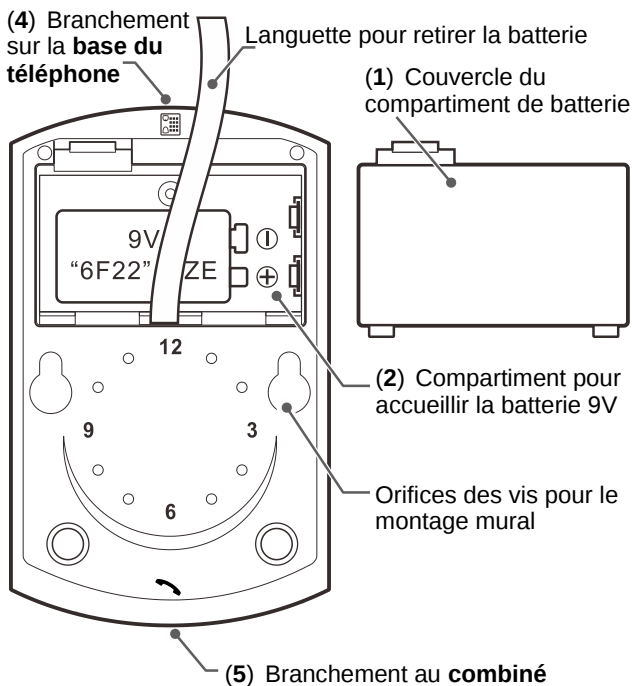

Installation - Comment installer la batterie ou l'adaptateur électrique CA-CC


Ouvrir le compartiment de batterie en appuyant sur le petit système de fermeture en plastique placé sur le couvercle du compartiment de batterie **(1)**, logé à l'arrière de l'unité V2T-10. Insérer la batterie fournie (9V PP3) dans le compartiment **(2)**, puis remettre le couvercle.

REMARQUE: insérer la batterie en respectant la polarité, comme indiqué dans le compartiment.

Un adaptateur électrique CA-CC 9V (non inclus) peut être utilisé pour alimenter l'unité V2T-10.

Brancher l'adaptateur électrique dans le bloc secteur et brancher l'autre extrémité du fil dans le port d'alimentation électrique CC **(3)** (, placé à droite du V2T-10. Mettre le bloc secteur sous tension.

REMARQUE: s'assurer que la polarité correcte de la fiche de sortie de l'adaptateur est « + » au centre.

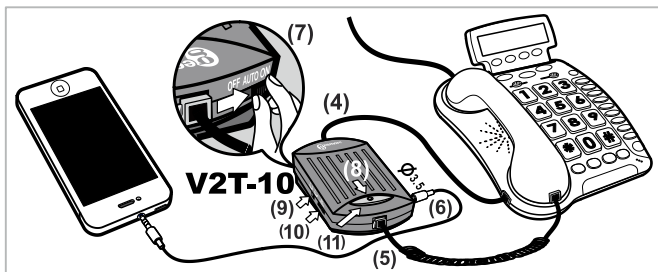

Installation - Comment connecter le V2T-10 au téléphone

Pour raccorder votre téléphone au V2T-10 :

- Débrancher le cordon du combiné de la prise de la base de votre téléphone.
- Brancher une extrémité du cordon RJ9, fourni avec l'appareil V2T-10, dans la prise de la base du combiné téléphonique et brancher l'autre extrémité dans la prise d'entrée **(4)** () qui se trouve sur la partie supérieure du V2T-10.
- Brancher le cordon de votre combiné dans la prise de sortie **(5)** () logée à l'avant de votre V2T-10.

IMPORTANT: Le V2T-10 ne peut pas être utilisé avec les téléphones tout-en-un, qui disposent d'un clavier sur le combiné/récepteur.

Installation - Comment connecter le V2T-10 à un smartphone ou une tablette

Pour connecter votre smartphone ou tablette au V2T-10 :

- Brancher une extrémité du cordon audio 3,5 mm, fourni avec le V2T-10, dans la prise de votre smartphone ou tablette et brancher l'autre extrémité dans le port de sortie audio **(6)** () placé à droite de votre V2T-10.
- Télécharger notre application **Text Hear Personal Hearing Aid** sur **Google Play** et l'installer sur votre smartphone ou votre tablette.

Mise en marche et à l'arrêt du V2T-10

Mettre le commutateur (7)  sur **ON**, la lumière ROUGE du voyant DEL de mise en marche s'allume (8), ce qui signifie que le V2T est prêt à fonctionner.

Pour mettre le V2T-10 à l'arrêt, placer le commutateur (7) sur **OFF**. La lumière ROUGE du voyant DEL s'éteint.

Mode AUTO: mettre le commutateur (7) sur **AUTO**, le voyant DEL ROUGE de mise en marche (8) s'allume. Si le téléphone n'est pas utilisé pendant quelques minutes, le V2T s'éteint automatiquement pour économiser la batterie. En cas d'appel téléphonique, le V2T-10 se remet en marche automatiquement.

Indicateur de batterie

L'indicateur de batterie (8) doit rester allumé lorsque vous utilisez le V2T-10. Si la lumière du voyant DEL faiblit ou ne s'allume pas lorsque le V2T-10 est en cours d'utilisation, vous devez changer la batterie pour garantir des performances optimales.

Passer un appel ou répondre au téléphone


Si vous souhaitez passer un appel ou y répondre, procédez de la manière qu'avec votre téléphone !

IMPORTANT: si vous n'utilisez pas l'application **Text Hear Personal Hearing Aid**, vous pouvez mettre le V2T-10 à l'arrêt pour économiser la batterie. La mise à l'arrêt du V2T-10 n'aura aucun impact sur vos appels téléphoniques.


Convertisseur Audio Texte

- Utiliser l'application TextHear Personal Hearing Aid sur votre smartphone ou votre tablette

- Télécharger et exécuter l'application Text Hear Personal Hearing Aid sur votre smartphone ou votre tablette.
- Connecter le V2T-10 à votre smartphone ou tablette comme indiqué ci-dessus.
- Mettre le commutateur de mode du V2T (7) () sur **ON** ou **AUTO**.
- Lorsque vous passez un appel ou répondez au téléphone, la conversation est automatiquement convertie dans l'application **Text Hear Personal Hearing Aid App**.

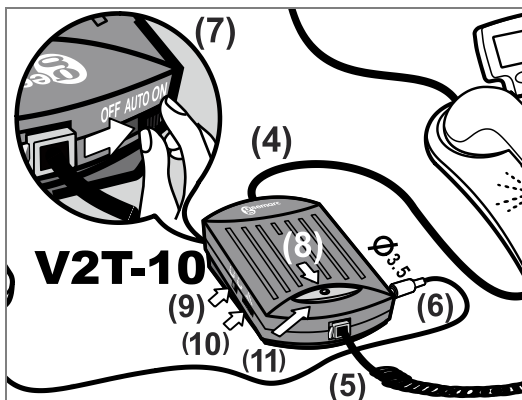

- Sélectionner et convertir l'audio sur votre smartphone ou tablette

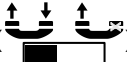Vous pouvez convertir **vos** voix () ou **vos** voix et celle de vos amis () en données textuelles, par le biais du sélecteur de la source sonore à convertir (9) () placé à gauche du V2T-10.

- Réglage du volume des données vocales envoyées à votre smartphone ou votre tablette

Vous pouvez régler le volume des données audio envoyées à votre smartphone ou votre tablette en tournant la molette (10) () placée à gauche du V2T-10. Régler le volume pour obtenir des performances optimales avec l'application.

- Fonction SECRET au cours de la conversion des données audio en texte

Si vous ne souhaitez pas convertir les données vocales en texte au cours d'un appel téléphonique, maintenir la touche **SECRET** enfoncée (11), qui se trouve sur la partie supérieure du V2T-10.

Le V2T-10 semble ne pas fonctionner

- Vérifier que le combiné est correctement branché.
- Vérifier que la base du téléphone est correctement branchée.
- Vérifier que la batterie est correctement insérée et qu'il s'agit du type de modèle adéquat.
- Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché, c'est-à-dire dans une prise murale et dans l'unité V2T-10.
- Vérifier que le commutateur de mode est réglé sur **ON** ou **AUTO**, si vous utilisez le V2T pour convertir les données audio en texte.

L'application Text Hear Personal Hearing Aid ne semble pas fonctionner correctement

- Vérifier que le câble audio est correctement branché dans le V2T-10.
- Vérifier que le câble audio est correctement branché dans le smartphone ou la tablette.
- Vérifier que le volume est correctement réglé.
- Veiller à bien articuler en parlant au téléphone.

Généralités

N'ouvrez pas l'unité. Contactez le service d'assistance pour toutes les réparations.

Nettoyage

Nettoyez l'unité de base avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de détergents ou de matières à polir car ils pourraient endommager la finition ou les parties électroniques logées à l'intérieur.

Exigences environnementales

Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.

Assurez-vous que l'air peut toujours circuler librement sur les surfaces de l'unité de base.

N'exposez aucune partie de votre produit à une source d'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions ou des endroits extrêmement humides.

N'exposez pas votre produit au feu ou à toute autre condition dangereuse.

Garantie

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications, en particulier à l'article 3, sections 1a, 1b et section 2.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com***



DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits :

www.geemarc.com

Téléphone **0328587599**

ou fax **0328587576**



UGV2T-10_EnFr_Ver1.0

geemarc™
Telecom SA **United Kingdom**

**5B Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 387602
www.geemarc.com**

geemarc™
Telecom SA **FRANCE**

**Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 Grande-Synthe Cedex
Tél.service après vente :
03 28 58 75 99
www.geemarc.com**