



# Tutore Riscaldante Intelligente Guida di Benvenuto

# Descrizione Prodotto


Il tutore riscaldante intelligente Vulpés è stato sviluppato per il sollievo dal dolore, il rilassamento e la promozione della guarigione. Il tutore riscaldante intelligente offre un supporto termico preciso con il cuscinetto riscaldante in grafene su misura che può essere applicato al polso, alle articolazioni, alla caviglia, al ginocchio, al gomito e ad altre aree correlate ai muscoli.

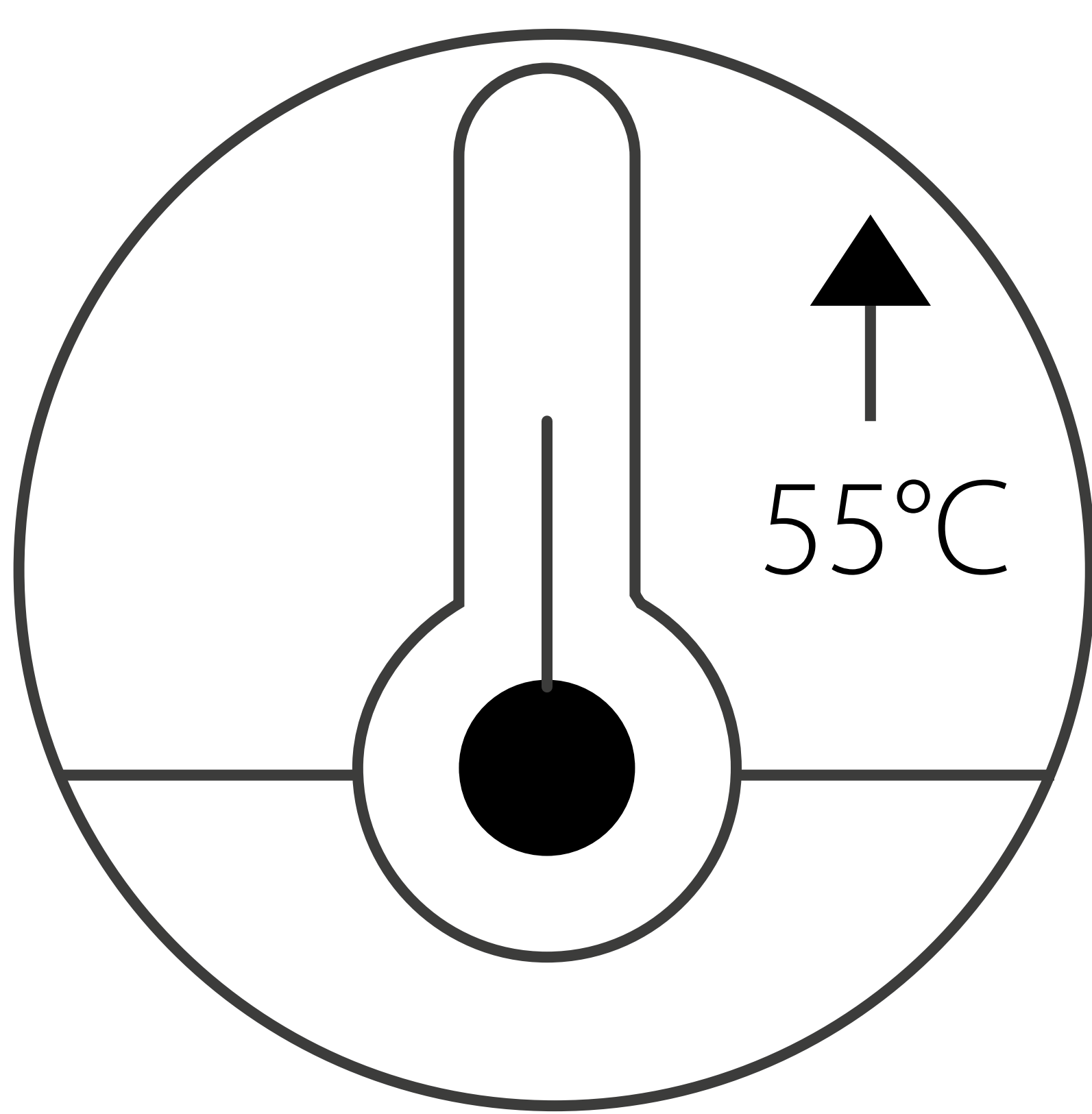


Riscaldato elettricamente

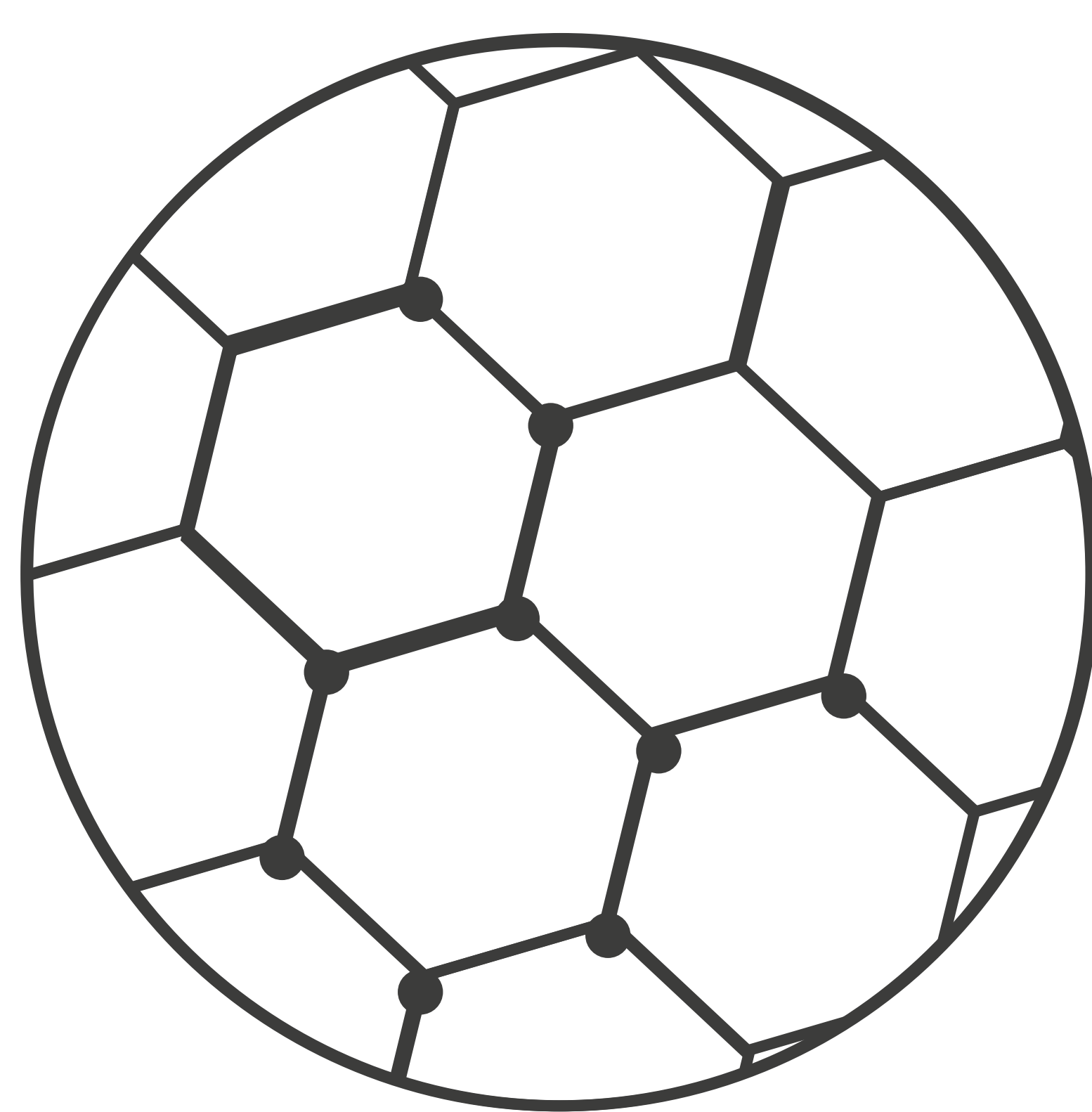


Tecnologia con Grafene

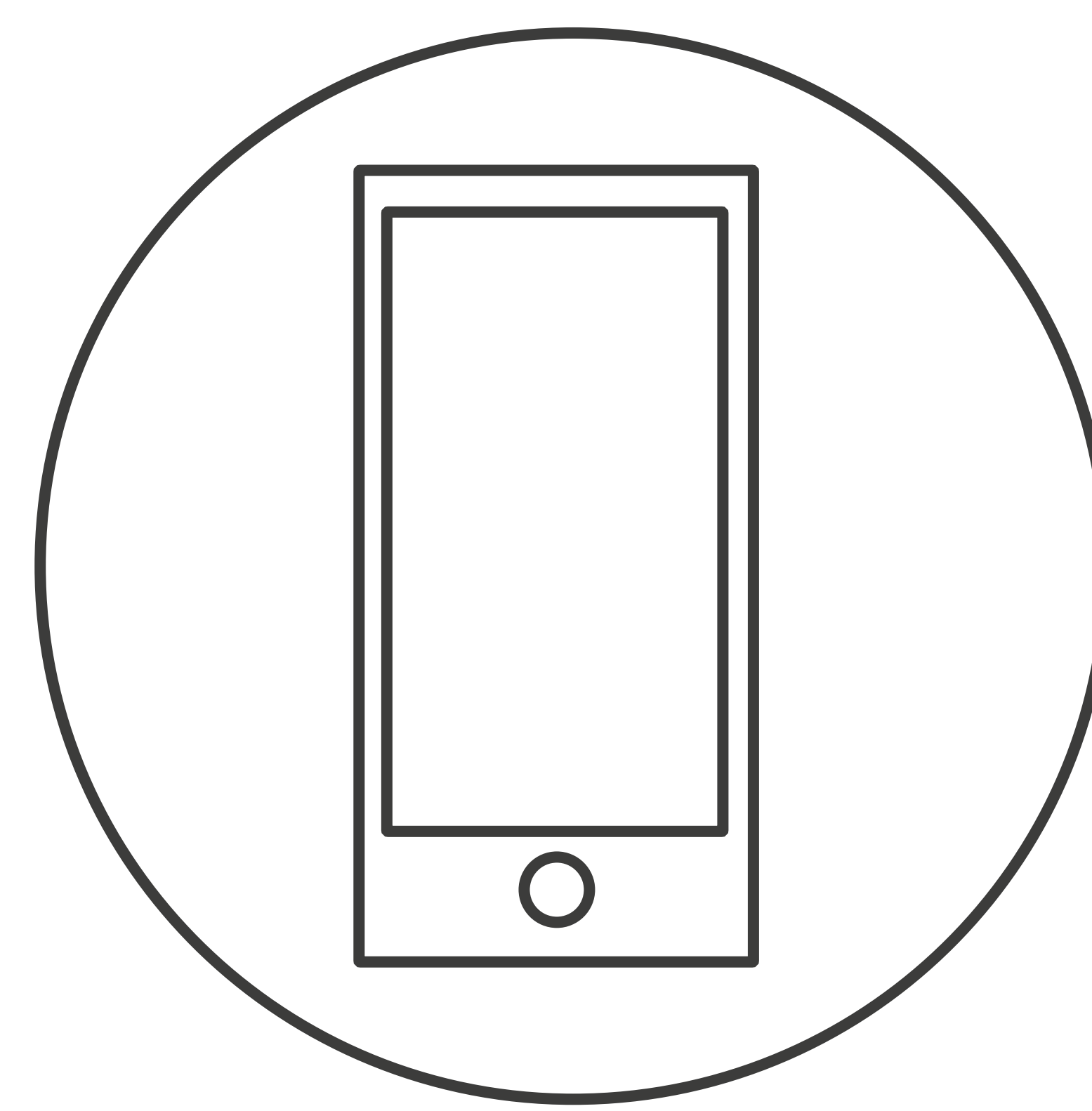

Controllo con smartphone

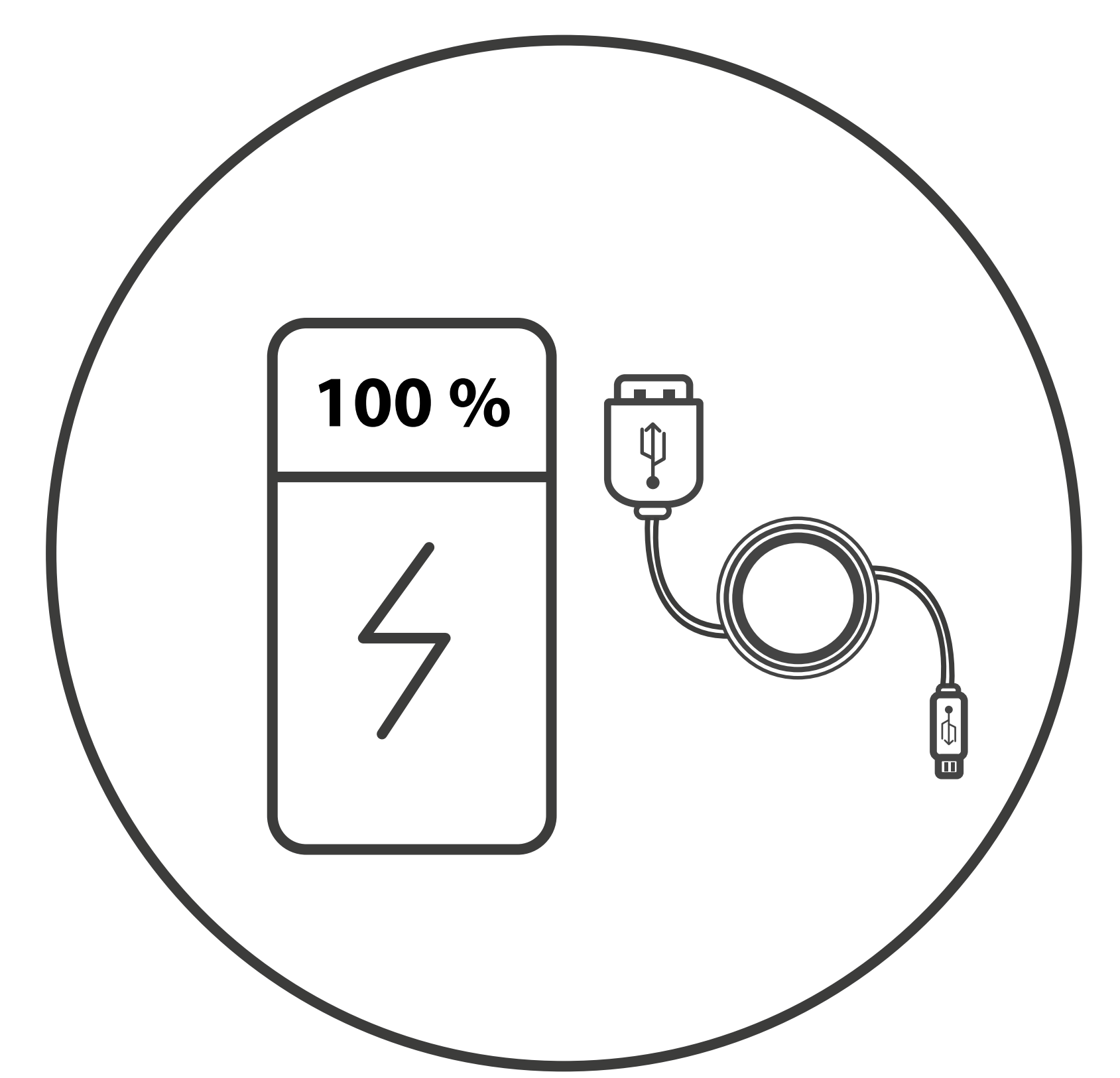


Controllato con Powerbank o cavo SD

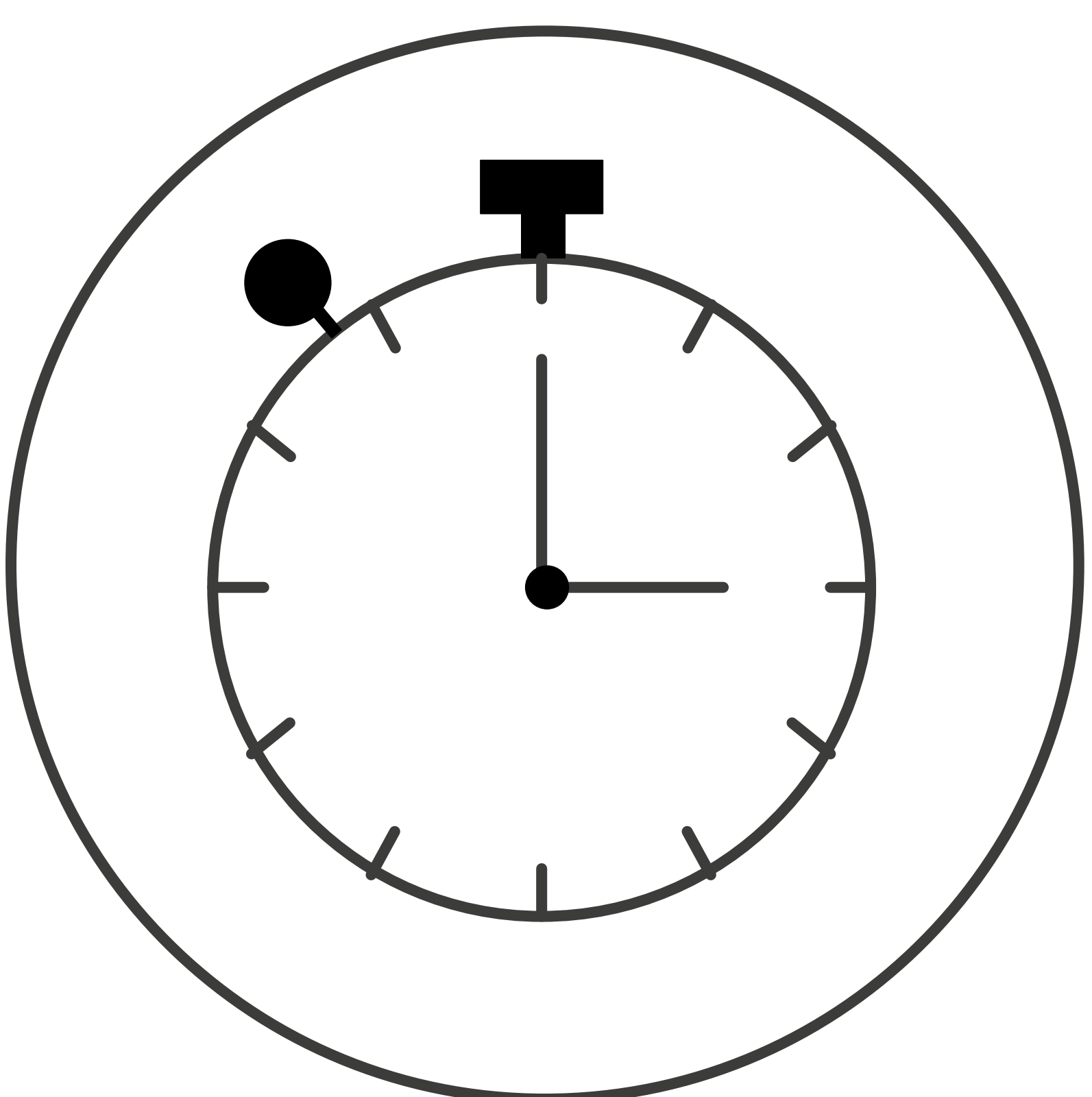


Timer Automatico



Leggero

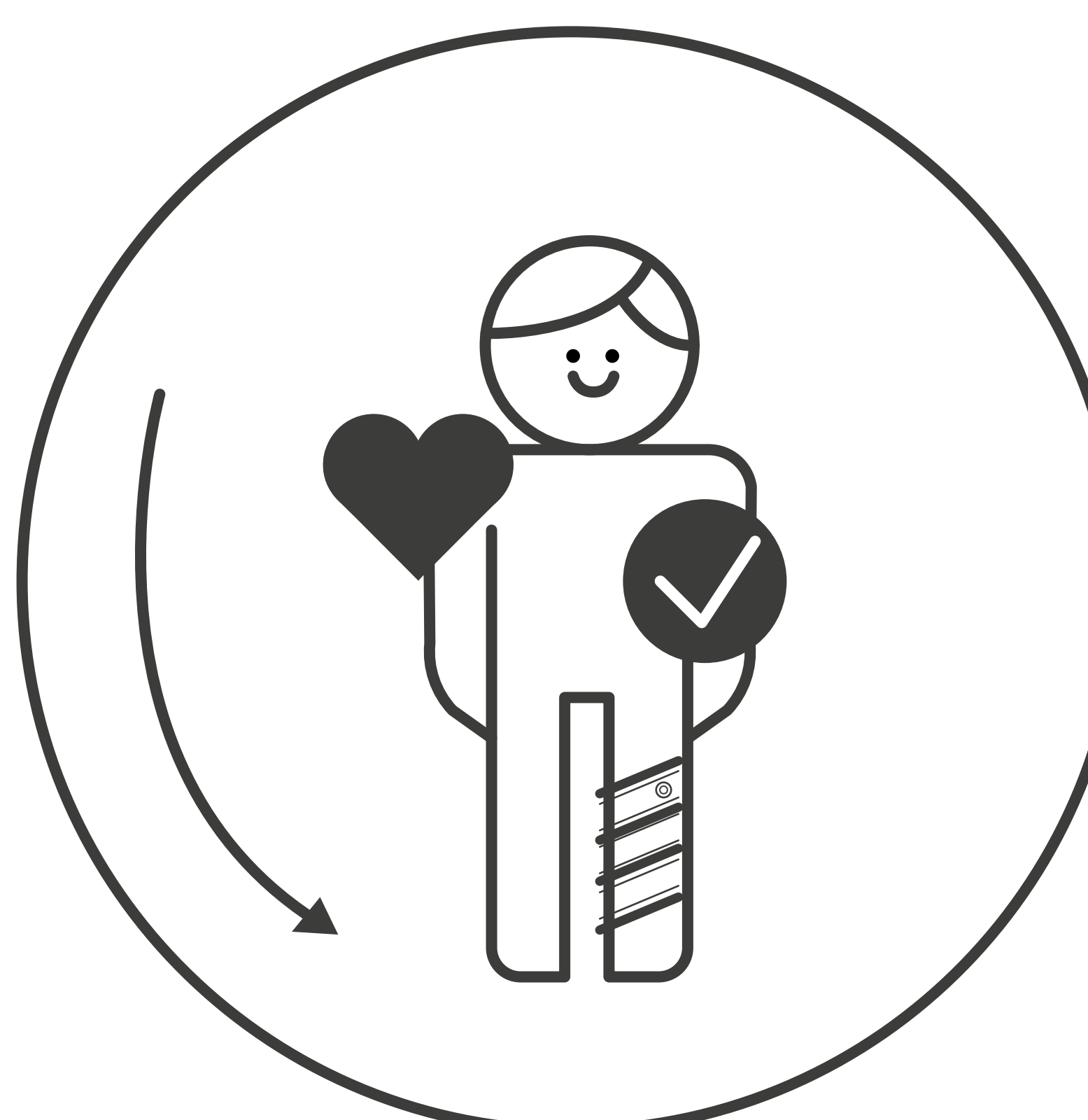

Design Ergonomico a Farfalla

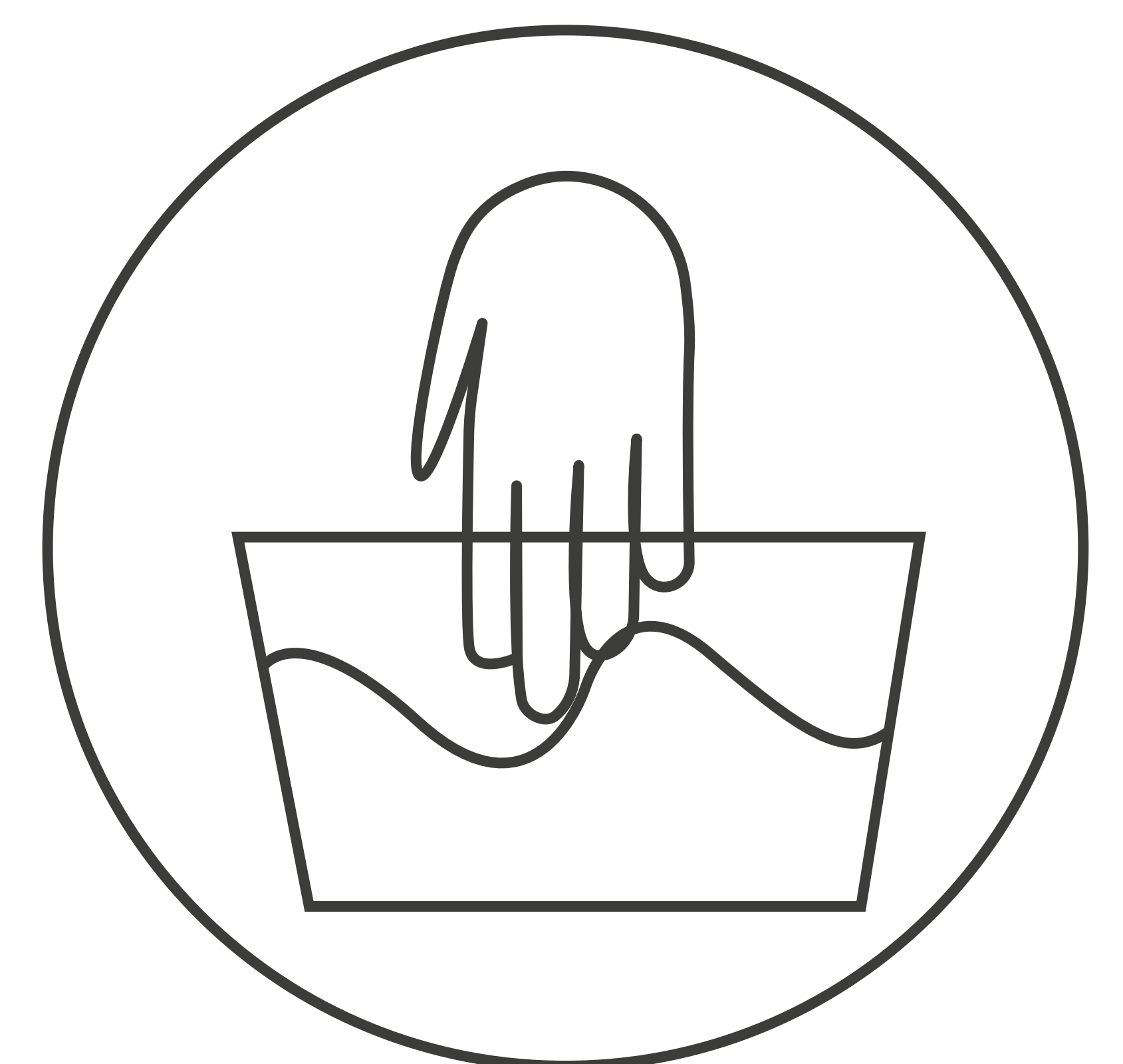


Lavabile a mano



Il supporto riscaldante intelligente Vulpés può essere utilizzato in supporto a diverse condizioni.



Sollievo dal dolore

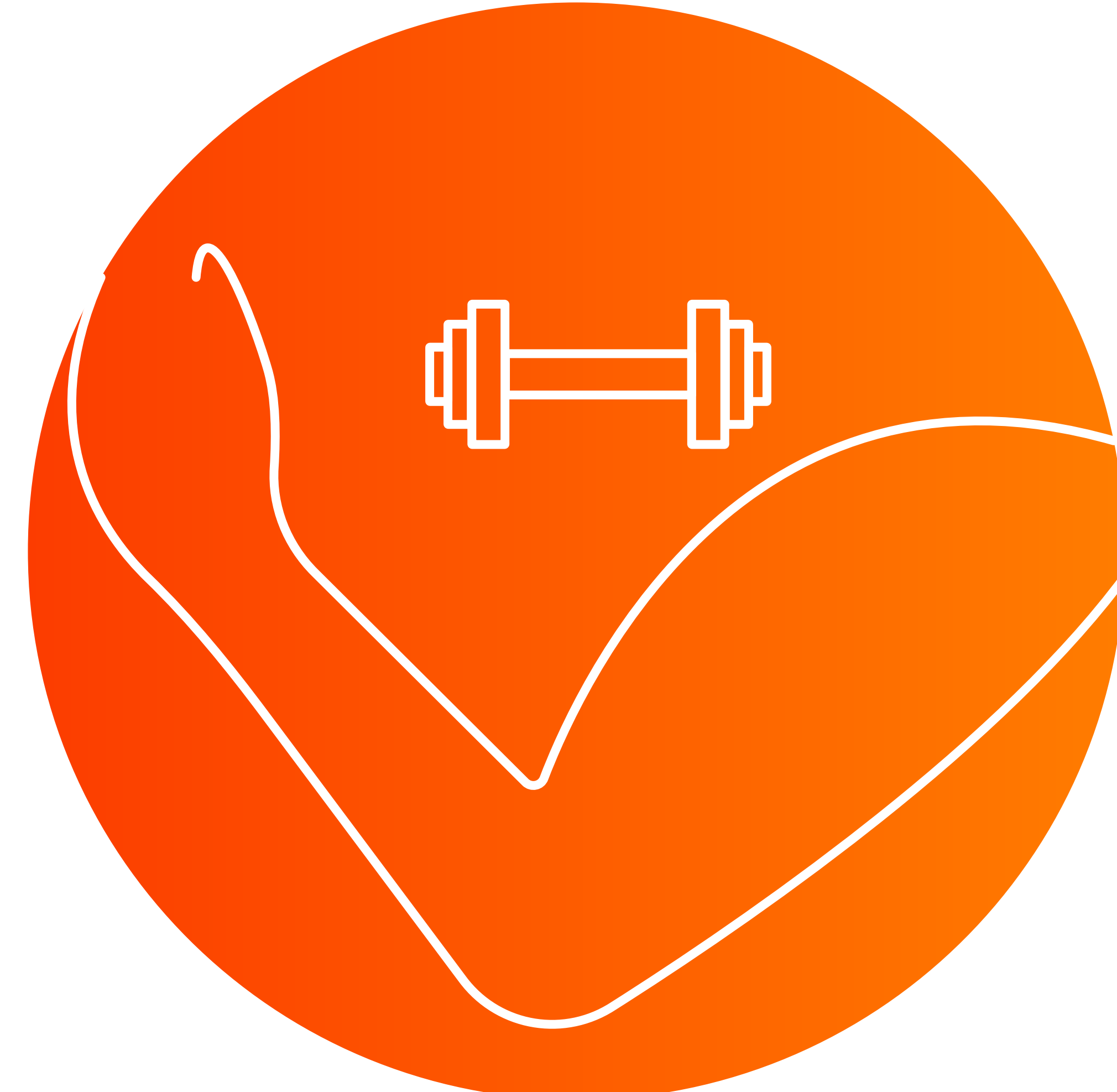

Recupero




Rigidità articolare



Riscaldamento Pre- attività



Rilassamento Muscolare

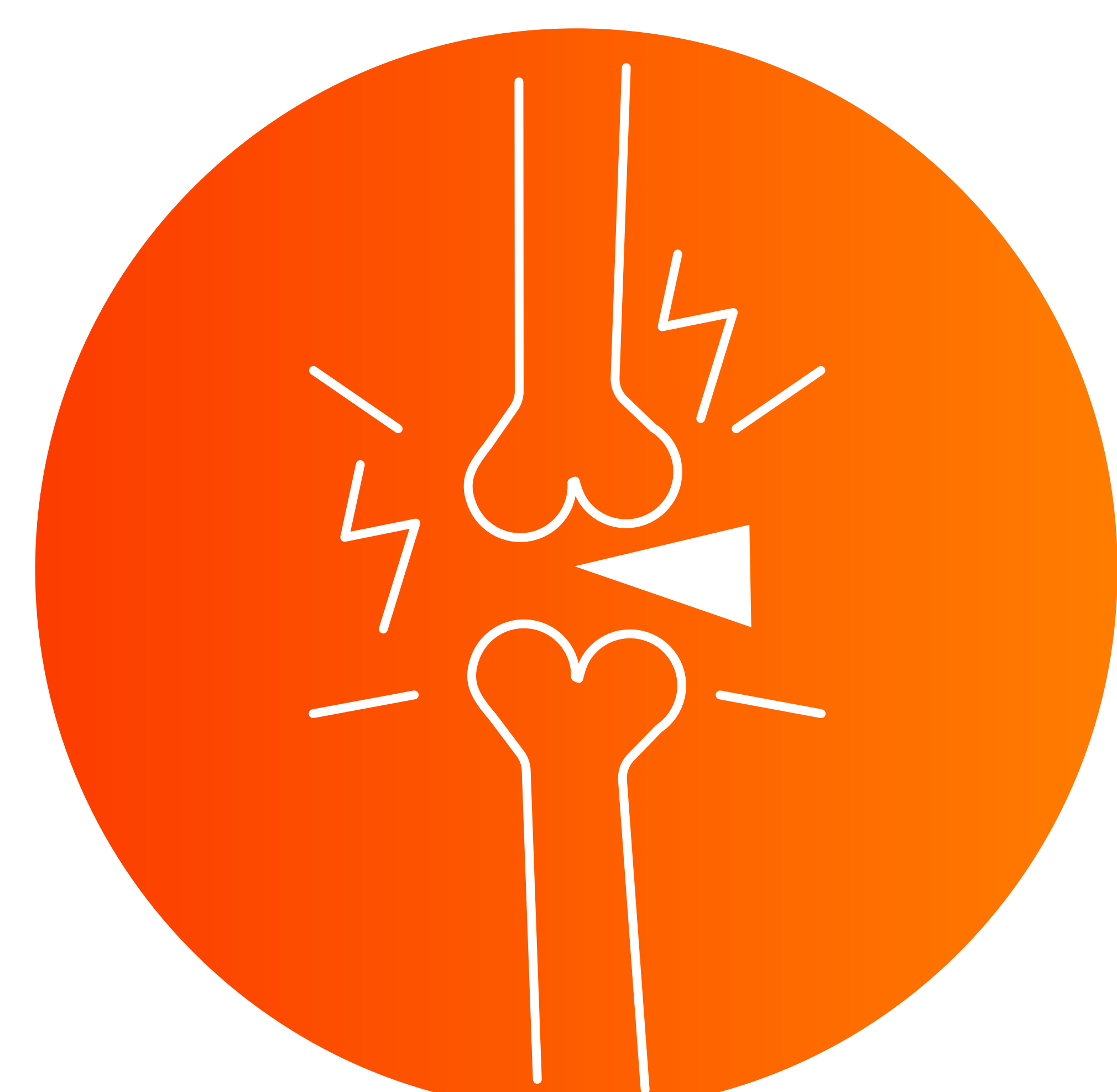


Sintomi dell'artrite\*


**Il supporto riscaldante intelligente Vulpés non è un "prodotto medico". Non promette nessuna cura per malattie o patologie. Si prega di contattare il personale sanitario per consigli medici o opzioni di trattamento.**

# APPLICAZIONI


# COSA C'È NELLA CONFEZIONE ?

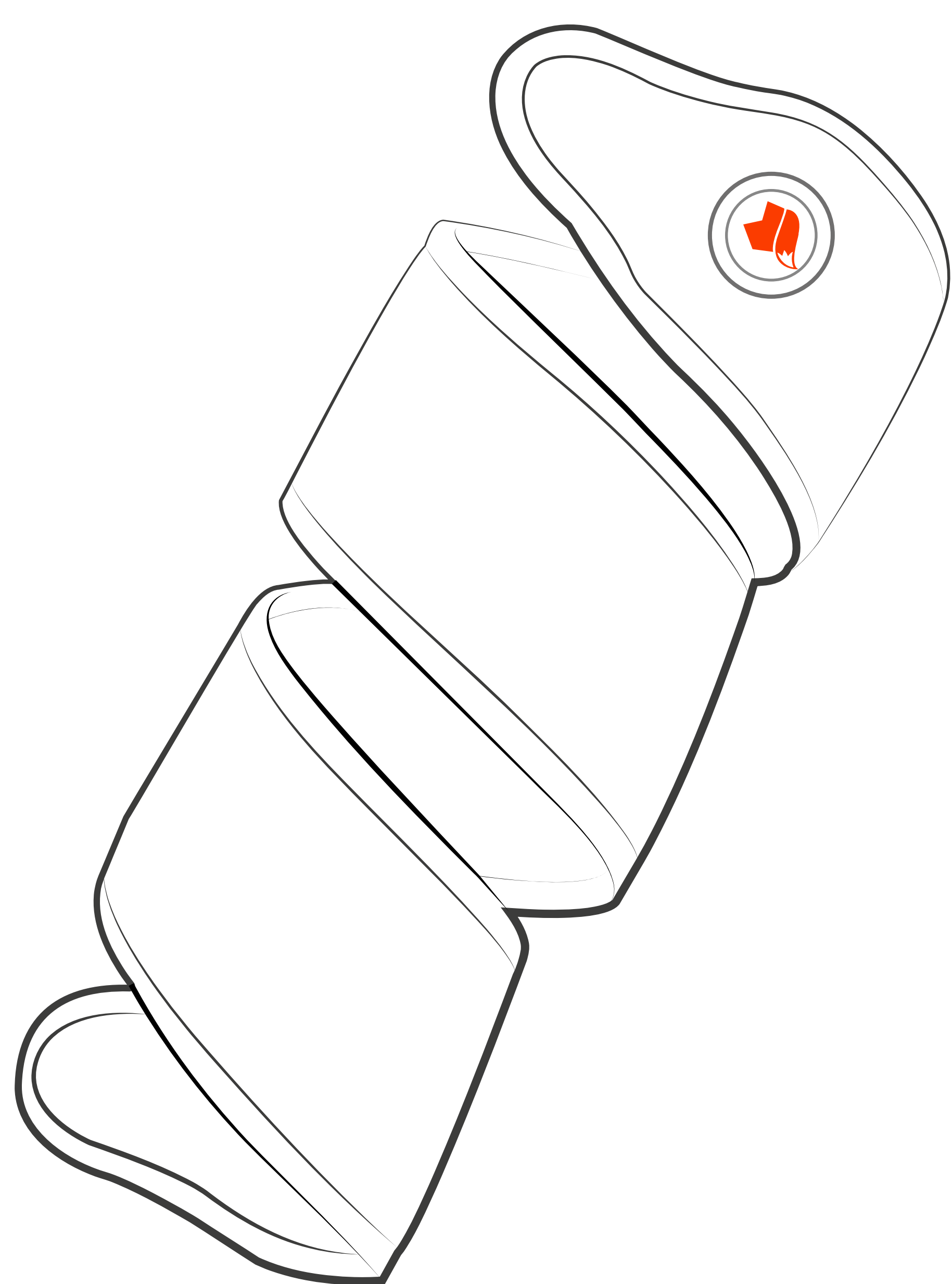


Il tutore riscaldante intelligente Vulpés \*

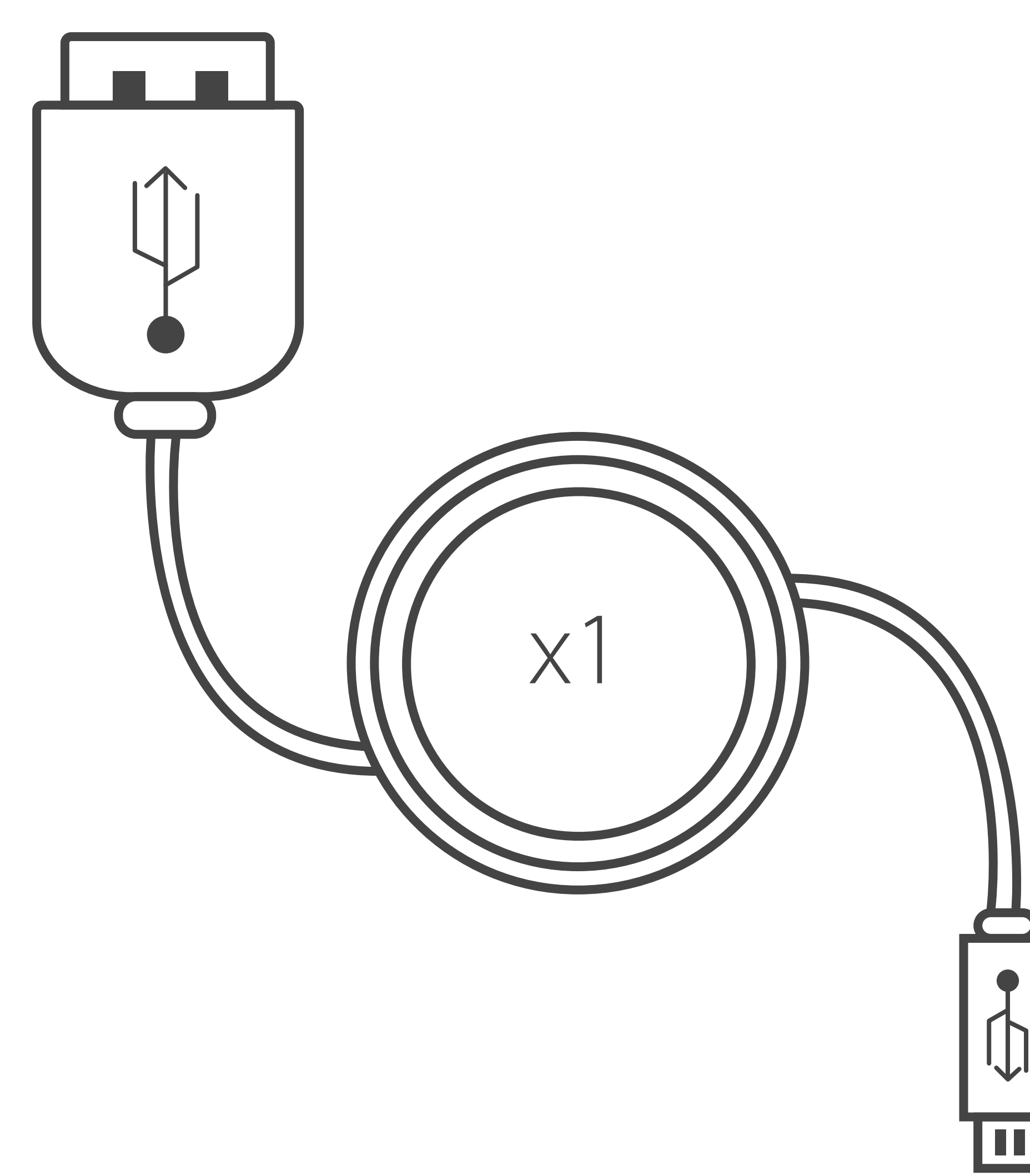

Cavo di Ricarica

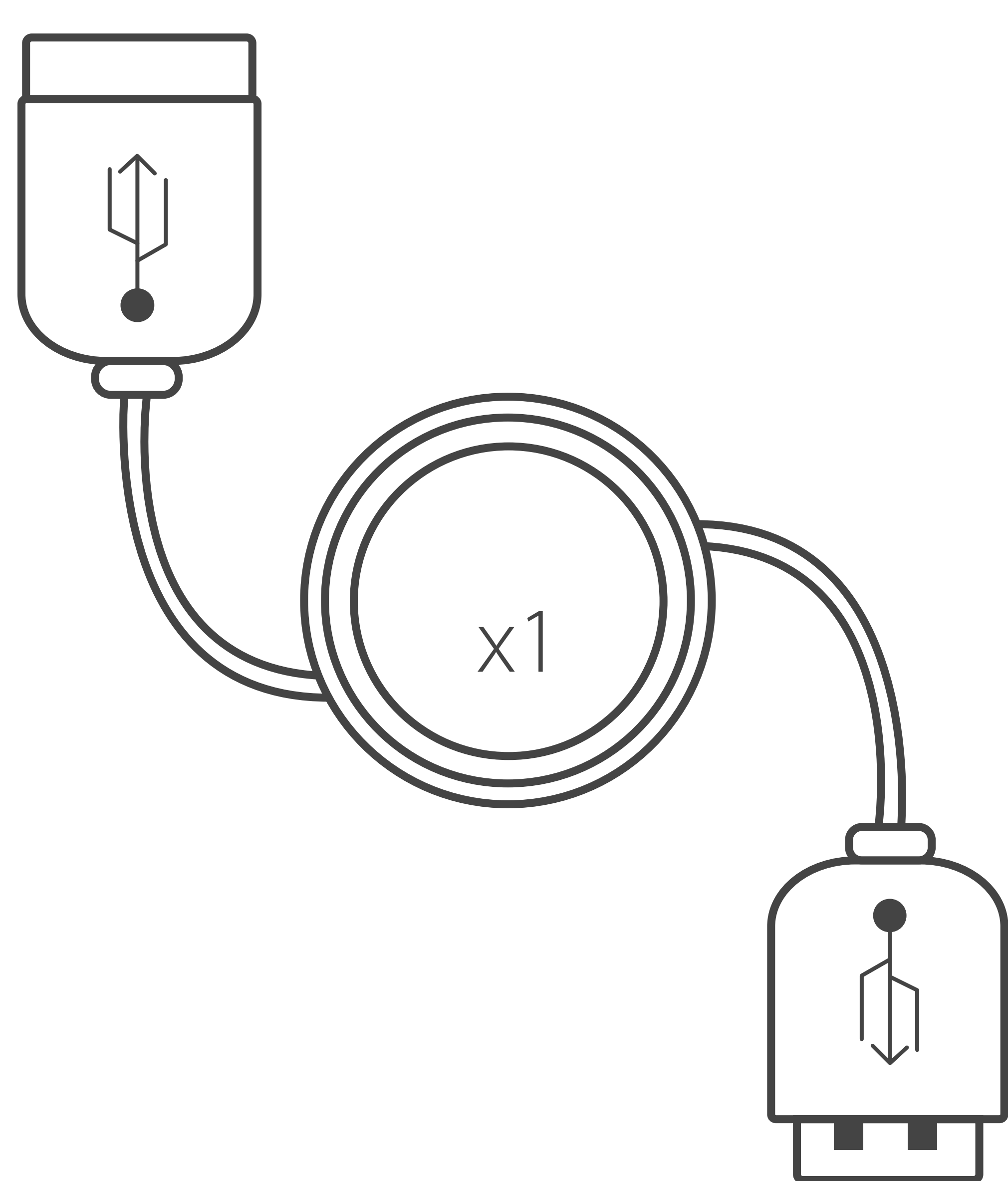


Cavo di prolunga

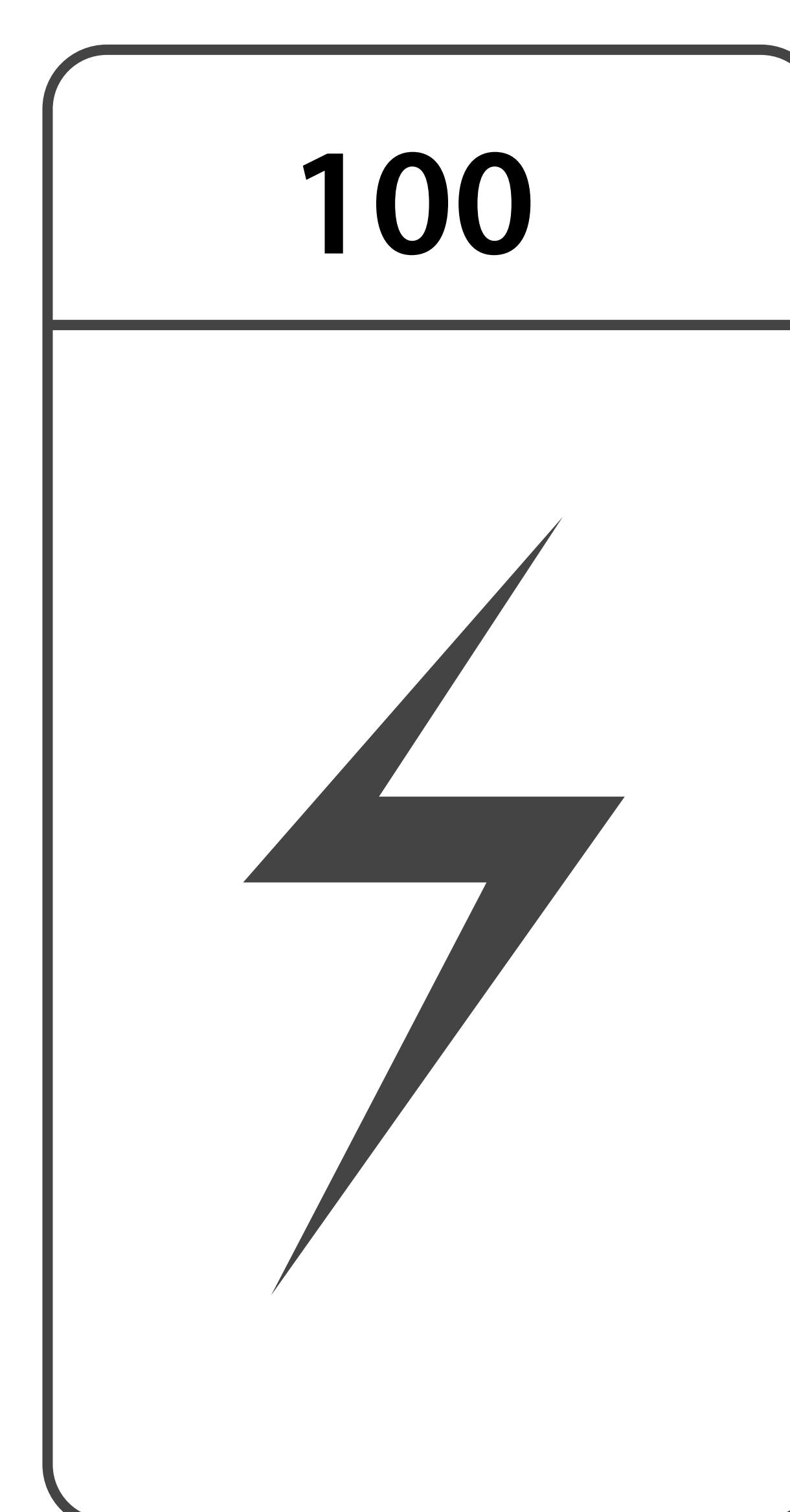

Powerbank da 5000 mAh

\* Supporto Riscaldante Intelligente Vulpés Dimensione : 103 cm

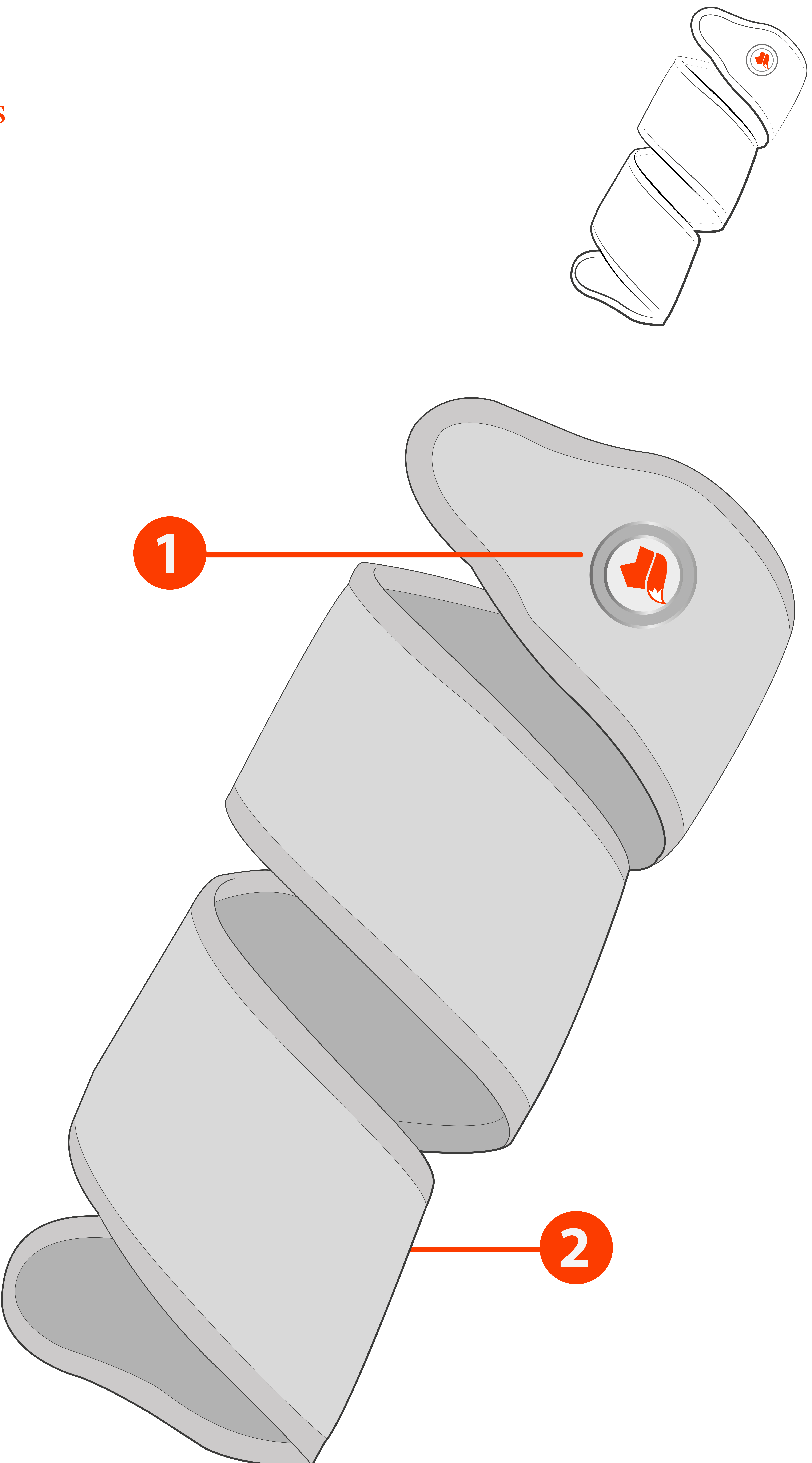


**1**

Controller wireless, 3 modalità

**2**

Custodia per batteria con USB integrato cavo

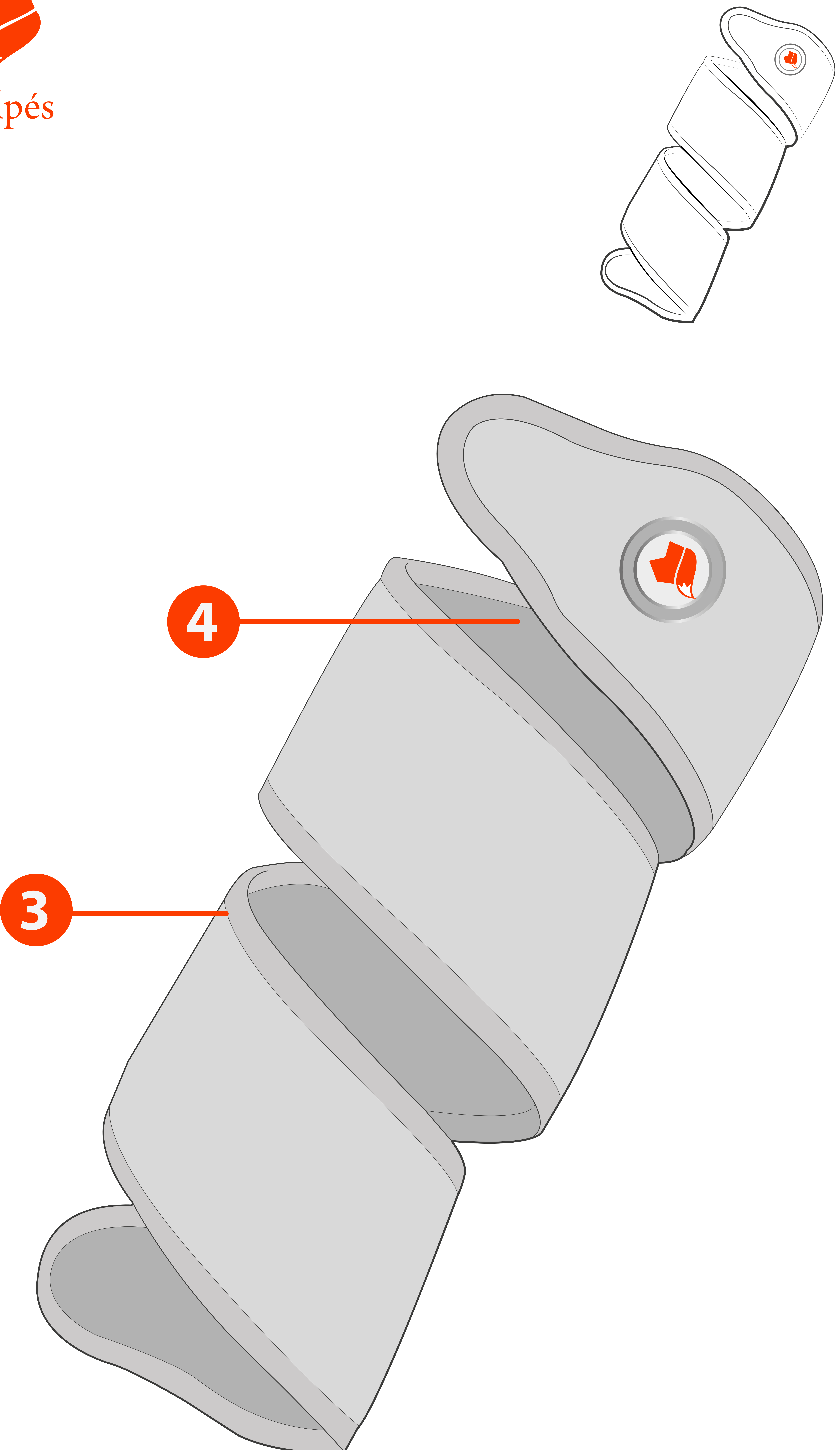



**3**

Materiale morbido e delicato per la pelle

**4**

Area Riscaldante

# CONFIGURAZIONE

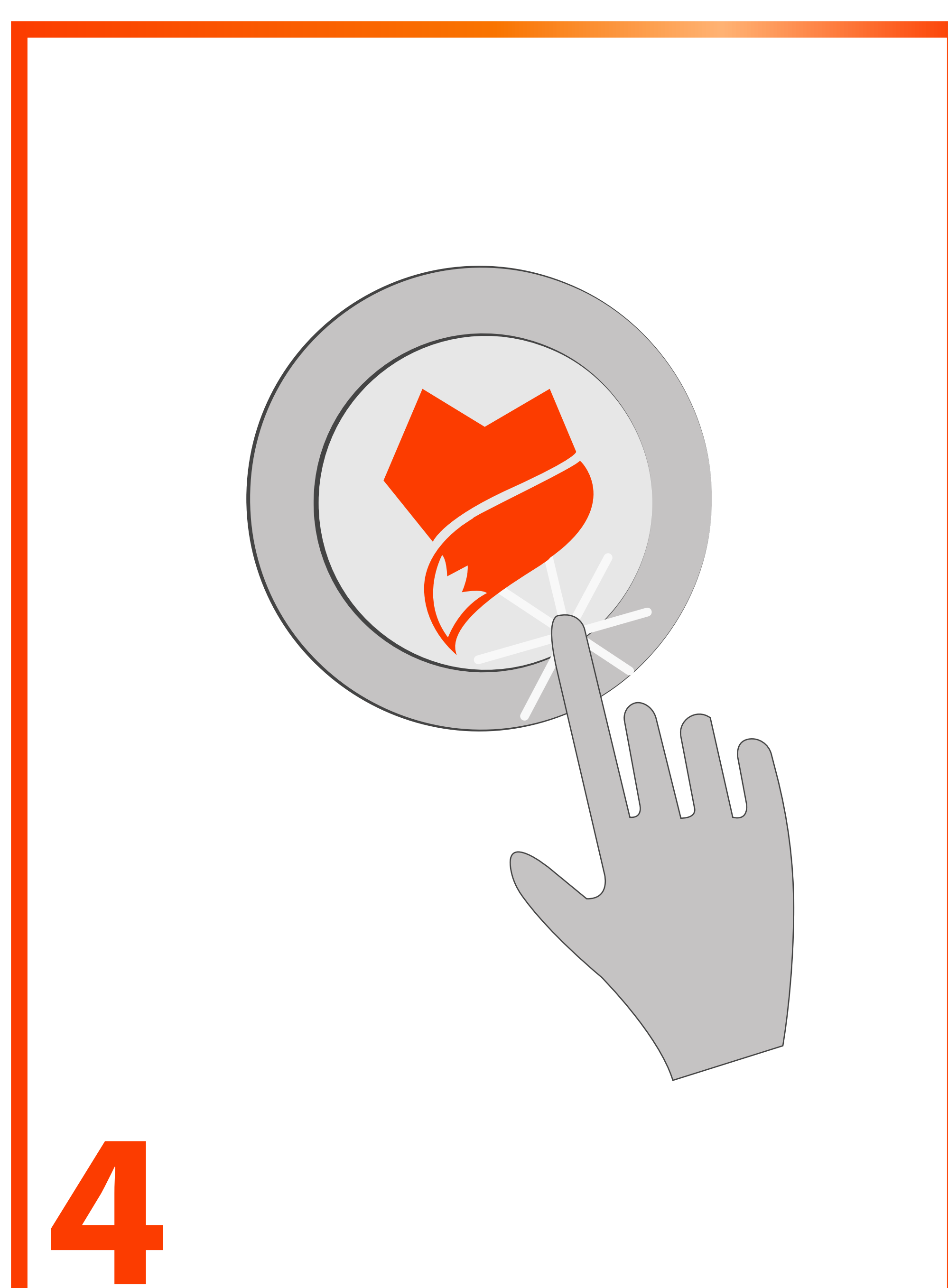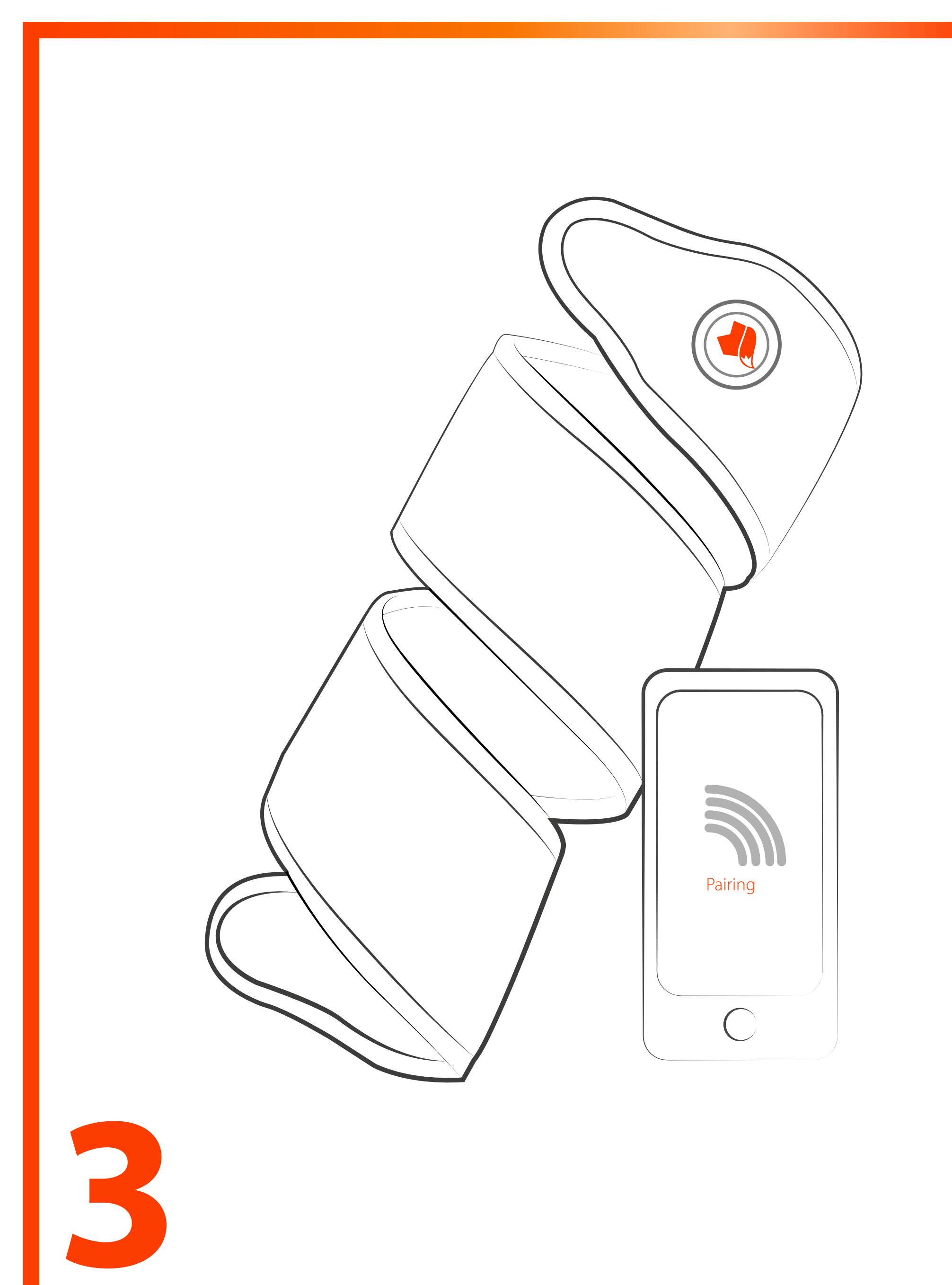

**1** Collegare il power bank da 5V / 2A alla presa USB che si trova nella tasca del power bank o nel cavo di estensione

**Nota: Prima dell'attivazione del supporto riscaldante intelligente, assicurarsi che la powerbank sia accesa. Alcune powerbank si spengono automaticamente dopo 30 secondi nel caso in cui la cintura non sia stata attivata**

**2** Scarica e installa l'applicazione mobile Vulpés Smartwear dall'Apple App Store o dal Google Play Store.


**3** Associa il tuo Supporto con l'applicazione mobile seguendo i passaggi all'interno dell'app

**Nota: Hai l'opzione di controllare le impostazioni di riscaldamento tramite: 3. Smartphone, 4. Pulsante**


**4** Premi il controller per attivare le impostazioni di riscaldamento. Premi il pulsante del controller per regolare il livello di riscaldamento desiderato: **basso (giallo), medio (arancione) e alto (rosso).**




# UTILIZZO

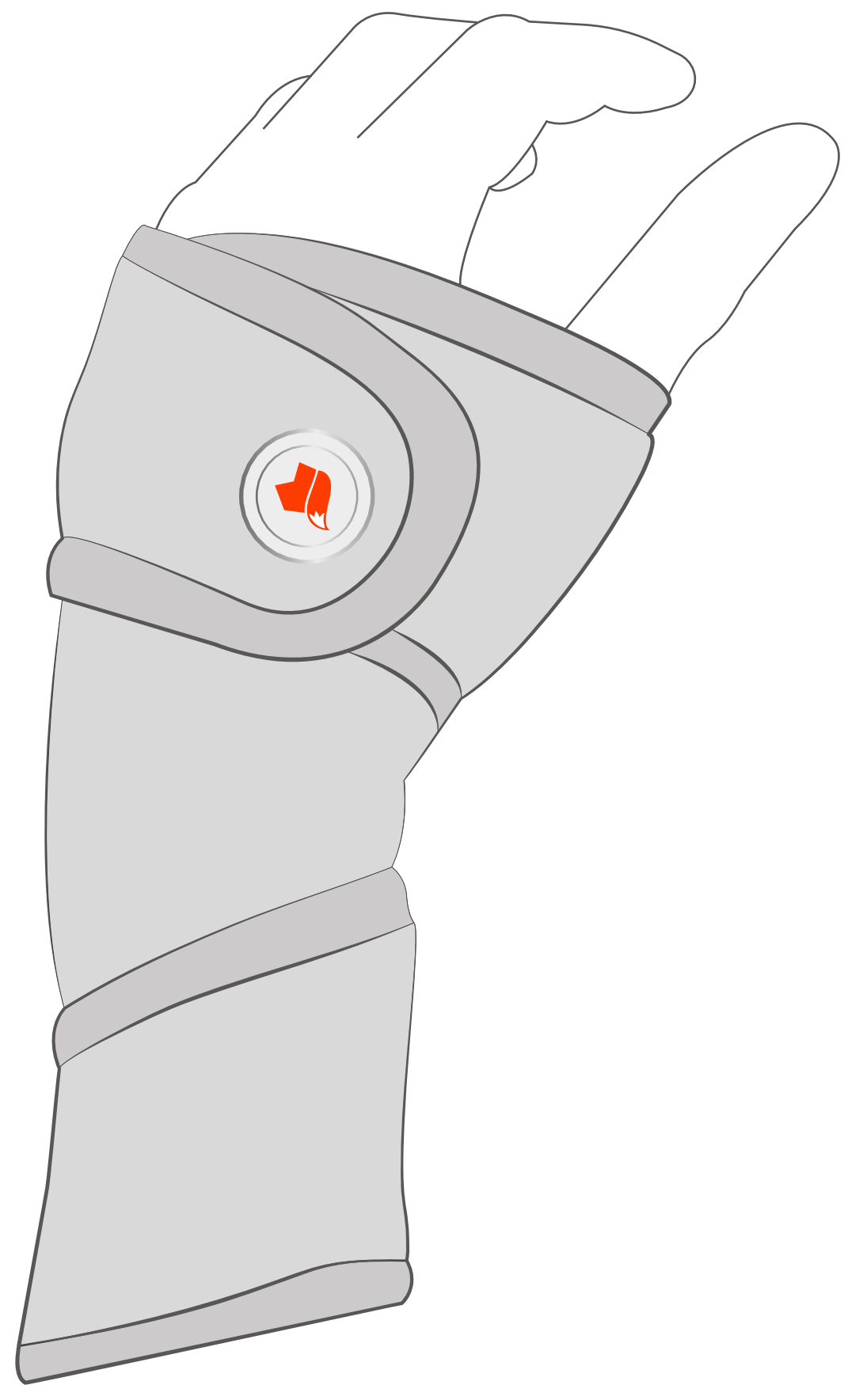


Polso

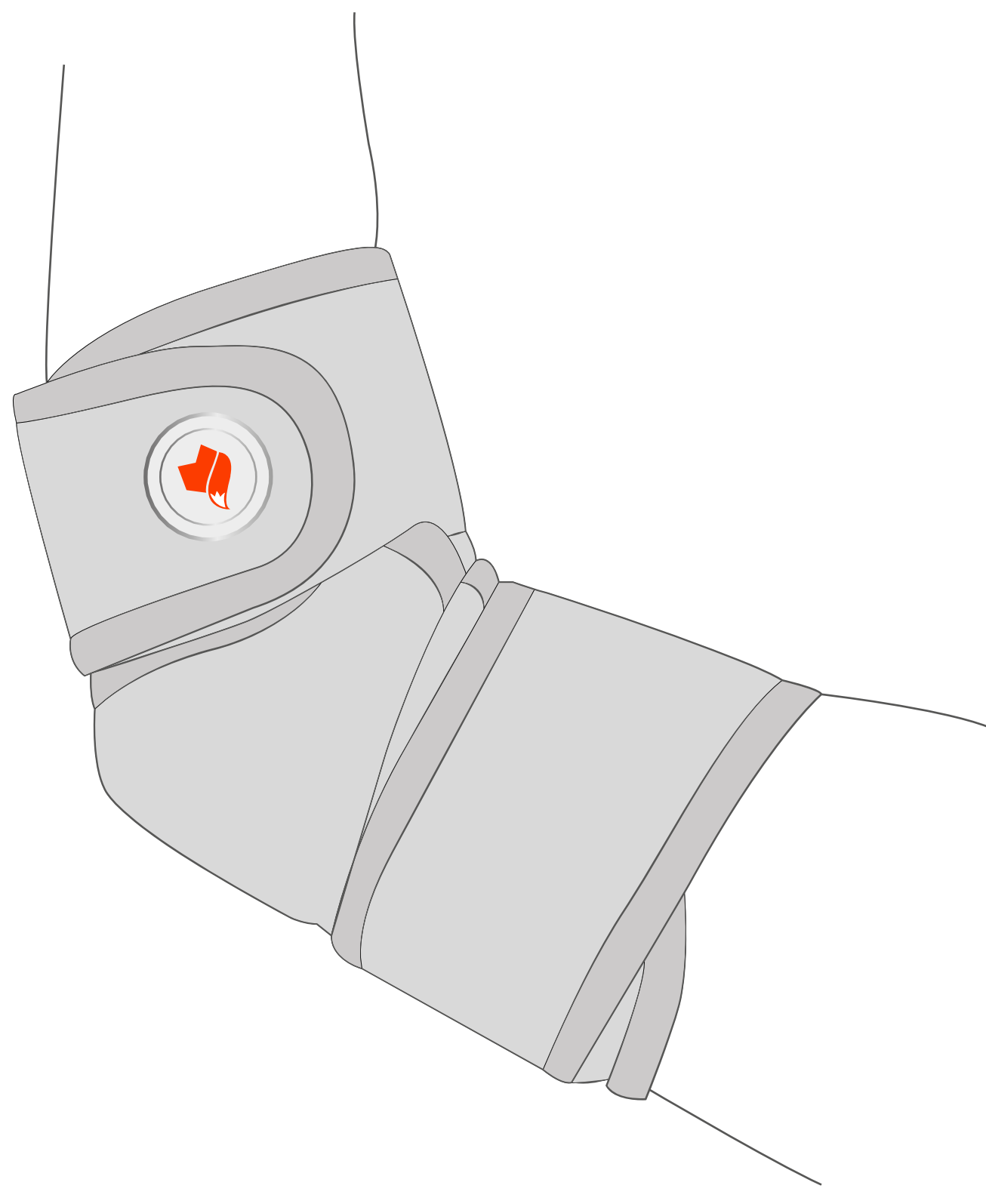


Gomito

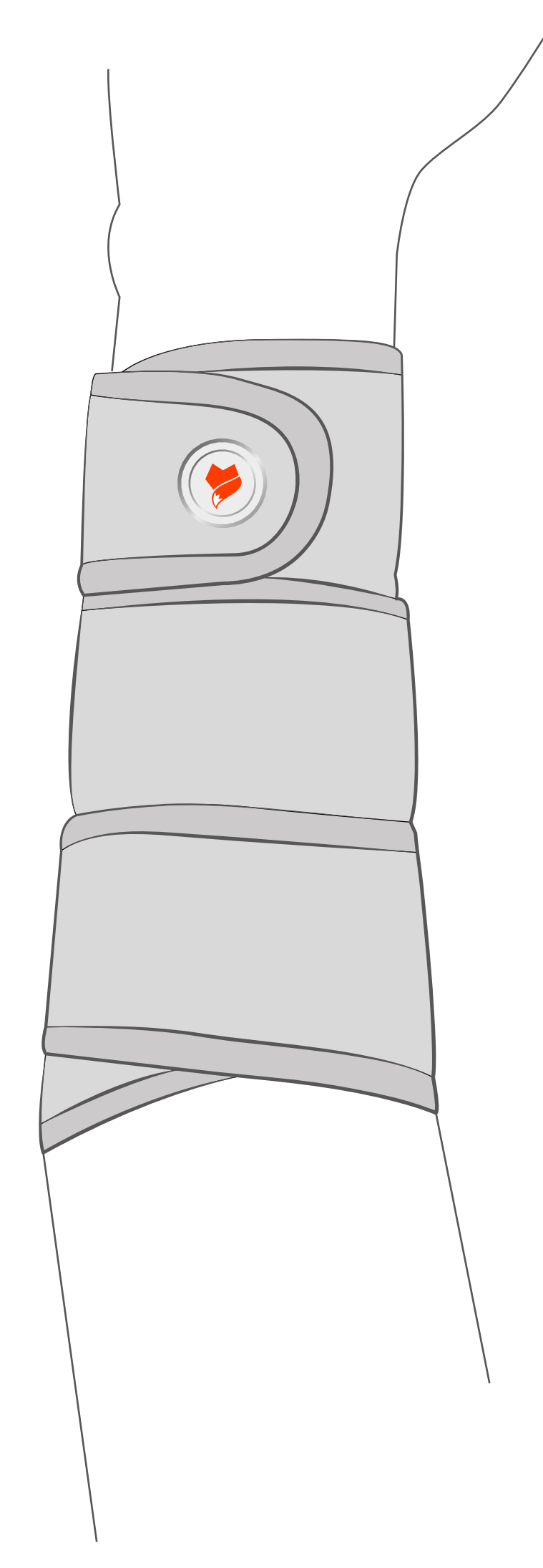

Braccio

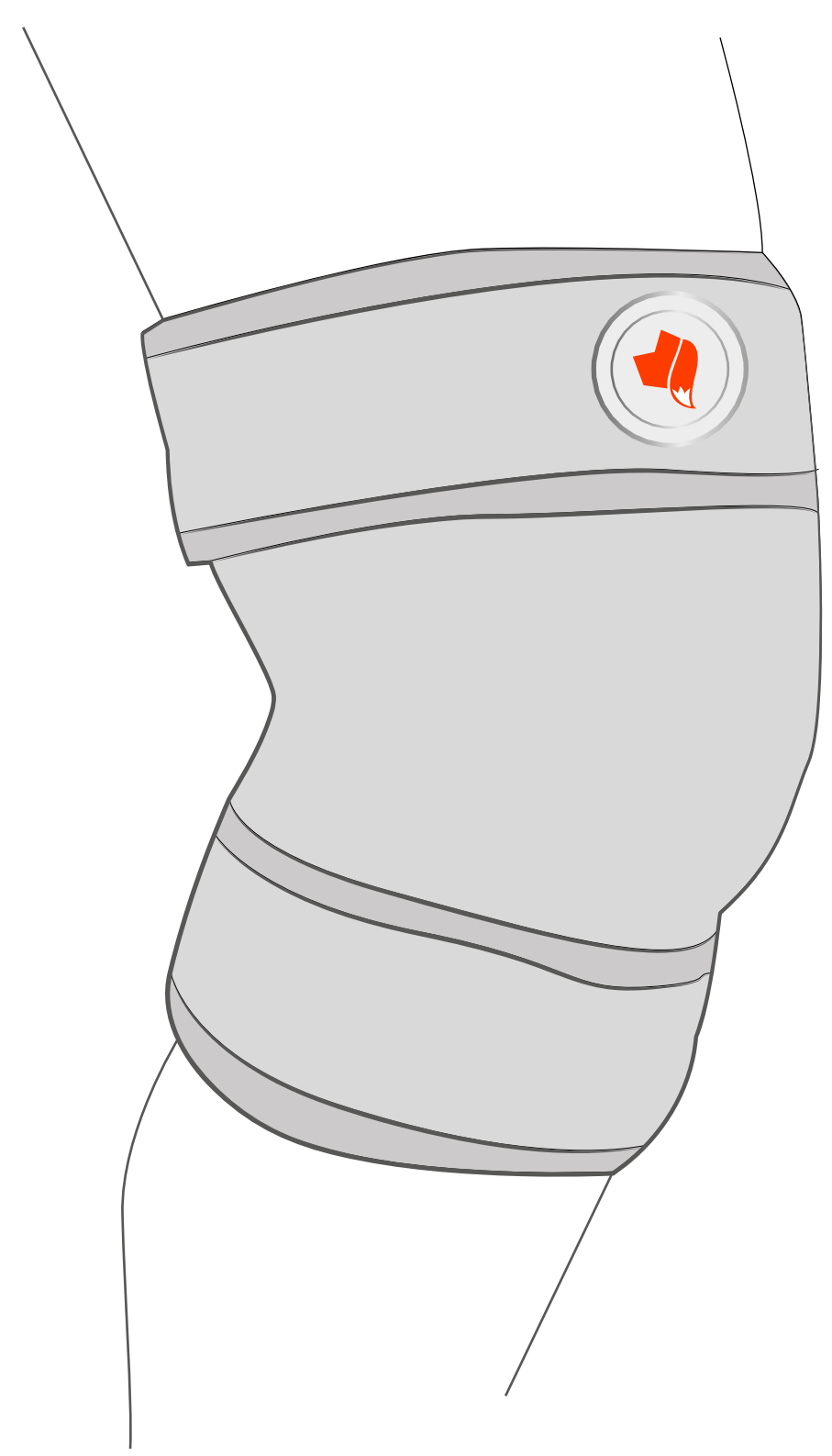

Ginocchio

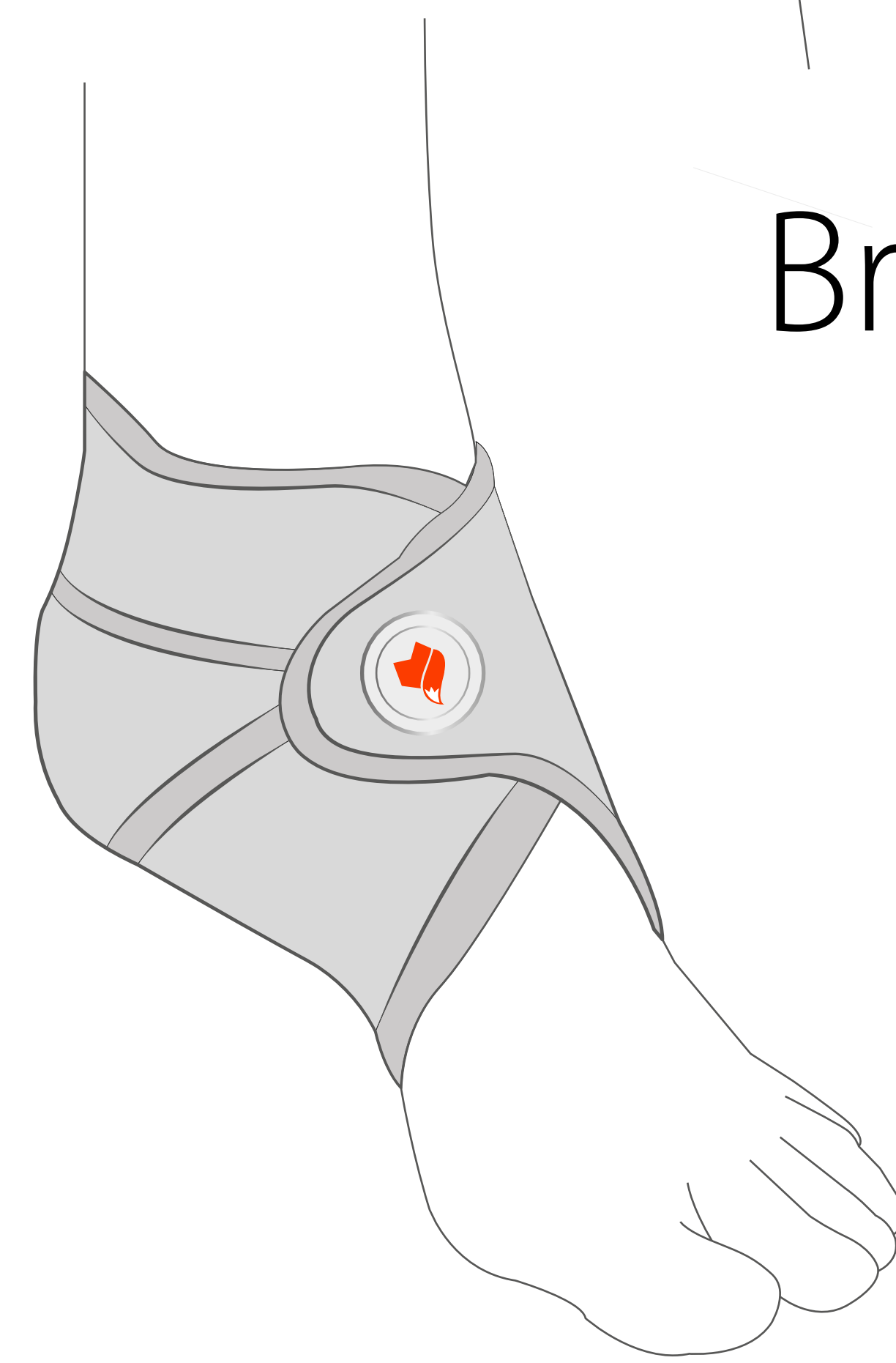

Caviglia

**Il Supporto Riscaldante Intelligente Vulpés può essere utilizzato al polso, gomito, braccio, Ginocchio, caviglia e altre aree del corpo**




**Il Supporto Riscaldante Intelligente Vulpés può essere utilizzato in mobilità con il Powerbank.**




# UTILIZZO


# POWER BANK

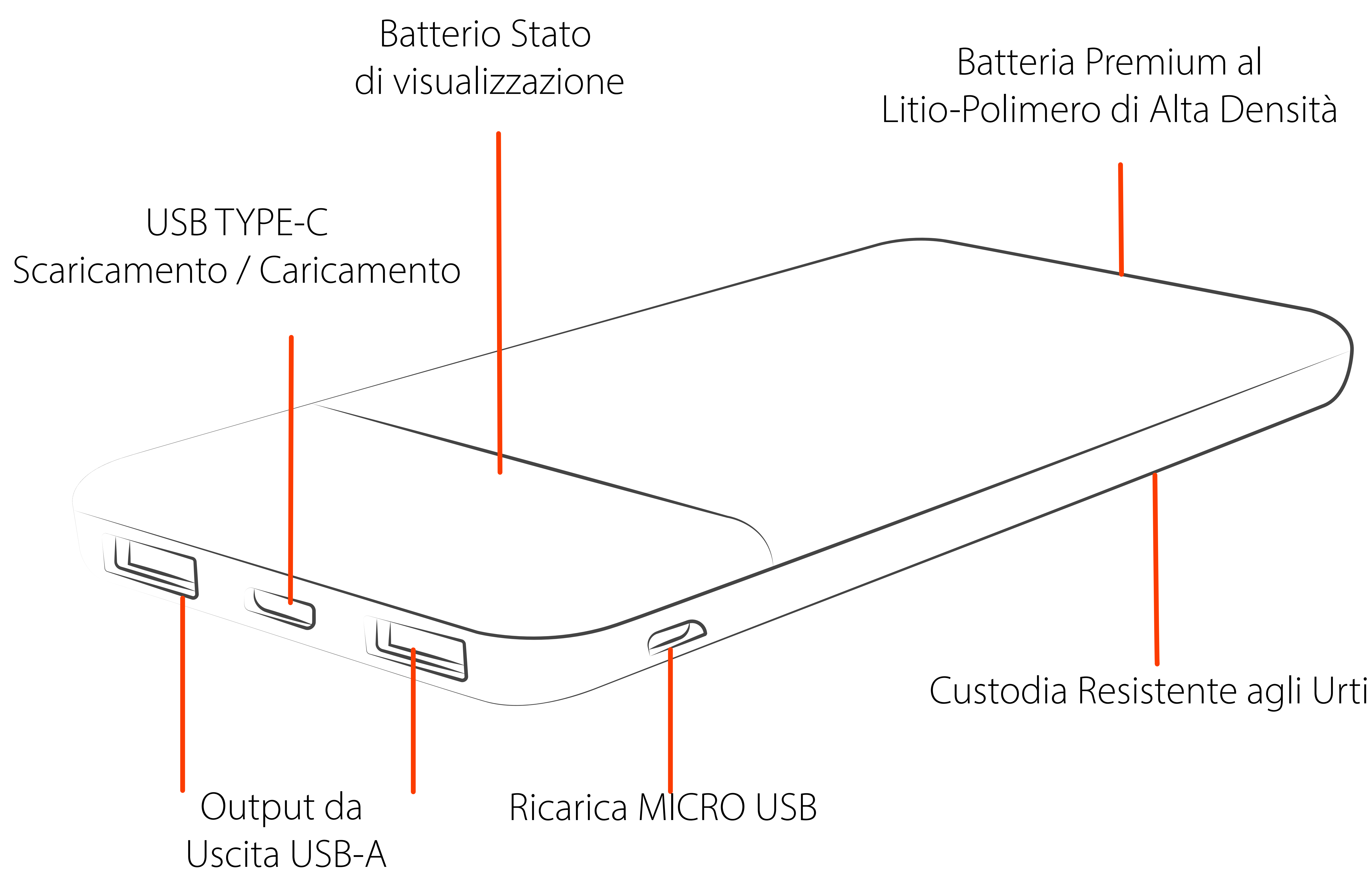

Leggero

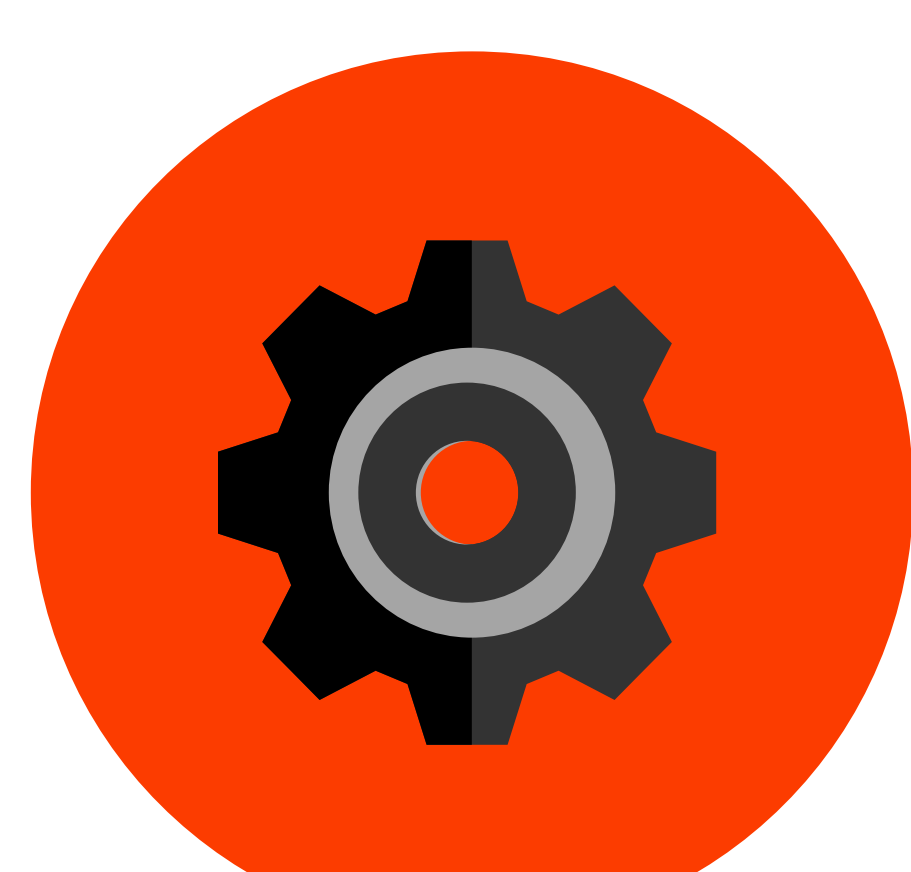


Alta efficienza

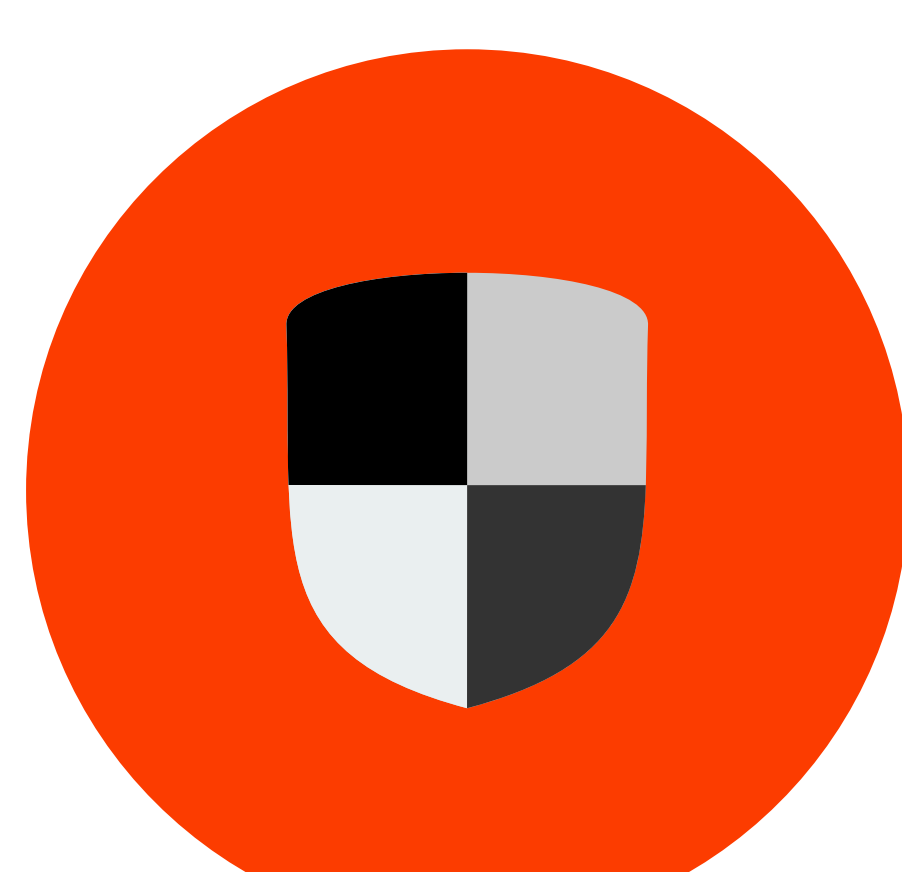

Massima Sicurezza




Batteria al Litio-Polimero

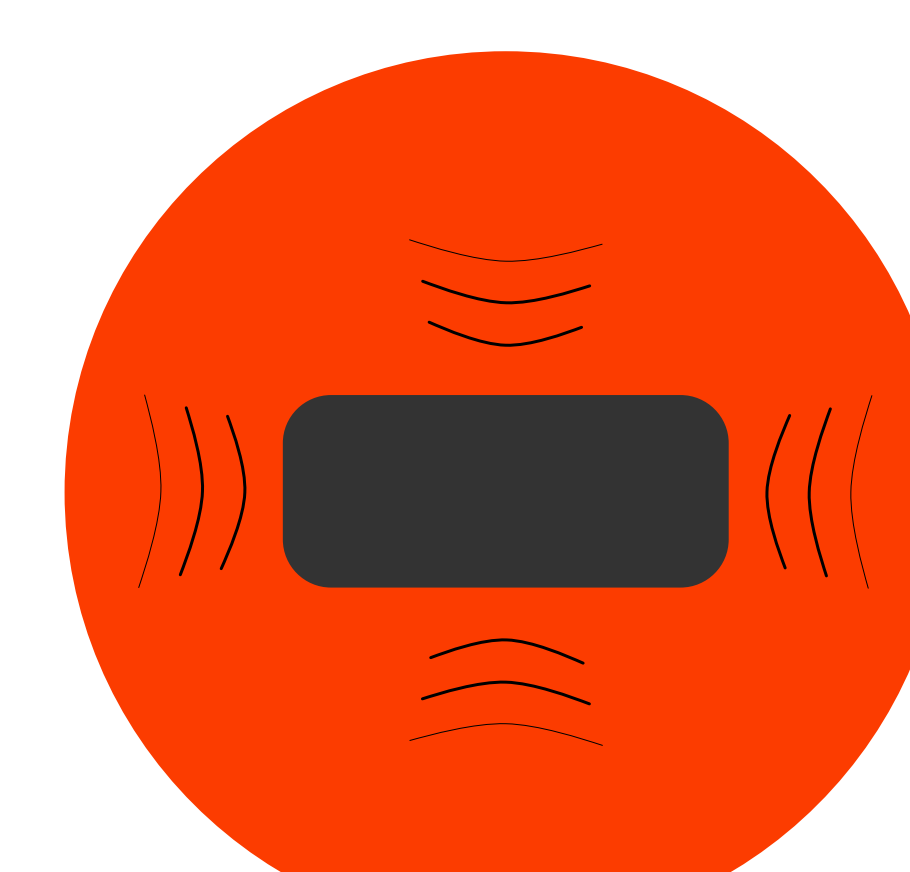


Resistente agli urti

## FUNZIONI DI SICUREZZA

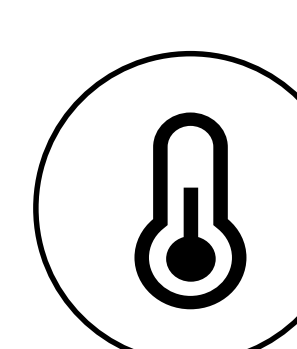


Protezione della temperatura

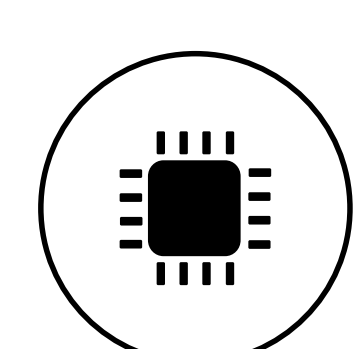


Protezione da sovraccarica e cortocircuito




Protezione da sovratensione in ingresso

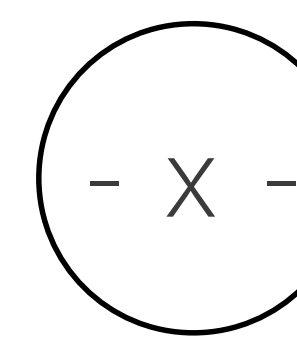


Protezione da cortocircuito

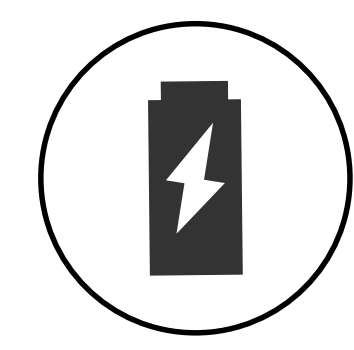


Protezione da sovraccarica e sovra-scarica

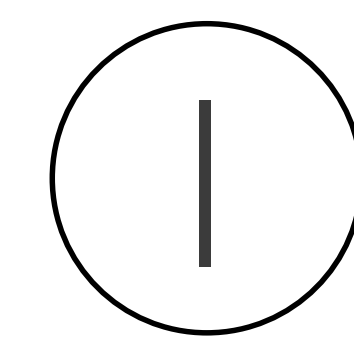


Protezione da sovracorrente in uscita

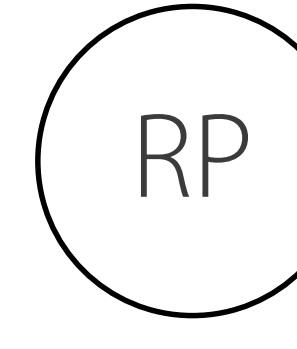

Protezione di reset

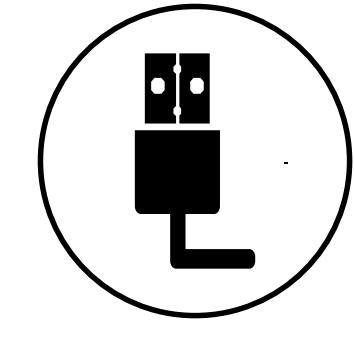

Protezione contro l'inversione di polarità in ingresso

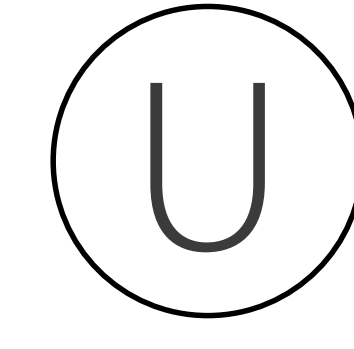

Protezione da sovratensione in uscita

## SPECIFICHE

Tipo di batteria	Polimero di litio	Ingresso	Micro USB	DC 5.0V / 2.0	A
			USB Tipo C	DC 5.0V / 2.4	A
Capacità	5000 mAh	Uscita	USB Tipo A	DC 5.0V / 3	A
			USB Tipo C	DC 5.0V / 2.4	A
Peso netto	110 g	Dimensioni	100 x 63.3 x 13.5 mm		

**Il prodotto non può essere utilizzato da persone con sensibilità al calore ridotta o da individui che potrebbero essere vulnerabili a lesioni.**

(ad esempio diabetici, persone con alterazioni della pelle legate a malattie o persone con pelle cicatrizzata nell'area dove deve essere applicato il cuscinetto, dopo aver assunto farmaci antidolorifici o alcol)

**Questo prodotto non è un "dispositivo medico". Non promette nessuna cura per malattie o patologie. Si prega di contattare il personale sanitario per consigli medici o opzioni di trattamento.**

**Le persone che provano qualsiasi disagio indossando il Tutore Vulpés, devono rimuoverla immediatamente e cercare consiglio medico prima di riprendere l'uso del tutore.**

**Persone che hanno allergie cutanee a materiali sintetici, gomma o plastica che possono essere trovati nel tutore, dovrebbero monitorare attentamente la loro pelle ogni volta che indossano il tutore. In caso di irritazione della pelle, interrompere immediatamente l'uso del tutore e cercare consiglio medico.**




**Pulizia:** Si prega di spegnere il dispositivo prima di pulirlo e rimuovere il powerbank dalla tasca. Si prega di pulire il dispositivo solo a mano. Prima di tentare nuovamente di utilizzare il sistema termico, questo deve essere completamente asciutto. Durante il processo di asciugatura si prega di evitare qualsiasi contatto con i termosifoni.

Si prega di evitare il contatto generale con l'acqua durante il funzionamento.



**Bambini: Attenzione!** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con dispositivi o accessori.

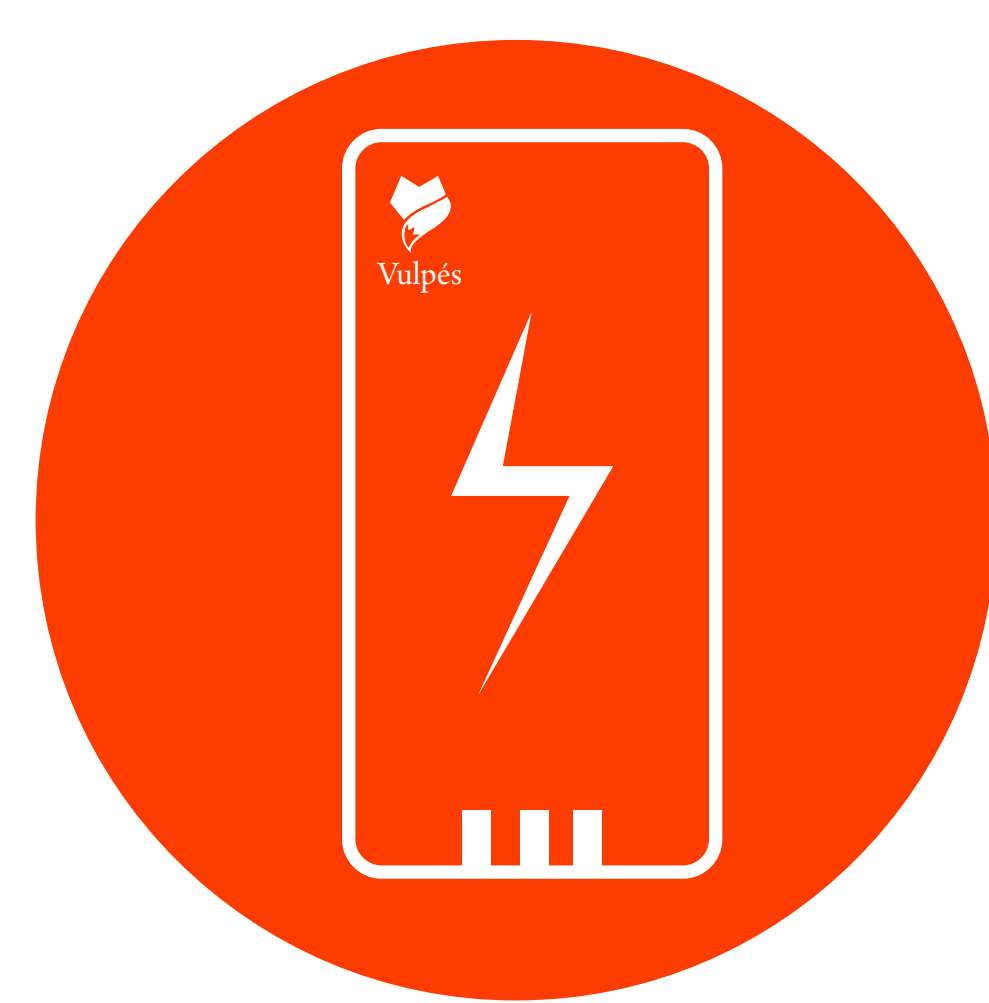

**Power Bank:** Si prega di utilizzare sempre la porta di uscita del **power bank 5V/2A**. Utilizzando porte di uscita con tensione superiore si danneggia permanentemente il sistema di controllo.

**Descrizione, Funzione e Uso Previsto del Power Bank Vulpés:**  
Il Prodotto è realizzato per caricare o alimentare dispositivi mobili e prodotti specifici Vulpés che funzionano con 5V DC. Il Power Bank è dotato di batteria al Litio-Polimero integrata, che funge da accumulatore di energia.

Raccomandiamo di utilizzare Powerbank Vulpés o powerbank di fornitori di marche note. **Si prega di controllare attentamente le istruzioni dei powerbank di terze parti prima di utilizzarli in connessione con il tutore Vulpés.**

**IMPORTANTE**

**Nota: In caso di problemi con il prodotto si prega di contattare il team Vulpés o il distributore locale.**



**Manutenzione e Cura:** In caso di malfunzionamento, si prega di lasciare che un professionista esegua la manutenzione e le riparazioni. Utilizzare solo un panno asciutto e morbido per la pulizia. Non utilizzare detersivi e prodotti chimici.



**Istruzioni di Sicurezza** - Si prega di non effettuare i seguenti aspetti:

**Non modificare il prodotto, parti di prodotto o accessori.**

**Non aprire la custodia.**

**Evitare condizioni estreme, come il calore eccessivo, la luce solare diretta, così come microonde, vibrazioni e pressione meccanica.**

**Non gettare nel fuoco.**

**NON lasciare mai il prodotto incustodito quando è in uso!**

**Non cortocircuitare porte e circuiti.**

**Smaltire le batterie che perdono, sono deformate o corrose con adeguate protezioni.**

**Non utilizzare in ambienti esplosivi.**

**Quando non si utilizza per lungo tempo, caricare ogni 3 mesi per mantenere la capacità.**



**Danni materiali dovuti a un uso improprio:** Confrontare le specifiche del prodotto, dell'alimentazione e dei periferici. Questi devono essere identici. Utilizzare il prodotto, parti di prodotto e accessori solo se in perfette condizioni.



**Conservazione:** Maneggiare il dispositivo con cura e conservarlo in un luogo pulito e privo di polvere. **Non esporre il prodotto a fiamme, non lasciarlo cadere, non lanciarlo e non tentare di piegarlo o tagliarlo.**

**Si prega di non tentare di riparare alcuna parte elettrica o componente del tutore. Ciò invaliderebbe la garanzia e potrebbe risultare in malfunzionamenti del controllo della temperatura, che potrebbero causare ustioni da lievi a gravi.**

**Si prega di non tagliare o modificare il prodotto. Ciò invaliderebbe la garanzia e potrebbe influire sul funzionamento del prodotto.**

Non tagliare il tutore e tenerla lontano da oggetti appuntiti. Un taglio del tutore può danneggiare il prodotto. Nel caso in cui il tutore sia stata tagliata accidentalmente, rimuovere il prodotto dal corpo e non utilizzarlo più.

**IMPORTANTE**



**Spegnimento:** Assicurarsi che il dispositivo sia spento quando viene indossato durante la notte e spegnerlo prima di addormentarsi.

Gli utenti dovrebbero essere consapevoli che diverse condizioni ambientali, incluse temperature alte o basse, possono cambiare le caratteristiche del tutore e possono ridurre le prestazioni così come la durata della batteria.

Si prega di non attivare il powerbank e il tutore Vulpés in stato congelato.



**Riciclo:** Secondo la direttiva europea WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti dei consumatori. I suoi componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente l'uno dall'altro. Altrimenti, sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare il nostro ambiente. Come consumatore, sei legalmente obbligato a smaltire dispositivi elettrici ed elettronici al produttore, al rivenditore o ai punti di raccolta pubblici alla fine della vita utile dei dispositivi gratuitamente. I particolari sono regolati nel diritto nazionale. Il simbolo sul PRODOTTO, nel manuale utente o sulla confezione allude a queste condizioni. Con questo tipo di separazione dei rifiuti, applicazione e smaltimento dei dispositivi usati ottieni un contributo importante alla protezione dell'ambiente.

**Numero WEEE 28527803**



**La nostra Garanzia:** Soggetto alle condizioni di questa Garanzia Limitata, Vulpés garantisce che questo PRODOTTO sia privo di difetti di progettazione, materiale e manodopera al momento dell'acquisto originale da parte di un consumatore. Questa Garanzia Limitata durerà per un periodo di un (1) anno a partire dalla data originale di acquisto del PRODOTTO.

Si prega di essere consapevoli che, data lo stato fisico-chimico della tecnologia al Litio-Polimero, la durata della batteria potrebbe diminuire dopo un certo tempo di utilizzo. Una maggiore intensità di utilizzo accelera il processo di degradazione della batteria. **Per il powerbank Vulpés non fornisce alcuna garanzia aziendale.**

Per ulteriori dettagli si prega di visitare il sito web Vulpés  
<https://www.vulpes-smartwear.com/>

**IMPORTANTE**