



Cuscinetto Riscaldante Intelligente per il Collo Guida di Benvenuto

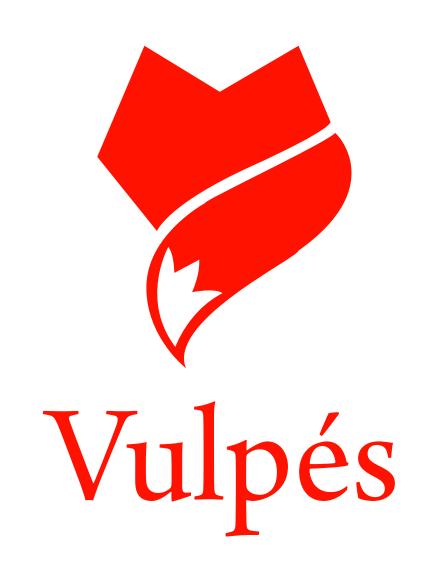

Descrizione Prodotto

Il tutore riscaldante intelligente Vulpés è stato sviluppato per il sollievo dal dolore, il rilassamento e la promozione della guarigione. Il tutore riscaldante intelligente offre un supporto termico preciso con il cuscinetto riscaldante in grafene su misura che può essere applicato al polso, alle articolazioni, alla caviglia, al ginocchio, al gomito e ad altre aree correlate ai muscoli.

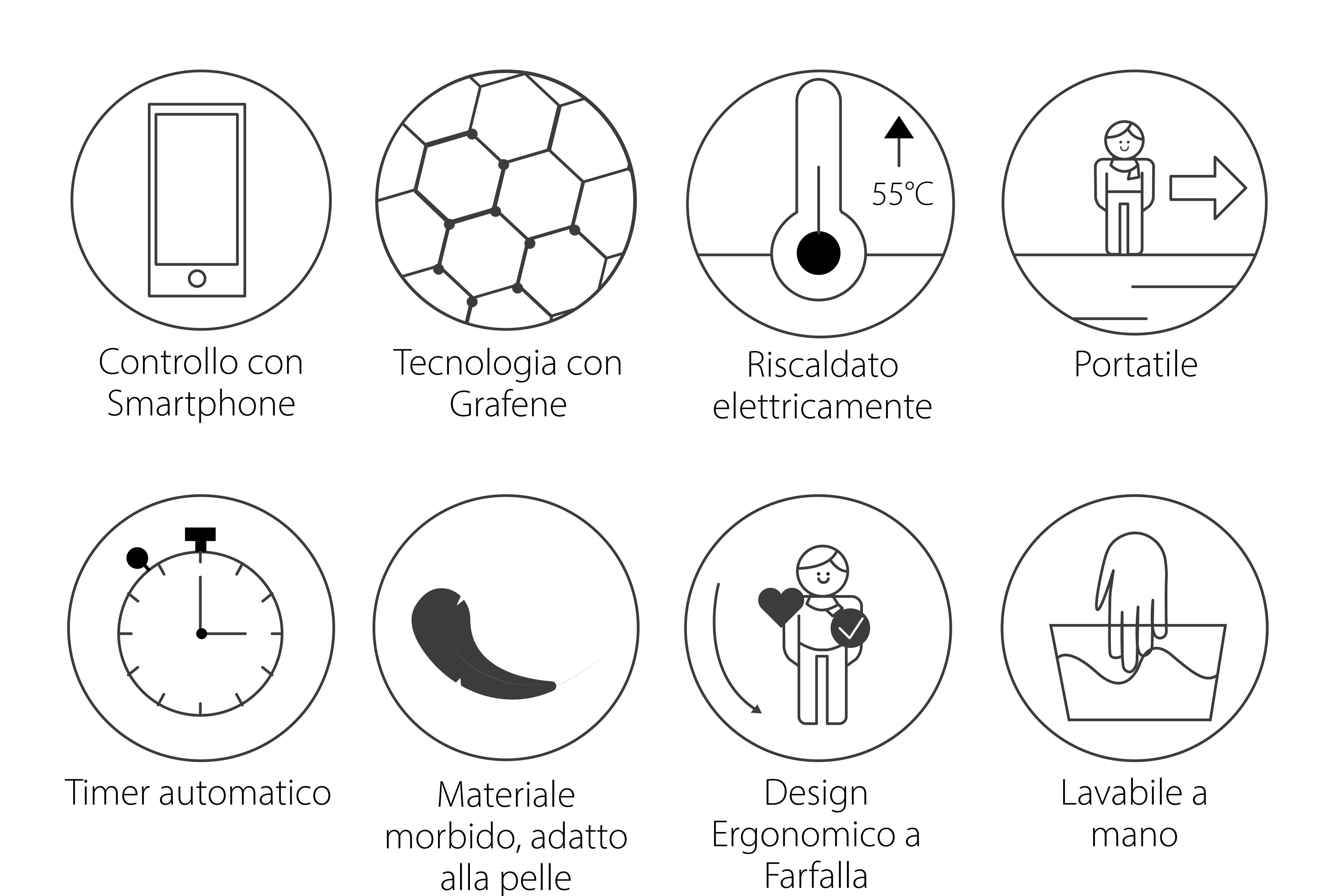




Il Cuscinetto Riscaldante Intelligente per collo Vulpés può essere utilizzato per supportare diverse condizioni.



Rigidità del Collo



Spasmi Muscolari

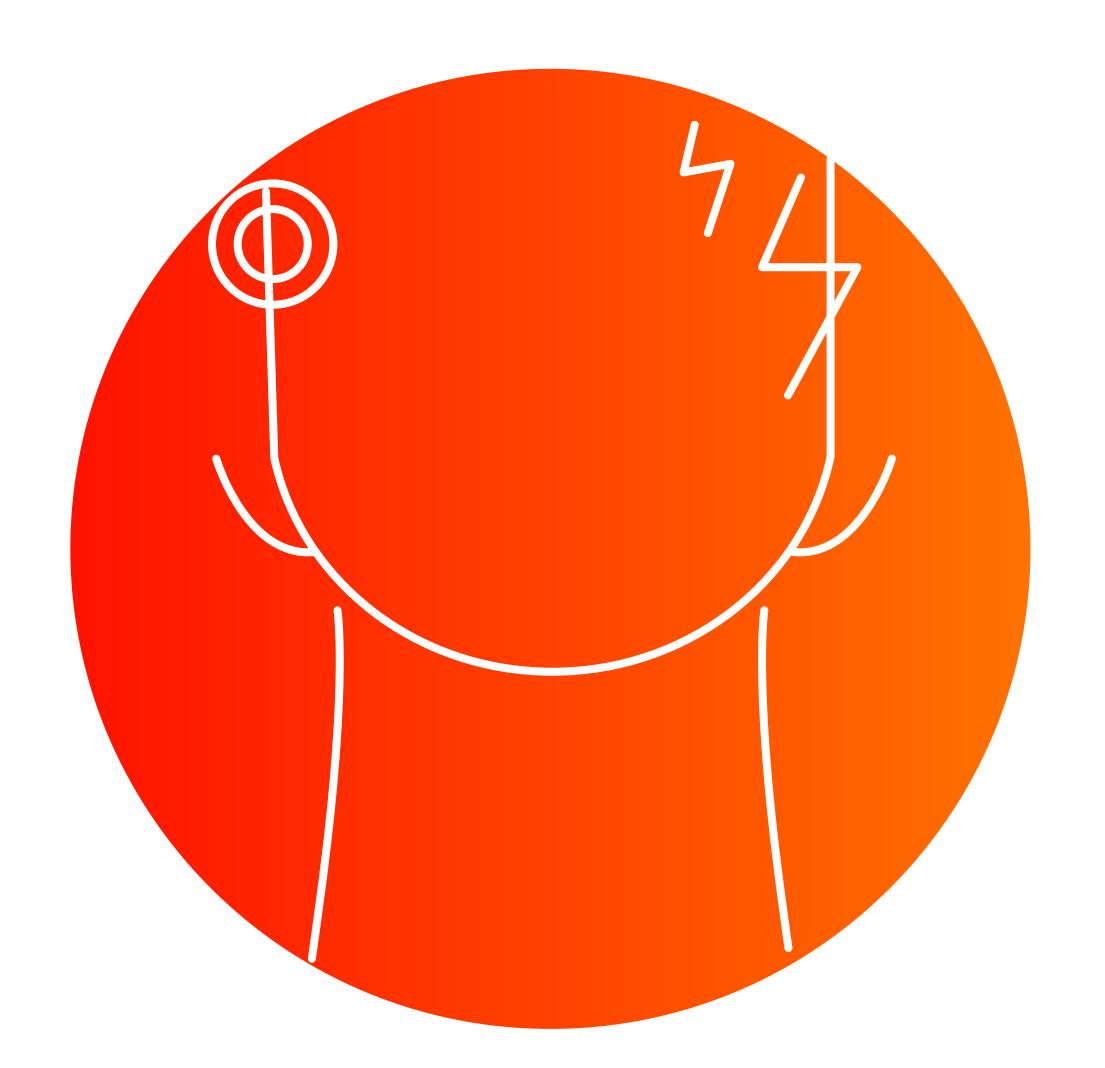

Sollievo dal mal di testa



Miglioramento del sonno



Sollievo dal dolore



Favorire il recupero muscolare


Il Cuscinetto Riscaldante Intelligente per collo Vulpés non è un "prodotto medico". Non promette nessuna cura per malattie o patologie. Si prega di contattare il personale sanitario per consigli medici o opzioni di trattamento.


APPLICAZIONI




COSA C'È NELLA CONFEZIONE?



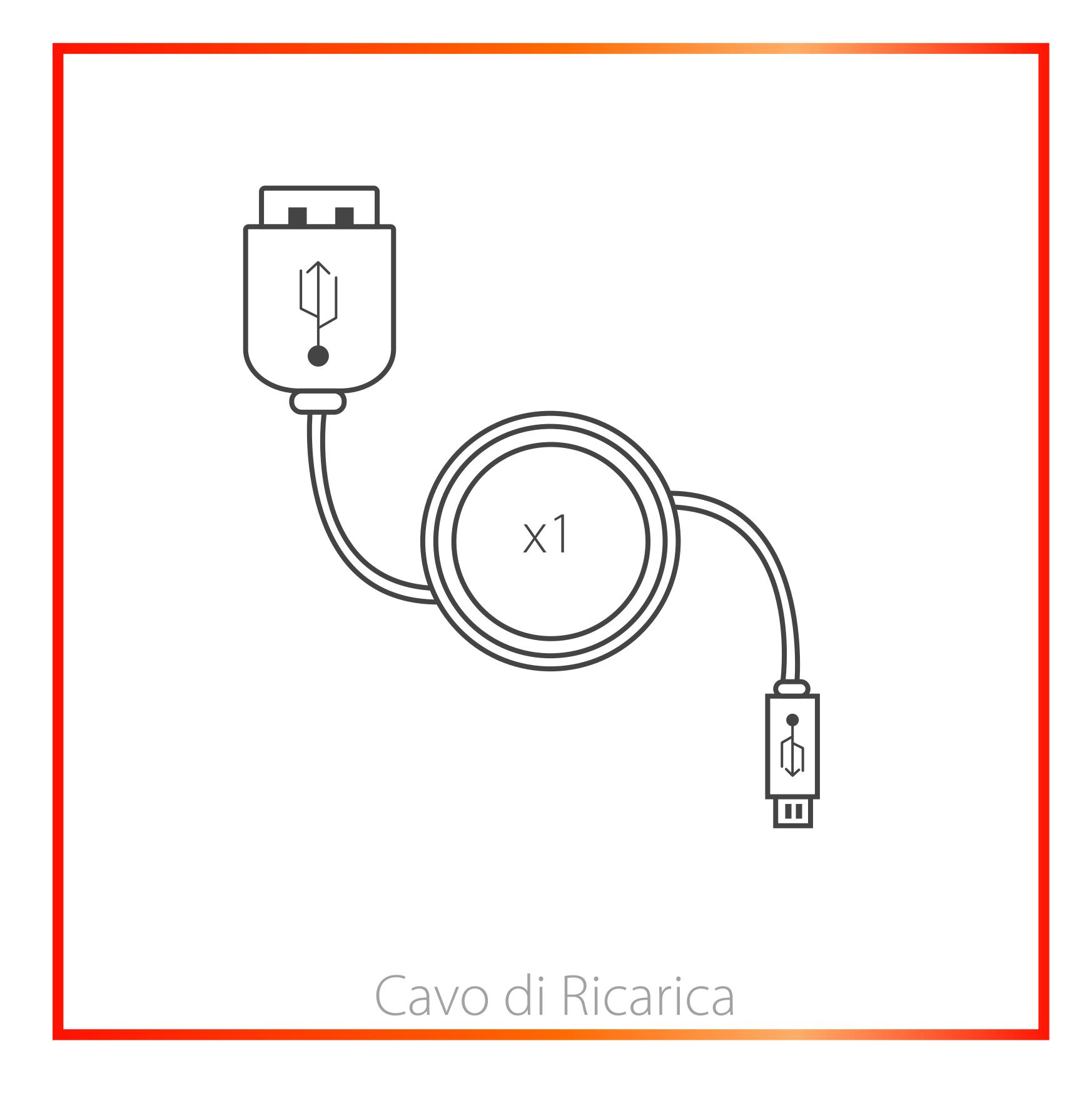


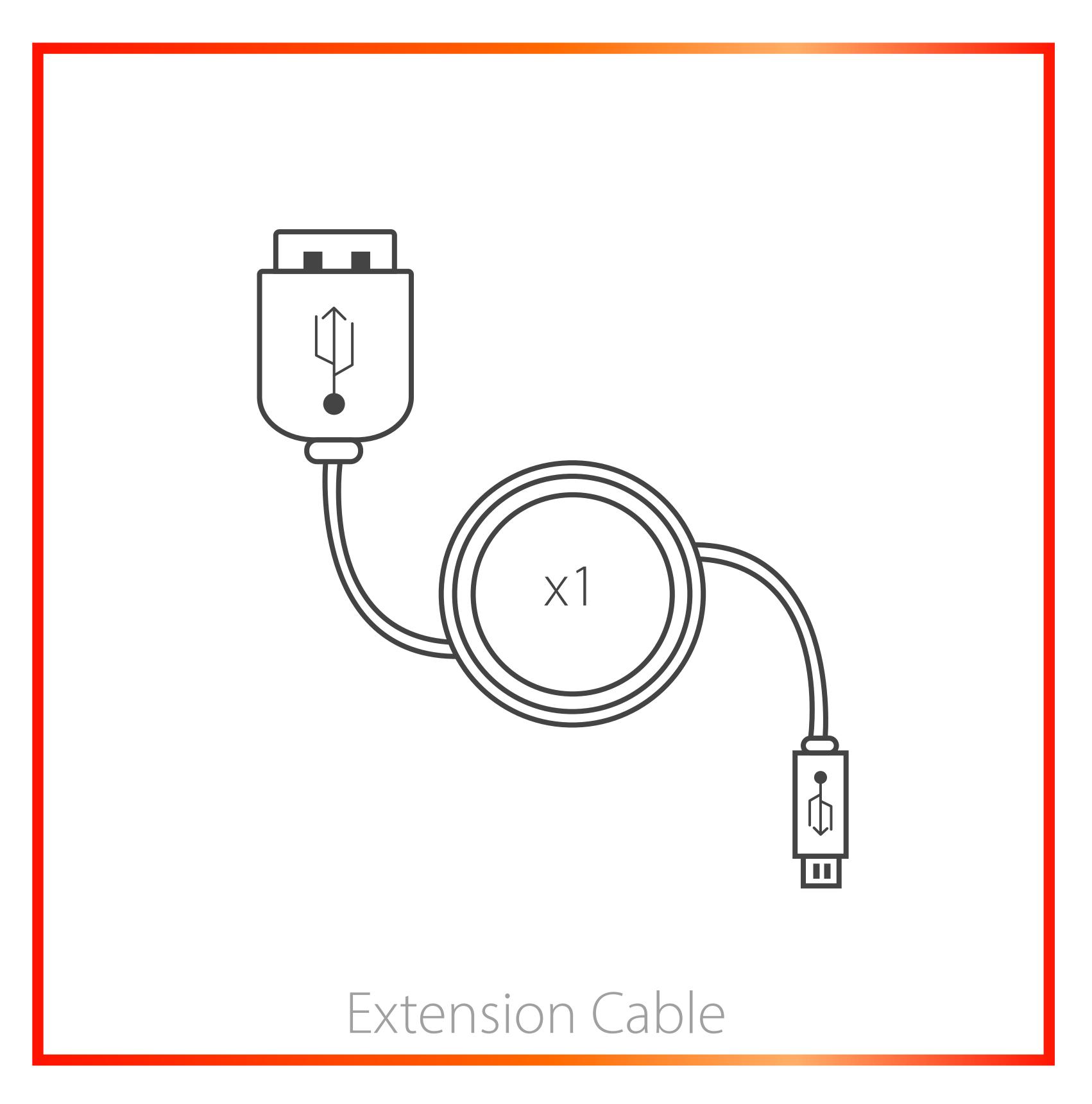


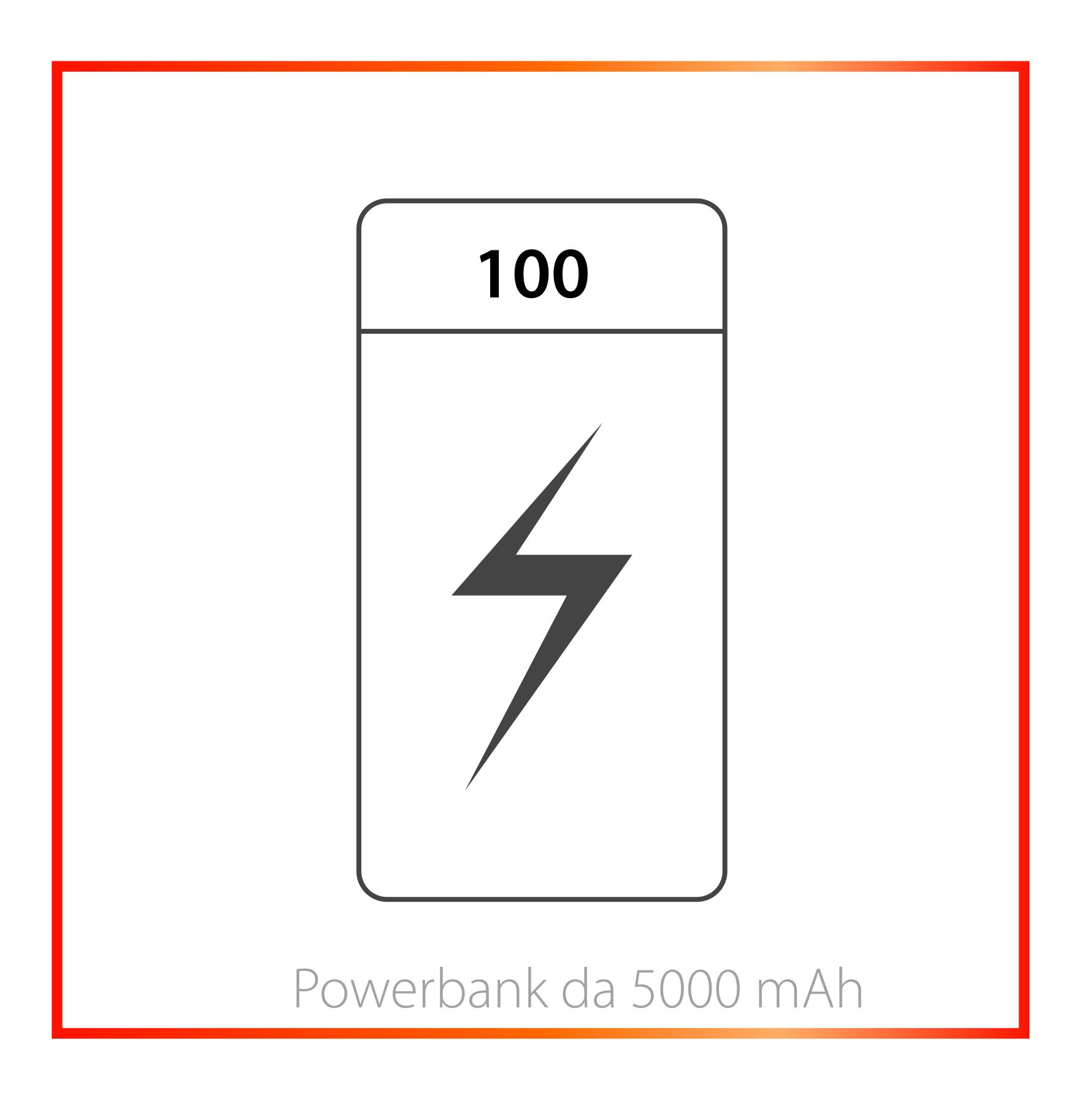


^{*} Cuscinetto Riscaldante Intelligente per collo Vulpés Dimensione : 69 cm



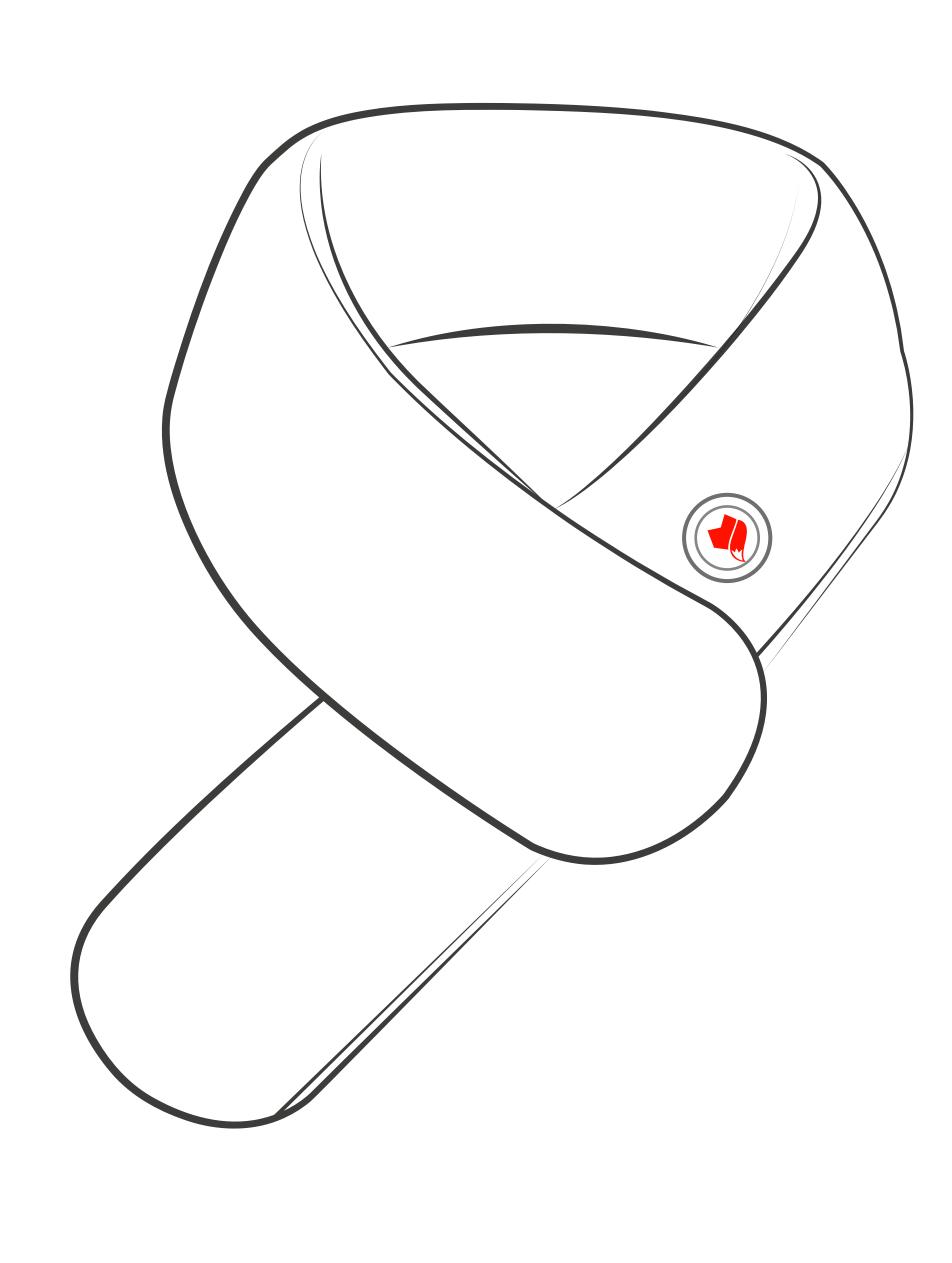

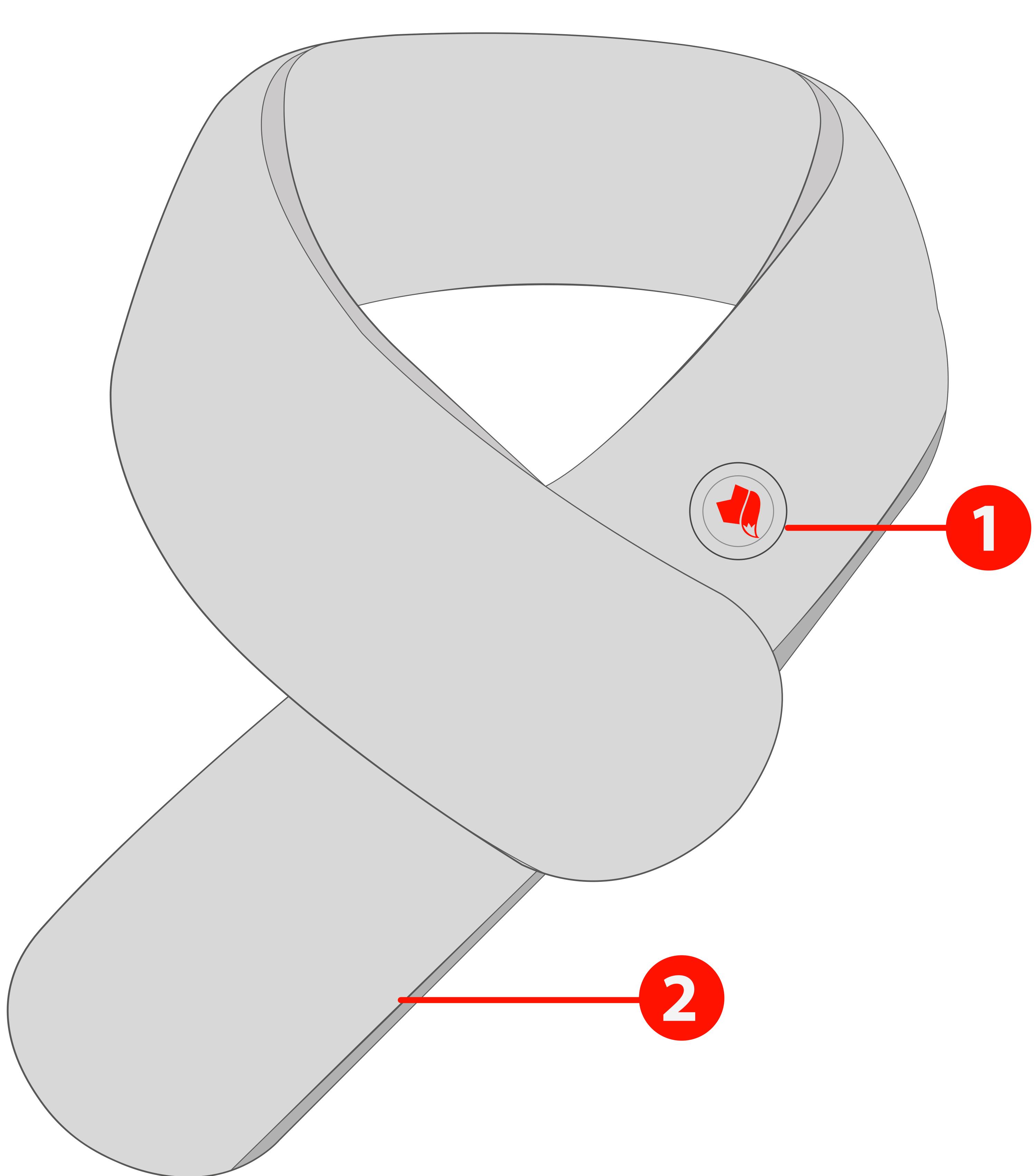


- Controllo wireless, 3 modalità
- Tasca per batteria con USB integrata

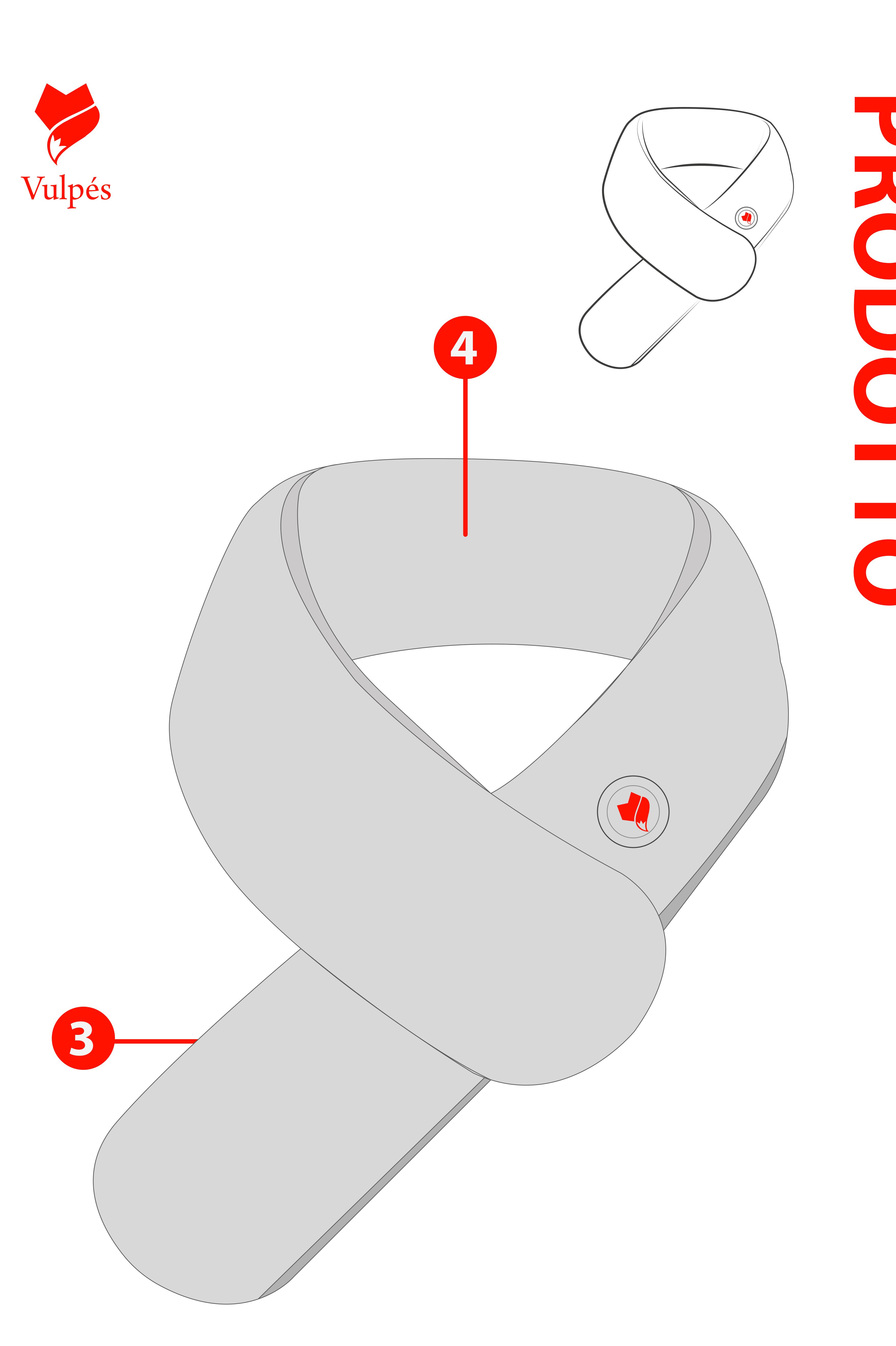








CONFIGURAZIONE

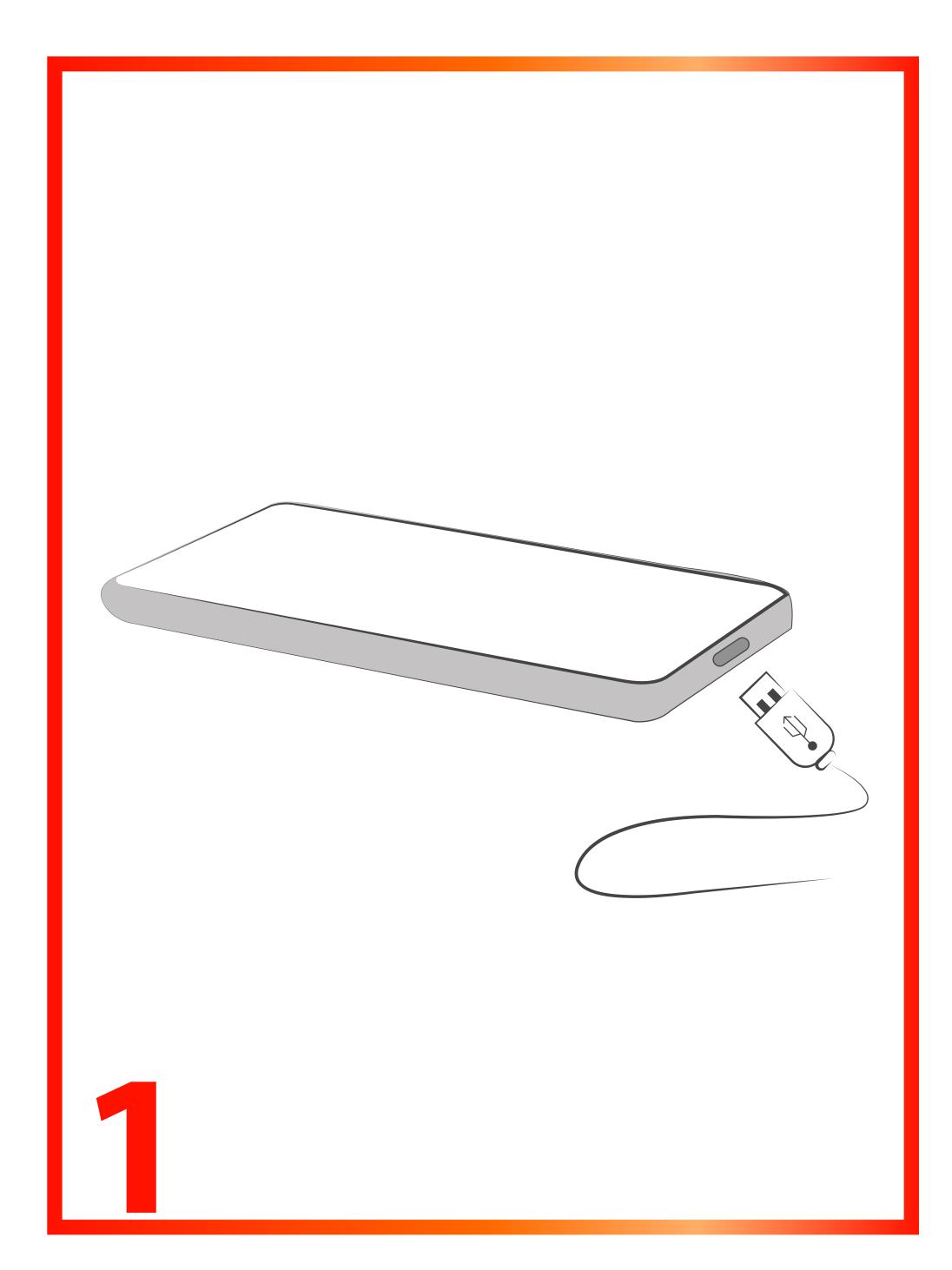

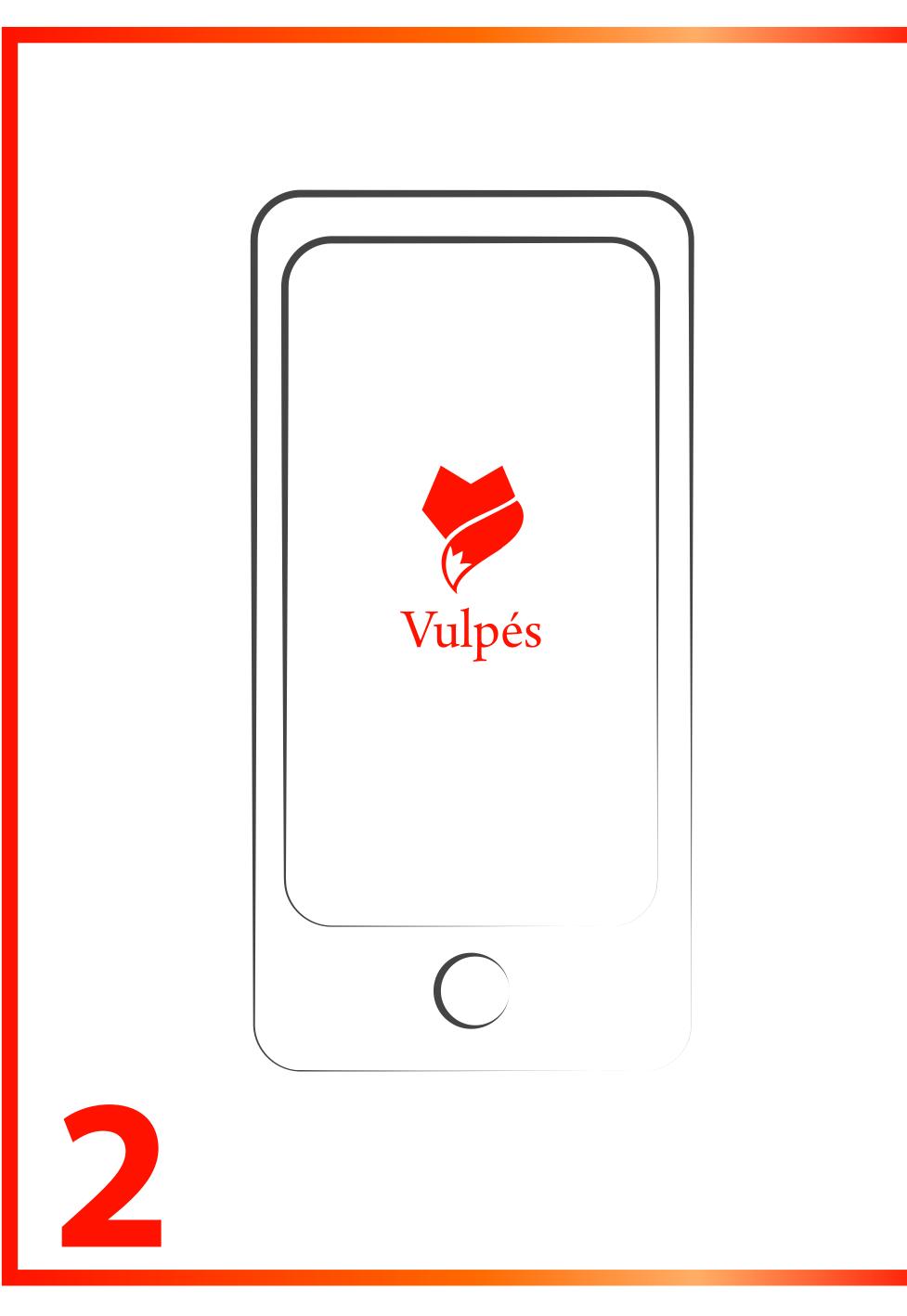


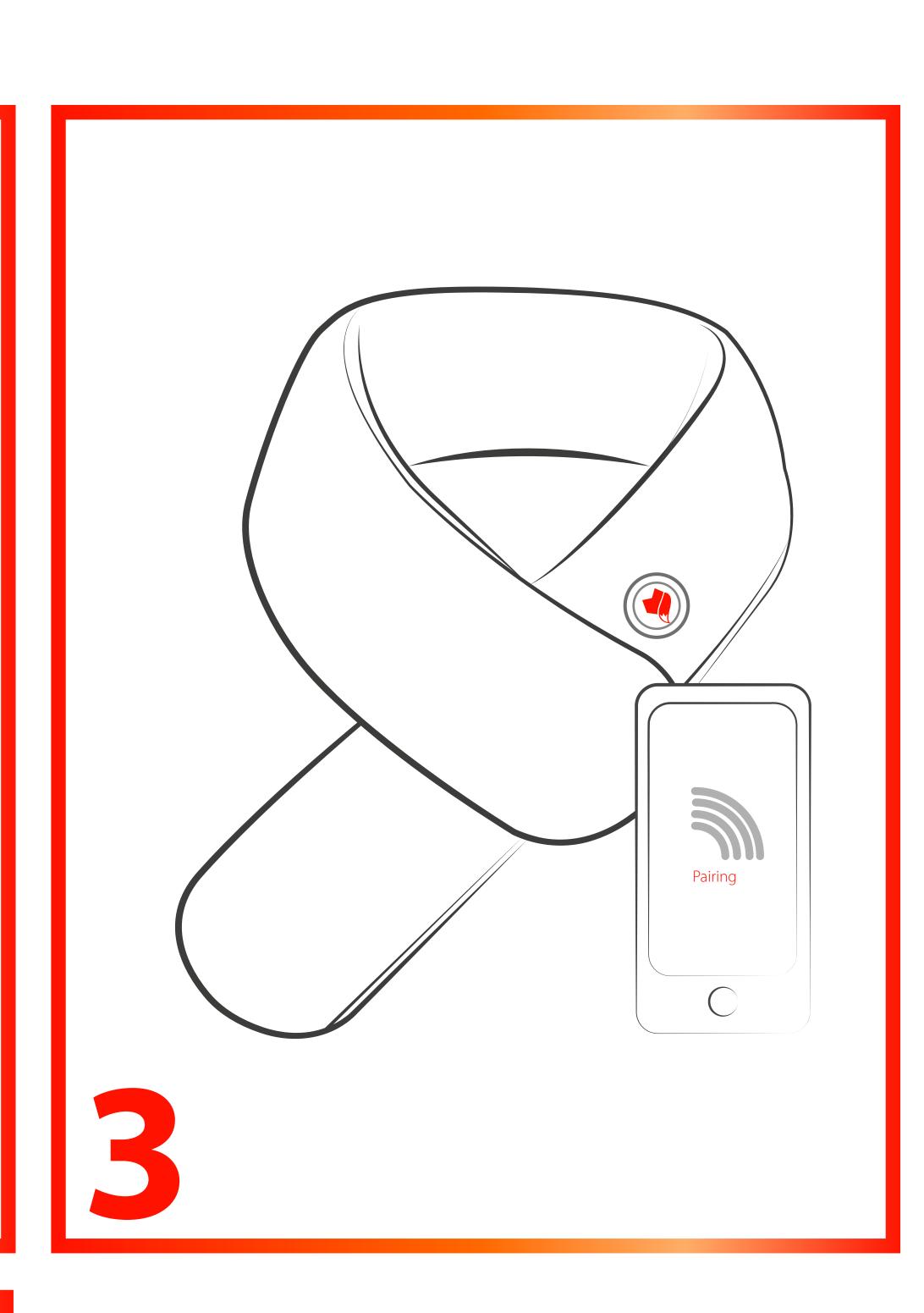


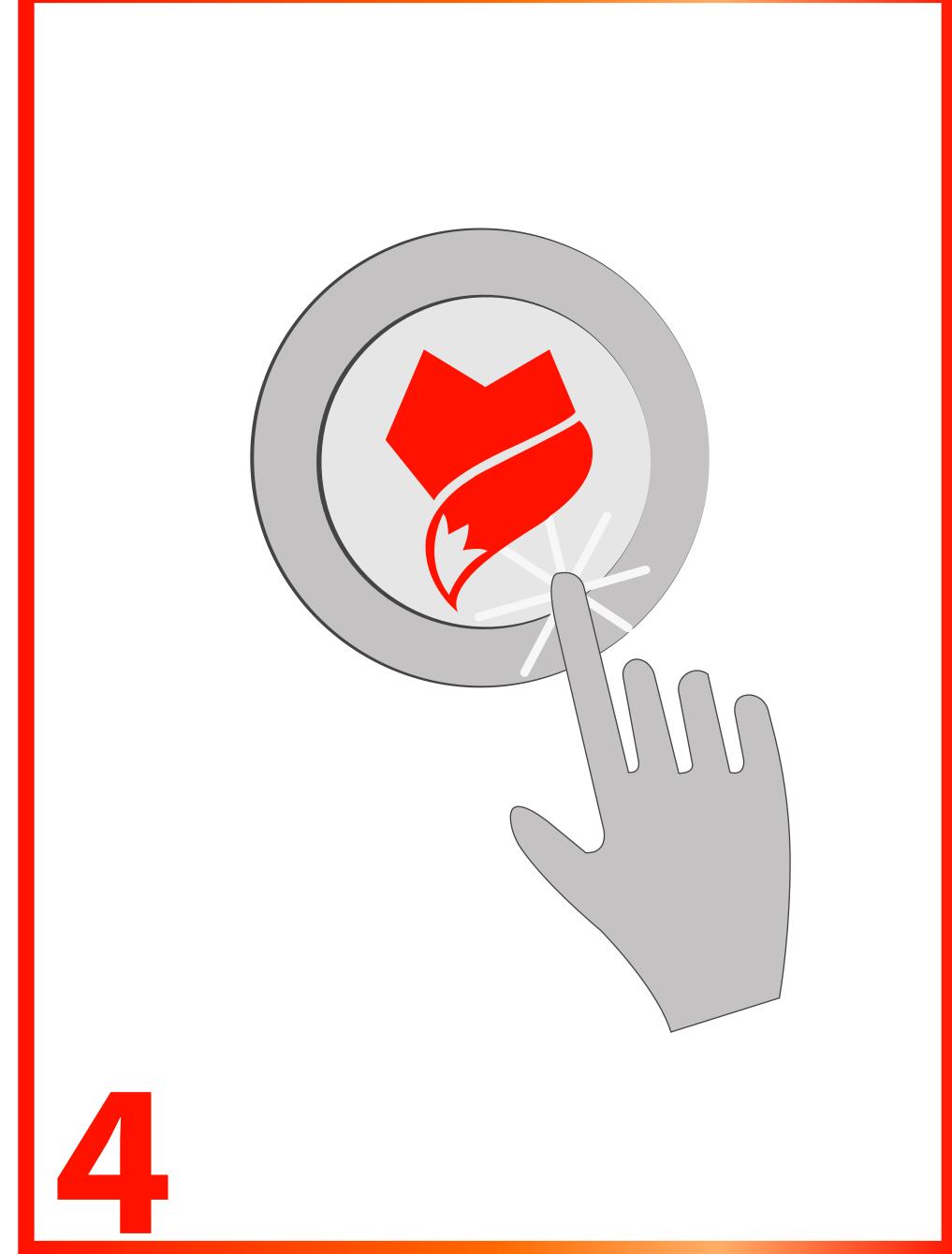

- Collega il power bank 5V / 2A o il cavo di estensione alla presa USB che si trova nella tasca.
 - Nota: Assicurati che il power bank sia acceso prima di attivare il cuscinetto riscaldante per collo. Alcuni power bank si spengono automaticamente dopo 30 secondi nel caso in cui il cuscinetto per collo non sia stato attivato.
- Scarica e installa l'applicazione mobile Vulpés Smartwear dall'Apple App Store o dal Google Play Store.
- Associa il tuo cuscinetto per collo con l'applicazione mobile seguendo i passaggi all'interno dell'app.
- Nota: Hai l'opzione di controllare le impostazioni di riscaldamento tramite 3. Smartphone, 4. Pulsante
- Premi il controller per attivare le impostazioni di riscaldamento. Premi il pulsante del controller per regolare lo stato di riscaldamento desiderato perr basso (giallo), medio (arancione) e alto (rosso)



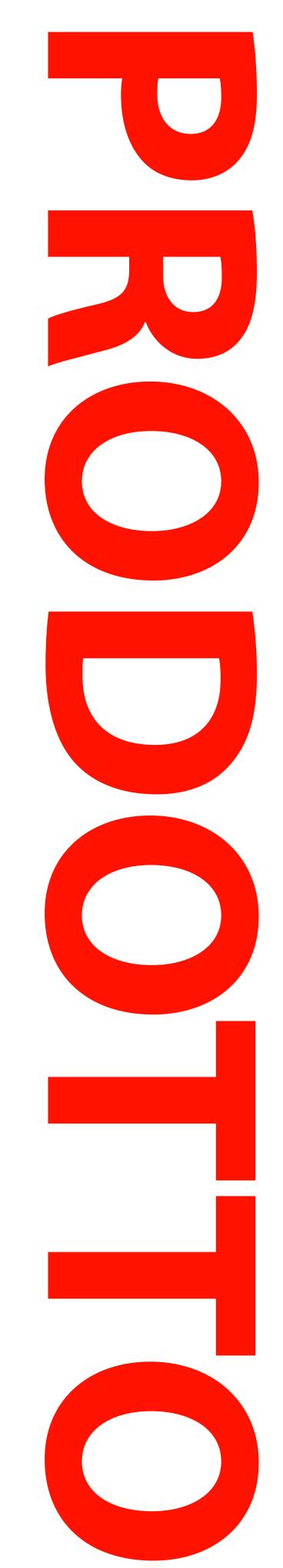

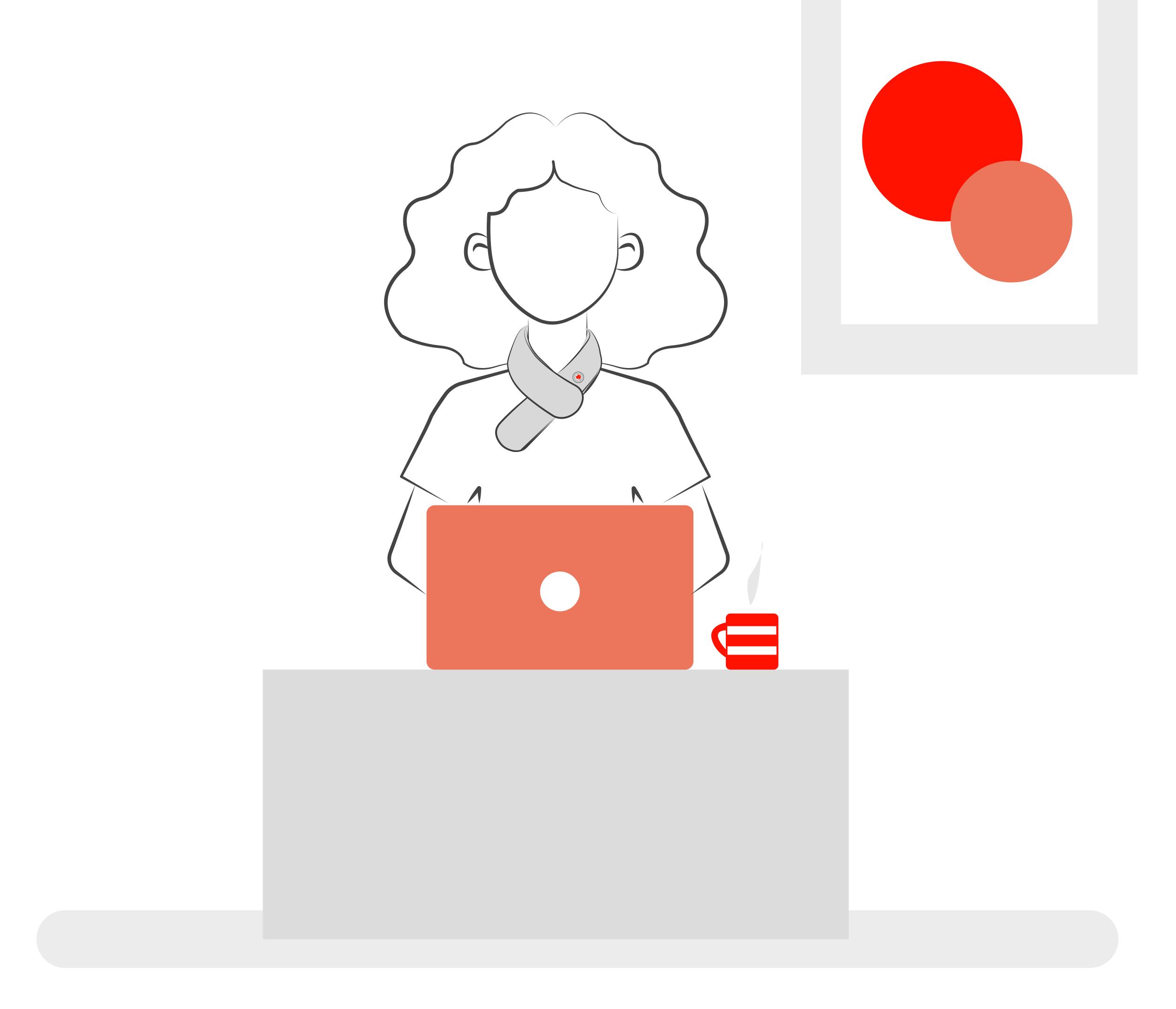


Il Cuscinetto Riscaldante Intelligente per il Collo Vulpés può essere utilizzato al lavoro





Grazie alla Powerbank, il Cuscinetto Riscaldante Intelligente per il Collo può essere utilizzato in movimento




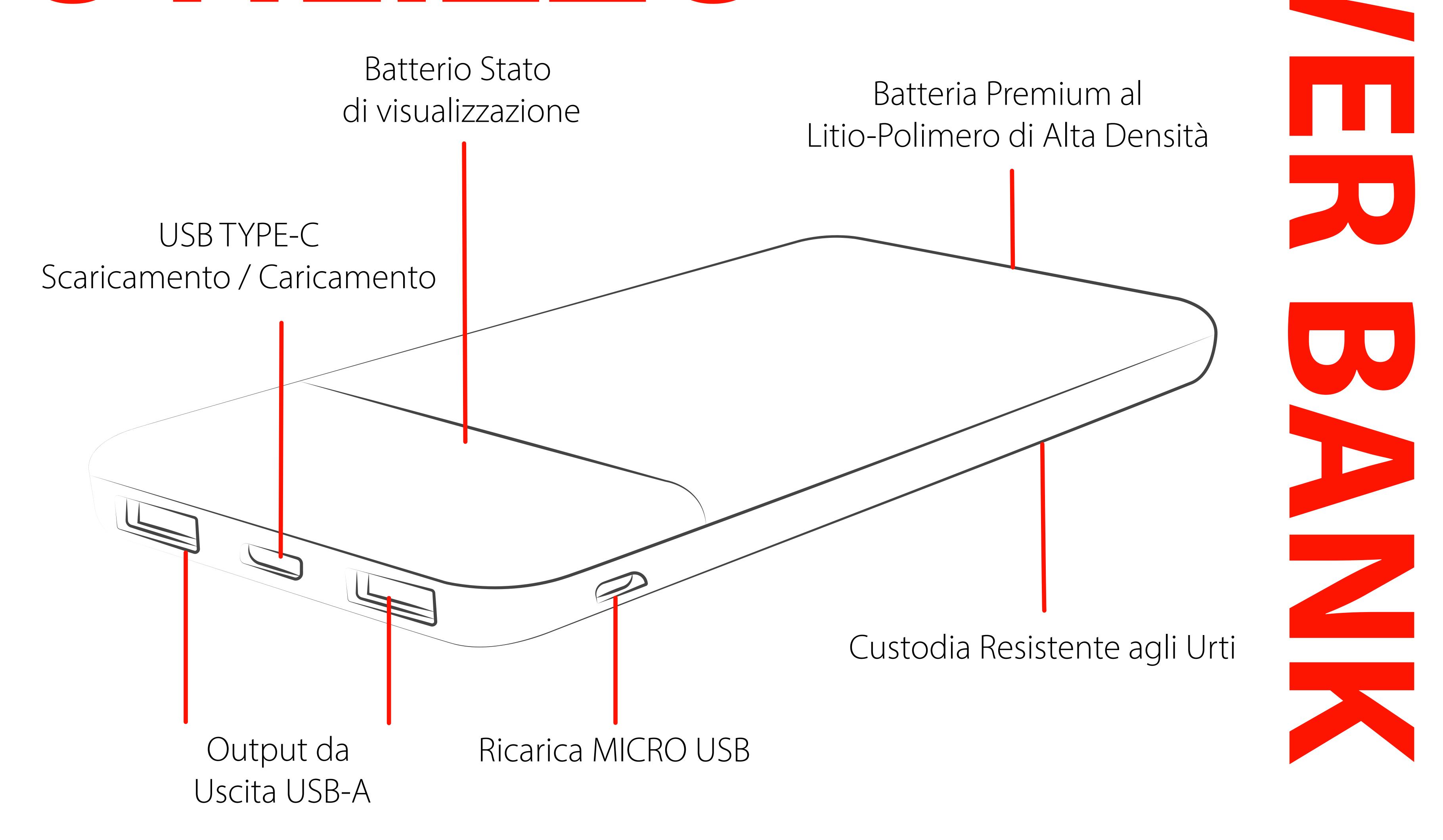




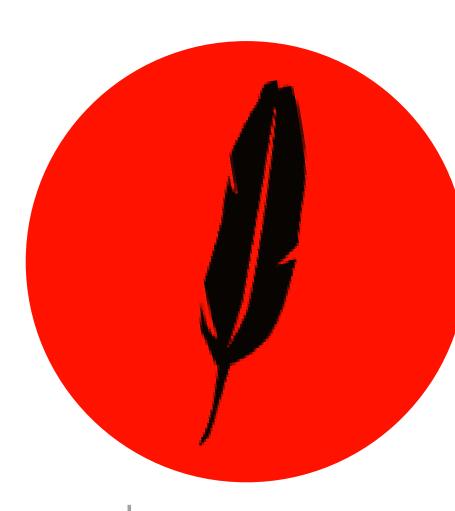

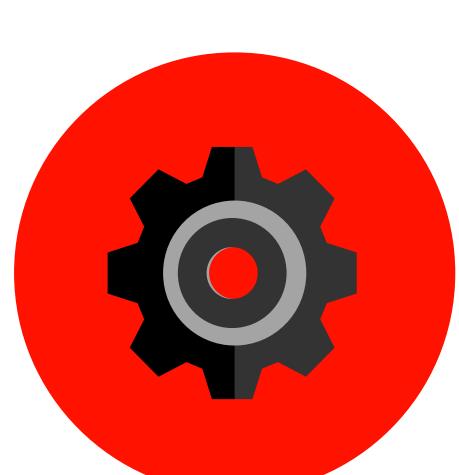

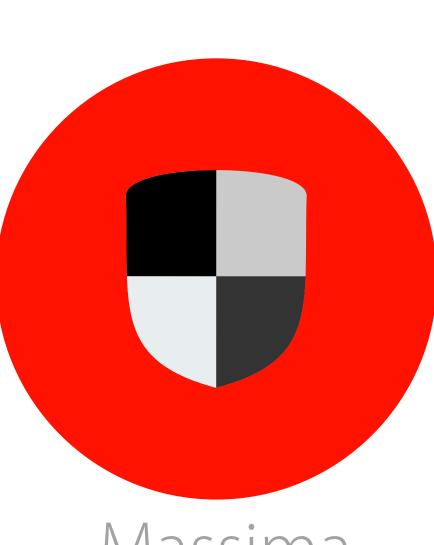



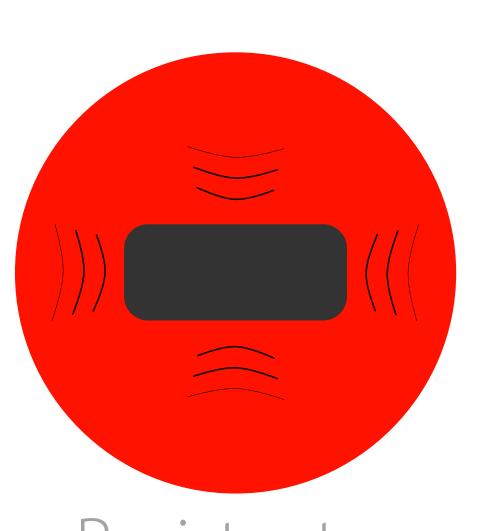

Stato della batteria

Leggero


Alta efficienza

Massima Sicurezza

Batteria al Litio-Polimero


Resistente agli urti

FUNZIONI DI SICUREZZA

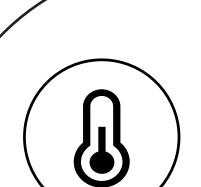

Protezione della temperatura

Protezione da cortocircuito

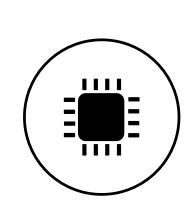


Protezione da sovraccarica e cortocircuito




Protezione da sovraccarica


e sovra-scarica

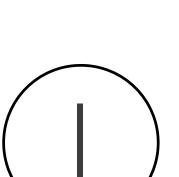


Protezione da sovratensione in ingresso

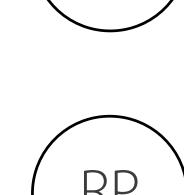

Protezione di reset

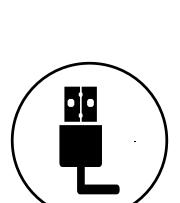

Protezione contro l'inversione di polarità in ingresso

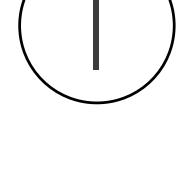

Protezione da sovratensione in uscita

sovracorrente in uscita

Protezione da

SPECIFICHE

Tipo di batteria Polimero di litio Ingresso Micro USB DC 5.0 V / 2.0 A USB Tipo C DC 5.0 V / 2.4 A

Capacità 5000 mAh

Peso netto 110 g

Dimensioni 100 x 63.3 x 13.5 mm




Il prodotto non può essere utilizzato da persone con sensibilità al calore ridotta o da individui che potrebbero essere vulnerabili a lesioni.

(ad esempio diabetici, persone con alterazioni della pelle legate a malattie o persone con pelle cicatrizzata nell'area dove deve essere applicato il cuscinetto, dopo aver assunto farmaci antidolorifici o alcol)

Questo prodotto non è un "dispositivo medico". Non promette nessuna cura per malattie o patologie. Si prega di contattare il personale sanitario per consigli medici o opzioni di trattamento.


Le persone che provano qualsiasi disagio indossando Il Cuscinetto Riscaldante Intelligente per il Collo Vulpés devono rimuoverla immediatamente e cercare consiglio medico prima di riprendere l'uso della cintura.

Persone che hanno allergie cutanee a materiali sintetici, gomma o plastica che possono essere trovati nella cintura, dovrebbero monitorare attentamente la loro pelle ogni volta che la cintura viene indossata. In caso di irritazione della pelle, interrompere immediatamente l'uso della cintura e cercare consiglio medico.

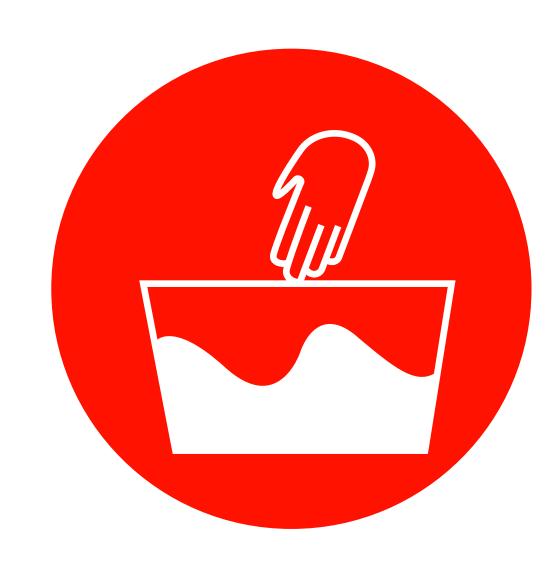


Pulizia: Si prega di spegnere il dispositivo prima di pulirlo e rimuovere il powerbank dalla tasca. Si prega di pulire il dispositivo solo a mano. Prima di tentare nuovamente di utilizzare il sistema termico, questo deve essere completamente asciutto. Durante il processo di asciugatura si prega di evitare qualsiasi contatto con i termosifoni.

Si prega di evitare il contatto generale con l'acqua durante il funzionamento.

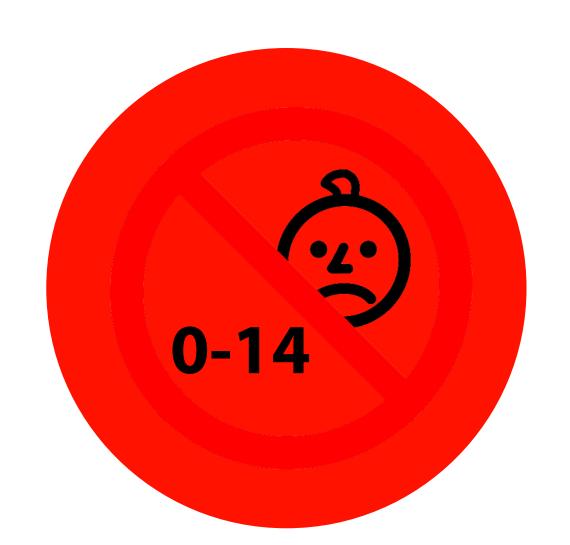

Bambini: Attenzione! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con dispositivi o accessori.

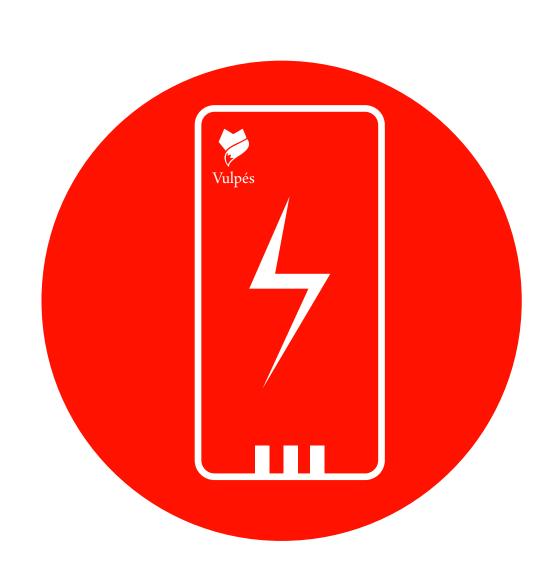

Power Bank: Si prega di utilizzare sempre la porta di uscita del **power bank 5V/2A.** Utilizzando porte di uscita con tensione superiore si danneggia permanentemente il sistema di controllo


Descrizione, Funzione e Uso Previsto del Power Bank Vulpé: Il PRODOTTO è realizzato per caricare o alimentare dispositivi mobili e PRODOTTI specifici Vulpés che funzionano con 5V DC. Il Power Bank è dotato di batteria al Litio-Polimero integrata, che funge da accumulatore di energia.

Raccomandiamo di utilizzare Powerbank Vulpés o powerbank di fornitori di marche note. Si prega di controllare attentamente le istruzioni dei powerbank di terze parti prima di utilizzarli in connessione con Il Cuscinetto Riscaldante Intelligente per il Collo Vulpés.

IMPORTANTE



Nota: In caso di problemi con il prodotto si prega di contattare il team Vulpés o il distributore locale.

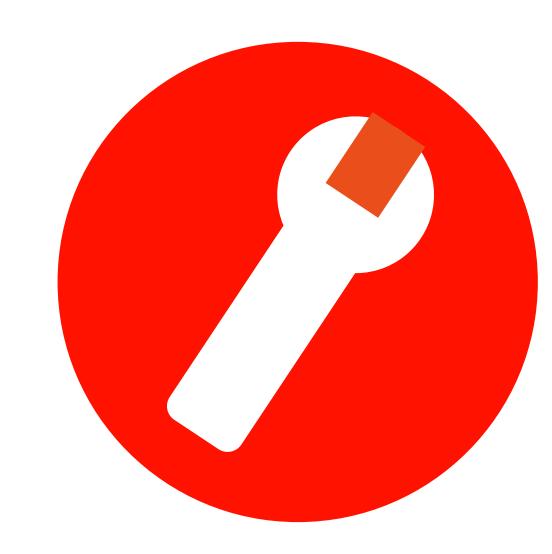

Manutenzione e Cura: In caso di malfunzionamento, si prega di lasciare che un professionista esegua la manutenzione e le riparazioni. Utilizzare solo un panno asciutto e morbido per la pulizia. Non utilizzare detersivi e prodotti chimici.



Istruzioni di Sicurezza - Si prega di non effettuare i seguenti aspetti:

Non modificare il prodotto, parti di prodotto o accessori.

Non aprire la custodia.

Evitare condizioni estreme, come il calore eccessivo, la luce solare diretta, così come microonde, vibrazioni e pressione meccanica.

Non gettare nel fuoco.


NON lasciare mai il prodotto incustodito quando è in uso!

Non cortocircuitare porte e circuiti.


Smaltire le batterie che perdono, sono deformate o corrose con adeguate protezioni.

Non utilizzare in ambienti esplosivi.

Quando non si utilizza per lungo tempo, caricare ogni 3 mesi per mantenere la capacità.

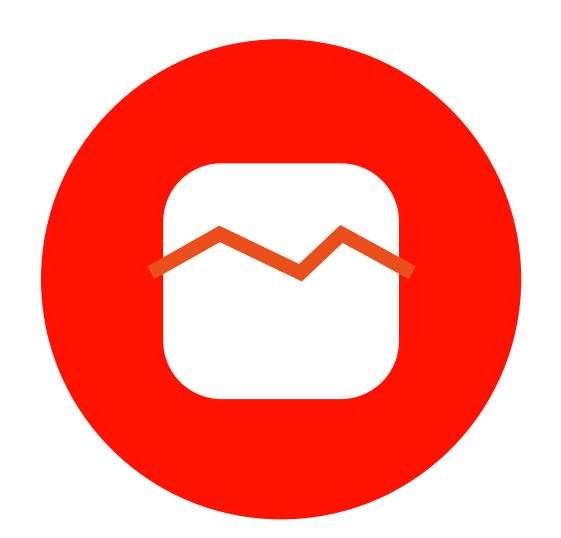

Danni materiali dovuti a un uso improprio: Confrontare le specifiche del prodotto, dell'alimentazione e dei periferici. Questi devono essere identici. Utilizzare il prodotto, parti di prodotto e accessori solo se in perfette condizioni.

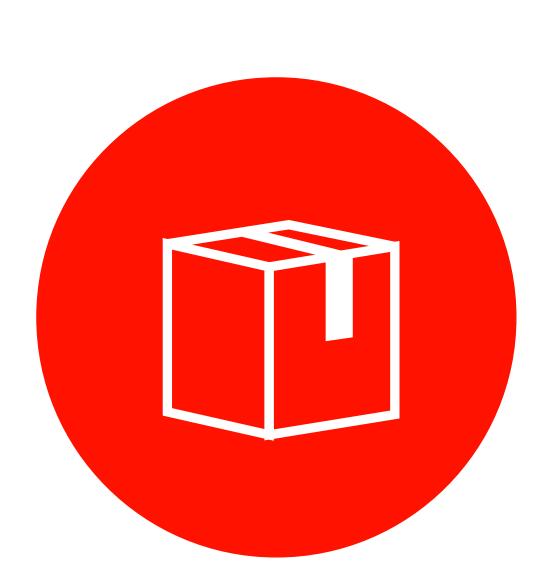

Conservazione: Maneggiare il dispositivo con cura e conservarlo in un luogo pulito e privo di polvere. Non esporre il prodotto a fiamme, non lasciarlo cadere, non lanciarlo e non tentare di piegarlo o tagliarlo.

Si prega di non tentare di riparare alcuna parte elettrica o componente del cuscinetto per il collo. Ciò invaliderebbe la garanzia e potrebbe risultare in malfunzionamenti del controllo della temperatura, che potrebbero causare ustioni da lievi a gravi.

Si prega di non tagliare o modificare il prodotto. Ciò invaliderebbe la garanzia e potrebbe influire sul funzionamento del prodotto.

Non tagliare il cuscinetto per il collo e tenerla lontano da oggetti appuntiti. Un taglio del cuscinetto per il collo può danneggiare il prodotto. Nel caso in cui il cuscinetto per il collosia stata tagliata accidentalmente, rimuovere il prodotto dal corpo e non utilizzarlo più.


IMPORTANTE




Spegnimento: Assicurarsi che il dispositivo sia spento quando viene indossato durante la notte e spegnerlo prima di addormentarsi.

Gli utenti dovrebbero essere consapevoli che diverse condizioni ambientali, incluse temperature alte o basse, possono cambiare le caratteristiche del Cuscinetto Riscaldante per il Collo e possono ridurne le prestazioni così come la durata della batteria.

Si prega di non attivare il powerbank e Il Cuscinetto Riscaldante Intelligente per il Collo in stato congelato.

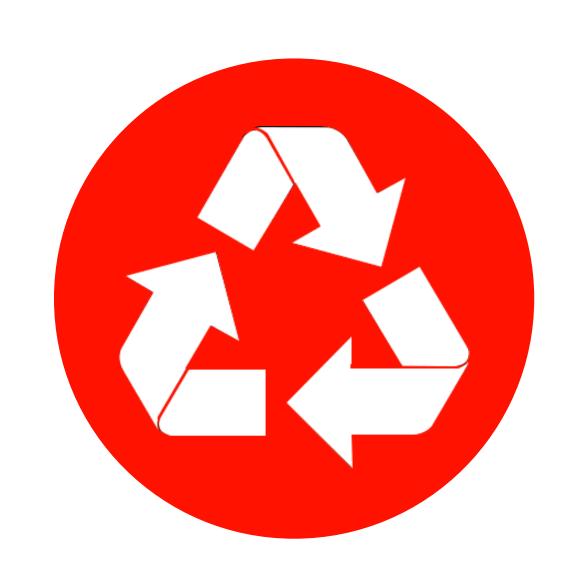

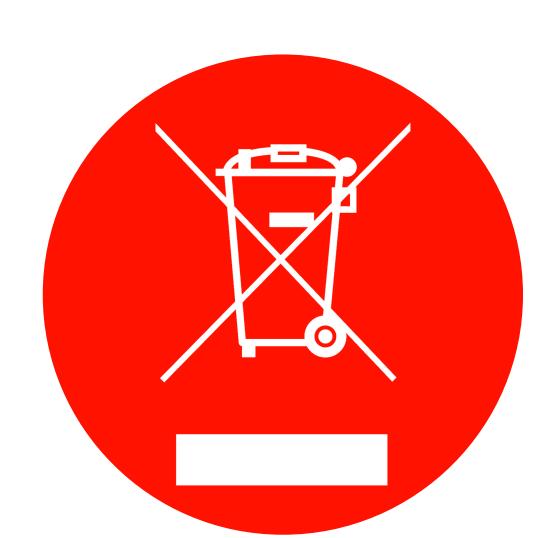

Riciclo: Secondo la direttiva europea WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti dei consumatori. I suoi componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente l'uno dall'altro. Altrimenti, sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare il nostro ambiente. Come consumatore, sei legalmente obbligato a smaltire dispositivi elettrici ed elettronici al produttore, al rivenditore o ai punti di raccolta pubblici alla fine della vita utile dei dispositivi gratuitamente. I particolari sono regolati nel diritto nazionale. Il simbolo sul PRODOTTO, nel manuale utente o sulla confezione allude a queste condizioni. Con questo tipo di separazione dei rifiuti, applicazione e smaltimento dei dispositivi usati ottieni un contributo importante alla protezione dell'ambiente.

Numero WEEE. 28527803



La nostra Garanzia: Soggetto alle condizioni di questa Garanzia Limitata, Vulpés garantisce che questo PRODOTTO sia privo di difetti di progettazione, materiale e manodopera al momento dell'acquisto originale da parte di un consumatore. Questa Garanzia Limitata durerà per un periodo di un (1) anno a partire dalla data originale di acquisto del PRODOTTO.

Si prega di essere consapevoli che, data lo stato fisico-chimico della tecnologia al Litio-Polimero, la durata della batteria potrebbe diminuire dopo un certo tempo di utilizzo. Una maggiore intensità di utilizzo accelera il processo di degradazione della batteria. **Per il powerbank Vulpés non fornisce alcuna garanzia aziendale.**

Per ulteriori dettagli si prega di visitare il sito web Vulpés. https://www.vulpes-smartwear.com/

