

RUS ПОДДЕРЖКА БЕДРА

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию и сохраните её для будущего использования.

Линия эластичных бандажей от Фортуна Интернэшнл изготовлена из высококачественного вязаного эластичного материала, который обеспечивает устойчивую и эффективную поддержку и содействует укреплению и защите травмированных и ослабленных мышц и сухожилий.

Линия эластичных бандажей от Kedley подходит как для занятий спортом, так и для ежедневного использования.

Применение: бандаж должен правильно подходить по размеру, чтобы обеспечить максимальное удобство и избежать чрезмерного сжатия. Если бандаж используется вскоре после получения травмы, обратитесь за медицинской помощью, если не было отмечено никаких положительных изменений после 72 часов его ношения. Если травма является серьёзной или существуют сомнения в этом - незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Используйте детьми только под наблюдением взрослых. Держите вне досягаемости маленьких детей.

Внимание: в случае появления сыпи или пропадания чувствительности - немедленно прекратите применение и обратитесь за медицинской помощью.

Инструкция по стирке: стирайте вручную в тёплой мыльной воде и сушите на сухом воздухе.

SPA MUSLERA

Por favor, lea las siguientes instrucciones y consérvelas para futura referencia.

El rango Elástico de Kedley está hecho de materiales de alta calidad de tejido elástico, que proporciona apoyo firme y eficaz estimulando el tratamiento, la mejora y la prevención de lesiones en músculos o articulaciones lastimados o debilitados.

El rango Elástico de Kedley es adecuado tanto durante actividades deportivas como para el uso diario.

Nota: La órtesis debe ser de la talla correcta para asegurar el máximo beneficio y evitar el exceso de presión. Si la órtesis se utiliza después de una lesión, por favor, busque atención médica si no ha mejorado durante las siguientes 72 horas. Si la lesión es grave o si tiene alguna duda acuda inmediatamente al médico. Si es utilizada por niños, la supervisión de un adulto es necesaria. Mantener fuera del alcance de los niños.

Advertencia: Si se produce inflamación o sarpullido, deje de usarlo inmediatamente y busque atención médica.

Instrucciones de lavado: Lavar a mano con agua tibia y jabón, séquese con aire.

KEDLEY.co.uk

ACTIVE ELASTICATED

THIGH SUPPORT

REF KED015/017

ENG THIGH SUPPORT

Please read the following instructions and keep for future reference.

For support and compression around the thigh. Intended uses can include but are not limited to mild pulled hamstring, quadriceps, groin strains, swelling/inflammation, bruising and sore muscles.

The **ACTIVE ELASTICATED** range is made from a high-quality fabric, with the combined benefits of nylon, polyester as well as latex for superior strength, flexibility and comfort, to ensure a secure fit. The support is firm and effective on weakened muscles and joints, and helps prevent injuries. Each product is designed to give maximum support whilst maintaining a comfortable fit. Using the sizing chart, select the size that best suits you, to get the maximum benefits from this product.

Note: The support should be sized correctly to ensure maximum benefit and to avoid over compression. If the support is being used following an injury, seek medical advice if no improvement in the condition is seen within 72 hours. If the injury is severe or if in any doubt seek medical advice immediately. If used by children, adult supervision is required. Keep out of reach of young children. Always use on clean intact skin. Do not use if liniments, ointments or creams have been applied to the affected area.

Warning: If soreness or a rash occurs discontinue use immediately and seek medical advice. This product contains latex which may cause allergic reactions, do not use if sensitive to latex. *If any serious incidents occur in relation to using this device it should be reported to the manufacturer and the competent authority of the member state in which the user is established.*

Washing & Storage Instructions: Hand wash in lukewarm soapy water, rinse and air dry. Store in a cool, dry place and away from direct heat and sunlight.

ACTIVE ELASTICATED RANGE THIGH SUPPORT

Website: www.kedley.co.uk




Impo International Ltd
Unit 3, 60 Lower Road,
Harrow, Greater London,
HA2 0DH, UK.




Eurolink Europe Compliance Ltd,
Dublin, D02 AY86, Ireland

REV: KED015FU-05/21v1


- 1) Select correct size from size chart on the back of the packaging.

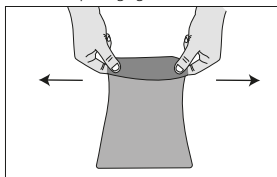


- 2) Fold over the top of the support and slide over appropriate foot.

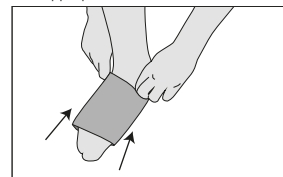

- 3) Slide up past the knee and over the thigh.

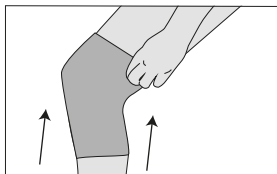

- 4) Support should fit tightly but it should not restrict circulation.

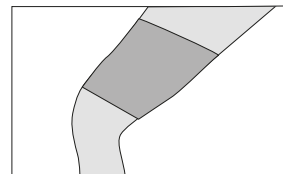

KEDLEY



06052021



Video fitting instructions available @ www.kedley.co.uk

ITA SUPPORTO PER COSCIA

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo e conservarlo per future consultazioni.

Kedley ha sviluppato una linea di supporti elastici che garantisce, grazie a materiali elastici di alta qualità, un'efficace ed elevato livello di supporto utile alla cura ed alla prevenzione di infortuni muscolari ed articolari.

La linea di Supporti Elastici Kedley è adatta sia all'uso quotidiano che alla pratica sportiva.

Nota: Per evitare livelli compressione troppo elevati o inefficaci si raccomanda di scegliere con cura la taglia del supporto. Indossato a seguito di infortunio, consultare un medico specialistico se non si riscontrano miglioramenti entro 72 ore dallo stesso. In caso di gravi infortuni e/o di dubbi, consultare immediatamente un medico specialistico. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Avvertenza: In caso di prurito o irritazione cutanea, interrompere l'uso e consultare un medico specialistico.

Istruzioni di Lavaggio: lavare a mano in acqua tiepida e sapone, asciugare all'aria.

FRA SOUTIEN DE LA CUISSE

Veillez lire attentivement les instructions suivantes, et les conserver pour une consultation ultérieure.

La gamme élastique de Kedley est fabriquée à partir de mailles élastiques de grande qualité, qui fournissent un soutien ferme et efficace afin de favoriser le traitement et la prévention des muscles ou articulations, blessés ou affaiblis.

La gamme élastique de Kedley convient aux usages sportifs comme à un usage quotidien.

Notes: Le soutien doit être de dimension correcte afin de pouvoir assurer un bienfait maximum ainsi que d'éviter tout excès de pression. Si le soutien est utilisé suite à une blessure, veuillez consulter un médecin si vous ne constatez aucune amélioration dans les 72 heures. Si la blessure est importante ou si vous avez le moindre doute, veuillez consulter un médecin immédiatement. Si le soutien est utilisé par un enfant, une supervision par un adulte est nécessaire. Maintenir hors de portée des jeunes enfants.

Avvertissement: Si une douleur ou une démangeaison apparaît, veuillez immédiatement consulter un médecin.

Instructions de lavage: Lavage à main à l'eau savonneuse tiède et sécher à l'air libre.

DEU OBERSCHENKELSTÜTZE

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und bewahren Sie sie zur späteren Ansicht auf.

Die Kedley Active Elasticated Range wird aus hochwertigem, elastischem Strickmaterial gefertigt, das festen und effektiven Halt zur Förderung der Behandlung und Prävention verletzter und geschwächter Muskeln und Gelenke bietet.

Die Kedley Elasticated Range eignet sich sowohl zur Nutzung beim Sport als auch im Alltag.

Hinweis: Die Stütze sollte die richtige Größe besitzen, um die maximalen Vorteile sicherzustellen und übermäßigen Druck zu vermeiden. Wenn die Stütze nach einer Verletzung verwendet wird, suchen Sie einen Arzt auf, wenn innerhalb von 72 Stunden keine Verbesserung des Zustands auftritt. Wenn die Verletzung schwer ist oder Sie Zweifel haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Kinder dürfen die Stütze nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Warnung: Bei Wunden oder Ausschlag brechen Sie die Benutzung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Waschanweisung: Per Hand in lauwarmem Seifenwasser waschen und an der Luft trocknen lassen

POR SUPORTE DE COXA

Por favor, leia as seguintes instruções e guarde para futura referência.

A linha de Suportes Elástica Kedley é feita de malha elástica de alta qualidade que fornece eficiente suporte, ajudando na prevenção e tratamento, de músculos e articulações enfraquecidos ou lesionados.

A linha de Suportes Elástica Kedley é adequada para uso diário e esportivo.

Observações: o suporte deve ser dimensionado corretamente para garantir o máximo benefício e para evitar o excesso de compressão. Se o suporte for utilizado após uma lesão procure ajuda médica se não houver melhora no quadro dentro de 72 horas. Em caso de lesões graves ou dúvidas consulte um médico imediatamente. Se for utilizado por crianças, é necessária a supervisão de adultos. Manter fora do alcance de crianças pequenas.

Aviso: Se dor ou qualquer tipo de irritação ocorrer interrompa o uso imediatamente e procure um médico.

Instruções de Lavagem: Lavar a mão com água morna e sabão e seque ao vento.

ARA

دعم الفخذ

يرجى قراءة التعليمات التالية واحفظها للرجوع لها في المستقبل.

Kedley Active Elasticated مع النايلون والبوليستر والمطاط لقوة فائقة، مع المرنة والراحة. الدعم ثابت وفعال على العضلات والمفاصل الضعيفة، ويساعد على تقادي وقوع إصابات


إن مجموعة كيدلي المرنة النشطة مناسبة للاستخدام الرياضي والاستخدام اليومي

ملاحظة: يجب ضبط واختيار المقاس المناسب لضمان الاستفادة القصوى وتجنب الإفراط في الضغط. إذا كان استخدام هذه الأربطة فور الإصابة فإنه يجب طلب المشورة الطبية في حال عدم التحسن في غضون 72 ساعة. وإذا كانت الإصابة شديدة فإنه يجب طلب المشورة الطبية فوراً. إذا استخدمت من قبل الأطفال فإن ذلك يجب أن يتم تحت إشراف الكبار. تحفظ بعيداً عن تناول الأطفال الصغار.


تحذير: في حال الوجع أو ظهور طفح جلدي فإنه يجب التوقف عن الاستخدام فوراً وطلب المشورة الطبية.

تعليمات الغسيل: تغسل يدويًا بماء دافئ وتجفف في الهواء.


1) Select correct size from size chart on the back of the packaging.

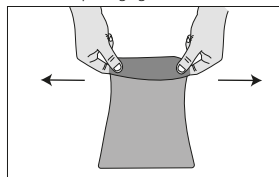


2) Fold over the top of the support and slide over appropriate foot.

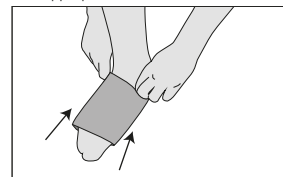

3) Slide up past the knee and over the thigh.

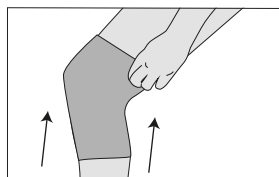

4) Support should fit tightly but it should not restrict circulation.

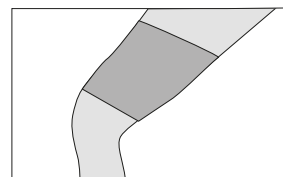

Video fitting instructions available @ www.kedley.co.uk