


CLIPIN104

for model Performance



CLIP-IN + PERFORMANCE

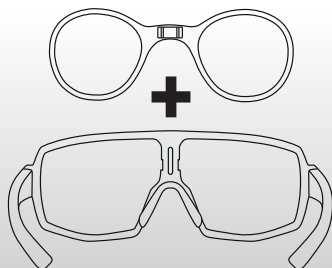

STEP 1

Insert the "Clip-in" to the side, matching the hook with the hollow part of the mount. Press until you hear a click. Be sure to put a protective pad between the glasses and the "Clip-in" to protect the lenses.

Inserire la Clip-in di lato, facendo coincidere il gancio della Clip-in con la parte incava della montatura. Premere fino a sentire lo scatto. Assicurarsi di mettere la pellino tra l'occhiale e la Clip-in per proteggere le lenti.

STEP 2

Press on the opposite side of the "Clip-in" to insert the other hinge on the frame. Remove the protective pad.

Premere sul lato opposto della Clip-in per inserire l'altro gancio sulla montatura. Rimuovere la pellino.


FRONT VIEW / VISTA FRONTALE

The "Clip-in" hooks are inserted in the recesses of the frame.

I ganci della Clip-in vengono inseriti negli incavi della montatura.



CLIP-IN LENS SIZE / DIMENSIONE CLIP-IN

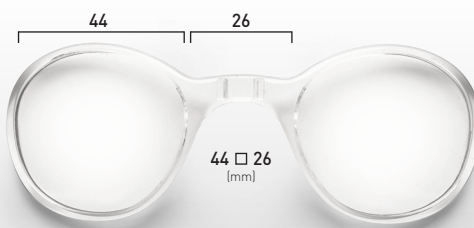

EN Use: class I medical device, as for Rule 1, Annex VII of EU Regulation EU 2017/745 on Medical Devices, whose intended use is the association with ophthalmic lenses for the correction of visual defects. To mount ophthalmic lenses, in the optical insert contact a specialized optician. Compliant with EU Regulation 2017/745. Warning: it cannot be excluded that sensitive or allergic subjects may experience adverse reactions in contact with the materials and treatments used. Care and cleaning: the clip-in must be stored at a temperature between -10 ° C and + 35 ° C. Avoid exposure to the sun in closed, unconditioned environments (e.g. car dashboard) because the temperatures reached in such conditions can damage its functionality. In case of contact with agents such as saltwater (seawater), clean immediately with fresh water and neutral soap. In case of wear, replacement is recommended. For cleaning, use a damp cloth and a normal neutral detergent, and dry with a clean soft cloth. Avoid the use of solvents (e.g. alcohol or acetone) and aggressive chemical detergents. Marking: model identification and batch date are printed on product or on the label. Complain: if it is not possible to contact the store where it was purchased, for complaints or anomalies, send the request to info@demonocchiali.it - the declaration of conformity is available at the address: www.bigline.it/eu-conformity-declaration

IT Impiego: dispositivo medico di Classe I, secondo la Regola 1, dell'allegato VII del Regolamento Europeo UE 2017/745 sui Dispositivi Medici, il cui uso inteso è l'associazione a lenti oftalmiche per la correzione di difetti visivi. Per montare lenti oftalmiche rivolgersi ad un ottico specializzato. Sono conformi al Regolamento Europeo UE 2017/745. Avvertenze: non si può escludere che soggetti sensibili o allergici possano manifestare reazioni avverse per contatto con i materiali e trattamenti utilizzati. Pulizia: il clip-in va conservato ad una temperatura fra -10°C e +35°C. Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto auto) perché le temperature raggiunte in tali condizioni possono danneggiarne la funzionalità. In caso di contatto con agenti come acqua salata (acqua di mare) pulire immediatamente con acqua dolce e sapone neutro. In caso di usura si consiglia la sostituzione. Per la pulizia usare un panno umido e un normale detergente neutro, e asciugare con panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcol o acetone) e detergenti chimici aggressivi. Marcatura: identificativo del modello e data lotto si trovano sul prodotto o sull'etichetta. Segnalazioni: in caso non sia possibile contattare il punto vendita, per reclami o anomalie indirizzare la richiesta a info@demonocchiali.it - la dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: www.bigline.it/eu-conformity-declaration

Big Line

36010 Zanè - (VI) Italy - Via Prà Bordoni, 48 - T +39 0445.315.537 - F +39 0445.319.279 - info@demonocchiali.it
www.demonocchiali.it - www.demonsunglasses.com

