



NL	Gebruiksaanwijzing	3
EN	User Manual	15
FR	Manuel d'utilisation	27

DRYLY
THE HELP you need

DRYLY
THE HELP YOU NEED

INHOUDSOPGAVE

Inhoud startpakket	5
Tips van het Dryly team	6
Installatie	7
Functies ontvanger	9
Veranderen van Wifi-netwerk	10
Het avondritueel	11
Dryly webshop	12
Foutmeldingen	13
Garantie	14
Help en support	14

BEDANKT DAT JE VOOR DE DRYLY PLASWEKKER GEKOZEN HEBT!

We gaan je helpen in de strijd tegen het bedplassen. Ons doel is om jullie zo goed mogelijk te helpen in het avontuur naar droge nachten. We willen dat je kindje zelf gemotiveerd raakt en het leuk vindt om met het bedplassen aan de slag te gaan.

In deze handleiding leggen we uit hoe je aan de slag kunt met de Dryly plaswekker.

Dryly is opgericht omdat de zoon van medeoprichter Clarien jarenlang met bedplasproblemen kampte. Na jaren van het proberen van allerlei methodes kwam haar zoontje zelf met het idee van een leuke, positieve methode.

Waarom kon zindelijk worden niet leuk zijn? Waarom was er niet een leuke en motiverende app? Tijdens het zaterdagochtend ontbijt ontstond zo het idee van Dryly.

Onze visie is dat we zowel ouders, als kinderen kunnen helpen in de strijd tegen het bedplassen.

Wij gaan met jullie een avontuur aan. Een avontuur is spannend, met een doel, maar nooit met een recht pad. Wij staan naast jullie, met positieve en leuke producten, maar ook met hulp, adviezen en tips.


INHOUD STARTPAKKET



Ondergoed



Wizzu

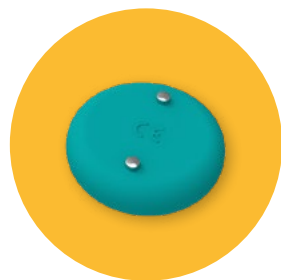

Zender



Ontvanger



**Mobiele App
(App Store of
Googleplay Store)**

TIPS VAN HET DRYLY TEAM

- Let op; Je laadt de set op met een USB-C Kabel, deze zit niet in het pakket toegevoegd.

- Houd er rekening mee dat deze methode gemiddeld 3 maanden duurt.

- Gebruik de plaswekker totdat je kindje 14 nachten droog is gebleven.

- Het is cruciaal om je kindje te steunen in deze periode. Ga ook uit bed als je kindje wakker wordt van de wekker in de nacht. Motivatie en steun zijn heel erg belangrijk!

- Probeer zo min mogelijk druk op je kindje te leggen. Maak het leuk! Beloon je kindje naast de app gadgets ook anders!

- Het alarm gaat uit door Wizzu heen en weer te schudden; je kindje moet dus echt wakker worden.

- Je dient de set altijd met de zender geklikt op de ontvanger op te laden. Zorg dat je de set om de nacht, 4 uur aan de lader legt en zet deze overdag uit.

- Maak je kindje niet meer wakker om te plassen 's avonds.

- Bewaar de plaswekker goed; het kan zijn dat je kindje een terugval krijgt.

- Pas op bij het wassen van de broekjes, zorg ervoor dat je de zender eraf haalt. Zenders kunnen niet in de wasmachine!

- Zorg dat je na een ongelukje eerst de zender van het broekje afhaalt en dat je daarna pas met de Wizzu gaat schudden.

- De broekjes functioneren het beste wanneer je deze van te voren eenmaal wast.

INSTALLATIE



Voordat je begint:

1. Leg de zender & ontvanger aan de lader. Het lampje kleurt tijdens het laden. Deze moet minimaal 5 uur opgeladen zijn voordat hij in gebruik genomen kan worden.
2. Zorg ervoor dat je je wifiwachtwoord bij de hand hebt.
3. Download de Dryly app in de Apple store of Google Play Store.
4. Installeer de Dryly app.
5. Maak een account aan in de app.
6. Vul de gegevens van je kind aan.

De installatie duurt een paar minuten, we helpen je er doorheen! Het is belangrijk om de stappen van de app te volgen. Zet de ontvanger dan ook pas aan wanneer dat de app dit aangeeft.


1 Het begin

- Selecteer ontvanger versie B in de app. Zorg dat je de zender, ontvanger en je wifi naam met wachtwoord bij de hand hebt.
- Leg de zender naast de ontvangers en houd de zwarte knop minimaal 20 seconden ingedrukt en laat deze daarna los. De set zal hierna uitgaan. Zet je de set weer aan, dan geeft deze "Transmitter out of range" aan. Reset 1 is nu succesvol.
- Klik de zender op de ontvanger en leg deze aan de lader, het lampje brandt.
- Na 1:30 minuut zegt de ontvanger "transmitter connected" de zender is nu met de ontvanger verbonden. Dit kan al verricht zijn tijdens het eerdere 5u laden.

- Haal de set uit de lader en leg de zender naast de ontvanger.

2 Ontvanger verbinden met het wifinetwerk


- Let op; tijdens de verschillende stappen in het koppelproces kan dit af en toe wat langer duren!
- Zet de ontvanger alleen aan zodra de app dat aangeeft!
- Je hoort een geluidje, dit is het teken dat het goed werkt en de batterij is opgeladen.
- Verbind met het “Wizzu” wifinetwerk in de app.
- De app maakt een overzicht van beschikbare netwerken.
- Selecteer je thuisnetwerk en vul het wachtwoord in.
- Als de ontvanger succesvol verbonden is hoor je: “Wizzu succesfully connected”. Zorg dat je in de app nog niet verder klikt totdat je deze melding hebt gehoord.
- Zodra je confetti in de app ziet verschijnen is de ontvanger succesvol toegevoegd!
- Mocht het verbinden niet lukken check dan of de locatie instellingen van je telefoon goed staan. Instellingen telefoon › dryly app › locatie › Zorg dat het vinkje achter “altijd” staat.

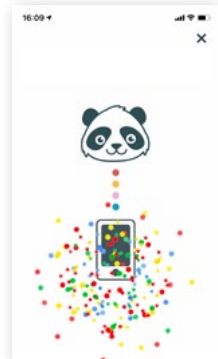

3 Wizzu aankleden

- Nu de plaswekker succesvol geïnstalleerd is kan je kindje met de eerste punten Wizzu aankleden.

Lukt er iets niet? Wij nemen je graag aan de hand via onze klantenservice (klantenservice@dryly.com of +31 (0)85 106 0377).

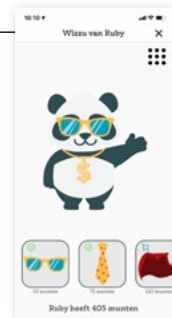

FUNCTIES ONTVANGER

● **Uit**

Door de zwarte button op de ontvanger 3 seconden in te drukken, zet je de ontvanger uit.

● **Aan**

Door de zwarte button eenmaal in te drukken, zet je de ontvanger aan.

● **Opladen**

Je laadt de set op door de zender op de ontvanger te klikken en deze vervolgens aan de lader te leggen. De set dient om de nacht, 4 uur op te laden. Zet de set overdag uit. Wanneer de set leeg is, zal deze zichzelf uitzetten.

● **Batterijlampje ontvanger**

● Groen= 40-100% | ● Rood = 0-40%

Let op! Het lampje weergeeft alleen de batterij van de ontvanger. om het preciese batterij percentage van zender & ontvanger te checken kun je in de app kijken.

● **Offline-mode (wanneer er geen WIFI-netwerk beschikbaar is)**

- Houd de zwarte knop minimaal 20 sec. ingedrukt en laat deze los. De set zal uitgaan. Zet de ontvanger weer aan, je hoort de melding “Transmitter out of range”. De reset is nu succesvol.
- Klik de zender op de ontvanger en leg deze aan de lader (het lampje brandt). Na 1:30 minuut zegt de ontvanger “transmitter connected”. De zender is nu met de ontvanger verbonden.
- Haal hierna de ontvanger uit de lader én leg vervolgens de zender naast de ontvanger. Zet de ontvanger aan. Na 5 minuten komt automatisch de melding “wizzu in offline mode”.

Nu staat de set in de offline-mode en kun je starten met de training. Gebruik je de set later weer? Zet deze aan en wacht weer 5 minuten op de melding “wizzu in offline mode”. Je kunt weer starten met de training.

● **Geluidsvolume**

Wanneer dat de set aan staat kun je het volume van de ontvanger wisselen in verschillende standen door eenmaal de zwarte button kort in te drukken. De set begint altijd met een volume van 100%. Zorg dat je

telkens tussen het drukken 3 seconden wacht.

1x drukken = 75% ,nogmaals drukken = 50%, nogmaals drukken = stille stand, nogmaals drukken = opnieuw 100%

In de stille stand gaat alleen de app af (en trilzender mocht je deze variant hebben). Handig voor discrete momenten zoals een logeerpartij!

ONTVANGER VERWIJDEREN OF VERANDEREN VAN WIFI NETWERK

De ontvanger ontkoppelen

- Ga naar 'Mijn Wizzu' via het hamburgermenu linksboven in de app.
- Selecteer de ontvanger waarvan je het wifinetwerk wil veranderen en druk op 'verwijderen'.

Een nieuw wifinetwerk selecteren

- Zorg ervoor dat je je wifi-wachtwoord bij de hand hebt.
- Zorg dat je eerst reset 1 hebt uitgevoerd en de set weer 1:30 minuten aan de lader hebt gelegd totdat deze "transmitter connected" aangeeft.
- Druk op 'Wizzu koppelen' in de app.
- Zet de ontvanger uit.
- Zet de ontvanger alleen aan zodra de app dat aangeeft.
- Je hoort een geluidje, dit is het teken dat het goed werkt en de batterij is opgeladen.
- Verbind met het Wizzu wifinetwerk in de app.
- De app zoekt wifinetwerken in de buurt.
- Selecteer je thuisnetwerk en vul het wachtwoord in.
- Als de ontvanger succesvol verbonden is, hoor je een succesgeluid.

HET AVONDRIJUEEL

Het moment voor het slapen is heel erg belangrijk tijdens het gebruik van de plaswekker. Even een moment van rust en bewustwording.

1. Laat je kindje iedere avond voor het slapen gaan het alarm geluid een paar keer horen. Zo weet je kindje waarvan hij/zij wakker moet worden.
2. Laat je kindje voordat hij/zij gaat slapen naar de WC gaan. Dit kan je via de app doen!
3. Laat je kindje het Dryly broekje aantrekken en druk de zender vast.
4. Loop met je kindje de app na.
5. Lees nog even een boekje voor of laat je kindje zelf minimaal 20 minuten lezen.
6. Laat je kindje nogmaals naar de WC gaan.
7. Wens je kindje welterusten en leg Wizzu op ongeveer 1 meter afstand. Zo moet je kindje opstaan en echt wakker worden om het alarm uit te zetten.
8. Maak je kind nooit wakker als je zelf gaat slapen om nog een keer naar de WC te gaan. Hierdoor vertraag je de training.

Goede nacht!



DRYLY WEBSHOP

Broekjes

De Dryly broekjes zijn gemaakt van biologisch katoen en hebben een perfecte pasvorm. De vrolijke printjes hebben wij samen met kinderen ontwikkeld.

De broekjes kunnen gewassen worden op 60 graden, ook kunnen ze in de droger. Vermijd het gebruik van wasverzachter of chloorhoudende middelen. We hebben ook neutrale broekjes voor kinderen die bijvoorbeeld wat ouder zijn of voor logeerpartijtjes.



Waterdichte matrasbeschermer

De matrasbeschermer leg je onder het hoeslaken ter bescherming van je matras. Dit voorkomt vlekken en nare geurtjes.



Wizzu

Wizzu is de lieve panda, een fijne vriend voor jouw kindje. Je kunt altijd een Wizzu bijbestellen voor een broertje of zusje.



De zender (trilvariant optioneel)

De zender detecteert het vocht in het Dryly onderbroekje. Zodra er een ongelukje plaatsvindt, wordt er een signaal naar de ontvanger gestuurd. Doe de zender niet in de was, dan gaat hij kapot.



De ontvanger

De ontvanger wordt in Wizzu geplaatst en maakt een wekgeluid als er een ongelukje plaatsvindt. De ontvanger stuurt direct een bericht naar de mobiele app zodat jij je kindje kan helpen. Steun van de ouders is cruciaal voor het succes van deze methode. In de app kun je zien wat de stand van de batterij is. Ervaring leert dat je de ontvanger met zender erop geklikt om de nacht dient op te laden en overdag dient uit te zetten.



FOUTMELDINGEN

De zender staat in de app als “buiten bereik”

De app synchroniseert het batterijpercentage niet direct via een live verbinding. Zorg dan ook dat je een ongelukje simuleert door iets van metaal (mes/lepel) tegen beide drukknopen van de ronde zender aan te drukken. Een ongelukje zal gesimuleerd worden, hierna zal het juiste percentage van de zender ook in de app weergegeven worden.

“Transmitter out of range”

Het kan soms voorkomen dat je het bericht ‘transmitter out of range’ hoort. Dit betekent dat de ontvanger al eventjes naar het signaal van de zender heeft gezocht, maar deze niet heeft kunnen detecteren. Mogelijke oorzaken:

Je kind slaapt op zijn of haar buik

Het lichaam blokkeert de signalen van de zender. Als je kind op zijn of haar buik slaapt, kan dit er voor zorgen dat de signalen minder ver komen. Je verbetert de verbinding door de ontvanger ter hoogte van de heup van het lichaam van je kind neer te zetten. Wanneer de set signaal verliest zal de set aangeven ‘*Transmitter disconnected / Transmitter connected*’.

De zender is nog niet aan de ontvanger gekoppeld

Als je onze plaswekker ontvangt, is het koppelen van de zender onderdeel van het proces. Je koppelt de zender aan de ontvanger door deze samen op te laden. Na 1:30 minuut zegt de set ‘*transmitter connected*’ Dit hoef je maar eenmalig te doen en zul je dan ook eenmalig horen. Hoor je dit niet? Voer reset 1 uit en probeer opnieuw. Het kan zijn dat deze stap niet helemaal goed is gegaan. Raadpleeg hiervoor de klantenservice.

Oplossing

Reset 1

Druk de zwarte button van de ontvanger 20 seconden in. Zorg dat de set aanstaat. Hierna hoor je ‘*Transmitter out of range*’. Hiermee reset je de set terug naar de fabrieksinstellingen (Het wifi-netwerk, de zender & app koppeling worden gewist) Hierna dien je de zender en ontvanger weer opnieuw te pairen tijdens het laden.

Reset 2

Druk met een speld / paperclip in het gaatje wat gemaakt is in de letter “D” van de ontvanger. Hiermee start je de ontvanger opnieuw op. Je hoeft de set niet weer opnieuw te pairen.

GARANTIE

Dryly zet zich dagelijks in voor een goede kwaliteit van onze producten. Het kan voorkomen dat jouw Dryly plaswekker niet naar behoren werkt. Dryly hanteert een garantietermijn voor elektronica van 6 maanden en voor het ondergoed van 3 maanden na ontvangst van de plaswekker door de koper. De garantie omvat fabricage- en/of materiaalfouten en defecten ontstaan door normaal gebruik. Dit is ter beoordeling van Dryly.

Werkt je plaswekker niet zoals het hoort, meld je klacht bij voorkeur per email naar klantenservice@dryly.com, met daarin als onderwerp; 'klacht' met je ordernummer. Wij reageren zo snel mogelijk en doen er alles aan om je probleem op te lossen.

Uitgesloten is schade ontstaan door onzorgvuldig handelen of door het niet opvolgen van de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing. Er kan beroep worden gedaan op de garantieregeling bij vertoon van de factuur. De garantie vervalt indien er reparaties zijn gedaan door derden, indien de gebruiker een luier over de onderbroek met de zender heeft gedragen, indien de plaswekker is aangeschaft via een wederverkoper (bv marktplaats) en indien er waterschade heeft plaatsgevonden.

HELP EN SUPPORT

Zijn er onduidelijkheden? Check ook altijd onze veelgestelde vragen (FAQ) op de website! Hier staat een hoop informatie over het gebruik en de training!

Wij zijn bereikbaar via e-mail op klantenservice@dryly.com of telefonisch bereikbaar via Tel.: +31 (0)85 106 0377 (Ma t/m Vr 09:00-17:00) www.dryly.com

TABLE OF CONTENT

Content of starter pack	17
Tips from the Dryly team	18
Installation	19
Receiver functions	21
Changing the Wi-Fi network	22
The evening ritual	23
Dryly webshop	24
Error messages	25
Warranty	26
Help and support	26

THANK YOU FOR CHOOSING THE DRYLY BEDWETTING ALARM!

We are going to help you in the fight against bedwetting. Our goal is to help you as much as possible in the adventure to dry nights. We want your child to become motivated and enjoy taking on bedwetting.

In this manual we explain how to get started with the Dryly bedwetting alarm.

Dryly was founded because the son of co-founder Clarien had bedwetting problems for years. After years of trying all kinds of methods, her son came up with the idea of a fun, positive method. Why couldn't being potty-trained be fun? Why wasn't there a fun and motivating app? During Saturday morning breakfast the idea of Dryly was born.

Our vision is that we want to help both parents and children in the fight against bedwetting. We are going on an adventure with you. An adventure is exciting, has a goal, but never has a straight track. We are at your side, with positive and fun products, but also with help, advice and tips.


CONTENT OF STARTER PACK



Underwear



Wizzu

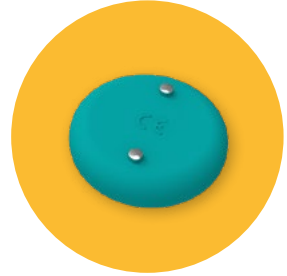

Transmitter



Receiver



**Mobile App
(App Store or
Googleplay Store)**

TIPS FROM THE DRYLY TEAM

- Note; You have to charge the set with a USB-C Cable, this is not included in the package.

- Keep in mind that this method takes an average of 3 months.

- Use the bedwetting alarm until your child has stayed dry for 14 nights.

- It is crucial to support your child during this period. Get out of bed too when your child wakes up from the alarm clock at night. Motivation and support are very important!

- Try to put as little pressure on your child as possible. Make it fun! Also make sure to reward your child differently besides app gadgets!

- The alarm stops going off by shaking Wizzu back and forth, so your child really needs to wake up.

- You should always charge the set with the transmitter clicked onto the receiver. Make sure you always put the set on the charger for 4 hours from day to day and turn it off during the day.

- Don't wake up your child to pee in the evening.

- Save the bedwetting alarm; your child may have a setback.


- Be careful when washing the shorts, make sure you take the transmitter off. Transmitters cannot be put in the washing machine!

- After an accident, make sure to remove the transmitter from the shorts first and only then shake the Wizzu.

INSTALLATION


Before you get started:

1. Put the transmitter & receiver on the charger. The light gives colour during charging. It must be charged for at least 5 hours before it can be put into use.
 2. Collect all parts from the starter pack.
 3. Make sure you have your Wi-Fi password available.
 4. Download the Dryly app in the Apple store or Google Play Store.
 5. Install the Dryly app.
 6. Create an account in the app.
 7. Enter your child's information.
- The installation will take a few minutes, we will help you through it! It is important to follow the steps of the app.

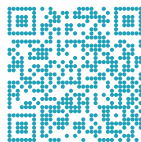


1 The beginning

- Select the Version B of the receiver in the app.
- Make sure you have the transmitter, receiver & wifi name and password.
- Click the transmitter on the receiver and put it on the charger, the light is on.
- After 1:30 Minutes, the receiver says "transmitter connected" the transmitter is now connected to the receiver. This may have already been done during the earlier 5h charging.
- Remove the set from the charger and place the transmitter next to the receiver.

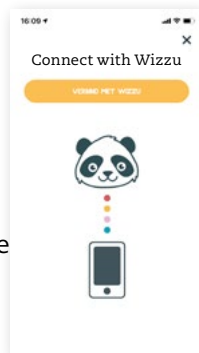

2 Connect the receiver to the Wi-Fi network


- Please note; during the various steps in the pairing process, this may occasionally take longer!
- Turn on the receiver only when the app says to do this!
- You hear a noise, this is the sign that it is working and the battery is charging.
- Connect to the “Wizzu” Wi-Fi network in the app.
- The app creates an overview of available networks.
- Select your home network and enter the password.
- When the receiver is connected correctly, you will hear a success sound.
- As soon as you see confetti in the app, the receiver has been successfully added!
- If connecting doesn't work please check if the permission settings regarding “location” are correct. Phone's settings › Dryly app › location › Make sure the check mark is set to “always”.

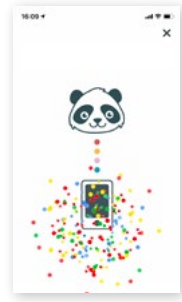

3 Dressing Wizzu

- Now that the bedwetting alarm has been installed successfully, your child can dress up Wizzu with the first points.

Something not working out? We will gladly take you by the hand through the chat on our website or by phone.

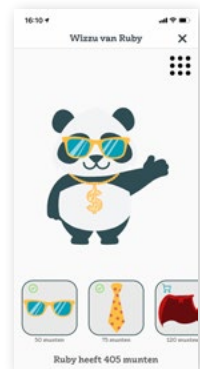

RECEIVER FUNCTIONS

● Off

Pressing the black button on the receiver for 3 seconds turns the receiver off.

● On

By pressing the black button, you turn the receiver on.

● Charging

You can charge the set by clicking the transmitter onto the receiver and then placing it on the charger. The set should charge from day to day for a minimum of 4 hours. Turn the set off during the day. When the battery runs out, the set will turn itself off.

● Receiver battery light

● Green = 40-100% | ● Red = 0-40%

Note! The light only reflects the battery of the receiver. To check the exact battery percentage of transmitter & receiver, please check the app.

● Sound volume:

When that the set is on, you can change the volume of the receiver to different modes by briefly pressing the black button once.

The set always starts with a volume of 100%

1x press = 75% / press again = 50% / press again = silent mode / press again = 100% again. Make sure you wait 3 seconds each time between pressing.

In silent mode, only the app gives an alarm (and vibrator should you have this variant) Handy for silent moments like a sleepover!

● Offline mode

When you pair the set by charging it. You can start the installation process to set up the set on the home network with the phone app.

Do you prefer to use only the transmitter & receiver? There is an offline mode with only connection between the transmitter & receiver that requires no home network or app.

You can install the offline mode by leaving the set on for 5 minutes after pairing (which happens while charging) if you lay the transmitter alongside receiver. The set will automatically say: “Wizzu in *offline mode*” after 5 minutes. If this doesn’t happen, perform reset 1 (page 25) and try again.

REMOVE OR CHANGE THE RECEIVER FROM THE WIFI NETWORK

Disconnecting the receiver

- Go to ‘My Wizzu’ through the burger menu in the top left corner of the app.
- Select the receiver of which you want to change the Wi-Fi network and press ‘delete’.

Selecting a new Wi-Fi network

- Make sure you have your Wi-Fi password available.
- Make sure you have first performed reset 1 and put the set on the charger again for 1:30 minutes until it indicates “transmitter connected”.
- Press ‘pair’ Wizzu’ on the app.
- Turn the receiver off.
- Only turn on the receiver when the app says to do so.
- You hear a noise, this is the sign that it is working and the battery is charged.
- Connect to the “Wizzu” Wi-Fi network in the app.
- The app searches for nearby Wi-Fi networks.
- Select your home network and enter the password.
- When the receiver is connected correctly, you will hear a success sound.

THE EVENING RITUAL

The moment before bedtime is very important while using the bedwetting alarm. A moment of rest and awareness.

1. Let your child hear the alarm sound a few times every night before going to sleep. This way your child knows when to wake up to. You can do this through the app!
2. Let your child go to the toilet before he/she goes to sleep.
3. Let your child put on the Dryly pants and press the transmitter in place.
4. Check the app with your child.
5. Read a book or let your child read for at least 20 minutes.
6. Let your child go to the toilet again.
7. Wish your child good night and put Wizzu about 1 meter away. This way your child has to get up and really wake up to turn off the alarm.
8. Never wake your child when you go to sleep yourself to go to the toilet one more time. By doing so, you will delay the training.

Sweet dreams!



DRYLY WEBSHOP

Pants

The Dryly pants are made of organic cotton and have a perfect fit. We developed the cheerful prints with children.



The bottoms can be washed at 60 degrees Celsius; they can also be put in the dryer. Avoid the use of fabric softener or chlorine. We also have neutral bottoms for children who are a bit older or for sleepovers.



Waterproof mattress protector

Place the mattress protectors under the fitted sheet to protect your mattress. This prevents stains and unpleasant odors.



Wizzu

Wizzu is the sweet panda, a great friend for your child. You can always order a Wizzu for a brother or sister.



The transmitter (also available with vibrating version!)

The transmitter detects the moisture in the Dryly underpants. As soon as an accident occurs, a signal is sent to the receiver. Do not wash the transmitter because it will not work.



The receiver

The receiver is placed in Wizzu and makes a wake-up sound in the event of an accident.

The receiver immediately sends a message to the mobile app so that you can help your child. Parental support is crucial to the success of this method. In the app you can see the state of the battery. Experience shows that you need to charge the receiver with transmitter attached every from day to day, and that you have to switch it off during the day.



ERROR MESSAGES

“Transmitter out of range”

It can sometimes happen that you hear the message ‘transmitter out of range’. This means that the receiver has been searching for the transmitter’s signal for a while, but has not been able to detect it.

Causes

Your child sleeps on his or her stomach

The body blocks signals from the transmitter. If your child sleeps on his or her stomach, this can cause the signals not to get as far.

You improve the connection by placing the receiver at the hip of your child’s body. For example, you can put a chair next to the bed with Wizzu on it. Whenever the alarm loses the signal. The transmitter will make the sound: “*transmitter disconnected*” Whenever the alarm is back in range again, it will tell “*transmitter connected*”.

The transmitter is not yet connected to the receiver

When you receive our bedwetting alarm, pairing the transmitter is part of the process. You pair the transmitter with the receiver by charging them together. After 1:30 minutes, the set says “*transmitter connected*” You only have to do this once and you will hear it once. Do you not hear this? Perform reset 1 and try again. If this step did not go right. Please consult the customer service.

SOLUTIONS

Reset 1

Press and hold the receiver’s black button for 20 seconds. Make sure that the set is turned ON. After this, you will hear “*Transmitter out of range*”. This resets the set back to factory settings (The wifi network, transmitter & app pairing will be erased) After this, you need to pair the transmitter and receiver again while charging.

Reset 2

Press a pin/ paperclip into the hole made in the letter “D” of the receiver. This will restart the receiver. You do not need to pair the set again.

WARRANTY

Dryly is committed to good quality products on a daily basis. It may happen that your Dryly bedwetting alarm does not work properly. Dryly b.v. complies with the law on market practices and consumer protection.

Dryly has a warranty period of 6 months for electronics and 3 months for underwear upon receipt of the bedwetting alarm by the purchaser. The warranty covers manufacturing and/or material defects and defects caused by normal use. This is at Dryly's discretion.

If your bedwetting alarm does not work as it should, follow these steps; Report your complaint, preferably by email to info@dryly.com, with the subject; 'complaint' with your order number. We will respond as soon as possible and do everything we can to solve your problem.

Damage caused by careless handling or by not following the instructions as stated in the user manual is excluded. The warranty can be invoked upon presentation of the invoice. The warranty is invalidated if repairs have been carried out by third parties, if the user has worn a nappy over the pants with the transmitter, if the bedwetting alarm has been purchased through a reseller (e.g. Marktplaats or eBay) and if water damage has occurred.

HELP AND SUPPORT

Are there any uncertainties? Be sure to always check our frequently asked questions (FAQ) on the website too! Here you will find a lot of information about usage and training!

klantenservice@dryly.com

+31 (0)85 106 0377

www.dryly.com

DRYLY
THE HELP YOU NEED

TABLE DES MATIÈRES

Contenu du kit de démarrage	29
Conseils de l'équipe Dryly	30
Installation	31
Fonctions du récepteur	33
Changer de réseau Wi-Fi	34
Le rituel du soir	35
Boutique en ligne Dryly	36
Messages d'erreur	37
Garantie	38
Aide et assistance	38

MERCI D'AVOIR CHOISI LE STOP PIPI DRYLY!

Nous sommes là pour vous prêter main forte dans la lutte contre l'énurésie. Notre objectif est de vous épauler au mieux tout au long de l'aventure vers la propreté nocturne. Nous voulons aider votre enfant à vaincre l'énurésie motivé et avec le sourire.

Dans ce manuel, nous vous expliquons comment utiliser le stop pipi Dryly.

Dryly a vu le jour en réponse aux problèmes d'énurésie du fils de Clarien, l'une des co-fondatrices, qui en a souffert pendant de nombreuses années. Après avoir passé des années à essayer toutes sortes de méthodes, son fils a eu l'idée de créer une méthode ludique et positive. Pourquoi ne pourrait-on pas apprendre la propreté en s'amusant ? Pourquoi n'existait-il pas d'application ludique et motivante ? C'est ainsi que, pendant le petit-déjeuner du samedi matin, va naître l'idée de Dryly.

Notre vision est d'aider les parents et les enfants à vaincre l'énurésie.

Nous partons à l'aventure avec vous. Les aventures sont enrichissantes et visent un objectif, mais le chemin n'est jamais linéaire. Pour vous accompagner, nous vous offrons des produits positifs et ludiques mais aussi de l'aide, des conseils et des astuces.


CONTENU DU KIT DE DÉMARRAGE



Sous-vêtements



Wizzu

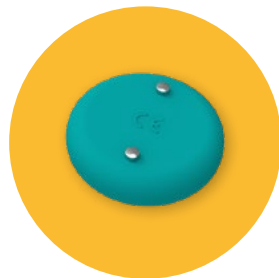

Émetteur



Récepteur



**Application mobile
(l'App Store ou le
Google Play Store)**

CONSEILS DE L'ÉQUIPE DRYLY

- Note : vous chargez l'ensemble avec un câble USB-C, qui n'est pas inclus dans l'emballage.

- Gardez à l'esprit que cette méthode dure 3 mois en moyenne.

- Utilisez le stop pipi jusqu'à ce que votre enfant soit propre pendant 14 nuits consécutives.

- Il est crucial de soutenir votre enfant pendant cette période. Levez-vous lorsque votre enfant est réveillé par l'alarme pendant la nuit. Votre enfant a besoin de motivation et de soutien !

- Évitez de mettre de la pression sur votre enfant. Rendez l'expérience amusante ! Récompensez votre enfant d'une autre manière que par des gadgets !

- Pour éteindre l'alarme, votre enfant doit secouer Wizzu d'avant en arrière ; votre enfant doit donc être complètement réveillé.

- L'application récompense votre enfant par des gadgets fun, mais n'hésitez pas à le récompenser de temps en temps après plusieurs nuits au sec.

- Veillez à toujours charger l'appareil avec l'émetteur encliqueté sur le récepteur. Veillez à mettre l'appareil sur le chargeur pendant 4 heures toutes un jour sur deux et à l'éteindre pendant la journée.


- Ne réveillez plus votre enfant le soir pour le faire uriner.

- Conservez le stop pipi ; une rechute reste possible.

- Lors du lavage des sous-vêtements, veillez à retirer l'émetteur. Ne mettez pas l'émetteur dans la machine à laver !

- Après un accident, il faut d'abord retirer l'émetteur du pantalon et ensuite secouer le Wizzu

INSTALLATION

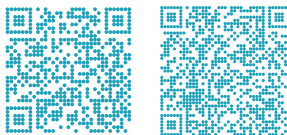


Avant de commencer :



1. Placez l'émetteur et le récepteur sur le chargeur. La lumière prend de la couleur pendant le chargement. Ils doivent être chargés pendant au moins 5 heures avant de pouvoir être utilisés.
2. Rassemblez tous les composants du kit de démarrage.
3. Assurez-vous d'avoir votre mot de passe Wi-Fi sous la main.
4. Téléchargez l'application Dryly depuis l'App Store ou le Google Play Store.
5. Installez l'application Dryly.
6. Créez un compte dans l'application.
7. Saisissez les informations concernant l'enfant.
L'installation prend quelques minutes. Nous sommes là pour vous aider ! Il est important de suivre les instructions de l'application.


1 Le démarrage

- Sélectionnez Version B du récepteur dans l'application.
- Assurez-vous d'avoir le nom et le mot de passe de l'émetteur, du récepteur et du wifi.
- Fixez l'émetteur sur le récepteur et mettez-le sur le chargeur, la lumière s'allume.
- Au bout de 1:30 minutes, le récepteur dit "transmitter connected", l'émetteur est maintenant connecté au récepteur. Il se peut que cela ait déjà été fait au cours des 5 heures de charge précédentes.
- Retirez l'appareil du chargeur et placez l'émetteur à côté du récepteur.

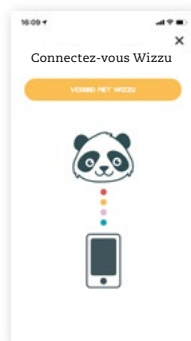

2 Vous entendrez un son, c'est le signe que l'appareil fonctionne correctement et que la batterie est chargée.


- Veuillez noter que les différentes étapes du processus d'appariement peuvent parfois prendre plus de temps !
- Quand l'application vous y invite, allumez le récepteur.
- Un son signale que le récepteur fonctionne et que la batterie est chargée.
- Connectez-vous au réseau Wi-Fi « Wizzu » dans l'application.
- L'application liste les réseaux disponibles.
- Sélectionnez votre réseau domestique et saisissez le mot de passe.
- Un son confirme le succès de la connexion.
- L'apparition de confettis dans l'application vous indique que le récepteur a bien été ajouté !
- Si la connexion ne fonctionne pas, veuillez vérifier si les paramètres d'autorisation concernant « la localisation » dans les paramètres du téléphone sont correctement enregistrés › Application Dryly › Localisation › Assurez-vous que l'autorisation soit bien cochée et définie sur « toujours ».r et placez l'émetteur à côté du récepteur.

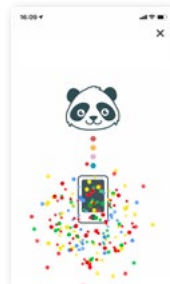

3 Personnaliser Wizzu

- Une fois le stop pipi installé, votre enfant peut personnaliser Wizzu avec les premiers points.

Vous avez un problème ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider via le service client (serviceclientele@dryly.com ou +33 366 88 23 52).

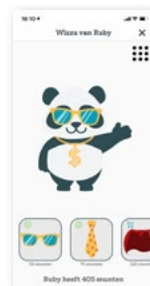

FONCTIONS DU RÉCEPTEUR

● **Éteint**

Une pression de 3 secondes sur le bouton noir du récepteur désactive le récepteur. .

● **Allumé**

En appuyant une fois sur le bouton noir, le récepteur s'allume.

● **Chargement**

Vous pouvez charger l'appareil en fixant l'émetteur sur le récepteur et en le plaçant ensuite sur le chargeur. L'appareil doit être rechargé toutes un jour sur deux pendant 4 heures éteindre l'appareil pendant la journée. lorsque le temps est écoulé, l'appareil s'éteint de lui-même.

● **Indicateur de l'état de la batterie du récepteur**

● Vert = 40-100% | ● Rouge = 0-40%

Note ! L'indicateur ne représente que la batterie du récepteur. Pour vérifier le pourcentage exact de la batterie de l'émetteur et du récepteur, veuillez consulter l'application.

● **Volume sonore**

Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez modifier le volume du récepteur en différents modes en appuyant brièvement sur le bouton noir.

L'appareil démarre toujours avec un volume de 100 %

1x pression= 75% / nouvelle pression = 50% / nouvelles pression = mode silencieux / nouvelles pression = 100% à nouveau. Veuillez à attendre 3 secondes à chaque fois entre chaque pression.

En mode silencieux, seule l'application émet une alarme (et un vibreur si vous avez cette option). Pratique pour les moments silencieux comme une soirée pyjama!

● **Mode hors ligne**

Lorsque vous associez l'appareil en le chargeant. Vous pouvez lancer le processus d'installation pour configurer l'appareil sur le réseau domestique à l'aide de l'application du téléphone.

Préférez-vous utiliser uniquement l'émetteur et le récepteur ? Il existe un mode hors ligne avec une connexion entre l'émetteur et le récepteur qui ne nécessite pas de réseau domestique ou d'application.

Vous pouvez installer le mode hors ligne en laissant l'appareil allumé pendant 5 minutes après l'appairage (qui se produit pendant la charge) si vous posez l'émetteur à côté du récepteur. L'appareil dira automatiquement : "Wizzu in offline mode" après 5 minutes. Si ce n'est pas le cas, effectuez la réinitialisation 1 (page 37) et réessayez. Après cela, remettez l'appareil sur le chargeur et réessayez après 1:30 minutes, une fois que l'émetteur a été reconnecté.

RETIRER OU CHANGER LE RÉCEPTEUR DU RÉSEAU WIFI

Déconnecter le récepteur

- Appuyez sur le menu hamburger en haut à gauche de l'application et allez dans « mon Wizzu ».
- Sélectionnez le récepteur pour lequel vous voulez changer de réseau et appuyez sur « Supprimer »

Sélectionner un nouveau réseau Wi-Fi

- Assurez-vous d'avoir d'abord effectué la réinitialisation 1 et remettez l'appareil sur le chargeur pendant 1:30 minutes jusqu'à ce qu'il entende "émetteur connecté".
- Assurez-vous d'avoir votre mot de passe Wi-Fi sous la main.
- Appuyez sur « Connecter Wizzu » dans l'application.
- Éteignez le récepteur.
- Quand l'application vous l'indique, allumez le récepteur.
- Un son signale que le récepteur fonctionne et que la batterie est chargée.
- Connectez-vous au réseau Wi-Fi Wizzu dans l'application.
- L'application recherche les réseaux Wi-Fi disponibles.
- Sélectionnez votre réseau domestique et saisissez le mot de passe.
- Un son confirme le succès de la connexion.

LE RITUEL DU SOIR

Le moment qui précède le coucher est très important pendant l'utilisation du stop pipi. Faites-en un moment de détente et de sensibilisation.

1. Laissez votre enfant écouter le son de l'alarme plusieurs fois par nuit avant de s'endormir. De cette façon, votre enfant sait lorsqu'il doit se réveiller.
2. Veillez à ce que votre enfant aille aux toilettes avant d'aller se coucher. Vous pouvez le faire via l'application !
3. Faites-lui enfiler le sous-vêtement Dryly et appuyez sur l'émetteur.
4. Parcourez l'application avec votre enfant.
5. Faites-lui la lecture ou laissez-le lire seul pendant au moins 20 minutes.
6. Demandez à votre enfant de retourner aux toilettes.
7. Dites bonne nuit à votre enfant et placez Wizzu à environ se réveiller complètement pour éteindre l'alarme.
8. Ne réveillez jamais votre enfant lorsque vous allez vous couchez vous-même pour aller aux toilettes une dernière fois. En faisant cela, vous retarderez l'apprentissage.

Bonne nuit!



BOUTIQUE EN LIGNE DRYLY

Sous-vêtements

Les sous-vêtements Dryly sont confectionnés à partir de coton biologique et offrent un confort parfait. Nous avons conçu leurs imprimés joyeux en collaboration avec des enfants.

Les sous-vêtements peuvent être lavés à 60 degrés. Ils peuvent également passer au sèche-linge. Évitez l'utilisation d'adoucissants ou de produits contenant du chlore. Nous avons également des sous-vêtements neutres, idéals pour les enfants un peu plus âgés ou pour les soirées pyjama.



Alèse

L'alèse se place sous le drap housse afin de protéger le matelas. Elle permet d'éviter les taches et les mauvaises odeurs.



Wizzu

Wizzu est le gentil panda et l'ami de votre enfant. Il est possible de commander un Wizzu supplémentaire pour un frère ou une sœur.



L'émetteur (également disponible en version vibrante!)

L'émetteur détecte la présence de liquide dans le sous-vêtement Dryly. Dès que l'enfant fait pipi au lit, il envoie un signal au récepteur. Ne mettez pas l'émetteur dans la machine à laver, sous peine de le détériorer.



Le récepteur

Le récepteur se place à l'intérieur de Wizzu. Il émet une alarme lorsque l'enfant fait pipi au lit. Le récepteur envoie immédiatement un message à l'application mobile afin que vous puissiez aider votre enfant. Le soutien des parents est crucial au succès de cette méthode. Vous pouvez voir l'état de la batterie dans l'application. L'expérience montre qu'il faut recharger le récepteur avec l'émetteur fixé toutes un jour sur deux et qu'il faut éteindre le poste pendant la journée.



MESSAGES D'ERREUR

● Transmitter out of range

Il peut arriver que vous entendiez le message « transmitter out of range ». Cela signifie que le récepteur a cherché le signal de l'émetteur pendant quelques temps mais ne l'a pas détecté.

Causes

Votre enfant dort sur le ventre

Son corps bloque le signal de l'émetteur. Si votre enfant dort sur le ventre, la portée du signal peut être réduite.

Pour améliorer la connexion, placez le récepteur à hauteur de la hanche de l'enfant. Par exemple, vous pouvez poser Wizzu sur une chaise placée à côté du lit lorsque le réveil perd le signal, le réveil indique : *“transmitter disconnected”*. Lorsqu'il est retrouvé, le réveil indique : *“transmitter connected”*.

L'émetteur n'a pas encore été appairé au récepteur

Lorsque vous recevez notre alarme pour l'énurésie, l'appairage de l'émetteur fait partie du processus. Vous associez l'émetteur avec le récepteur en les chargeant ensemble. Après 1:30 minutes, l'appareil indique *“émetteur connecté”* Vous ne devez le faire qu'une seule fois et vous ne l'entendrez qu'une fois. Vous ne l'entendez pas ? Effectuez la réinitialisation 1 et réessayez, assurez-vous que l'appareil est allumé lorsque vous effectuez cette opération. Si cette étape ne s'est pas déroulée correctement. Veuillez consulter le service clientèle.

SOLUTION

Reset 1

Appuyez sur le bouton noir du récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. Vérifier que l'appareil est sous tension. Après cela, vous entendrez *“transmitter out of range”*. Cela réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine (le réseau wifi, l'appairage de l'émetteur et de l'application seront effacés) Après cela, vous devez appairer l'émetteur et le récepteur à nouveau pendant la charge.

Reset 2

Enfoncez une épingle / paperclip dans le trou de la lettre "D" du récepteur. Cela redémarre le récepteur. Il n'est pas nécessaire d'appairer à nouveau l'appareil.

GARANTIE

Dryly s'engage à offrir des produits de qualité jour après jour. Malgré tout, il se peut que votre stop-pipi Dryly ne fonctionne pas correctement.

Si votre stop pipi ne fonctionne pas comme il se doit, communiquez-nous votre plainte par courriel de préférence, à serviceclientele@dryly.com, en précisant « Plainte » ainsi que votre numéro de commande dans l'objet. Nous vous répondrons dès que possible et ferons tout pour résoudre votre problème.

Sont exclus les dommages résultant de la négligence de l'utilisateur ou du non-respect des instructions d'utilisation. La garantie ne s'applique que sur présentation de la facture. La garantie prend fin si des réparations ont été effectuées par des tiers, si l'utilisateur a porté une couche au-dessus du sous-vêtement avec l'émetteur, si le stop-pipi a été revendu par un tiers, ou en cas de dommages causés par de l'eau.

AIDE ET ASSISTANCE

Y a-t-il des incertitudes ? Consultez également notre foire aux questions (FAQ) sur le site web ! Vous y trouverez de nombreuses informations sur l'utilisation et la formation !

Nous sommes toujours à votre disposition par courriel ou téléphone.

serviceclientele@dryly.com

+33 366 88 23 52

www.dryly.com

DRYLY
THE HELP YOU NEED

DRY NIGHTS, GREAT ADVENTURES

DRYLY
THE HELP YOU NEED

