


# Setup Instructions

Read before using your Replacement Feet


- 1 Using a Phillips screwdriver, remove screw (by turning counterclockwise) from center of each of three (3) HurryCane® feet. Then remove rubber foot and discard the old feet and screws.

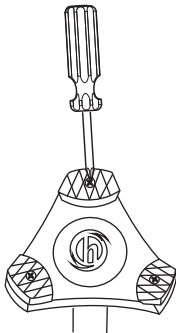

- 2 Carefully place new rubber foot onto pivoting head foot cavity.

Slide metal washer onto screw. Place screw with washer through rubber foot and into the threaded hole of pivoting head foot cavity. Be sure to tighten screw securely.


Repeat this step for the remaining two feet. HurryCane® requires the feet to be replaced every six months.

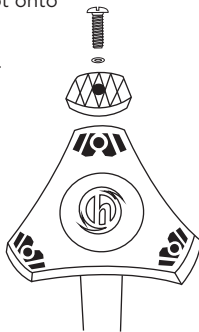

# Instrucciones de instalación

Lea antes de usar sus pies de reemplazo


- 1 Con un destornillador Phillips, quitar el tornillo (girando hacia la izquierda) desde el centro de cada una de las tres patas del HurryCane®. Luego quitar las patas de caucho y tirar las patas y tornillos anteriores.

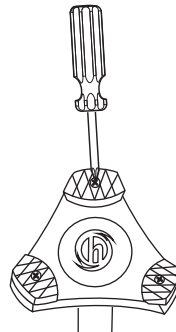

- 2 Colocar cuidadosamente las nuevas patas de caucho en la cavidad de la cabeza giratoria de la pata.

Deslizar la arandela de metal en el tornillo. Colocar el tornillo con la arandela a través de la pata de caucho y dentro del orificio roscado de la cavidad de la cabeza giratoria. Asegurarse de apretar los tornillos de forma segura.


Repetir este paso para las dos patas restantes. HurryCane® requiere que las patas se reemplacen cada seis meses.

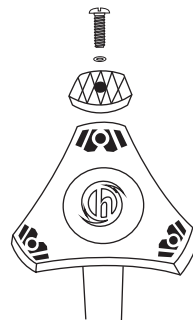

# Instructions d'installation

A lire avant d'utiliser vos pieds de remplacement

- 1 À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis (tournez dans le sens antihoraire) qui se trouvent au centre de chacun des trois embouts HurryCane®. Retirez ensuite les embouts de caoutchouc; jetez les vieux embouts et les vieilles vis.

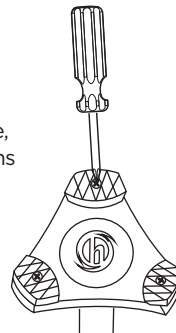

- 2 Placez soigneusement le nouveau pied en caoutchouc sur la cavité pivotante du pied principal.

Faites glisser la rondelle en métal sur la vis. Placez la vis avec la rondelle dans le pied en caoutchouc et dans le trou fileté de la cavité du pied de la tête pivotante. Assurez-vous de serrer la vis fermement.

Répétez cette étape pour les deux pieds restants. HurryCane® exige que les pieds soient remplacés tous les six mois.

