

OMNA GARROT MARIN

Caractéristiques Générales

- Robuste, Ultraléger et Compact
- Qualité Océanique, 100% Marine
- Antidérapant, fermeture autobloquante
- Sangle buccale pour application à une main
- Mode d'emploi pour usage en extérieur
- Emplacement pour noter l'heure de l'application
- Boucle à rochet marine - acier inoxydable
- Charge maximale du cliquet 250 Kg
- Conçu pour une utilisation répétitive en mer / entraînement

LÉGENDE DES SYMBOLES DU DISPOSITIF MÉDICAL

SYMBOLE



FABRICANT: Indique le nom du fabricant du dispositif médical.



ATTENTION: Indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi avant toute utilisation, car il s'y trouve d'importantes informations concernant la sécurité et les précautions à prendre qui, pour différentes raisons, ne se retrouvent pas sur l'appareil médical lui-même.



NE PAS RÉUTILISER: Indique que le dispositif médical n'est prévu que pour un seul usage ou que pour être utilisé sur un seul et même patient au cours d'une unique procédure.



MARQUAGE CE : Indique la conformité technique aux normes de l'Union européenne.



REPRÉSENTANT EUROPÉEN AGRÉÉ : Les critères d'accréditation et de surveillance du marché relatifs à la commercialisation des produits ; directive sur les dispositifs médicaux.



CODE DE LOT : Indique le code du lot du fabricant, afin que le lot puisse être identifié. lot can be identified.



Entretien préventif:

- Rinçage à l'eau douce après chaque utilisation ou exposition à l'eau salée
- L'inspection et le test des composants doivent être effectués régulièrement
- Familiarisation devrait être effectuée régulièrement et avant l'application réelle pour réduire les effets du stress

Contre-indications:

- Ne pas utiliser pour un saignement mineur
- Ne pas appliquer sur un joint
- Ne pas appliquer sur les objets dans les poches



Enregistrez votre le garrot et validez votre garantie à

www.omnainc.com/pages/contact

Fabriqué pour:

Manufacturer Symbol

OMNA Inc.

1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com


Patents: www.omnainc.com

EC	REP	Promoteur Australien
EMERGO EUROPE Prinsessgracht 20 The Hague, 2514 AP, The Netherlands		EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex St Sydney, NSW, 2000, AU

En cas de forte hémorragie au niveau de la jambe ou du bras: appliquer le garrot OMNA

Application à Deux Mains

1. **TIREZ** - pour sortir la sangle de son emballage
2. **Placez la sangle** autour du membre, **en amont de la plaie et SERREZ**
3. **Passez l'extrémité de la sangle dans la boucle**
4. **Tirer vers le bas Serré** - pour éliminer tout le mou
5. **SOULEVEZ** - le levier de fermeture jusqu'à ce que l'hémorragie ait cessé et que le pouls distal ait disparu

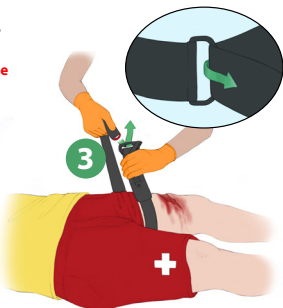

Application à Une Main



1. **Placez la sangle** autour du membre, **en amont de la plaie et serrez**. Le garrot peut aussi être appliqué à 5 – 8 cm au-dessus de la blessure



2. **Prenez - la sangle entre les dents. Tirer vers le bas Serré** - pour éliminer tout le mou



3. **Velcro**



4. **Assurez-vous qu'il n'y ait plus de mou; Serrez encore si nécessaire**

5. **SOULEVEZ le levier de fermeture** jusqu'à ce que l'hémorragie ait cessé et que plus aucun pouls ne soit ressenti sous le garrot. Si l'hémorragie n'est pas maîtrisée ou si le pouls distal reste présent, augmentez la compression ou appliquez un deuxième garrot au-dessus ou à côté du premier garrot

6. **Notez l'heure d'application du garrot et consultez un médecin**



Pour libérer / réinitialiser le garrot pour la formation.

Tirez le bouton rouge vers le haut.

