

# OMNA TORNIQUETE MARINO

## Características de la segunda generación

- Ponible, resistente, ligero y compacto
- Diseñado para utilizarse en el agua salada o para requisitos marinos
- Sistema de bloqueo automático y antideslizante
- Correa que se puede morder para ayudar a los usos con una sola mano
- Instrucciones de uso en la parte de afuera
- Espacio para anotar el momento en el que se aplicó el torniquete
- Trinquete de acero inoxidable revestido POR COMPLETO en polvo
- Carga máxima de trinquete 250 kg
- Diseñado para el entrenamiento repetitivo con poco desgaste

### Leyenda de símbolos del dispositivo médico

#### SÍMBOLO

#### DESCRIPCIÓN



**FABRICANTE:** Indica el fabricante del dispositivo médico.



**PRECAUCIÓN:** Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso para obtener información respecto a medidas de precaución importante, como advertencias y precauciones que, por diversas razones, no pueden presentarse en el propio dispositivo médico.



**NO REUTILIZAR:** Indica un dispositivo médico que solo se puede utilizar una vez o en un solo paciente durante un solo procedimiento.



**Distintivo CE:** Significa conformidad técnica europea



#### REPRESENTANTE EUROPEO

**AUTORIZADO:** Los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relacionados con la comercialización de productos; Directiva de dispositivos médicos.



**CÓDIGO DE LOTE:** Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote o el código.



### Mantenimiento preventivo:

- Enjuague con agua dulce después de cada uso o exposición al agua salada.
- Inspección y pruebas de componentes deben realizarse regularmente
- La familiarización debe realizarse regularmente y antes de la aplicación real para reducir los efectos del estrés.

### Contraindicaciones:

- No usar para sangrado menor
- No aplicar sobre una articulación
- No aplicar sobre artículos en bolsillos



Para registrar su torniquete y validar su garantía, ingrese a [www.omnainc.com/pages/contact](http://www.omnainc.com/pages/contact)

#### Fabricado para:

Manufacturer Symbol

**OMNA Inc.**

1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: [sales@omnainc.com](mailto:sales@omnainc.com)

Patentes: [www.omnainc.com](http://www.omnainc.com)


EC	REP	Patrocinador Australiano
EMERGO EUROPE Prinsessgracht 20 The Hague, 2514 AP, The Netherlands		EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex St Sydney, NSW, 2000, AU

# Hemorragia GRAVE en el Brazo o la Pierna:

aplique el torniquete OMNA

## Uso Con Dos Manos

1. **TIRAR** - sacar la correa que está guardada
2. **Posición Alta y Prieta** - **RODEAR** la extremidad
3. **Colocar la correa mediante anillo**
4. **TIRAR Hacia Abajo Apretado** - que quede prieto
5. **LEVANTAR** la palanca del trinquete hasta que se detenga la hemorragia y se elimine el pulso distal

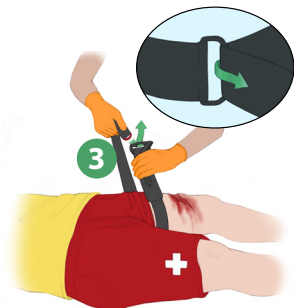

## Uso Con Una Mano



1. **Posición Alta y Prieta.** El torniquete también se puede aplicar 5 - 8 cm por encima de la herida



2. **Morder** - correa que se puede morder. **TIRAR Hacia Abajo Apretado** - que quede prieto



3. **Velcro**
5. **LEVANTAR** la palanca del trinquete hasta que la **hemorragia se detenga** y que no se pueda sentir el pulso debajo del torniquete. Si no se puede controlar la hemorragia o si hay pulso distal, comprima más o aplique otro torniquete por encima o al lado del primero
6. **Anote el momento en el que se aplicó el torniquete.** **Busque atención médica**



4. **Asegurarse de que quede prieto; Volver apretar según sea necesario**



**Para liberar / reiniciar el torniquete de entrenamiento.**

Tire del botón rojo hacia arriba.

