


# 8320KL

User calibration • Calibración del usuario • Etalonnage par l'utilisateur

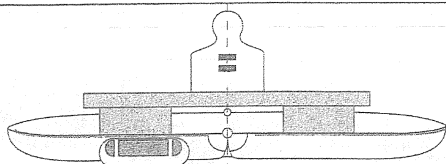

## English

When in use at different latitudes and longitudes, the scale can be calibrated by the user.

Press "ON" key to switch on the scale.

Before the scale resets to zero, press "UNIT" 2-3 times until "CAL" appears in the display.

When LCD displays "5.00", place 5 kg weight on the scale and wait. The scale will display an internal control value.

When LCD displays "10.00", place another 5 kg weight on the scale and wait. The scale will display an internal control value. The scale will switch off automatically. Calibration is complete.

## Español

Cuando se usa la balanza a diferentes grados de longitud y de latitud, se puede calibrar la balanza.

Encienda la balanza por apretar la tecla «ON»

Antes de que la balanza se pone a zero, apréte la tecla «UNIT» 2 o 3 veces hasta que «CAL» aparece en la pantalla.

Cuando «5.00» aparece en la pantalla, ponga 5 kg de peso en la balanza y espere. La pantalla mostrará un número de control.

Cuando «10.00» aparece en la pantalla, ponga 5 kg de peso más en la balanza y espere. La pantalla mostrará un número de control.

La balanza se apagará automáticamente. Ya se ha finalizado la calibración.


## Français

En cas d'écart résultant de l'utilisation à des longitudes et des latitudes différentes, le pèse-bébé peut être étalonné par l'utilisateur.


- Appuyer la touche «ON» pour allumer le pèse-bébé.
- Avant la réinitialisation de la balance à zéro, appuyez sur «UNIT» 2-3 fois jusqu'à ce que «CAL» s'affiche à l'écran.
- Lorsque «5.00» s'affiche à l'écran, mettre un poids de 5 kg sur le pèse-bébé et attendre. L'écran s'affiche un chiffre contrôle.
- Lorsque «10.00» s'affiche à l'écran, mettre à nouveau un poids de 5 kg sur le pèse-bébé et attendre. L'écran s'affiche un chiffre contrôle.
- Le pèse-bébé se met hors tension automatiquement. L'étalonnage c'est terminé.

**Health o meter®**  
Professional  
[www.hom scales.com](http://www.hom scales.com)


Ask about these other Health o meter® Professional pediatric scales:

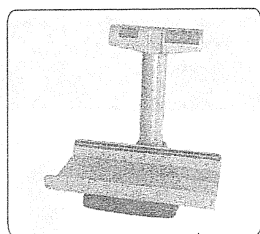


522KL

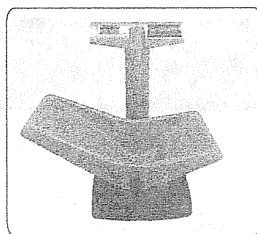


524KL

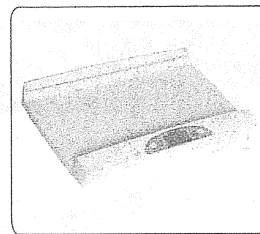


553KL

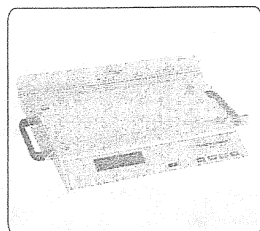

2210KL

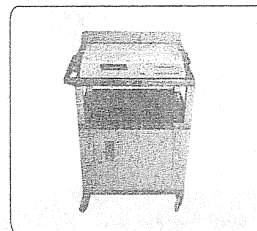

2210CART

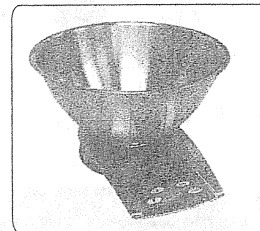

222KL

For more information, visit [www.hom scales.com](http://www.hom scales.com)