

TISSU-TRANS® FILTRON 100 ml och 250 ml

Steril fettuppsamling och filtrering

3-TT-FILTRON 100 och 250


STERILE

Sterila artiklar som medföljer:

- ◆ Uppsamlingsbehållare med filter och avfallsextraheringsport
- ◆ Uppsamlings slang 180 cm med ansluten L-anslutning (medicinsk kvalitet, gul rand)
- ◆ Överförings slang 150 mm med luerlockspets (medicinsk kvalitet)

Standardartiklar som också behövs:

- ◆ Standardiserad sugslang (1/4 tum eller 5/16 tum ID)
- ◆ Avfallsbehållare
- ◆ Sugkälla (inställd på cirka 38 cm Hg. (380 mm) eller 50 % effekt)
- ◆ 3 mm uppsamlingskanyl
- ◆ Återinjiceringskanyl
- ◆ Luerlocksprutor för överföring och återinjicering

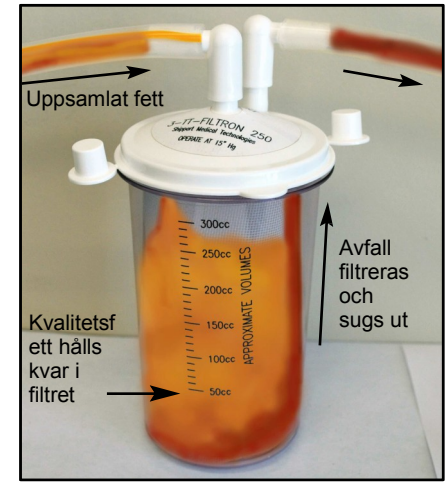

Observera före användning:

1. Tissu-Trans® FILTRON är steril och en engångsprodukt. Enpatientsbruk.



Får inte omsteriliseras eller återanvändas.

Utrustningen kan orsaka infektioner eller också kan utrustningens inbyggda egenskaper ändras om den steriliseras på nytt eller återanvänds.



2. Produkten är bruksfärdig. **Öppna inte behållaren eller locket.**
3. Säkerställ att vävnaden är väl hydratiserad - som vid ultravåt tumescent anestesi.
4. En avfallsbehållare av standardtyp **ska användas** mellan FILTRON och sugenheten. Under uppsamlingen filtreras avfallet ut i avfallsbehållaren.
5. Användning av en 3 mm uppsamlingskanyl **rekommenderas**.
6. Användning av den medföljande slangen av medicinsk kvalitet **rekommenderas**, för att säkerställa en icke-toxisk bana.
7. Använd inte enheten om den sterila påsen är trasig eller punkterad.




Instruktioner

1. Avlägsna sterila komponenter och placera dem på en steril yta.
2. **Placera FILTRON upprätt på ett sterilt område. Måste hållas vertikal.** **A**
Operationssköterskan kan hålla ett finger eller tummen på enheten för att hålla den upprätt.
3. Lokalisera uppsamlingsslangen med L-anslutning och gul rand:
Anslut slangens L-anslutningsände till PATIENT-porten på behållarlocket. **B** Anslut den andra änden av slangen till fettsugningskanylen.
4. Anslut den standardiserade sugslangen till VAC-porten på behållarens lock. **C** Anslut den andra änden av slangen till avfallsbehållaren och sugen.
5. Slå på sugning. Kontrollera alla anslutningar.
Justera vakuumtrycket till 15" eller 380 mm Hg. **D** Systemet kan testas med steril saltlösning för att säkerställa ett bra flöde.
6. Samla in önskad mängd fett. Kvalitetsfett kommer att stanna kvar i filtret och avfall sugas ut till avfallsbehållaren. Fett som har filtrerats kommer att vara redo att återinjiceras.

Filtrerat fett ska fortfarande innehålla 3-5% vätska, vilket är nödvändigt för ett bra flöde under överföringen. Efter att fett har överförts till sprutor ska det dekanteras ytterligare och överflödigt vätska tryckas ut.

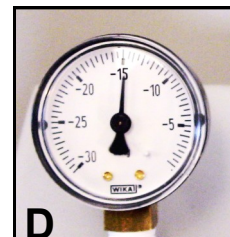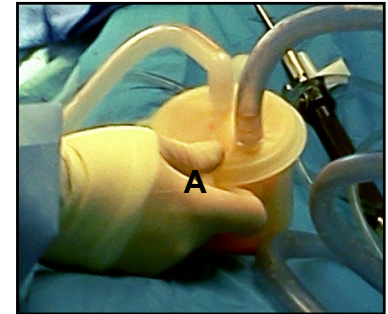

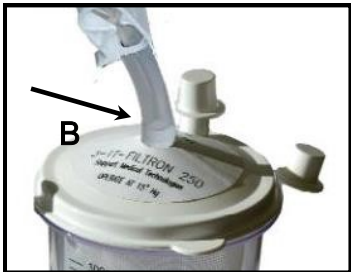

BORTTAGANDE/ÖVERFÖRING Produkten vänds upp och ner.

1. Stäng av sugningen. Koppla bort slangarna från FILTRON-locket, bibehåll steriliteten.
2. Ta bort det vita locket som sitter fast på sidan av FILTRON-locket. Använd det för att stänga VAC-porten. **A**
3. Anslut överföringsslangen till patientporten. **B**
Stäng den vita klämman på överföringsslangen. **Alla portar är nu stängda.**
4. Vänd försiktigt FILTRON upp och ner.
5. Sätt fast luerlock-sprutan på överföringsslangen. Öppna klämman och dra ut det fett som ska återinjiceras. **C** Upprepa detta med fler sprutor.
Om vävnad finns kvar i enheten, ta bort locket för att extrahera den.
6. När önskad volym har överförts stängs hela systemet av.
7. Anslut återinjiceringskanylen. Fettet är redo att återinjiceras i mottagarstället.

Kassera i standardiserad medicinsk avfallsbehållare för biologiskt riskmaterial.

Får inte omsteriliseras eller återanvändas.

CE 0459

EC REP

CEpartner4U, Esdoornlaan 13
3951DB Maarn NEDERLÄNDERNA
www.cepartner4u.eu



Varning: 1. Den här produkten kommer inte i sig att skapa en signifikant viktninskning. 2. Produkten bör användas med extrem försiktighet på patienter med kroniska sjukdomar. 3. Volymen förlust av blod och endogen kroppsvätska kan påverka intra och/eller postoperativ hemodynamisk stabilitet negativt.



Försiktighetsåtgärder: 1. Den här produkten är utformad för att forma kroppen genom att ta bort ett begränsat lager av överflödigt fett via små snitt. 2. Endast läkare som har kunskap om fettsugning får använda den här produkten. 3. Procedurens resultat kommer att variera beroende på patientens ålder, operationsstället och läkarens erfarenhet. 4. Resultatet av det här ingreppet kan bli eller inte bli permanent. 5. Mängden fett som tas bort bör begränsas till vad som är nödvändigt för att uppnå det önskade kosmetiska resultatet. 6. Alla återanvändbara komponenter måste steriliseras och alla engångskomponenter bytas ut för varje patient.

Den här produkten är avsedd att användas tillsammans med godkända medicinska pumpar, slangar och kanyler av hög kvalitet för insamling av aspirerat fett för estetisk kroppsformning. Fett kan återinjiceras med en godkänd injektionsapparat. Den här produkten används för aspiration, uppsamling och överföring av autolog vävnad. Avsedd för användning i specialområden där aspiration av mjuk vävnad önskas.

Får inte återanvändas eller omsteriliseras. Enpatientsbruk. Receptbelagd. Enligt federal lag får den här produkten endast säljas av eller på ordination av läkare.

