

Symbollegende



GEBRAUCHSINFORMATION
BEACHTEN



ACHTUNG



HERSTELLER



TEMPERATURGRENZEN



MEDIZINISCHES GERÄT



KATALOGNUMMER



CHARGENNUMMER



European Pharma Group BV

Euro Offices Building 3rd Floor
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, Niederlande

www.insujet.com | info@insujet.com



017403-DE-3.0

8 November 2021

insuJet™

Insulin-Jet-Injektionssystem


InsuJet™

Comfort Ring information

- Bitte lesen Sie die die komplette Gebrauchsinformation-sbroschüre, die Sie in der InsuJet™ Packung finden, durch, bevor Sie das InsuJet™ System verwenden.
- Bewahren Sie die Originalgebrauchsinformation des InsuJet™ sicher auf.




Verwenden eines InsuJet™ Comfort Ring

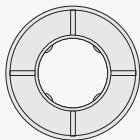

P/N: 01223

Der InsuJet™ Comfort Ring ist ein Zubehörteil des InsuJet™. Es wird empfohlen, einen Comfort Ring zu verwenden, falls Sie beim Drücken der Düse gegen die Haut Unbehagen empfinden.

Um einen Comfort Ring zu installieren, halten Sie das Gerät am Vorderteil fest und setzen Sie den Comfort Ring auf die Düse auf. Stellen Sie sicher, dass die runde Seite des Comfort Ring nach außen zeigt. Drücken Sie den Comfort Ring auf die Oberseite der Düse, bis er einrastet.

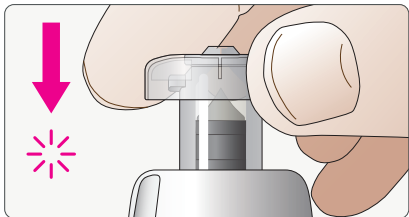

Warnings & Precautions

- Ersetzen Sie den Comfort Ring jedes Mal, wenn Sie die InsuJet-Düse ersetzen, alle 14 Tage oder 56 Injektionen, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Achten Sie beim Installieren des Comfort Rings darauf, die Düsenspitze nicht zu berühren.
- Temperaturgrenzen für den Einsatz:
- NOTE: Dispose with regular household waste

