

Légende des symboles



CONSULTEZ LA NOTICE
D'UTILISATION



ATTENTION



FABRICANT



LIMITES DE TEMPÉRATURE



DISPOSITIF MÉDICAL



NUMÉRO DE CATALOGUE



NUMÉRO DE LOT



European Pharma Group BV

Immeuble Euro Offices 3ème étage
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, Pays-Bas

www.insujet.com | info@insujet.com



017403-FR-3.0
8 November 2021

insuJet™


Système d'administration d'insuline

Informations sur l'anneau de confort InsuJet™

- Veuillez lire la notice d'utilisation (livret) incluse dans l'emballage InsuJet™ avant d'utiliser ce système d'injection.
- Conservez précieusement l'original de la notice d'utilisation de l'InsuJet™.




Utilisation d'un anneau de confort InsuJet™

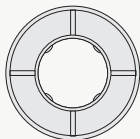

P/N: 01223


L'anneau de confort InsuJet™ est un accessoire de l'InsuJet™. Il est recommandé d'utiliser un anneau de confort, si vous ressentez une gêne en poussant la buse contre la peau.

Pour installer un anneau de confort, tenez le dispositif par sa face avant et placez l'anneau de confort sur le dessus de la buse. Veillez à ce que le côté rond de l'anneau de confort soit tourné vers l'extérieur. Poussez l'anneau de confort sur le dessus de la buse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

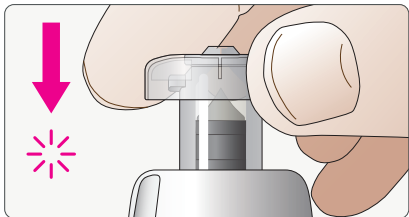

Avertissements et précautions

- Remplacez l'anneau de confort chaque fois que vous remplacez la buse InsuJet, tous les 14 jours ou 56 injections, selon la première éventualité.
- Veillez à ne pas toucher la pointe de la buse lors de l'installation de l'anneau de confort.
- Limites de température d'utilisation :

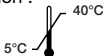

- REMARQUES: Jeter avec les ordures ménagères ordinaires