


tynor

Shoulder Support

शोल्डर सपोर्ट

Soporte De Hombro

دعم الكتف

REF J 14

Uploaded by www.heyzindagi.in




USER MANUAL

How To Use
Cómo Utilizar




कैसे उपयोग करें
كيفية الاستخدام

1.

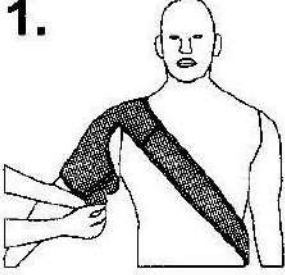


- Pull the sleeve up over the arm and shoulder.
- भुजा और कंधे से स्लीव को ऊपर ले जाएं।
- Tirar de la manga por encima del brazo y hombro.
- سحب الأكمام على مدى الذراع والكتف

2.

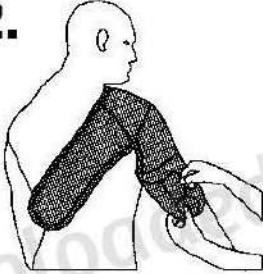

- Close the sleeve hook and loop closures to a comfortable fit.
- स्लीव के हुक और लूप क्लोजर को सुविधाजनक प्रकार से कसते हुए लगाएं।
- Cerrar la cremallera de la manga y ajustar los cierres.
- إغلاق رباط الأكمام وكذا الحلقة لوضعية مريحة

3.

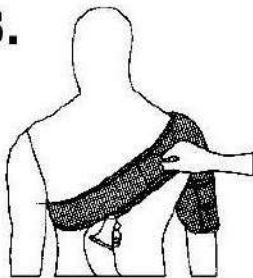

- Apply the strap under the opposite arm and close it in the front.
- दूसरी भुजा में स्ट्रैप लगाएं और आगे की ओर से उसे कस दें।
- Pasar la correa por el brazo opuesto y cerrarla en frente.
- تطبيق الحزام تحت الذراع المعاكس وإغلاقه إلى الأمام

Shoulder Support

English

Shoulder Support is designed to provide protection and support to the injured or ailing shoulder joint, It keeps the shoulder joint warm and flexible, and aids in quick healing.

CONSTRUCTION:

It is designed anatomically to apply uniform and controlled compression around the 'ball' of the shoulder (Deltoid and Rotator cuff region). It is made out of superior quality Neoprene fabric with nylon lining. The design allows for quick adjustment, controlled pressure, easy application and removal.

APPLICATIONS:

- Provides protection, warmth, compression support and flexibility to the shoulder.
- Minor sprains, strains and arthritic pain of the shoulder joint.
- Ideal for the healing and prevention of sporting injuries.
- Arthritis, Bursitis and Tendonitis
- Dislocations and Rotator Cuff Injuries
- Shoulder inflammation, shoulder pain, Mild shoulder instabilities

CAUTION/RECOMMENDATION : Fits either left or right arm

INSTRUCTIONS:

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

शोल्डर सपोर्ट

Hindi

शोल्डर सपोर्ट को मुख्य रूप से कंधे के जोड़ की सहायता के लिए बनाया जाता है जो कि दर्द या जखम के कारण प्रभावित होता है, यह कंधे के जोड़ को गरम और लोचनीय रखता है और इसे तुरंत ठीक करने में मदद करता है।

निर्माण:

इसे मुख्य रूप से कंधे के 'बॉल' (डेल्टॉईड और रोटेटर कफ भाग) के आस पास एक समान और नियंत्रित संकुचन को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। इसे उच्च गुणवत्ता के नियोप्रेने फ़ैब्रिक के साथ बनाया जाता है जिसपर नायलॉन चढ़ी होती है। इसके डिजाईन में सही व तुरंत समायोजन, नियंत्रित दबाव व पहनने व निकालने में आसानी जैसी विशेषताएं होती है।

अनुप्रयोग:

- यह कंधे को सुरक्षा, गरमी, संकुचन सहयोग और लोचनीयता प्रदान करती है
- हल्की मोच, खिंचाव व संधिवात संबंधी दर्द जो कि कंधे के जोड़ में होता है, उससे निजात
- खेल से संबंधित चोट को ठीक करने में आदर्श
- संधिवात, बुरसिटिज और टेन्डोनिटिस
- विस्थापन और रोटेटर कफ संबंधी चोट
- कंधे में जलन व सूजन, कंधे में सामान्य अस्थिरता



चेतावनी/सलाह: दाएं व बाएं दोनों ही बांहों में समान रूप से फिट होता है।

निर्देश:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।
- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें :
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ—साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

Soporte De Hombro

Spanish

El soporte de hombro está diseñado para proteger y dar soporte al hombro lesionado o con dolor, Mantiene la articulación del hombro cálida y flexible, y ayuda a una sanación rápida.

CONSTRUCCIÓN:

Está anatómicamente diseñado para aplicar compresión uniforme y controlada en torno a la 'bola' del hombro (región del deltoide y manguito rotador). Está hecho de neopreno de calidad superior con forrado de nailon. El diseño permite el ajuste rápido, presión controlada, fácil aplicación y fácil de sacar.

APLICACIONES:

- Da protección, calor, soporte de compresión y flexibilidad al hombro
- Esguinces, estiramientos menores y dolor artrítico de la articulación del hombro
- Ideal para la curación y prevención de lesiones deportivas
- Artritis, Bursitis y Tendonitis
- Dislocaciones y lesiones del manguito rotador
- Inflamación del hombro, dolor del hombro, inestabilidades leves del hombro



PRECAUCIÓN / RECOMENDACIÓN : Poner en brazo izquierdo o derecho

INSTRUCCIONES:

- Usar este producto bajo estricta guía de un médico.
- Dejar de usar y consultar con el médico, en caso de
 - Pérdida de sensibilidad
 - Alteración del flujo sanguíneo
 - Erupción cutánea o picor
 - Aumento o persistencia del dolor
- Consultar con el médico en caso de que también se esté usando otro dispositivo médico.
- El mal uso o el uso inapropiado del dispositivo puede disminuir la eficacia del mismo y producir efectos adversos.
- Seguir detenidamente las instrucciones indicadas en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

دعم الكتف

Arabic

تم تصميم دعم الكتف لتوفير الحماية والدعم للمصابين أو المرضى بمفصل الكتف، إنه يحافظ على مفصل الكتف بصفة دافئة ومرنة، ويساعد على الشفاء العاجل.

التركيب:

إنه مصمم تشريحياً من أجل تطبيق ضغط موحد ومحكم حول 'مفصل' الكتف (جهة العضلة الدالية والكفة المدورة). وهو مصنوع من قماش النيوبيرين ذو جودة متفوقة مع بطانة من النايلون. التصميم يمكن من التعديل السريع والضغط المحكم و السهولة في اللبس والإزالة.

الاستخدام:

- يوفر حماية والدفء ويدعم الضغط و يوفر المرونة للكتف
- الالتواءات و السلالات الطفيفة، والتهاب مفاصل الكتف
- مثالي للشفاء والوقاية من الإصابات الرياضية
- التهاب المفاصل والجراب والأوتار
- الاضطرابات وإصابات الكفة المدورة
- التهاب الكتف وآلام الكتف وعدم اعتدال الاستقرار في الكتف

⚠️ الحذر! توصية: يناسب كلا الذراعين الأيمن والأيسر

إرشادات:

- استخدم هذا المنتج في ظل توجيه دقيق من طبيب مؤهل
- توقف عن استخدام المنتج واحصل على توجيه من طبيب مؤهل في الحالات التالية
 - القصور الحسي
 - قصور في تدفق الدم
 - طفح الأرجية أو الحكة
 - زيادة الألم أو استمراره
- استشر الطبيب الخاص بك في حالة استخدام جهاز طبي آخر بشكل متواصل
- قد تؤدي إساءة استخدام الجهاز أو الاستخدام الخاطئ له إلى حدوث آثار عكسية وانخفاض فعالية الجهاز
- التزم جيداً بالإرشادات المذكورة في العبوة
- احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال

English

POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry six months warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only .

Hindi

दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ छह महीने की वारंटी हैं। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित हैं।

Spanish

DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de seis meses contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

Arabic

السياسة المعنية بالمنتجات المعيبة
تتمتع جميع المنتجات التي تصنعها شركة أورثوتيكس (ب) المحدودة بضمان مدته ستة أشهر ضد عيوب المادة أو عيوب التصنيع. يجب إعادة الوحدات المعيبة إلى تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة من خلال الموزع الرئيسي المعني بالاستبدال مع "طلب إرجاع منتج" تتم تعبئته في الوقت المناسب.

تنحصر مسؤولية تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة في تكلفة المنتج فقط

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.


tynor

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

D-111, Industrial Area Phase-7, Mohali- 160 055, (Punjab) India

e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com

Customer Care : 0091-172-4388111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

UM-J14-14-1

www.tynorindia.com