


tynor

Tennis Elbow Support
टेनिस एल्बो सपोर्ट
Soporte Para Codo De Tennis
دعامة مرفق مخصصة للعب التنس

REF E 10

Uploaded by www.heerzindagi.in


USER MANUAL

How To Use
Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें
كيفية الاستخدام


1.

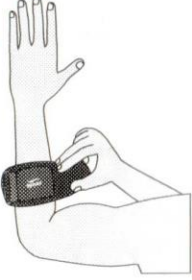

- Pull hook end through buckle so that the silicone pad faces inside of the support, creating a loop.
- हुक का सिरा बकल की मदद से खींचे जिससे सिलिकॉन पैड अन्दर की ओर आधार दे और एक लूप बन सके।
- Tire del extremo del gancho a través de la hebilla para que la almohadilla de silicona esté de frente con interior del soporte, creando un bucle.

• اسحب طرف المشبك من خلال الإبريم حتى تصبح
ضمادة وسادة السيليكون في مواجهة الدعامة من الداخل حتى يتم
عمل عقدة


2.

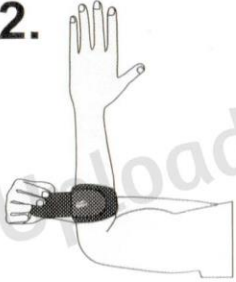

- Position the pad exactly on the point radiating pain, or as directed by a physician.
- पैड को दर्द के प्रमुख स्रोत की ओर रखें, अथवा जैसे फिजिशियन द्वारा सलाह दी गई है।
- Posicionar la almohadilla exactamente en el punto de dolor irradiado, o como lo indique un médico. .

• ضع الضمادة مباشرة على منطقة الألم أو كما يوجهك الطبيب

3.

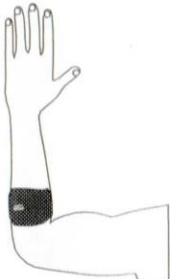

- Tighten the strap until the fit is snug, yet comfortable
- पट्टी को तब तक खींचे जब तक यह अच्छे से फिट भी हो और सुविधाजनक भी।
- Aprietela correa hasta que el ajuste esté ajustado, pero cómodo.

• اضغط الحزام حتى يصبح الربط محكماً لكن مريحاً

Tennis Elbow Support

English

Tennis Elbow Support is designed to help provide relief from generalized pain and tenderness in the forearm and elbow caused by repetitive strain injury due to strong grip or active finger movement. Its quite often used by tennis players, golfers, racquet players, industrial workers etc.

CONSTRUCTION:

It is made from three layered PU bonded fabric incorporating anatomically contoured silicone pad surrounding the epicondyle silicone pad provide an intermittent compression to the soft tissue of the joint, leading to increased circulation, thus aiding in the resorption of swelling and edema. It also absorbs any vibrations reaching the elbow joint and the tissue around it.

APPLICATIONS:

- Osteoarthritis
- Post elbow Arthroscopy
- Chronic swelling and edema
- Pre and Post-operative elbow conditions
- Medial Epicondylitis (golfer's elbow)
- Epicondylitis (tennis elbow)
- Elbow strains or sprains
- Targeted relief from forearm pain

INSTRUCTIONS: ⓘ

- Use this product on recommendation of a doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use of another medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

Soporte Para Codo De Tenis

Spanish

El Soporte para codo de Tenista está diseñado para aliviar el dolor generalizado y la sensibilidad anormal en el antebrazo y codo a causa de esguinces repetidos debidos a un agarre firme o movimiento activo del dedo. Lo utilizan frecuentemente tenistas, jugadores de golf, jugadores de frontón, trabajadores industriales, etc.

CONSTRUCCIÓN:

Está hecho de 3 capas de tela forrada de PU que incorpora una almohadilla de silicona de contorno anatómico que rodea el epicóndilo. La almohadilla de silicona ejerce una compresión intermitente al tejido blando de la articulación, lo que permite un aumento de la circulación sanguínea y favorece la reabsorción de la hinchazón y el edema. También absorbe cualquier vibración que repercuta en la articulación del codo y en el tejido en torno a la misma.

APLICACIONES:

- Osteoartritis
- Post Artroscopía del codo
- Inflamación crónica y edema
- Prey post-operatorio del codo
- Epicondilitis medial(codo de golfista)
- Epicondilitis(codo de tenista)
- Tensión o torceduras del codo
- Alivio de dolor en el antebrazo

INSTRUCCIONES:

- Usar este producto bajo la estrecha supervisión de un médico.
- Dejar de usar y consultar con el médico, en caso de
 - Erupción cutánea o picor
 - Aumento o persistencia del dolor
- Consultar con el médico en caso de que también se esté usando otro dispositivo médico.
- El mal uso o el uso inapropiado del dispositivo puede disminuir la eficacia del mismo y producir efectos adversos.
- Seguir detenidamente las instrucciones indicadas en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

English

POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry six months warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only .

Hindi

दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ छह महीने की वारंटी हैं। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित हैं।

Spanish

DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de seis meses contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

Arabic

السياسة المعنية بالمنتجات المعيبة
تتمتع جميع المنتجات التي تصنعها شركة أورثوتيكس (ب) المحدودة بضمان مدته ستة أشهر ضد عيوب المادة أو عيوب التصنيع. يجب إعادة الوحدات المعيبة إلى تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة من خلال الموزع الرئيسي المعني بالاستبدال مع "طلب إرجاع منتج" تتم تعبئته في الوقت المناسب.

تنحصر مسؤولية تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة في تكلفة المنتج فقط

टेनिस एल्बो सपोर्ट

Hindi

टेनिस एल्बो सपोर्ट को मुख्य रूप से सक्रिय ऊंगलियों की हलचल या शक्तिशाली पकड़ के कारण व कोहनी द्वारा निरंतर तनावपूर्ण स्थिति में रहने के कारण भुजा और कोहनी में आने वाली पीडा और सामान्य दर्द से राहत पाने के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से टेनिस खिलाड़ियों, गोल्फ खिलाड़ियों, रैकेट खिलाड़ियों, औद्योगिक कर्मचारियों आदि द्वारा किया जाता है।

निर्माण:

इसे परतदार पीयू बॉन्डेड कपडे से बनाया जाता है जिसमें शरीरिक रचना की दृष्टि से निर्धारित की गई रुपरेखा के अनुरूप सिलिकॉन पैड डाला जाता है जो कि एपिकोन्डाइल के आस पास होता है। सिलिकॉन पैड द्वारा जोड के नरम ऊतक को सविराम संकुचन प्रदान किया जाता है, इसके कारण संचरण में वृद्धि होती है, जिसके चलते सूजन व एडेमा (जमा हुआ द्रव) पुनः अवशोषित करने में मदद मिलती है। इसके द्वारा कोहनी के जोड और उसके आस पास के ऊतकों तक पहुंचने वाली तरंगों को भी अवशोषित कर लिया जाता है।

अनुप्रयोग:

- ऑस्टियोआर्थराइटिस
- कोहनी की आर्थ्रोस्कोपी के पश्चात
- असाध्य सूजन और एडेमा के दौरान
- कोहनी की शल्यक्रिया से पूर्व व पश्चात की स्थिति में
- मेडिकल एपिजॉन्डायलिटिस (गोल्फर्स एल्बो)
- एपिकोन्डायलिटिस (टेनिस एल्बो)
- कोहनी पर तनाव या मोच
- अग्र बाहु में होने वाले दर्द से लक्षित आराम


निर्देश:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।
- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें :
 - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ-साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.

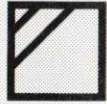

Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not iron.



Do not bleach.



Do not use fabric softener.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

UM-E10-17-1

www.tynorindia.com