

tynor

Tummy Trimmer/Abdominal Belt 8"

टमी ट्रिंमर / एबडॉमिनल बेल्ट 8"

Reductor De Pansa/Cinturón Abdominal 8"

أداة شد البطن / حزام البطن 8"

REF A 03




USER MANUAL

How To Use
Cómo Utilizar




कैसे उपयोग करें
كيفية الاستخدام

1.

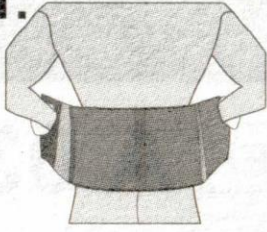

- The belt is wrapped around the waist.
- बेल्ट को कमर के चारों ओर से लपेटा जाता है ।
- Se envuelve el cinturón en torno a la cintura.
- يتم لف الحزام حول الخصر

2.

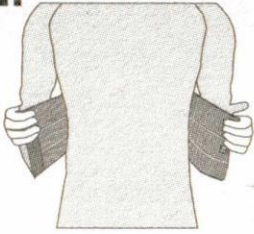


- Keep it upright and in correct position as per directions of "up inside label".
- इसे सीधा रखते हुए और ठीक स्थिति में "अप इनसाइड लेबल" के निर्देशों के अनुसार लपेटी जाती है ।
- Manteniéndolo derecho y en posición correcta según las instrucciones de la "etiqueta interna".
- وإبقائه في وضع عمودي وصحيح حسب اتجاهات "البطاقة بالداخل".

3.



- Lower edge of the belt should coincide with the base of the spine.
- बेल्ट का निचला किनारा रीढ़ के आधार से मेल खाना चाहिए ।
- El borde inferior del cinturón debería coincidir con la base de la columna.
- وينبغي أن تتوافق الحافة السفلى للحزام مع قاعدة العمود الفقري.

4.

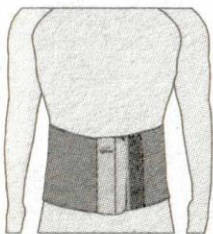

- Apply hook tape to the loop tape to a comfortable compression.
- हुक पट्टे को फीते के फंदे पर आरामदायक दबाव के साथ प्रयोग करें ।
- Ajuste el gancho de cierre para una compresión confortable.
- يجب وضع الشريط الخطافي على شريط في الحلقة للحصول على ضغط مريح.

Tummy Trimmer/ Abdominal Belt 8"

English

INTENDED USE :

Tummy Trimmer/Abdominal belt supports and compresses the abdominal muscles for waist line reduction and is used as a post operative or post delivery aid.

CONSTRUCTION:

Made from extra strong highly porous orthopedic webbing containing heat resistant rubber with high modulus of elasticity. Hook loop closures provide perfect fitting of the belt around the waist, controlled compression, its quick, easy application and removal. Flexi Nylon splints ensure no wrinkles, no buckling and no rolling over of the belt.

APPLICATIONS:

- To protect and bind surgical incisions of the abdomen and the chest.
- Postoperative care of thorax and abdomen.
- Reduce the discomfort of sudden rib cage expansion from deep breaths, cough or sneezing during recovery.
- Used as a general tummy trimmer, it compresses the abdominal wall to give the wearer a coveted slim figure.
- For post delivery mothers, to tone up the mellowed abdominal muscles and set the waistline to its Pre-pregnancy dimensions.
- In umbilical and ventral hernia.

RECOMMENDATION :

- Use this product on recommendation of a doctor.

INSTRUCTIONS:

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
- Consult your doctor in case of concurrent use of the device with excessive physical exertion, it can lead to restriction of performance of heart and lungs (risk of rise in blood pressure).
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

टमी ट्रिंमर / एबडॉमिनल बेल्ट 8"

Hindi

उपयोग :

टमी ट्रिंमर / एबडॉमिनल बेल्ट शल्य क्रिया पश्चात या प्रसव पश्चात कमर को कम करने के लिए में उपयोग की जाती है। यह उदर की मांसपेशियों को संपीडित करती है।

संरचना:

उच्च लचीलेपन वाले गर्मीरोधी रबड़ से युक्त अतिरिक्त मजबूत बेहद छिद्रित आर्थोपेडिक जाली से निर्मित। हुक लूप फास्टर कमर के चारों ओर बेल्ट की फिटिंग, इसे तुरंत पहनना और निकालना सुगम बनाते हैं। लचीली नॉयलॉन पट्टियां सुनिश्चित करती हैं कि कोई सिकुड़न न आए, कोई बकसुआ न लगे और बेल्ट पलटे नहीं।

अनुप्रयोग:

- उदर और सीने के शल्य चीरों को सुरक्षित करने और बांधने के लिए।
- शल्यक्रिया पश्चात छाती और उदर की देखभाल के लिए।
- गहरी सांसों, खांसी या स्वास्थ्य लाभ के दौरान घीक आने से अचानक पर्शुका पंजर के विस्तार की असुविधा कम करती है।
- आमतौर पर पेट कम करने के लिए उपयोग, पहनने वाले को वांछित पतला शरीर देने के लिए यह उदर दीवार पर दबाव डालती है।
- प्रसव के बाद माताओं के लिए, नरम पेट की मांसपेशियों को कसने के लिए और कमर को इसके प्रसव पूर्व आयामों तक लाने के लिए।
- नाल और उदर हनिया में।

सलाह:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।

निर्देश:

- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ-साथ उपयोग की स्थिति में और अत्यधिक शारीरिक श्रम की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें, यह हृदय और फेफड़ों के निष्पादन में अवरोध (रक्तचाप बढ़ने का जोखिम) उत्पन्न कर सकता है।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

Reductor De Pansa/Cinturón Abdominal 8"

Spanish

USO PREVISTO :

Reductor de Pansa /Cinturón Abdominal soporta y comprime los músculos abdominales para la reducción de la cintura y se utiliza common post-operatorio o de ayuda para después del parto.

CONSTRUCCIÓN:

Hecho a partir de correa ortopédica, extra fuerte, altamente porosa que contiene goma resistente al calor o nalto módulos de elasticidad. Cierres de gancho bucle proporciona un ajuste perfecto de la correa alrededor de la cintura, compresión controlada, es fácil y rápida de aplica y remover. Flexi Nylon garantizan la ausencia de arrugas, que el cinturón no se desplace ni abroche.

APLICACIONES:

- Proteger y unir las incisiones quirúrgicas en el abdomen y el pecho.
- Cuidados postoperatorio de tórax y abdomen.
- Reducir el malestar de la súbita expansión de la caja torácica al respirar profundamente, toser o estornudar durante la recuperación.
- Se utiliza como un reductor de pansa en general, comprime la pared abdominal para que el usuario tenga una figura delgada codiciada.
- Para las madres después del parto, para tonificar los músculos abdominales y dar a la cintura sus dimensiones de antes del embarazo.
- Hernia umbilical y ventral.

RECOMENDACIÓN :

- Usar este producto bajo la estrecha supervisión de un médico.

INSTRUCCIONES:

- Dejar de usar y consultar con el médico, en caso de
 - Pérdida de sensibilidad
 - Alteración del flujo sanguíneo
 - Erupción cutánea o picor
- Consultar con el médico en caso de que también se esté usando otro dispositivo médico.
- El mal uso o el uso inapropiado del dispositivo puede disminuir la eficacia del mismo y producir efectos adversos.
- Seguir detenidamente las instrucciones indicadas en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

أداة شد البطن / حزام البطن 8"

Arabic

الإستعمال المقصود:

تساعد أداة شد البطن / حزام البطن على دعم وضغط عضلات البطن لخفض مستوى محيط الخصر، ويستخدم باعتباره أداة منشطة أو مساعدة لما بعد الولادة.

التركيب:

مصنوع من شريط منسوج مسامي بدرجة عالية ويحتوي على مطاط مقاوم للحرارة بالإضافة إلى درجة عالية من المرونة. توفر مكابس الإغلاق الخطافية الحلقية تركيبة مثالية للحزام حول الخصر، وضغط مُحكم وسرعة وسهولة وضعه وإزالته. كما تضمن جباير النايلون المرنة عدم وجود تجاعيد والتواء وكذلك عدم دوران الحزام.

دواعي الاستخدام:

- لحماية وتضميد الشقوق الناتجة عم العمليات الجراحية في البطن والصدر.
- عناية لما بعد العملية الجراحية للصدر والبطن.
- تخفيف التوتر الناتج عن التوسيع المفاجئ للقفص الصدري نتيجة للتنفس العميق أو السعال أو العطس أثناء العلاج.
- يستخدم باعتباره أداة لشد البطن بصفة عامة، فهو يضغط على جدار البطن ليعطي حامله الشكل النحيل المرغوب فيه.
- بالنسبة لفترة بعد ولادة الأمهات، لشد عضلات البطن اللينة وجعل محيط الخصر يعود إلى أبعاده الطبيعية قبل الحمل.
- في حالات فتق السرة والبطن.

توصية:

- استخدم هذا المنتج في ظل توجيه دقيق من طبيب مؤهل

إرشادات:

- توقف عن استخدام المنتج واحصل على توجيه من طبيب مؤهل في الحالات التالية
 - القصور الحسي
 - قصور في تدفق الدم
 - طفح الأَرَجِيَّة أو الحكة
- استشر الطبيب الخاص بك في حالة استخدام جهاز طبي آخر بشكل متواصل.
- قد تؤدي إساءة استخدام الجهاز أو الاستخدام الخاطئ له إلى حدوث آثار عكسية وانخفاض فعالية الجهاز.
- التزم جيداً بالإرشادات المذكورة في العبوة.
- احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

English

POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry one year warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only.

Hindi

दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ एक साल की वारंटी हैं। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित हैं।

Spanish

DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de Un año contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

Arabic

سياسة السلع المعيبة:

جميع المنتجات المصنعة من قبل شركة تاینور لتقويم العظام الخاصة المحدودة Tynor Orthotics (P) Limited تحمل ضمان لمدة عام واحد ضد عيوب التصنيع أو المواد. يجب أن تعاد الوحدات المعيبة إلى شركة تاینور لتقويم العظام الخاصة المحدودة Tynor Orthotics (P) Limited من خلال الموزع المعني للاستبدال، جنباً إلى جنب مع ملء "استمارة إعادة المنتج" على نحو واف. سوف تقتصر مسؤولية شركة تاینور لتقويم العظام الخاصة المحدودة Tynor Orthotics (P) Limited على تكلفة المنتج فقط .

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80
 D-66386 St. Ingbert
 Germany
 tel.: +49 (0) 6894 581020
 fax: +49 (0) 6894 581021
 e-mail: info@mt-procons.com
 www.mt-procons.com

Symbol Explanation :

- LOT** Batch code
- Manufacturing date
- Manufacturer
- REF** Catalogue number



Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

D-111, Industrial Area Phase-7, Mohali- 160 055, (Punjab) India
 e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
 Customer Care : 0091-172-4388111
 Facebook/TynorIndia & YouTube/TynorIndiaOrthotics

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

UM-A03-16-1

www.tynorindia.com