



VocalMist


ユーザーガイド

VocalMist 携帯用噴霧吸入器

VocalMist

注意

- 1 VocalMist 携帯用スプレー吸入器にのみ等張食塩水を使用してください。
- 2 噴霧に蒸留水や油性物質を使用しないでください。
- 3 毎回使用した後に装置を洗浄して維持してください。
- 4 使用後は必ず装置、食塩水カップ、付属品を乾かしてください。
- 5 故障の場合は、鋭利なものや硬いもの、指でメッシュに触れないでください。

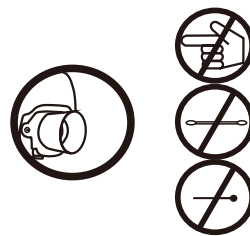

操作手順



矢印に従って、反時計回りに回して生理食塩水カップのキャップを開けます。



等張食塩水を加える。
最大スケールを超えないでください。



カップキャップを時計回りに回して締めます。



マスクまたはマウスピースを接続します。



噴霧を開始します。

クリーニングガイドンス

1.使用後の清掃



付属品を時計回りに回転させて緩めてから引き出します。



生理食塩水カップのカバーを開けて、
液体の残留物を取り除きます。



水カップを開いたままにして置き、
使用するたびにユニットを完全に乾かします。



カップキャップを締めてください。



使用していないときはネブライザーに
液体を保管しないでください。使用するた
びに新鮮な等張食塩水を補充してください。

2. 毎週の清掃



ブッシュキーを押しながら、
生理食塩水カップを引き上げます。



生理食塩水カプセルの内側と外側をぬるま湯で洗い
流します（40℃以下）。生理食塩水カップに3部の
精製水と1部の蒸留白酢を入れ、溶液を完全にスプレ
ーします。カプセルを水で洗い流し、空気乾燥させ
ます。洗浄液を再使用しないでください。清掃中は
金網に触れないでください。

これらの記述は、医薬品医療機器総合機構によって評価されてい
ません。本製品は、病気の診断、治療、治療、予防を目的とし
たものではありません。

Sing Easier