



SambaRX™



**Instructions d'utilisation
&
Garantie de performance à 100% pour trois ans
(Doit être lu au préalable)**



www.BodyRyzm.com



Pour les clients résidents aux Etats-Unis et au Canada:

Veillez ne pas contacter votre distributeur concernant la garantie

Appelez gratuitement le 1-855-BodyRyzm pour toute question relative à la garantie.

BodyRyzm LifeSciences / Perspectis, Inc.

1 First Canadian Place, Bureau 350

Toronto, ON, Canada, M5X 1C1

www.BodyRyzm.com

Toll free: 1-855-BodyRyzm (263-9799), Tel: 1-416-595-1575, Fax: 1-416-595-6438

Courriel: CustomerService@BodyRyzm.com



AVERTISSEMENT




- Ce produit est un siège de stabilité et non un jouet. Tous les utilisateurs doivent lire et comprendre toutes les instructions de ce document avant d'utiliser ou de tester ce produit.
- Maintenir un gonflage/une pression faible! Ne gonflez en aucun cas le coussin de manière excessive afin qu'il reste toujours confortable. Réduisez immédiatement le gonflage si vous ressentez une gêne.
- Alignez votre coccyx avec le bord arrière de cet appareil, en gardant les deux pieds sur le sol lorsque vous êtes assis sur celui-ci.
- Commencez avec des séances de 15-30 minutes maximum sur l'appareil. Vous pouvez graduellement allonger la durée des séances. Après 3 mois, vous serez en mesure de l'utiliser confortablement tout au long de la journée.
- Évitez les mouvements de la chaise lorsque vous êtes assis sur cet appareil.
- N'inclinez pas l'assise de la chaise vers l'avant lorsque vous êtes assis sur l'appareil.
- Aucun exercice ne devra être réalisé avec ou sur ce coussin. Ne pas respecter cet avertissement pourra causer de graves blessures au dos. Ne pas l'utiliser non plus en cas de fusion spinale, de chirurgie récente, de grossesse ou pour tout autre état inhabituel.
- Consultez un médecin pour toute question ou préoccupation d'ordre médical.
- Veillez utiliser cet appareil uniquement si vous contrôlez votre équilibre corporel.
- Ne pas marcher ou sauter sur cet appareil.
- Ce produit est conçu pour supporter un poids de 350 lb maximum.
- Conservez ce produit à l'écart des objets pointus, de tout produit chimique agressif ou caustique, et de toute source de chaleur intense.
- Régler le gonflage de ce produit en fonction de la température ambiante.
- Conservez l'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

COMMENT L'AJUSTER ...

Comment ajuster le coussin pour un meilleur confort?

- Ouvrir la fermeture éclair située à l'arrière de la housse du coussin.
- Laissez la valve d'ajustement apparente. Voir sur l'image de droite.
- Tournez le bouchon de la valve dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.
- Gonfler le coussin à l'épaisseur désirée. MOINS pour PLUS de poids!
- Fermez la vanne en faisant tourner le capuchon de la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Note: Commencer par un gonflage léger. Un gonflage trop important rendait l'effort moins efficace. Changer le niveau de gonflage pour trouver le meilleur réglage et pour un confort optimal

Le bord avant doit être placé à l'avant du chaise

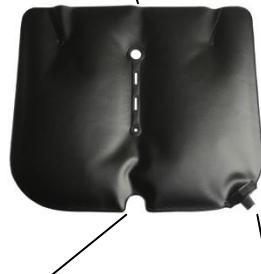

Partie arrière: A l'arrière de la chaise avec la valve.

valve de gonflage

Garantie de performance à 100% sur trois ans Formulaire d'inscription

Pour tous les clients : Veuillez vous inscrire en ligne sur :

www.BodyRyzm.com, dans la partie "Inscription de la Garantie", ou

Détachez ce formulaire, remplissez-le clairement et envoyez-le à:

Perspectis, Inc. Attn: Service Clients
1 First Canadian Place, Bureau 350, Toronto, Ontario, Canada, M5X 1C1

Moins de quarante-cinq (45) jours suivant l'achat initial pour être couvert par la garantie.

Garantie de confidentialité : Vos informations sont uniquement utilisées dans le but de traiter votre inscription et par le service clientèle après-vente. Vos informations demeureront confidentielles. Nous ne partagerons jamais vos informations avec une tierce partie.

Note importante: Tous les clients résidents aux Etats-Unis et au Canada doivent appeler notre service de garantie directement au 1-855-BodyRyzm (263-9799) pour toutes les questions relatives à la garantie. Les clients internationaux devront entrer en contact avec leur distributeur pour toutes les questions relatives à la garantie.

Nom du produit: _____

Date d'achat: (année) _____ (mois) _____ (jour) _____

Lieu d'achat _____

Nom de famille: _____

Prénom: _____

Adresse 1: _____

Adresse 2: _____

Ville: _____ Province/État: _____

Pays: _____ Code postal: _____

Tel: _____

Courriel: _____ Date _____

Garantie de performance à 100% pour trois ans

Perspectis, Inc. ("Perspectis") garantit, selon les conditions énumérées ci-dessous, que, dans le cas où ce produit se révélait défectueux au cours de la période spécifique de garantie, Perspectis réparera ou remplacera le dit produit par le dernier modèle, sans aucun frais de pièces ou de main d'oeuvre. Des frais d'expédition pourront s'appliquer. La période de garantie est de TROIS ans à compter de la date de l'achat du produit.

CONDITIONS

1. **Inscription** : La fiche de garantie ci-jointe doit être envoyée à Perspectis au cours des quarante-cinq (45) jours suivant la date de l'achat initial.
2. **Preuve de la date d'achat** : Cette garantie s'applique au produit, à partir de la date d'achat initiale. Par conséquent, le propriétaire devra fournir la preuve de l'achat, si la fiche de garantie n'est pas retournée.
3. **Abus, réparations non autorisées, etc.** : Le produit ne doit pas avoir été changé, modifié ou réparé. L'appareil ne doit pas avoir été objet d'un accident, d'un abus, d'une utilisation commerciale, d'une location ou avoir été utilisé contrairement aux instructions d'utilisation.
4. **Utilisation normale** : Cette garantie ne concerne ni ne couvre pas l'utilisation exceptionnelle et les dommages provoqués par l'abus ou manque de soin. Elle ne couvre pas non plus le défaut d'entretien régulier du produit tel que le nettoyage ou le lissage de la surface, et est valide seulement dans le pays où l'appareil a été acheté initialement.
5. **La livraison appropriée** : Le propriétaire devra appeler ou envoyer un email à Perspectis pour recevoir l'autorisation et les instructions relatives au renvoi du produit défectueux pour l'inspection de garantie. Tous les retours non autorisés seront refusés ou/et renvoyés aux frais du propriétaire. Après avoir reçu l'autorisation et les instructions de garantie de Perspectis, l'unité défectueuse devra être renvoyée, fret payé d'avance, au service indiqué par Perspectis, dans son paquet original ou dans un paquet semblable ayant un niveau égal de protection. Le propriétaire devra inclure une note avec son nom, son adresse et son numéro de téléphone ainsi qu'une description du défaut constaté.

DANS LA LIMITE DE LA LOI APPLICABLE, PERSPECTIS, INC. DÉMENT EXPRESSIVEMENT TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSE OU LIMITÉE, ET SUR MENTION DE LA LOI, PAR CITATION, EN COURS OU RELATIVE À L'USAGE DE COMMERCE, EN INCLUANT SANS GARANTIES OU ÉTATS IMPLICITES LA LIMITATION DE QUALITÉ ET DE FORME PHYSIQUE VENDABLE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, PERSPECTIS, INC. OU SES FOURNISSEURS, LEURS FOURNISSEURS OU DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DU PAIEMENT D'UNE SOMME SUPÉRIEURE AU PRIX D'ACHAT RÉEL DE L'UNITÉ OU DE MANIÈRE INDIRECTE, SPÉCIALE, PUNITIVE, FORTUITE, EXEMPLAIRE OU DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, OU N'IMPORTE QUELS DOMMAGES QUELCONQUES, RÉSULTANT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DE TOUTES LES AUTRES CAUSES DE BASE, RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DE LA FABRICATION DES PRODUITS, OU AUTREMENT, PROVENANT OU DE QUELQUE FAÇON LIÉS À L'UTILISATION OU À L'EXÉCUTION DE CE PRODUIT, À L'INCAPACITÉ D'EMPLOYER CE PRODUIT, OU À LA FOURNITURE DE OU AU MANQUE DE DISPONIBILITÉ DE SES OU LEURS PRODUITS, MARCHANDISES, OU SERVICES, MÊME SI CONSEILLÉ, LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. PERSPECTIS, INC. N'ASSUMERA, NI N'AUTORISERA N'IMPORTE QUEL REPRÉSENTANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR LUI UN ENGAGEMENT OU UNE RESPONSABILITÉ AUTRE QUE CELLE QUI SOIT EXPRESSIVEMENT DÉTERMINÉE CI-DESSUS. CE PRODUIT EST SOUMIS À SON ACCEPTATION SANS MODIFICATION DES LIMITATIONS DÉTERMINÉES CI-DESSUS. L'ESSAI ET/OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE TELLES LIMITATIONS.



Cher client,

Félicitations à vous pour avoir choisi cet excellent produit. Cet appareil sera votre compagnon de santé pour les années à venir.

Vous êtes impatient et souhaitez commencer à utiliser ce merveilleux produit tout de suite. Néanmoins, et afin d'utiliser ce produit de manière optimale, veuillez lire attentivement AUPARAVANT le contenu de ces Instructions Utilisateur.

Pour une utilisation optimale, voici quelques conseils:

1. Avant de gonfler cet appareil, veuillez le lever légèrement, jusqu'à ce que vos doigts sentent le poids de l'appareil, et gonfler tout en soulevant.
2. La première fois que vous essayez, s'il vous plaît souffler seulement 0,5 - 1 léger souffle d'air pour gonfler la chambre à air. Ensuite, vous êtes libre d'expérimenter avec le niveau de l'inflation.
3. MOINS il est gonflé MIEUX ce sera. MOINS gonflé signifie souvent PLUS de confort.



Tenir et soulever en gonflant




Aucun contact de la valve avec les lèvres en gonflant



COMMENT L'UTILISER ...

Apaiser et à soulager votre dos, améliorer votre posture assise, améliorer la stabilité du noyau, éviter les points de pression et protéger votre coccyx et la glande de la prostate,

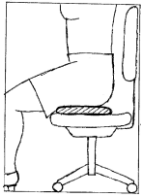

1. Gonflez votre SambaRX comme indiqué dans "Comment utiliser ...".
2. Placez-le à plat et au centre de votre chaise avec son bord arrière (voir l'image ci-contre) à environ 1 pouce du dossier de la chaise.
3. S'asseoir doucement et au centre du SambaRX. Assurez-vous que votre coccyx soit aligné avec le bord arrière de SambaRX, les pieds à terre, et votre corps ne touchant pas le dos de la chaise. Voir également les conseils dans "Attention".
4. Aucun besoin de vous déplacer ou de rester immobile. Il suffit de vous asseoir naturellement et d'effectuer votre travail comme il vous plaira. Laissez le SambaRX faire le reste.
5. Assurez-vous que vous contrôlez la position de votre corps.

COMMENT S'EXERCER ... (Suggestions)

L'équilibre et l'immobilisme



1. Asseyez-vous sur votre SambaRX sur une chaise de la même manière que vous le feriez normalement, et avec le même niveau de gonflage que vous utiliseriez habituellement. Maintenez votre équilibre.
2. Balancer doucement votre bassin vers l'avant puis en arrière et au centre, puis en arrière, puis retourner au point mort, et répétez ce mouvement 10 à 20 fois.



1. Identique au point 1 ci-dessus.
2. Faire tourner doucement votre bassin sens horaire, comme lorsque vous faites une danse du ventre, et répétez cette procédure pour 10 à 20 fois. Le présent faire dans le sens antihoraire pour les 10 - 20 fois



1. Identique au point 1 ci-dessus.
2. Balancer doucement votre bassin vers la gauche puis de nouveau au centre, puis vers la droite, puis de nouveau au centre, et répétez ce mouvement 10 à 20 fois.
3. Pendant que vous vous inclinez vers la gauche, soulevez doucement votre épaule gauche le plus haut possible et descendez votre épaule droite aussi bas que possible en même temps, puis inversez les mouvements, et répétez cette opération 10 à 20 fois.

COMMENT FAIRE POUR L'AJUSTER...

Vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous êtes assis sur ce coussin?

1. Vous avez besoin de réduire le niveau de l'inflation, puisque plus de 95% des utilisateurs ont tendance à trop gonfler le coussin. Assurez-vous également que votre coccyx soit aligné avec le bord arrière du coussin. Ne vous asseyez pas sur le coussin plus 15-30 minutes au début, et n'inclinez pas votre chaise n'est pas vers l'avant.
2. Assurez-vous que la valve fasse un demi-cercle et soit alignée avec l'arrière de vos fesses lorsque vous êtes assis sur le coussin, et que votre coussin est au milieu de votre chaise.
3. Assurez-vous également que vous êtes assis au centre de l'appareil, comme si vous étiez assis sur un ballon de stabilité.

COMMENTAIRES & COMMENT GAGNER

Remplir et retourner ce formulaire, et vous pourrez gagner un SambaRX GRATUITEMENT. Tirages gratuits mensuels.

Comment avez-vous connu SambaRX ou nos services répondent-ils à vos attentes?

Que, souhaitez-vous, ou jugez vous judicieux d'améliorer ?



Prénom:

Nom de famille:

Tel. #:

Ville:

Province/État:

Date:

Remarque: En soumettant ce formulaire, vous consentez à l'utilisation de vos commentaires et nom / titre / emplacement dans nos documents publiés. Vous pouvez cocher cette case pour refuser votre consentement.