

PRODUCT CARE



Misuse, or improper use of the product can lead to decreased effectiveness.



Keep away from sharp edges



Follow instructions mentioned on the instructions manual carefully.



Wipe the plastic cover with moist lint free cloth and mild detergent



Avoid dropping on hard surface

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

tynor

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali (160 055), (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

tynor

Cool Pack
कूल पैक
Cool Pack
Cool Pack
الكمامة الباردة

REF H 11



UM-H 11-18-1

USER MANUAL

How To Use
Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें
Comment utiliser
كيفية الاستخدام


Cold Compress:

ठंडा संपीड़न:

Compresión fría:

Compresse froide:

الضغط البارد:

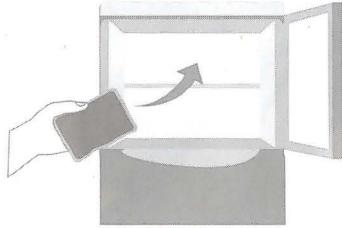


- 1.
- Preserve it in freezer or place in freezer at about 0 degree for a minimum of one hour.
 - इसे फ्रीजर में रखें या कम से कम एक घंटा तक लगभग 0 डिग्री पर फ्रीजर में रखें।
 - Guárdela en el congelador o colóquela en el congelador a aproximadamente 0 grados durante un mínimo de una hora.
 - Conserver au congélateur ou placer au congélateur à environ 0 degré pendant au moins une heure.
 - احتفظ بها في الفريزر (مُجمَد التَّلَاجَة) أو وضعها في الفريزر عند درجة حرارة الصفر تقريبًا لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.

How To Use
Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें
Comment utiliser
كيفية الاستخدام

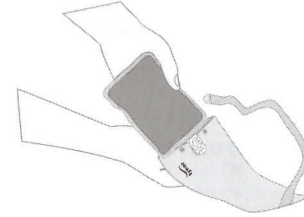

- 2.
- Remove, place in Cloth Cover & use immediately.
 - निकालें, कपड़े के कवर में रखें और तुरंत उपयोग करें।
 - Retírela y colóquela en la cubierta de tela y úsela inmediatamente.
 - Retirer, placer dans un revêtement en tissu et utiliser immédiatement.
 - أخرجها، ضعها في غطاء من القماش واستخدمها على الفور.

Cool Pack

English

INTRODUCTION:

Cool Pack is a convenient device to provide cold compress. Cold compress helps in reduction of inflammation, which protects by slowing the metabolic rate around the injured tissue, reduce oedema and bleeding. Cold compress lowers fever, can be used after an acute injury or surgical procedure. It can also be used to treat ocular allergies, ocular itching and to reduce swelling around the eyes.

CONSTRUCTION:

The gel pouch is made out of soft and flexible PU/PVC film, filled with a hydrophilic gel. Fabric cover prevents cryo burns and ensures convenience.

APPLICATIONS:

Cold compress

- High fever
- Oedema
- Bleeding
- Inflammation and soft tissue injuries
- Regain working of an overworked muscle
- Post surgical care
- Management of strains, sprains, bruises

CAUTION:

- Cool pack application should be avoided by patients with certain medical conditions, such as for patients who have rheumatoid arthritis, Raynaud's Syndrome, cold allergic conditions, paralysis, or areas of impaired sensation.
- Individual with problems in sensing cold should use extreme caution with this product.
- When using for treatment of post-surgical trauma, follow instructions of the Doctor.
- If contents are exposed to the skin or eyes, rinse with water immediately. If irritation or redness persists, consult a physician.
- Do not use if gel pack is punctured or damaged.
- Do not sit or lie on gel pouch, excessive weight above 25Kg, may cause pouch to rupture or leak.

INSTRUCTIONS:

- Always use the Cool pack with Cloth Cover
- Limit the ice application to no more than twenty minutes at a time
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Keep out of reach of children.

कूल पैक

Hindi

निर्देश:

कूल पैक ठंडा संपीड़न प्रदान करने वाला एक सुविधाजनक उपकरण है। ठंडा संपीड़न सूजन को कम करने में मदद करता है, जो मेटाबोलिक दर को धीमा करके घायल ऊतक के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करता है जिससे एडीमा और रक्तस्राव कम हो जाता है। ठंडा संपीड़न बुखार को कम करता है और इसका इस्तेमाल गंभीर चोट या शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के बाद किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ओकुलर एलर्जी, ओकुलर खुजली और आंखों के चारों ओर के सूजन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है।

निर्माण:

जेल पाउच नरम और लचीली पीयू/पीवीसी फिल्म का बना होता है, जिसमें हाइड्रोफिलिक जेल भरा हुआ होता है। फैनरिक कवर क्रायो बर्न को रोकता है और महत्वपूर्ण सुनिश्चित करता है।

अनुप्रयोग:

ठंडा संपीड़न

- तेज बुखार
- एडीमा
- रक्तस्राव
- सूजन और मुलायम ऊतक की चोटें
- सोमपेशियों द्वारा बहुत ही अधिक कार्य किए जाने के बाद भी कार्य करने की शक्ति दोबारा प्राप्त करें।
- सर्जिकल देखरेख के बाद
- तनाव, मोच, चोटों का प्रबंधन

सावधानी:

- कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले मरीजों द्वारा कूल पैक के उपयोग से बचना चाहिए, जैसे कि रोगियों के लिए रुमेटाइड गाठिया, रेनाउड का सिंड्रोम, ठंड की एलर्जी की स्थिति, पक्षाघात या खराब संवेदना का क्षेत्र।
- मरीज महसूस करने में संव्यथित समस्याओं वाले व्यक्ति को इस उत्पाद के साथ अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
- पोस्ट-सर्जिकल आघात के इलाज के लिए उपयोग करते समय, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।
- यदि सामग्री त्वचा या आंखों के संपर्क आती है, तो पानी से तुरंत धोएं। यदि जलन या लाली बनी रहती है, तो चिकित्सक से परामर्श लें।
- यदि जेल पैक पंचर या क्षतिग्रस्त हो, तो इसका उपयोग न करें।
- जेल पाउच पर न बैठें या इस पर मत लेटें, 25 किलो से अधिक का वजन पड़ने पर यह टूट सकता है या इसमें रिसाव हो सकता है।

निर्देश:

- कूल पैक का इस्तेमाल हमेशा कपड़े के कवर से करें
- बर्फ का इस्तेमाल एक बार में 20 मिनट से अधिक समय तक न करें
- इन सतिथियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।