

PRODUCT CARE



Wipe with a clean, moist, lint free fabric to clean.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :

- LOT** Batch code
M Manufacturing date
M Manufacturer
REF Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001-2008 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

Foot Drop Splint


फूट ड्रॉप स्पलिंग्ट

Tablilla De Pie

Attelle de chute de pied

جبييرة تذلي القدم

REF D 17/D 43

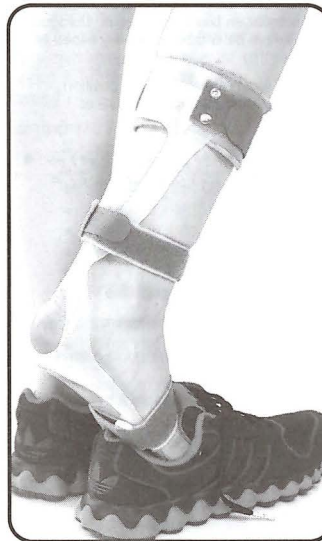

Foot Drop Splint



**Foot Drop Splint
with liner**

UM-D17/D43-18-1

USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام


1.



- Foot Drop Splint be placed in an upright position. Place the diseased foot on the foot plate of the FDS and align the contours.
- पदपात कमठी को सीधी स्थिति में रखा जाए, रोगग्रस्त पैर को फूट ड्रॉप स्पलिट के फूट प्लेट पर रखें और आकृतियों को संरेखित करें।
- La tablilla de pie se debe colocar en posición derecha. Coloque el pie afectado en la placa de pie de la tablilla de pie y alinee el contorno .
- L'attelle de chute de pied doit être placée dans une position verticale. Placez le pied malade sur la semelle du FDS et alignez les contours

• يتم وضع جبيرة تدلي القدم في وضع عمودي. ضع القدم المصابة على لوحة القدم بجبيرة تدلي القدم وقم بمحاذاة المعالم.

2.

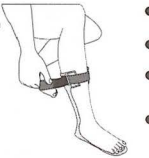

- Tighten the Velcro at the calf by reversing through the buckle
- बकल के माध्यम से पीछे करते हुए वेलक्रो को पिंडलियों पर कसें।
- Apriete la cinta de velcro en la pantorrilla invirtiéndola a través de la hebilla.
- Serrez le Velcro au niveau du mollet en l'inversant à travers la boucle
- قم بربط أشرطة الفيلكرو على الساق من خلال عكسها عبر الإبزيم.

How To Use Cómo Utilizar




कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام

3.



- Tie the ankle strap tightly around the ankle so as to get proper alignment and grip.
- टखना फीते को टखने के चारों ओर कस कर बांधें ताकि उचित संरेखण और पकड़ मिल सके।
- Apriete firmemente la cinta del tobillo en torno al tobillo para conseguir una alineación y agarre adecuados .
- Attachez fermement la bride de la cheville autour de la cheville pour obtenir un bon alignement et une bonne adhérence.
- اربط شريط الكاحل بإحكام حول الكاحل للحصول على المحاذاة والإحكام المناسبين.

4.

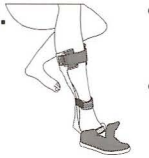

- Place the foot and splint into the shoe .Remove the laces completely or wear a slightly bigger shoe to facilitate placement. Tighten the laces and walk freely.
- पैर और कमठी को जूते के अंदर रखें। फीते को पूरी तरह से हटा दें या लगाने की अधिक सुविधा के लिए थोड़ा अधिक बड़ा जूता पहनें। फीतों को कसें और आजादी से टहलें।
- Ponga el pie y la tablilla dentro del zapato. Saque los lazos o lleve un zapato ligeramente más grande para facilitar la colocación. Apriete los lazos y camine libremente.
- Placez le pied et l'attelle dans la chaussure. Enlevez complètement les lacets ou portez une chaussure légèrement plus grande pour faciliter le placement. Serrez les lacets et marchez librement.
- ضع القدم والجبيرة في الحذاء. قم بإزالة الأربطة بالكامل أو ارتد حذاء أكبر قليلاً لتسهيل عملية الوضع. اربط الأربطة وامشي بحرية

Foot Drop Splint

English

INTENDED USE :

Foot Drop Splint is designed with a dorsal shell made of polypropylene with a leaf spring action to arrest the plantar flexion movement and lift the foot. It supports and stabilizes the ankle and foot in all foot drop conditions. Designed to aid in swing phase toe clearance and to reduce plantar flexion impact in the early stance.

CONSTRUCTION:

Highly anatomic and perforated design. Made out of durable PP polymer. Its thin walled construction has been optimized for increased resilience and designed to be worn with the shoe. Unique leafspring action adds bounce and aids in toe clearance while walking.

Air filled bubble sheet liner ensure soft, comfortable interface with the PP shell. Hook loop bands with reverse buckle mechanism ensure strong grip of the product to the foot.

APPLICATIONS:

- Prevention and correction of foot drop
- Neurological deficit
- Peripheral nerve paralysis
- Peroneal/Peritibial Nerve or Muscle damage
- Ankle or Plantar flexion contracture
- Functional Alignment and stabilization of the foot and ankle
- Post operative care
- Burn patients

CAUTION/RECOMMENDATION :

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- The contours can be customized using hot air gun to improve effectiveness and comfort.

INSTRUCTIONS:

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.