

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Close hook loop fasteners before washing.



Do not dry-clean.



Dry in shade on a flat surface.



Do not iron.



Do not bleach.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Manufactured by:

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, JLPL Ind. Area, Mahali - 160 055 (Pb) India
Consumer Care Cell: 1800-1212-656
E-mail: care@tynor.in or write to manufacturer
www.tynorindia.com

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

www.tynorindia.com

Posture Corrector

पोस्चर करेक्टर

Corrector postural

Correcteur de posture

مصصح الوضع

REF A33



Ref. Code: A3302261119


USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام


1.

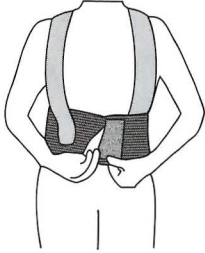

- Securely attach the chest strap to achieve a comfortable fit.
- आरामदायक फिट प्राप्त करने के लिए चेस्ट स्ट्रैप को सुरक्षित रूप से संलग्न करें।
- Fije con seguridad la correa del pecho para conseguir un ajuste cómodo.
- Attachez fermement la sangle de poitrine pour obtenir un ajustement confortable.

• شَدَّ وازبط حزام الصدر بشكل آمن ليصبح ملائم بشكل مريح.

2.

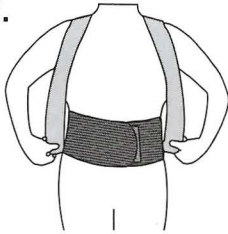

- Pass the shoulder straps over the shoulders, going under the arms
- बाहों के नीचे से रखते हुए कंधों के ऊपर शोल्डर स्ट्रैप से पास करें
- Pase las correas del hombro sobre los hombros, para que vayan por debajo de los brazos
- Passer les bretelles sur les épaules en passant sous les bras

• مروراً بأسفل الذراع، ممر أحزمة الكتف فوق الكتفين

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام

3.



- With the hands resting on the hips, affix the shoulder straps with hook loops at the back side to achieve a comfortable yet snug fit
- कूल्हों पर हाथों को आराम से रखने के साथ, हुक लूप वाले शोल्डर स्ट्रैप को पीछे की तरफ चिपकाए ताकि सुखद और आरामदायक तरीके से फिट किया जा सके
- Con las manos descansando sobre las caderas, fije las correas del hombro con los cierres de velcro situados en el lateral posterior para conseguir un ajuste cómodo aunque eficaz
- Avec les mains sur les hanches, fixez les bretelles avec des boucles pour crochets à l'arrière pour obtenir un ajustement confortable et serré.
- قم ببتثبيت أحزمة الكتف مع وضع اليدين على الوركين بالشريط اللاصق على جانب الظهر لتحقيق وضع محكم ومريحة

Posture Corrector

English

INTRODUCTION:

Tynor Posture Corrector is an effective device to maintain correct posture during daily activities and long sitting by applying a correctional force. Customizable design and elasticity of materials ensure optimal correctional force and higher comfort.

CONSTRUCTION:

The PE sheet panel at the back reinforce the back to the correct position. Fabric on the inside is soft and cushiony yet durable. The sleek design ensures good ventilation and user comfort. Carefully chosen elastic bands generate the necessary force for posture correction on one hand and comfortable user experience on the other.

APPLICATIONS:

- Bad Posture
- Posture care for long and demanding work
- Stooping shoulders
- Posture related back pain
- Preventive care in Obesity and Old age

RECOMMENDATIONS:

- For effective use, ensure strong, snug and comfortable fit.

INSTRUCTIONS:

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with another medical device
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.

पोस्चर करेक्टर

Hindi

उपयोग:

टाईनोर पोस्चर करेक्टर के प्रभावी उपकरण है, जो सुधारात्मक बल द्वारा दैनिक गतिविधियों और लंबे समय तक बैठने के दौरान सही मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। पसंद के मुताबिक बनाए जाने लायक डिजाइन और सामग्री का लचीलापन सबसे बढ़िया सुधारात्मक बल और बहुत अधिक आराम को सुनिश्चित करता है।

बनावट:

पीछे की ओर दिया गया पीई शीट पैनल सही स्थिति में शरीर को पीछे ले जाता है। अंदर का कपड़ा नरम और गद्दीदार के साथ-साथ टिकाऊ भी है। स्लीक डिजाइन बढ़िया वेंटिलेशन और उपयोगकर्ता के आराम को सुनिश्चित करता है। सावधानीपूर्वक चुने गए एलास्टिक बैंड एक ओर से स्थिति में सुधार के लिए ज़रूरी बल जनरेट करते हैं और दूसरी ओर से उपयोगकर्ता को आरामदायक अनुभव प्रदान करते हैं।

अनुप्रयोग:

- गलत मुद्रा
- देर तक और बैठ कर किए जाने वाले कार्यों में बैठने की स्थिति की देखभाल
- झुके हुए कंधे
- पीठ दर्द से संबंधित मुद्रा
- मोटापे और बुढ़ापे में सुरक्षात्मक देखभाल

सलाह:

- प्रभावी उपयोग के लिए, मजबूती, गर्मी और आरामदायक फिट सुनिश्चित करें।

निर्देश:

- इन सतिथियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ - साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर दिए गए निर्देशों का पालन ध्यानपूर्वक करें।