

क्लैविकल ब्रेस विथ बकल व वेल्क्रो एक स्मार्ट, और आरामदायक ब्रेस है जो हंसली की हड्डी वाले फ्रैक्चरों के अचलीकरण करने, दबाव देने एवं स्थिर करने के लिए डिजाइन की गई है। यह रेखिक जोड़ और हंसली की हड्डी के फ्रैक्चर में टेलिस्कोपिंग रोकना सुनिश्चित करती है।

निर्माण:

रोएदार कपड़े से निर्मित जिसमें भीतर गद्दीदार पीयू फोम होता है। इस्तेमाल किए गए कच्चे माल के खिंचावदार होने के कारण पट्टी शरीर के साथ स्वास ले सकती है। इसे इस तरह बनाया जाता है जिससे यह टूटी हंसली की हड्डी पर तिरछा दबाव डालती है। इससे कर्षण बल उत्पन्न होता है जो सुनिश्चित करता है कि हंसली की हड्डी का सीधा जुड़ाव हो और टूटे सिरे एक दूसरे पर न चढ़े। पीछे की गद्दी (बैक पैड) चौतरफा खिंचाव के लिए सहारा प्रदान करती है। बैक पैड में लगी फट्टी (स्प्लिट) सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील कांख के भाग में चुनन की तकलीफ न हो। बकसुए (बकल) के साथ टाइनॉर क्लैविकल पट्टी में, ठीक करने योग्य पट्टे और विशेष स्टेनलेस स्टील के पकड़ वाले बकसुए जो हंसली के क्षेत्र में पट्टी की बेहद मजबूत फिटिंग हासिल करते हैं और इसका ढीला होने से रोकते हैं।

वेल्क्रो डिजाइन वाले टाइनॉर क्लैविकल ब्रेस में बकल का रिवर्स बकल मैकेनिज्म और हुक और लूप टेप लगाने में लचीलापन, मजबूत फिटिंग और पट्टी के ढीला न होने को सुनिश्चित करता है।

अनुप्रयोग:

- हंसली हड्डी फ्रैक्चर।
- चोरे की पट्टी एवं बैंडेज को सहारा देने के लिए शल्यक्रिया पश्चात देखभाल।
- कंधों एवं पीठ कबूड़ के झुकने की समस्या के निदान के लिए।



चेतावनी/सलाह:

- जहां न तो न्यूरोवैस्क्युलर गडबडी गंभीर है और न सर्जरी की आवश्यकता है, वहां हंसली ब्रेस का उपयोग किया जाना चाहिए।
- यदि दर्द बना रहता है या दर्द बढ़ता है, तो अत्यधिक-कसावट के लिए देखें और अपने चिकित्सक से परामर्श लें।
- वेसो संकीर्णन निकाल दें।

निर्देश:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।
- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चकते या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ-साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.



MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer




Catalogue number



Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JIPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

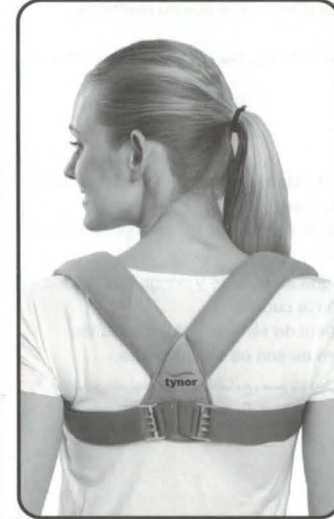

Clavicle Brace
With Buckle




Clavicle Brace
With Velcro

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام

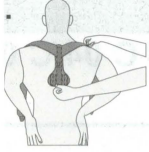

- Back pad is placed on the back in the center of the two scapulas.
- पीठ गद्दी को दोनों कंधों के बीच में रखा जाता है।
- La almohadilla trasera se coloca en la espalda en el punto central entre los dos omoplatos.
- Le coussin dorsal est placé sur le dos au centre des deux omoplates.

• فتكلا في مظع فصتتم في رة رةظلا في رة رةظلا فتكلا في رة رةظلا



- The patient is asked to stand upright with the two hands on the rear of his hip bone.
- रोगी को दोनों हाथ कूल्हे के पीछे की हड्डी पर रखते हुए सीधा खड़ा होने के लिए कहा जाता है।
- Se pide al paciente que se levante y ponga sus manos en la parte trasera de la cadera.
- On demande au patient de se tenir debout avec les deux mains à l'arrière de son os de la hanche.


• يُطلب من المريض الوقوف قائماً مع وضع يديه على مؤخرة عظمي الورك.

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام


3.

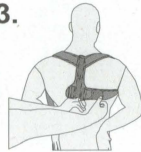

- The straps are thrown over the shoulders brought back through the axilla.
- बगल से होते हुए लाए गए फीते कंधों के ऊपर फेंके जाते हैं।
- Las cintas se pasan por encima de los hombros.
- Les sangles sont jetées sur les épaules ramenées à travers l'axilla.

• تُلقى الأشرطة حول الكتفين وتُسحب للخلف من خلال الإبطين مع تمريرها من خلال الإبرمين

4.

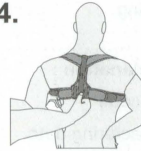

- The straps passed through the buckles and fastened to give strong grip and immobilization to the clavicular area.
- फीतों को बकसुओं के माध्यम से आरपार ले जाएं और हंसली क्षेत्र को मजबूत पकड़ और अचलीकरण देने के लिए बांधे जाते हैं।
- Las cintas luego por debajo de las axilas, se introducen a través de las hebillas y se aprietan para agarrar con fuerza e inmovilizar la región clavicular.
- Les sangles passées à travers les boucles et attachées pour donner une forte adhérence et une immobilisation à la zone clavulaire.

• توفر تلاً قطناً لتثبيت أربطة أماكلا في طعنتا الهطير جنباً

Clavicle Brace

English

Clavicle Brace is a convenient, scientifically designed brace, meant to immobilize, compress the clavicle bone. It ensures linear union and no telescoping of the fractured clavicle bone. It is used where neither neuro vascular disturbances are severe, nor surgery is required.

CONSTRUCTION:

Made from raised fabric with soft cushiony PU foam inside. The elastic nature of raw materials used, allow the brace to breathe with the body. It is constructed to provide lateral compression to the fractured clavicle bone, which gives a traction force which ensures linear union and no telescoping of the clavicle bone. Back pad forms a fulcrum for the four way pull, The splint in the back pad ensures no pinching of the sensitive axilla.

Adjustable straps and special stainless steel claw buckles help to get a very strong fitting of the brace around the clavicle region and prevent its loosening, in Tynor Clavicle brace with buckle design.

Reverse buckle mechanism and hook loop tapes ensure flexibility in positioning, strong fitting and no loosening of the brace in Tynor Clavicle Brace with Velcro design.

APPLICATIONS:

- Clavicle bone fractures.
- Post operative care of clavicular region to support the bandage & bind the incision.
- For curing the problem of stooping shoulders & hump back.

CAUTION/RECOMMENDATION :

- Clavicle brace should be used where neither neurovascular disturbances are severe, nor surgery is required.
- If pain persists or pain increases, look for over-tightening and consult your doctor.
- Rule out vaso constriction.

INSTRUCTIONS: [1]

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.