

- ① Wash hands and face thoroughly before using I-LID 'N LASH[®]. Apply a moist warm compress to closed eyelid in order to loosen encrusted debris and secretions.
- ② Open the container and remove one I-LID 'N LASH[®] wipe. When finished, close the container tightly.
- ③ Gently rub eyelids and eyelash roots with the I-LID 'N LASH[®] pre-soaked wipe in a circular motion until all debris is removed. (Please refer to Figure 1) If you are using I-LID 'N LASH[®] Pump, simply add some gel to a cotton pad and apply to the eye in the same way.
- ④ If necessary, clean the area around the lid margins more thoroughly by wiping in short strokes in the direction of the eyelashes, starting at the roots and going away from the eye for both lower and upper eyelids. (Please refer to Figure 2)

I-LID 'N LASH[®] does not need to be rinsed-off. The remaining gel will continue to hydrate the skin.

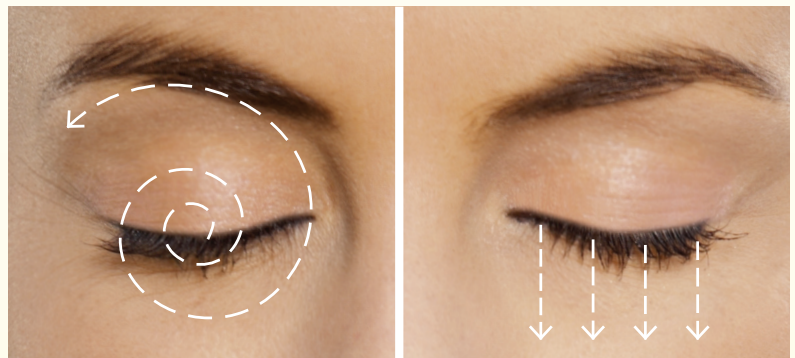


Figure 1

Figure 2

- ⑤ Repeat steps 2 through 4 for the second eye.

I-LID 'N LASH[®] can be used daily as a lid and lash cleanser to remove ocular debris.

(Do not use on broken or abraded skin. Not to be used by children under 3 years of age)

Available in two formats:



60 Pre-soaked Wipes



50 mL Metered Dose Pump

- ① Bien se laver les mains et le visage avant d'utiliser I-LID 'N LASH®. Appliquer une compresse chaude et humide sur la paupière fermée pour dégager les sécrétions et les débris incrustés.
- ② Ouvrir le contenant et prendre une lingette I-LID 'N LASH®. Bien refermer le contenant.
- ③ Frotter doucement les paupières et la racine des cils avec la lingette I-LID 'N LASH® préimbibée en faisant des mouvements circulaires, jusqu'à ce que tous les débris soient éliminés. (Voir la figure 1)
Si vous utilisez I-LID 'N LASH® en pompe, mettez simplement un peu de gel sur un tampon en coton, et suivez le même processus.
- ④ Si nécessaire, nettoyer la région autour du bord de la paupière plus en profondeur en l'essuyant à l'aide de mouvements saccadés dans la direction des cils, en commençant à la racine et en vous éloignant de l'œil, tant pour les cils inférieurs que supérieurs. (Voir la figure 2)

I-LID 'N LASH® n'a pas besoin d'être rincé. Le gel restant continuera à hydrater la peau.

- ⑤ Répéter les étapes 2 à 4 pour l'autre œil.

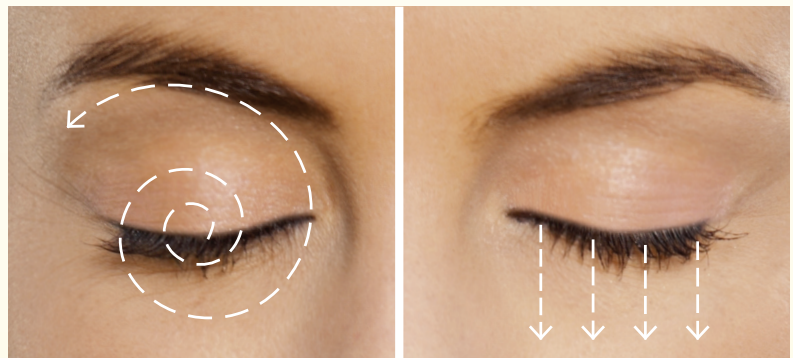


Figure 1

Figure 2

I-LID 'N LASH® peut être utilisé comme un nettoyant quotidien pour les paupières et les cils afin d'éliminer les débris oculaires.

(Ne pas utiliser sur une peau fissurée ou éraflée. Ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 3 ans.)

Vendu en deux formats :



60 lingettes préimbibées



Pompe à dose précise de 50 ml