


HONEY PLAY BOX

User Manual

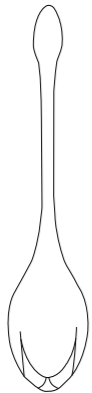

Bluebell


EN

Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

Product Specifications

Product Name	Bluebell
Product Materials	Silicone
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.065 lbs; 0.110 lbs; 0.172 lbs
Size	0.94*1.81*5.31in; 1.10*2.28*5.71in; 1.26*2.56*6.06in

Size

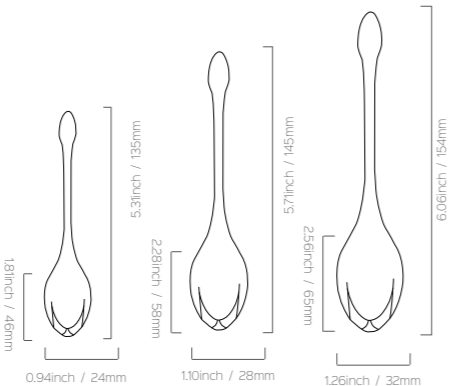

EN

• Kegel Ball Exercise Instruction

• The First stage:
Put the 0.065lbs one into the right place of your vagina, and tighten your pelvic floor muscles for 3-5s, then relax for 3-5s, repeat the process for 10 times, and 3 times a day.

• The Second Stage:
Put the 0.110lbs one into the right place of your vagina, and tighten your pelvic floor muscles for 3-5s, then relax for 3-5s, repeat the process for 10 times, and 3 times a day.

• The Third Stage:
Put the 0.172lbs one into the right place of your vagina, and tighten your pelvic floor muscles for 3-5s, then relax for 3-5s, repeat the process for 10 times, and 3 times a day.

• Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

EN

• Attention

- This product is for adult use only; keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.
- This product is not recommended for a long-time usage.
- Please do not do strenuous exercise when you use Kegel balls.
- It's better to consult your own doctor for professional instruction.


ES

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

• Especificaciones del producto

Nombre del producto	Bluebell
Materiales del producto	Silicona
Impermeable	IPX7
Peso neto	0.065 lbs; 0.110 lbs; 0.172 lbs
Tamaño	0.94*1.81*5.31in; 1.10*2.28*5.71in; 1.26*2.56*6.06in

• Tamaño

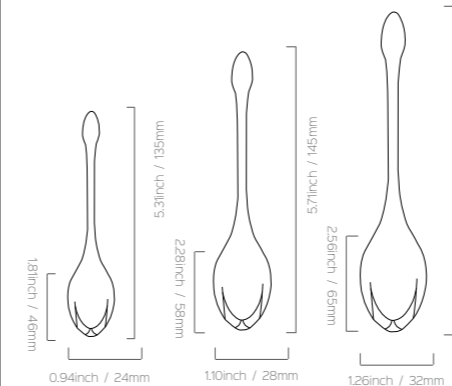

ES

• Instrucción de ejercicios con la pelota Kegel

• El primer escenario:
Coloque el de 0.065 libras en el lugar correcto de su vagina y apriete los músculos del piso pélvico durante 3-5 segundos, luego relájese durante 3-5 segundos, repita el proceso 10 veces y 3 veces al día.

• La segunda etapa:
Coloque el de 0.110 libras en el lugar correcto de su vagina y apriete los músculos del piso pélvico durante 3-5 segundos, luego relájese durante 3-5 segundos, repita el proceso 10 veces y 3 veces al día.

• La Tercera Etapa:
Coloque el de 0.172 libras en el lugar correcto de su vagina y apriete los músculos del piso pélvico durante 3-5 segundos, luego relájese durante 3-5 segundos, repita el proceso 10 veces y 3 veces al día.

• Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

ES

• Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.
- Este producto no se recomienda para un uso prolongado.
- No haga ejercicio extenuante cuando use las bolas de Kegel.
- Es mejor consultar a su propio médico para recibir instrucción profesional.

HONEY PLAY BOX


EN

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing Honey Play Box! We are dedicated to bringing you intelligent, Sleek, Luxury and Elegant Lifestyle products! Once you registered on our website, you will get the latest updates of our innovative products with creative ways of playing. Enjoy the amazing pleasure!

Honey Play Box Customer Service

1 Year BY REGISTERING YOUR PRODUCT ONLINE, YOU WILL VALIDATE YOUR 1-YEAR WARRANTY



FOR LATEST UPDATES, FOLLOW US!

[f](#) [t](#) [v](#) [d](#) [i](#)

@Honey Play Box

10 Year PROVIDING 10 YEARS OF QUALITY SERVICE AND SEXUAL WELLNESS PRODUCTS
https://www.honeyplaybox.com

EN

Quality
Surpassing standards from Europe and America

Material Safety
All Honey Play Box products are manufactured using environmental friendly materials including Silicone and ABS plastics. They are harmless to human body.

International Certification
Honey Play Box products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. Honey Play Box products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Additional Information:
The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive:
Is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

EN

WARNING!
Proper maintenance and care may extend the product's service life. Before using the product, please read the following safety instruction carefully.

- Please comply with the following before using the product: Clean the product completely. Scrub it with an antibacterial soap and then wash with clean hot water; at last, wipe it gently with towel or soft cloth.
- During using the product
 - NO using massage oil or hand cream as lubricant.
 - NO using silicon-based lubricant, because it'll damage the organosilicone surface.

Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline or acetone to wipe the product. Avoid direct solar radiation and long-time exposure to the high-temperature environment. The product shall be stored in a clean and dry place without contact with other plastic products.

Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries. A new battery could play its full effectiveness after two or three charging and discharging processes.
- A battery can be charged or discharged for over 100 times and will go matured finally. After being charged fully, the battery shall be disconnected with the charger, or overcharge may reduce the battery life.
- When the product is idle, the electric quantity of fully charged battery will lose gradually.
- If the product is placed in a too hot or cold place, it will reduce the battery capacity and shorten the battery life. If the battery is too hot or cold, the battery life will be also short even though it is charged fully.

Battery Warning!

- When the battery damaged or tampered with, it could cause fire or chemical burn. Explosion may happen when the battery is damaged.
- The battery shall be disposed in accordance with the local laws and regulations. If possible, please recycle it. Users shall not take out or replace the battery by themselves; otherwise, the risky operation may damage the product.


PT

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomendamos usar apenas o cabo de carregamento original.

• Especificações do produto

Nome do produto	Bluebell
Materiais do produto	Silicona
A prova d'água	IPX7
Peso líquido	0.065 lbs; 0.110 lbs; 0.172 lbs
Tamanho	0.94*1.81*5.31in; 1.10*2.28*5.71in; 1.26*2.56*6.06in

• Tamanho

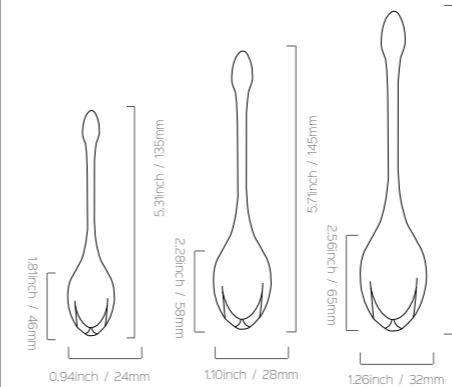

PT

• Instrução de Exercícios com Kegel Ball

• O primeiro estágio:
Coloque o de 0.065lbs no lugar certo da sua vagina e aperte os músculos do assoalho pélvico por 3-5s, depois relaxe por 3-5s, repita o processo por 10 vezes e 3 vezes ao dia.

• A Segunda Etapa:
Coloque o de 0.110lbs no lugar certo da sua vagina e aperte os músculos do assoalho pélvico por 3-5s, depois relaxe por 3-5s, repita o processo por 10 vezes e 3 vezes ao dia.

• A terceira etapa:
Coloque o de 0.172lbs no lugar certo da sua vagina e aperte os músculos do assoalho pélvico por 3-5s, depois relaxe por 3-5s, repita o processo por 10 vezes e 3 vezes ao dia.

• Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

PT

• Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.
- Este produto não é recomendado para uso prolongado.
- Por favor, não faça exercícios extenuantes ao usar bolas de Kegel.
- É melhor consultar seu próprio médico para instrução profissional.