

1. Open the box and follow the steps below




- Remove packaging and all contents from box.
- Lift up front end of backrest and move it forward.
- Hold the seat handle to lift up the chair.
- Make sure the red buckle is set to the locked position when moving.

2. Install the anti-skid suction cups to the base


- The suction cups must be clean before use.
- The tongue of the suction cups must face backwards.
- Make sure to place the suction cups at the edge of the bathtub.



3. Assembling the seat to backrest

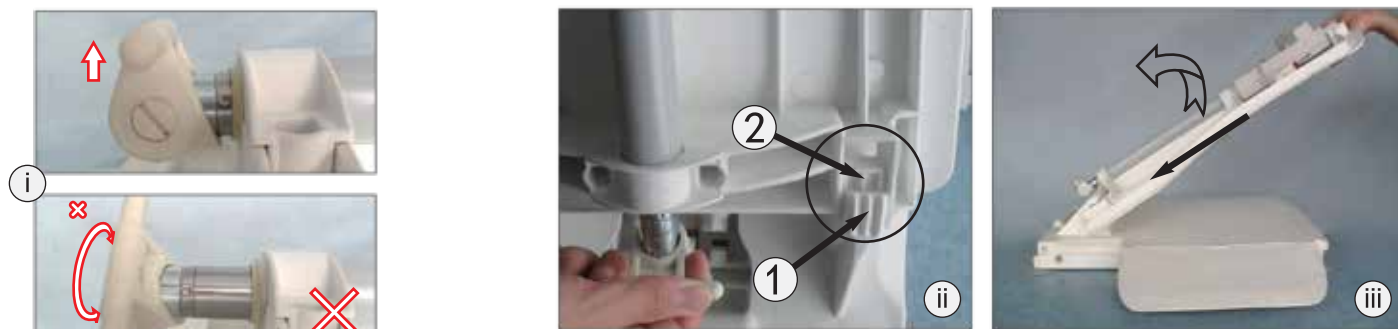



- Warning:** Make sure the push rod is fully retracted and in the correct direction.
- Backrest slides into the axle base which is at the heel end of the seat section.
- Lift up the backrest 45 degrees until it clicks into the axle base. Push the backrest backward until it reaches the lowest position.
- Warning:** Make sure the actuator's heel end is correctly fitted with the bath lift base. Otherwise there is risk of damage.

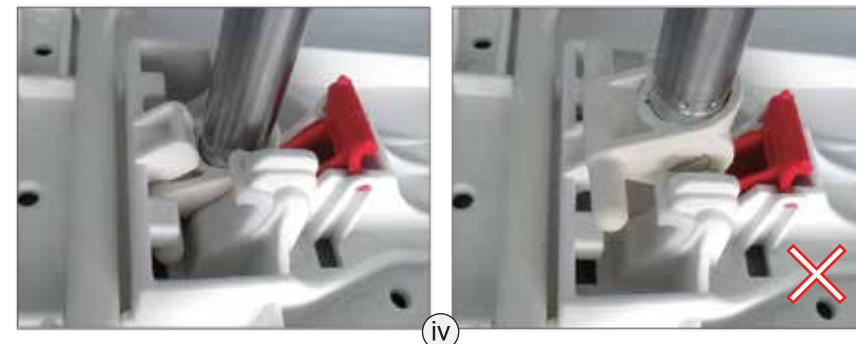

4. Hand control with rechargeable battery

Connect the charger plug ① with the hand control connector ②.

- It will take 8 hours to fully charge the battery.
- Warning:** Make sure the charger and hand control are clean and dry when charging.
- The hand control can be put into the water when using the bath lift.
- For storage, please wipe dry and store in a cool dry place.

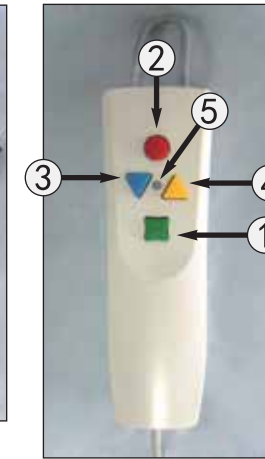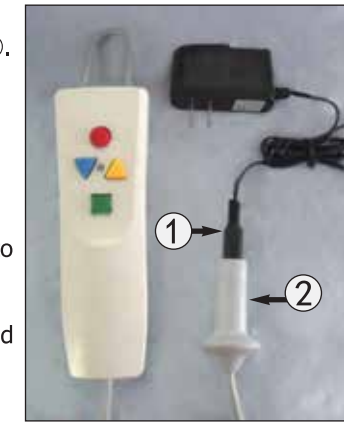

- ON button
- Emergency stop
- Lower down
- Raise up
- Power indicator



Plug the hand control connector to the chair back. Make sure the wire is fitted on the pin correctly. Connector should be placed on the red marked position.

5. Placing or removing bath lift from the bathtub

- Place the base of the bath lift in the tub.
- Warning:** The backrest should not crash into the bathtub. If there is any collision, the seat and base should be readjusted.
- The seat must be raised to a proper height before usage.
- To take out the bath lift, retract the actuator to the lowest position and push the backrest 45 degrees forward and pull out.
- Draw each suction cup individually at the heel end to release.
- Note:** wipe the bath lift dry after usage and store in a cool dry place.



6. Using the sliding seat


- Sit on the soft seat.
- Rotate the soft seat and put your legs into the bathtub.
- Slide the soft seat to the seat centre.



Specifications: Weight (including hand control): 27.55 lbs (12.5 kg), Max Capacity: 287 lbs (130 kg)
Working Voltage: 12V, Waterproof Class: IPX7, Power Adapter Input: AC100-240V

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. Ouvrir l'emballage et suivez les étapes ci-dessous

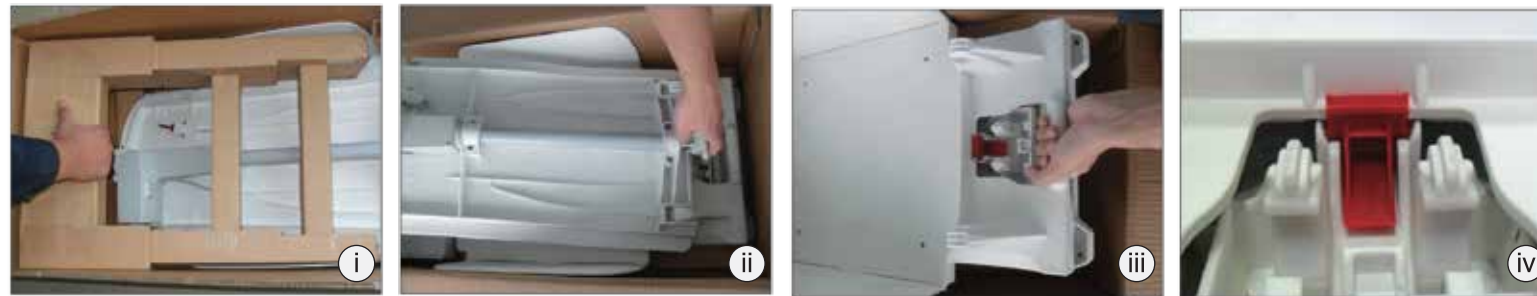


- Retirer l'emballage et tout le contenu du carton.
- Soulever l'extrémité avant du dossier et le déplacer vers l'avant.
- Tenir la poignée du siège pour soulever le siège.
- S'assurer que la fixation rouge est réglée à la position de verrouillage lors du déplacement.

2. Installer les ventouses antidérapantes à la base

- Les ventouses doivent être nettoyées avant l'usage.
- Les languettes sur les ventouses doivent faire face vers l'arrière.
- S'assurer de placer les ventouses au bord de la baignoire.




3. Assembler le siège au dossier

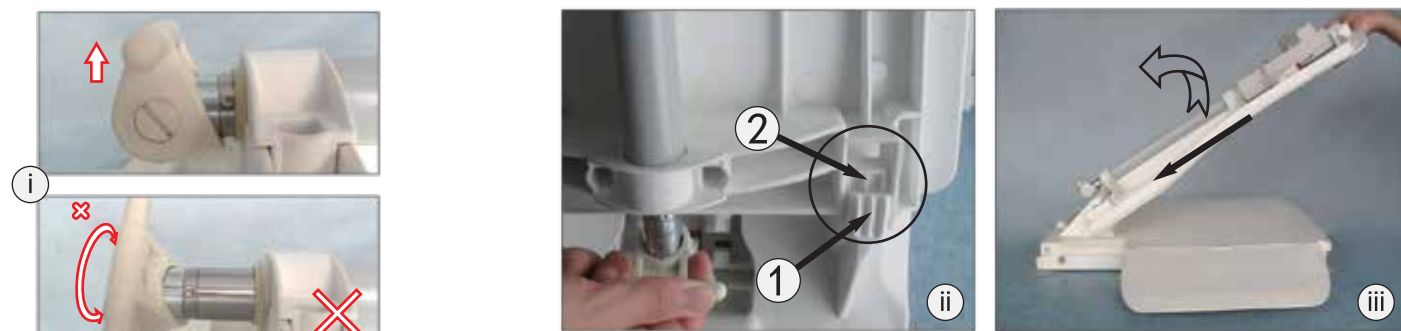

① Base de l'axe ② L'arbre de détour


- Mise en garde :** S'assurer que la tige-poussoir est entièrement rétractée et dans la direction appropriée.
- Le dossier se glisse dans la base de l'axe, laquelle est à l'extrémité du talon de la section du siège.
- Lever le dossier à un angle de 45° jusqu'à ce qu'il s'emboîte sur la base de l'axe. Continuer de pousser le dossier vers arrière jusqu'à ce qu'il atteigne la position la plus basse.
- Mise en garde :** S'assurer que l'extrémité du talon de l'actionneur s'emboîte correctement dans la base de l'élevateur de siège de baignoire. Sinon, il y a risque de dommage.

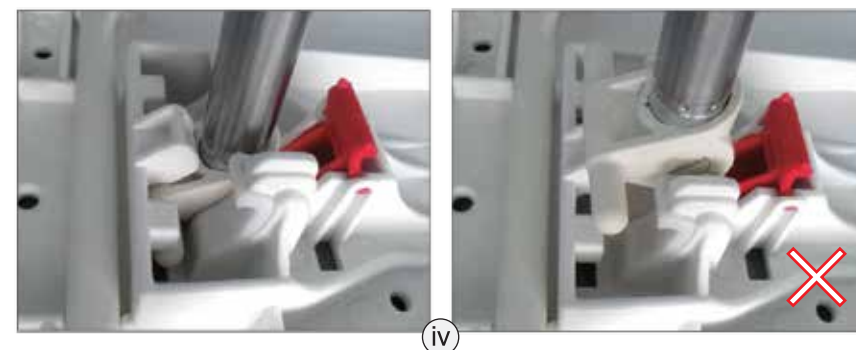

4. Commande manuelle avec pile rechargeable

Brancher la prise du chargeur ① dans le connecteur de la commande manuelle ②.

- Charger la pile pendant 8 heures pour une charge complète.
- Mise en garde :** S'assurer que le chargeur et la commande manuelle sont propres et secs avant de charger la pile.
- La commande manuelle peut être en contact avec l'eau lorsque vous utilisez l'élevateur de siège de baignoire.
- Pour la ranger, bien l'essuyer et la ranger dans un endroit frais et sec.

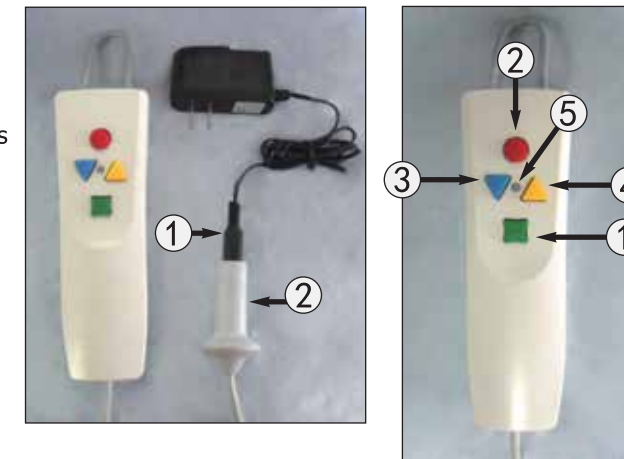

- Bouton de mise en marche
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Bouton pour descendre
- Bouton pour remonter
- Indicateur de puissance



Brancher le connecteur de la commande manuelle au dispositif derrière le dossier de la chaise. S'assurer que le câble est bien fixé à la douille de jack. Le connecteur doit être placé sur la position marquée rouge.

5. Mettre en place ou retirer l'élevateur de siège de baignoire.

- Mettre en place la base de l'élevateur de siège dans la baignoire.
- Mise en garde :** Le dossier ne doit pas heurter la baignoire. En cas de choc, le siège et la base doivent être réajustés.
- Le siège doit être élevé à une hauteur adéquate avant de l'utiliser.
- Pour retirer l'élevateur de siège de baignoire, rétracter l'actionneur à sa position la plus basse et pousser le dossier de 45° vers l'avant et tirer.
- Ramener chaque ventouse séparément au talon pour la dégager.
- Note :** Essuyer l'élevateur de siège de baignoire après l'usage et le ranger dans un endroit frais et sec.



6. Utiliser le siège coulissant

- S'asseoir sur le siège souple.
- Effectuer une rotation du siège souple et mettre vos jambes dans la baignoire.
- Glisser le siège souple au centre du siège.



Spécifications : Poids (incluant la commande manuelle) : 27,55 lb (12,5 kg). Capacité maximale : 287 lb (130 kg). Tension fonctionnelle : 12 V. Classe d'étanchéité : IPX7. Entrée de l'adaptateur de courant : CA100 – 240 V.

GARANTIE LIMITÉE À VIE