


### INTENDED USE

Raised toilet seats increase the independence of the user by adding height to most toilet seats. By easing the process of sitting and rising from the toilet, raised toilet seats provide comfort as well as support.

**NOTE:** This product has been designed to fit most toilet seats. It may not fit all toilet seats. Ensure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before each use.

### CONTENTS

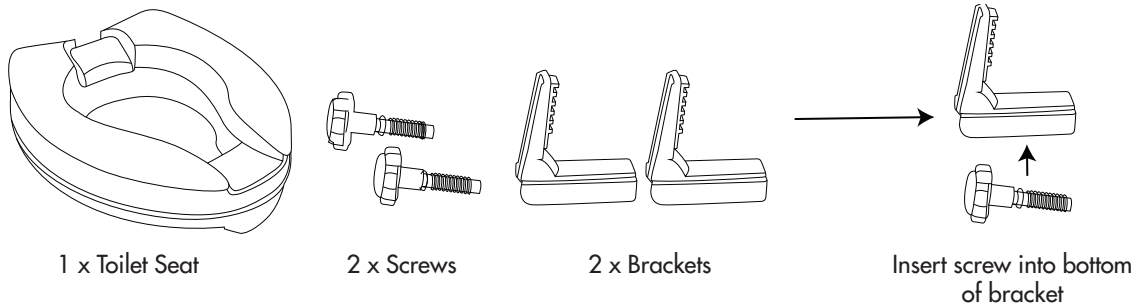

### IMPORTANT INFORMATION

- Always read instructions before starting assembly of the product.
- If any components of the toilet seat are damaged or missing do not use.
- Only use the raised toilet seat if it fits securely on toilet bowl.
- Before each use ensure that the raised toilet seat is correctly and securely locked in place. Check the adjustment knobs on sides of seat before each use to ensure that they are tight.
- During use the users weight should be centred over the raised toilet seat.
- When getting on and off the seat do not hold onto the seat as a support.
- This product has a maximum user weight of **300 lbs/136 kg**.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove the existing toilet seat from the toilet.
2. Place the raised toilet seat upside down on a flat surface. **(Figure 1)**
3. Insert one of the brackets with the screw inserted into the slot on the side of the seat. **(Figure 2)**
4. Pushing lightly on the bracket turn the screw clockwise until it catches on the thread. **(Figure 3)**  
Repeat steps #3 and #4 for second bracket.
5. Once both brackets are attached to the toilet seat ensure that the screws are further apart than the width of the toilet bowl. Turn the seat over and place it on the toilet bowl. Ensure that the narrow cut out is at the front of the toilet and that the brackets are near the back of the toilet. The seat should be positioned so that the front lip of the seat is against the outside front of the toilet bowl.
6. Turn both screws on the brackets clockwise until the brackets are tight to the bowl of the toilet. Do not use tools to tighten the screws. Hand tighten only. The raised toilet seat should sit level on the rim of the bowl and fit tightly to the bowl.
7. Before each use check the brackets to ensure that the raised toilet seat is tightly secure.

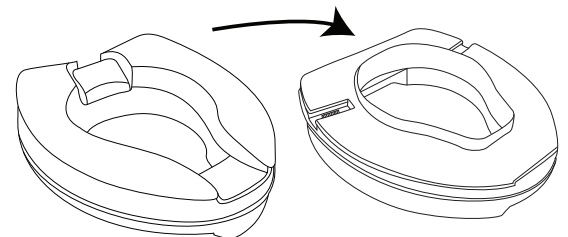


Figure 1

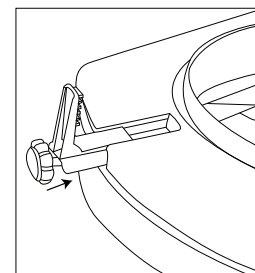


Figure 2

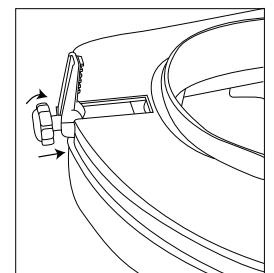


Figure 3

### REMOVAL INSTRUCTIONS

1. Turn screws on the brackets counter-clockwise until the seat is loose from toilet bowl.
2. Lift the front of the raised toilet seat and pull forward to remove.

### CARE AND CLEANING

- Use a non-abrasive detergent or household cleaner with warm water.
- Rinse with warm water and wipe dry.
- Screws can be removed from brackets for a more thorough cleaning.
- Do not use abrasive cleaners on this product or damage may occur.


### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

### UTILISATION PRÉVUE

Les sièges de toilettes surélevés permettent aux utilisateurs d'être plus autonomes en ajoutant de la hauteur à la plupart des sièges des toilettes. En facilitant le processus de s'asseoir et de se lever des toilettes, les sièges de toilettes surélevés procurent du soutien et du confort.

**NOTE:** Ce produit a été conçu pour s'adapter à la plupart des sièges des toilettes. Il peut ne pas convenir à tous les modèles des sièges des toilettes. Il doit être installé correctement, s'ajuster comme il se doit et doit être bien stable avant chaque usage.

### CONTENU

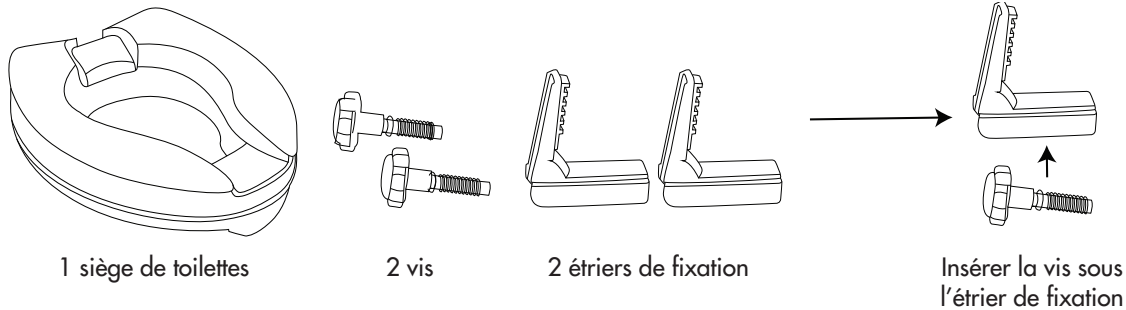

### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Toujours lire le mode d'emploi avant de procéder à l'assemblage de ce produit.
- Si un élément quelconque du siège de toilettes surélevé est endommagé ou manquant, ne pas l'utiliser.
- Utiliser uniquement le siège de toilettes surélevé s'il s'adapte de façon sécuritaire sur la cuvette des toilettes.
- Avant chaque utilisation, s'assurer que le siège de toilettes surélevé est verrouillé en place de façon correcte et sécuritaire. Vérifier si les boutons de réglage de chaque côté du siège sont bien serrés avant chaque usage.
- Pendant l'usage, l'utilisateur doit s'asseoir au centre du siège surélevé.
- Quand vous vous asseyez ou vous vous levez du siège, ne prenez pas le siège comme un élément de soutien.
- Ce produit convient à une personne dont le poids ne peut excéder **300 lb / 136 kg**.

### MODE D'EMPLOI POUR L'INSTALLATION

1. Enlever le siège déjà en place sur les toilettes.
2. Déposer le siège surélevé à l'envers sur une surface plate (**Figure 1**).
3. Insérer un des étriers de fixation en insérant la vis dans la fente sur le côté du siège (**Figure 2**).
4. En poussant légèrement sur l'étrier de fixation, tourner la vis dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle saisisse le filet (**Figure 3**). Répéter les étapes 3 et 4 pour le deuxième étrier de fixation.
5. Quand les deux étriers de fixation sont bien en place sur le siège des toilettes, s'assurer que les vis sont espacées l'une de l'autre de la largeur de la cuvette. Retourner le siège et le placer sur la cuvette des toilettes. S'assurer que l'entaille étroite est devant les toilettes et que les étriers de fixation sont près de l'arrière des toilettes. Le siège devrait être positionné de façon à ce que la lèvre avant du siège est contre la face avant externe de la cuvette des toilettes.
6. Serrer les vis sur les étriers de fixation dans le sens horaire jusqu'à ce que les étriers de fixation soient fixés solidement sur la cuvette des toilettes. Ne pas utiliser d'outils pour serrer les vis, le faire manuellement. Le siège surélevé devrait demeurer au niveau du rebord de la cuvette et être bien ajusté à la cuvette.
7. Avant chaque usage, vérifier les étriers de fixation pour vous assurer que le siège surélevé est fixé solidement.

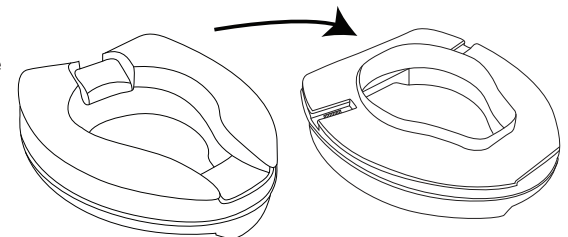


Figure 1

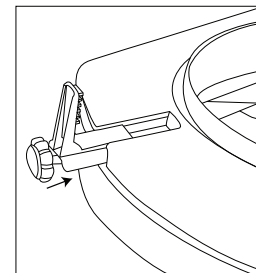


Figure 2

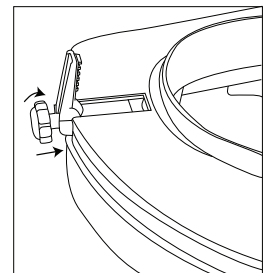


Figure 3

### INSTRUCTIONS RELATIVES AU DÉMONTAGE

1. Tourner les vis des étriers de fixation dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le siège soit desserré de la cuvette des toilettes.
2. Lever le devant du siège de toilettes surélevé et le tirer vers l'avant pour l'enlever.

### SOIN ET ENTRETIEN

- Utiliser un détergent non abrasif ou un produit de nettoyage domestique avec de l'eau tempérée.
- Rincer avec de l'eau tempérée et sécher à fond.
- Les vis peuvent être enlevées des étriers de fixation pour un nettoyage en profondeur.
- Ne pas utiliser des produits de nettoyage abrasifs sur ce produit car ils pourraient endommager le produit.

### GARANTIE D'UN AN