

# BIOS living

## Transfer Bench




### User's Manual

Weight Capacity 300 lbs/136kg





# 1

## Check all parts

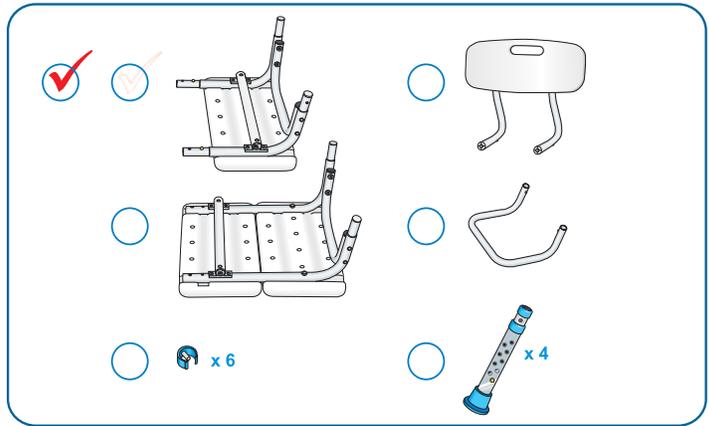

# 2

## Tool-free setup

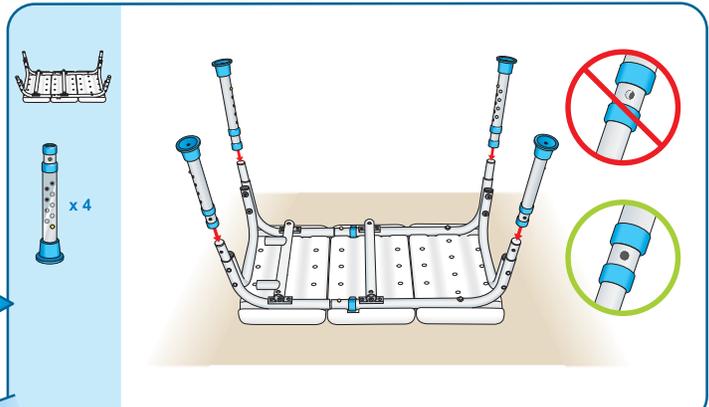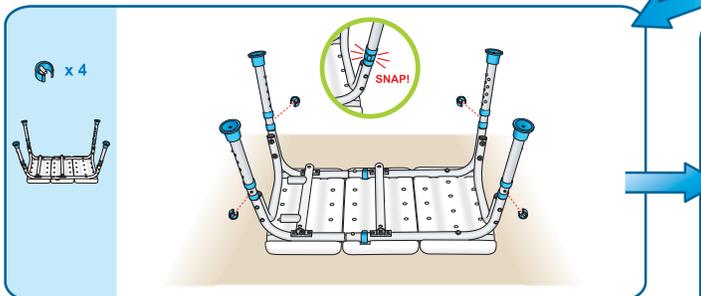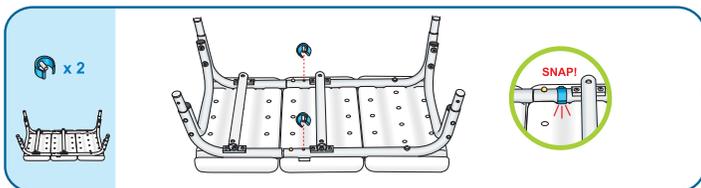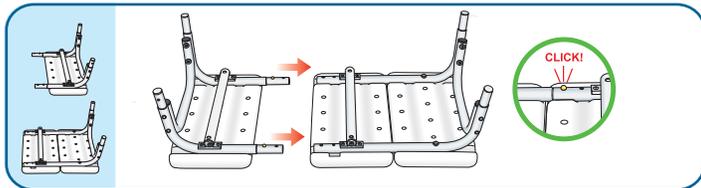

**MAINTENANCE**


1. Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that the bench is well rinsed before using.
2. Never use organic solvents, abrasive cleaners or scouring pads on any part of the bench.
3. Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that the bench is safe to use.



### SAFETY PRECAUTIONS

**DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE TRANSFER BENCH WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**

- Make certain that the height adjustment snap buttons fully protrude through the same respective holes of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
- **DO NOT** stand on transfer bench.
- BIOS Medical assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

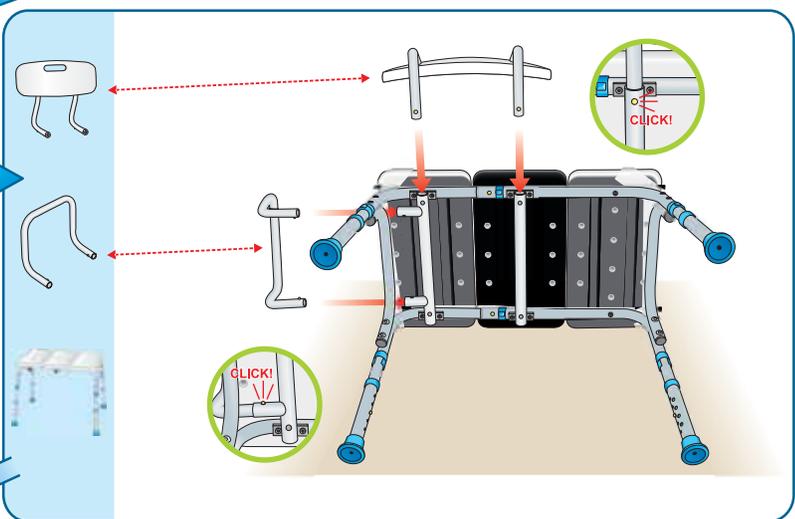

### Warranty

#### One Year Warranty

This Transfer Bench has a one year warranty to be free of manufacturing defects in materials and workmanship under normal applications for lifetime of the original owner. If this product becomes inoperable due to defect and requires repair, return the product with all component pieces and proof of purchase to the address listed below. This warranty does not cover any shipping/transport costs. This warranty does not apply if the product is subject to misuse, neglect, rough handling or damage.

Ship the unit prepaid and insured (at owner's option) to:

**Thermor Ltd.**  
Attn: Repair Department  
16975 Leslie Street  
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com  
Email: support@biosmedical.com

# BIOS living

## Tabouret de transfert


### Manuel d'utilisation

Capacité maximale : 300 lb/136 kg








# 1

## Vérifiez toutes les pièces

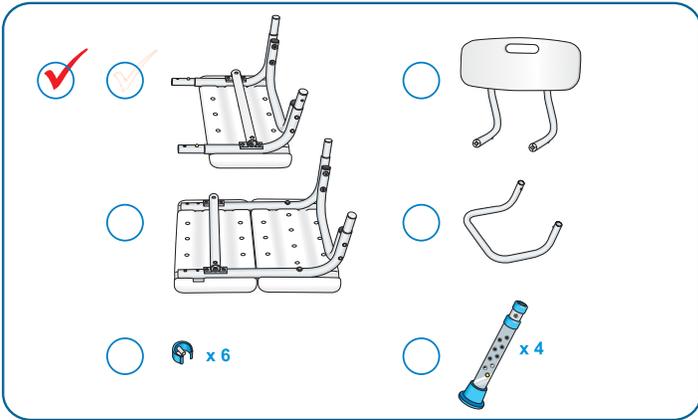

# 2

## Assemblage sans outils

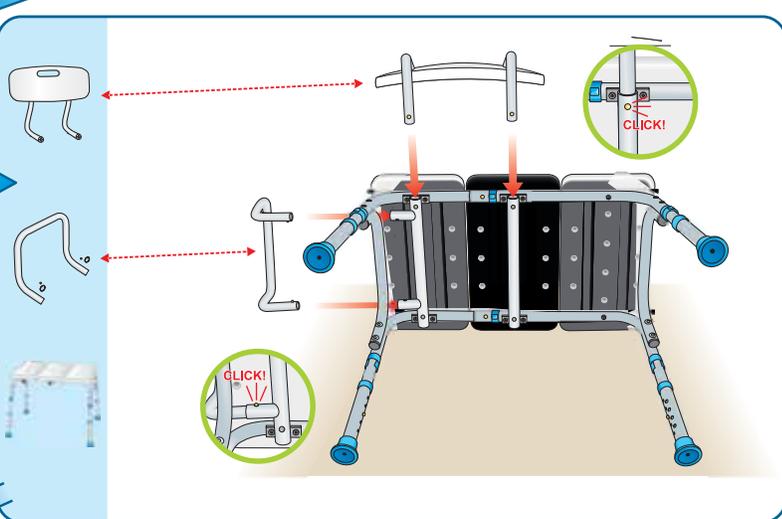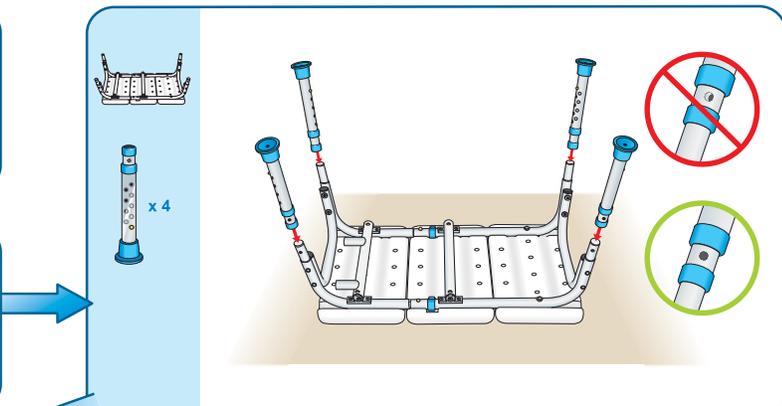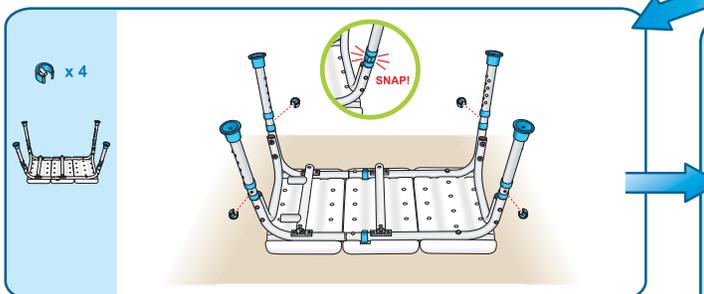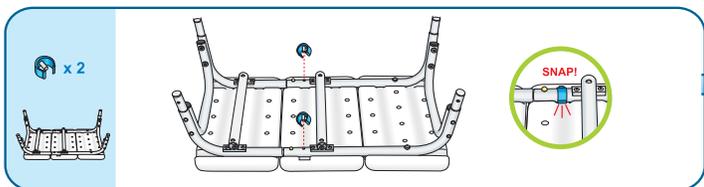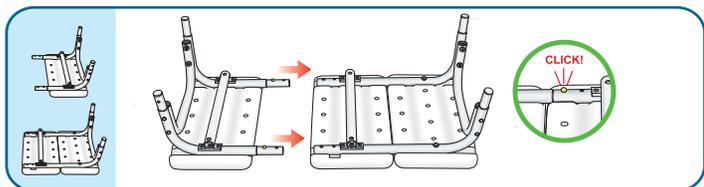

### ENTRETIEN

1. Utilisez une solution d'eau et de savon doux. Rincez à l'eau claire, puis séchez avec un chiffon doux. Assurez-vous que le tabouret est bien rincé avant de l'utiliser.
2. N'utilisez pas de solvants organiques, de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer toute partie du tabouret.
3. Vérifiez que tous les écrous, boulons et boutons sont bien serrés une fois par semaine pour vous assurer que le tabouret peut être utilisé en toute sécurité.



### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

#### NE TENTEZ PAS D'AJUSTER OU D'UTILISER LE TABOURET DE TRANSFERT SANS LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Assurez-vous que les boutons-pression de réglage de la hauteur font saillie complètement des orifices respectifs de chaque rallonge de pattes, ceci afin de garantir que les rallonges de pattes sont solidement fixées en place à une hauteur constante.
- NE MONTEZ PAS sur le tabouret de transfert.
- BIOS Medical n'assume aucune responsabilité pour toute blessure ou tout dommage causé par l'installation, l'assemblage ou l'utilisation inappropriée de ce produit.

### Garantie

#### Garantie d'un an

Ce tabouret de transfert est garanti contre tout défaut de fabrication pour les matériaux et la main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale pendant 1 an par le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et qu'il nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été soumis à une mauvaise utilisation, à la négligence, à la manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit, prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

Thermor Ltd.  
Attn: Repair Department  
16975 Leslie Street  
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com  
Courriel: support@biosmedical.com