

# Sanctuary™



DENTAL DAM SYSTEMS

**Sanctuary™**





**Sanctuary™**  
**Latex Dental**

**THE DENTAL ADVISOR**  
 ★★★★★

- Dental dam**
  - powder free, non-stick, single use only, for professional use only
- Digue dentaire**
  - sans poudre, non-stick, à usage unique, exclusivement réservé à un usage professionnel
- Kofferdam**
  - powder free, non-stick, for one-time/one-patient use only, for professional use only
- Diga dentale**
  - senza polvere, non-stick, monouso, esclusivamente per uso professionale
- Diques de goma**
  - sin polvo, no-stick, de un solo uso, recomendado solo para uso profesional

6" x 6" 36 sheets SCENT:  PLAIN  MINT

Recommended For Professional Use Only

COLOR:  BLUE  GREEN

THICKNESS:  THIN  MEDIUM

**Sanctuary™**  
**Non Latex Dental dam**

**THE DENTAL ADVISOR**  
 ★★★★★

- Dental dam**
  - powder free, non-stick, single use only, for professional use only
- Digue dentaire**
  - sans poudre, non-stick, à usage unique, exclusivement réservé à un usage professionnel
- Kofferdam**
  - powder free, non-stick, for one-time/one-patient use only, for professional use only
- Diga dentale**
  - senza polvere, non-stick, monouso, esclusivamente per uso professionale
- Diques de goma**
  - sin polvo, no-stick, de un solo uso, recomendado solo para uso profesional

6" x 6" 36 sheets SCENT:  MINT (PURPLE)

Recommended For Professional Use Only

**Sanctuary™**  
**Powder Free Latex Dental dam**

**THE DENTAL ADVISOR**  
 ★★★★★

- Dental dam**
  - powder free, non-stick, single use only, for professional use only
- Digue dentaire**
  - sans poudre, non-stick, à usage unique, exclusivement réservé à un usage professionnel
- Kofferdam**
  - powder free, non-stick, for one-time/one-patient use only, for professional use only
- Diga dentale**
  - senza polvere, non-stick, monouso, esclusivamente per uso professionale
- Diques de goma**
  - sin polvo, no-stick, de un solo uso, recomendado solo para uso profesional

Thin  Medium  Heavy

6" x 6" 36 sheets SCENT:  MINT

Recommended For Professional Use Only

**Sanctuary™**  
**Latex Dental dam**

**THE DENTAL ADVISOR**  
 ★★★★★

**Silk Blue**

- Dental dam**
  - powder free, non-stick, single use only, for professional use only
- Digue dentaire**
  - sans poudre, non-stick, à usage unique, exclusivement réservé à un usage professionnel
- Kofferdam**
  - powder free, non-stick, for one-time/one-patient use only, for professional use only
- Diga dentale**
  - senza polvere, non-stick, monouso, esclusivamente per uso professionale
- Diques de goma**
  - sin polvo, no-stick, de un solo uso, recomendado solo para uso profesional

6" x 6" 36 sheets SCENT:  MINT

Recommended For Professional Use Only

THICKNESS:  THIN  MEDIUM  HEAVY

# Dental Dams



# Powder Free **Latex** Dental Dam




Sanctuary ... the world's first powder-free natural rubber latex dental dam.

## Cutting-edge Advantage

Sanctuary Dental Dam is specially designed to be resilient, with a high tear tolerance to allow for the easy fixing of clamps.

It is the world's first latex dental dam which is powder free and low protein, making it the excellent choice for professional use.

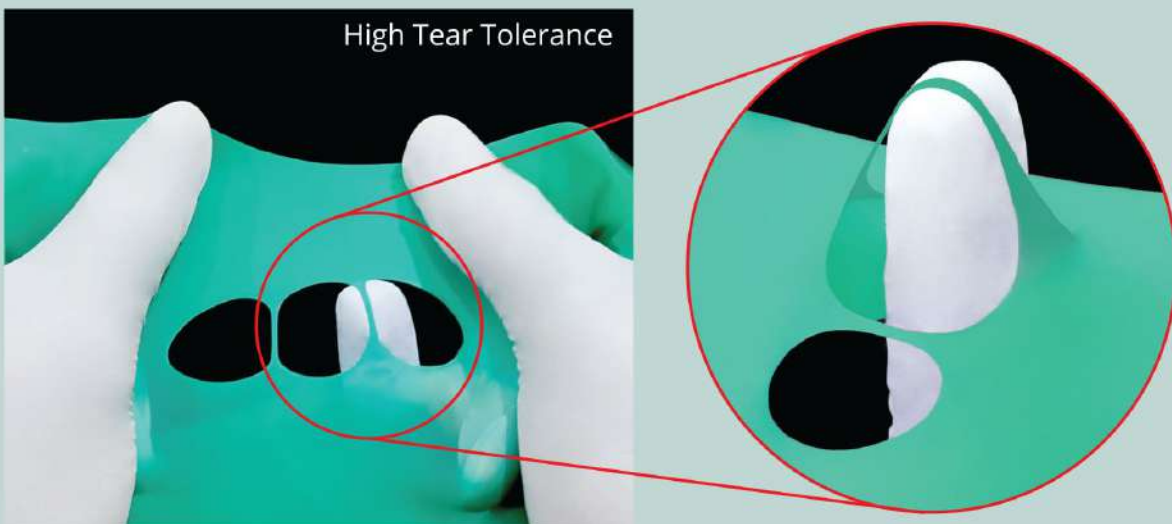




Strength	Thin / Medium / Heavy
Dimension	127 x 127mm (5 inch x 5 inch ) OR 152 x 152 mm (6 inch x 6 inch )
Packing	5" x 5" - 52 Sheets per box 6" x 6" - 36 Sheets per box
Edging	Square cut
Physical Strength	- Tensile Strength: 24.0 MPa (min) - Ultimate Elongation: 700% (min)
Extractable Protein	Less than 50 microgramme / dm <sup>2</sup>
Residual Powder	Less than 2.0 milligramme per dental dam
Scent & Colour	Mint (Green) Plain (Blue)
Packaging	52 pieces / box (for 127 x 127mm) 36 pieces / box (for 152 x 152mm)
Carton & Size	40 Boxes per carton for 127 x 127mm, Carton Size 30.3x30.3x20.8cm (LxWxH) for 152 x 152mm, Carton Size 34.5x34.5x18.0cm (LxWxH)
Certification	CE and FDA registered

## The Significance of Being Powder-free and Low Protein

Plant proteins present in natural rubber is a source of irritation and allergy to some people, causing negative and adverse reactions. These reactions and allergies are significantly and drastically reduced by reducing the protein levels and eliminating powder residues of natural rubber products during production, thus making such products safer and more accessible.


## Powdered Sample

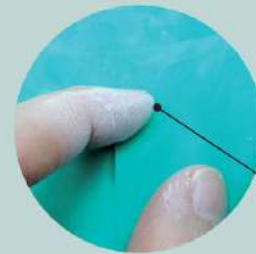

Residue of powder is found

Generally it will be more dull in appearance where it's light powder is sensible. Based on studies, powdered product such as latex gloves where its allergen content is higher in powdered gloves.

## Sanctuary™ Powder Free

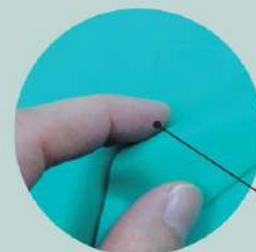

No residue of powder


Visually, it looks more shiny and in addition it feels much more fair and smoothly. Sanctuary's Powder Free feature in Dental Dam which helps to address the proteins allergy concern by eliminating the chance of the powder which act as the transporter of protein into the user's skin during contact.

# Powder Free **Non Latex** Dental Dam

## Sanctuary Powder-free Non-Latex Dental Dam

Sanctuary's non-latex dental dam is made from Polyisoprene, a material which very closely resembles rubber. It has a similar polymer structure and physical properties as natural rubber minus the potential allergen of latex protein.

Designed and developed as a superior product, the Sanctuary Non-Latex Dental Dam offers a high tear tolerance (a minimum expansion of 10 times from the original punch hole), great tensile strength (above 20.0MPa) and a good modulus level (1.0MPa), all of which are crucial in the practical and efficient application of the dental dam.

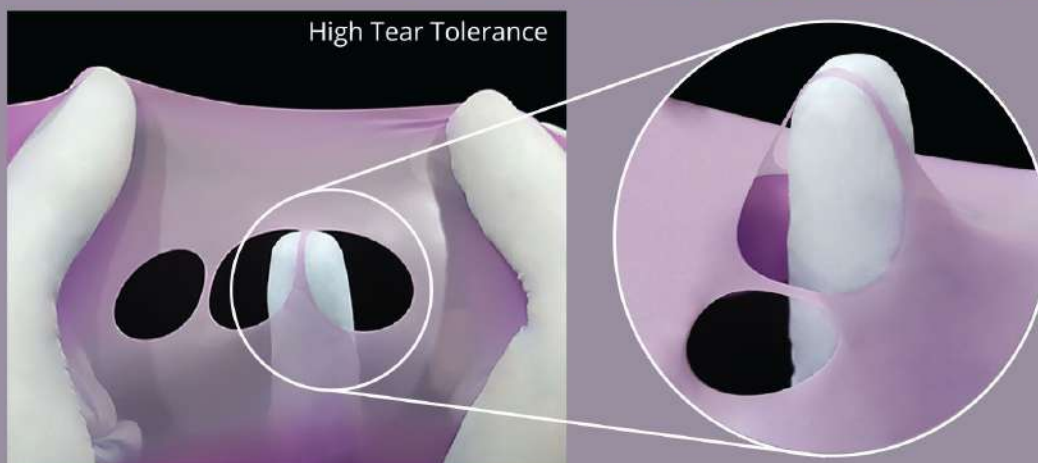





DENTAL ADVISOR  
PREFERRED PRODUCT  
**DENTAL DAM:  
NON-LATEX**

## Stretchability

The Sanctuary Non Latex dental dam is made to achieve a very high stretchability consistent with a good tear tolerance.



Before Elongation



After Elongation

Strength	Medium
Dimension	127 x 127mm (5 inch x 5 inch ) or 152 x 152 mm (6 inch x 6 inch )
Packing	5" x 5" - 15 Sheets per box 6" x 6" - 15 Sheets per box
Edging	Square cut
Physical Strength	- Tensile Strength: 20.0 MPa (min) - Ultimate Elongation: 700% (min)
Residual Powder	Less than 2.0 milligramme per dental dam
Scent	Mint
Colour	Purple
Packaging	15 pieces / box
Carton & Size	40 Boxes per carton for 127 x 127mm, Carton Size 30.3x30.3x20.8cm (LxWxH) for 152 x 152mm, Carton Size 34.5x34.5x18.0cm (LxWxH)
Certification	CE and FDA registered



# PHOTOGRAPHY





DENTAL ADVISOR  
TOP AWARD  
DENTAL  
DAM: LATEX



DENTAL ADVISOR  
TOP AWARD  
DENTAL DAM:  
LATEX

# Powder Free Latex Black Dental Dam



## Sanctuary Powder-free Latex Black Dental Dam

Formulated and designed for optimum photographic results, having a clear and distinctive photo outcome is crucial and necessary for dentist to make effective studies of the tooth during procedures.

Sanctuary Latex Black Dental Dam is a great alternative for dental photography compared to conventional coloured dental dams.

### Benefits:

- Powder Free
- Low Protein
- Greater Visual Clarity
- Clear Operating Field
- Effective Barrier for Infection Control
- High Tear Tolerance

Strength	Medium
Dimension	152 x 152 mm (6 inch x 6 inch)
Packing	6" x 6" - 36 Sheets per box
Edging	Square cut
Physical Strength	- Tensile Strength: 24.0 MPa (min) - Ultimate Elongation: 700% (min)
Extractable Protein	Less than 50 microgramme / dm <sup>2</sup>
Residual Powder	Less than 2.0 milligramme per dental dam
Scent	Mint
Colour	Black
Packaging	36 pieces / box (for 152 x 152mm)
Carton & Size	40 Boxes per carton for 152 x 152mm, Carton Size 34.5x34.5x18.0cm (LxWxH)
Certification	CE and FDA registered

## Colour Contrast



Designed to provide the ultimate contrast colour to allow clearer visual of the tooth or teeth during procedures and dental photography.

Developed for

*Better*

*Vision Comfort*



# Powder Free Silk Blue Dental Dam



## Sanctuary Powder-free Latex Silk Blue Dental Dam

Specially developed to help reduce eye fatigue from reflection of procedure lighting and from long hours of concentration.

The soft blue colour provides comfort to the eyes and helps to maintain better vision during procedure.

### Benefits:

- Powder Free
- Low Protein
- Better Vision Comfort
- Clear Operating Field
- High Tear Tolerance

Strength	Thin / Medium
Dimension	127 x 127mm (5 inch x 5 inch ) OR 152 x 152 mm (6 inch x 6 inch )
Packing	5" x 5" - 52 Sheets per box 6" x 6" - 36 Sheets per box
Edging	Square cut
Physical Strength	- Tensile Strength: 24.0 MPa (min) - Ultimate Elongation: 700% (min)
Extractable Protein	Less than 50 microgramme / dm <sup>2</sup>
Residual Powder	Less than 2.0 milligramme per dental dam
Scent	Mint
Colour	Silk Blue
Packaging	52 pieces / box (for 127 x 127mm) 36 pieces / box (for 152 x 152mm)
Carton & Size	40 Boxes per carton for 127 x 127mm, Carton Size 30.3x30.3x20.8cm (LxWxH) for 152 x 152mm, Carton Size 34.5x34.5x18.0cm (LxWxH)
Certification	CE and FDA registered

## Colour Contrast



Sanctuary Silk Blue Dental Dam is also designed for optimum photographic outcome which is a big plus for dentist to have a better and clearer study on the particular tooth.





A close-up photograph of several stainless steel dental dam accessories, including a clamp and a frame component, set against a dark background. The brand name 'Sanctuary' is visible on the metal parts. A red object is partially visible in the top left corner.

**Sanctuary™**

Dental  
Dam  
Accessories

# Dental Dam Premium Kit



## Dental Dam Accessories Product Specifications:

Product Name	Product Code	Product Description
Dental Dam Punch	RDPN1	Dental Dam Punch, 157mm (L)
Dental Dam Clamps	RDC210	Anterior for adult, 30.5mm (W) x 21.5mm (L)
	RDC211	Anterior for adult, 30.5mm (W) x 20.5mm (L)
	RDC207	Premolar for adult, 16.0mm (W) x 17.5mm (L)
	RDC2	Premolar for adult, 17.5mm (W) x 16.5mm (L)
	RDC2A	Premolar for adult, 17.5mm (W) x 17.5mm (L)
	RDC201	Molar for adult, 20.0mm (W) x 22.5mm (L)
	RDC202	Molar for adult, 20.5mm (W) x 24.5mm (L)
	RDC203	Posterior for children, 16.5mm (W) x 19.0mm (L)
	RDC204	Posterior for children, 16.5mm (W) x 19.5mm (L)
	RDSTD2	Dental Dam Clamps with Organizer, 3cm (H) x 10cm (W) x 15cm (L) Included Dental Dam Clamps: 1.) RDC210           6.) RDC201 2.) RDC211           7.) RDC202 3.) RDC207           8.) RDC203 4.) RDC2              9.) RDC204 5.) RDC2A
	Dental Dam Forceps	RDPL1
Dental Dam Frames	RDFR1	Dental Dam Frame, 110mm (W) x 95mm (L)
	RDFR2	Dental Dam Frame, 135.5mm (W) x 100mm (L)



 The Application of  
Dental Dam Video Included



# Dental Dam Punch



Sanctuary Dental Dam Punch is developed specially for the purpose of its durability in obtaining a perfect punch hole on a dental dam.

## Quality Punch Every Time

The key to a perfect punch on a high tear tolerance Sanctuary Dental Dam is a hardened sharp edge on the punch. At Sanctuary, the Stainless Steel 304 is a grade put through a special "work-hardened" process in order to hardened the 304 grade further.

## Long Lasting on Repetitive Application

Sanctuary Dental Dam Punch is engineered to withstand the repetitive stress in application during every punch and the sterilization/cleaning process which involves sterilization substances.

## Safe for Autoclaving

Sanctuary Dental Dam Punch are rust proof, highly corrosion resistant and has very high heat resistant. Therefore, it is safe for autoclaving.

Sanctuary Dental Dam Punch is rated highly among users as a reliable punch.

# Dental Dam Forceps



The Sanctuary Dental Dam Forceps are designed to allow for easy placement of any clamp size with infinite precision.

## Lightweight and Easy Gripping

Sanctuary Dental Dam Forceps are lightweight with easy gripping handle will promotes extra comfort and confidence during usage.

## Long Lasting on Repetitive Application

The Sanctuary Dental Dam Forceps are made from Stainless Steel 304. As such this forceps can withstand the repetitive stress in application and the sterilization / cleaning process involves sterilization substance. With the properties of Stainless Steel 304 material, Sanctuary Dental Dam Forceps can be cleaned easily and used for longer time.

## Safe for Autoclaving

Sanctuary Dental Dam Forceps are rust proof, highly corrosion resistant and has high heat resistant. Therefore, it is safe for autoclaving.

Sanctuary Dental Dam Forceps are rated highly among users.



# Dental Dam Clamps with Organizer

Sanctuary Dental Dam Clamps are developed with a “flexible but strong” concept. Engineered to this concept of application, we use a double vacuum-melted and martensitic age-hardenable alloy - the Stainless Steel Grade 465.

## Strong and Lasting Retention

Sanctuary Dental Dam Clamps allows a good retention of its original shape through repeated usage. The Stainless Steel Grade 465 has achieved tensile strength above 2000 MPa. As such, such material is most suitable for the retention property in the application of a dental dam clamp.

**Suitable for Sterilization** – Dental Dam Clamps are used in contact with human fluid such as blood and saliva over long period of time. As such, it is subject to very intensive sterilization process. Sanctuary Dental Dam Clamps are therefore engineered to accommodate these sterilization processes.

## Resistant to Stress-corrosion

Sanctuary Dental Dam Clamps are highly resistant to stress corrosion making the product performing its application longer.

## Safe for Autoclaving

Sanctuary Dental Dam Clamps are safe for autoclaving and resistant to surface oxidation in steam environment.

A new introduction into the market, Sanctuary's new dental dam clamp offers innovative characteristics and further facilitates the use of Sanctuary Dental Dam.

## Description

Sanctuary Dental Dam Clamp is a tool to hold down dental dam to the cervical region, away from the rest of the exposed teeth.

## Significant Points of Difference

1. It is designed in such a way that it does not press on any peripheral soft tissue during use.
2. The hole and furrow are shaped to allow dental dam to be easily removed by dental instruments.
3. Made of a hard and highly durable metal, it has a superior clamping force.



*Furrow structure for easy removal of dam (applied for a patent)*





Clamp No. 2




Clamp No. 2A




Clamp No. 207




Clamp No. 201

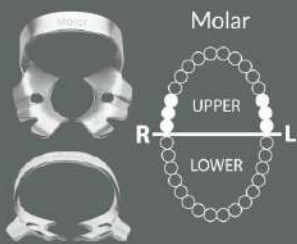

Clamp No. 202

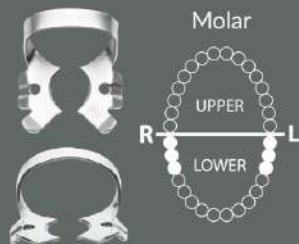


Clamp No. 210

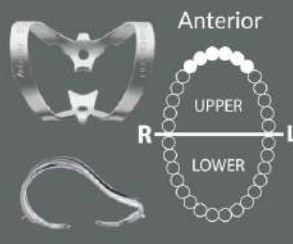


Clamp No. 203



Clamp No. 204

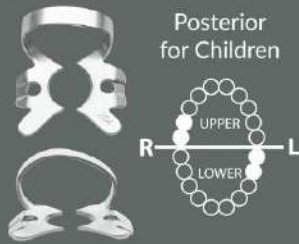

Clamp No. 211

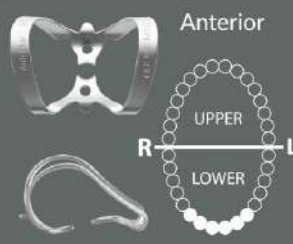

# Dental Dam Frames

Sanctuary Dental Dam Frames are developed to maintain the borders of the Sanctuary Dental Dam in position.

The Sanctuary Dental Dam Frames come with two sizes 105 mm and 129mm.

Sanctuary Dental Dam Frames are made from high grade Stainless Steel 304 which is high corrosion and high heat resistance.

## Kofferdamsysteme

Sanctuario ... der erste Kofferdam der Welt ohne Puder aus Naturlatex.

### Warum er so gut ist:

#### Innovativer Vorteil

Der Sanctuary Kofferdam ist speziell für hohe Belastbarkeit konzipiert, mit hoher Reißfestigkeit, für manche Leute sein, die negative und nachteilige Reaktionen aufweisen. Diese Reaktionen und Allergien werden signifikant reduziert indem man den Proteingehalt verringert und Puderrückstände der Naturgummiprodukte während der Herstellung eliminiert, womit die Produkte sicherer und für einen größeren Verbraucherkreis zugänglich werden.

#### Die Bedeutung der puderfreien und niedrigproteinhaltigen Eigenschaften

Die pflanzlichen Proteine im Naturgummi können eine Quelle der Irritation und der Allergien für manche Leute sein, die negative und nachteilige Reaktionen aufweisen. Diese Reaktionen und Allergien werden signifikant reduziert indem man den Proteingehalt verringert und Puderrückstände der Naturgummiprodukte während der Herstellung eliminiert, womit die Produkte sicherer und für einen größeren Verbraucherkreis zugänglich werden.

#### Sanctuary - Ein Puderfreies Nicht-Latex Gummi-Spanntuch

Sanctuario's Nicht-Latex Kofferdam besteht aus Polyisopren, einem Material, das Gummi sehr ähnlich ist. Es hat eine ähnliche Polymerstruktur und physikalische Eigenschaften wie Naturgummi, aber ohne die potentiellen Allergene des Latex-Proteins.

Als hochwertiges Produkt konzipiert und entwickelt, ist der Sanctuary Nicht-Latex Kofferdam sehr reißfest (eine Mindestdehnung von 10x des ursprünglichen Stanzlöches), sowie von großer Zugfestigkeit (mehr als 20MPa) und ein gutes Modul - Niveau (1.0MPa), was eine sehr wichtige Rolle in der praktischen und effizienten Anwendung des Kofferdam spielt.

#### Dehnbarkeit

Der Sanctuary latexfreier Kofferdam weist eine hohe Dehnbarkeit mit einer guten Reißfestigkeit auf.

#### Sanctuary Pulverfreier Schwarzer Latex Kofferdam

Konzipiert und entwickelt für optimale fotografische Resultate, ein klares und unverwechselbares Fotoergebnis bietend, was für den Zahnarzt ausschlaggebend und wichtig ist, um eine eindeutige Analyse des Zahnes während der Behandlung anstellen zu können. Sanctuary Schwarzer Latex Kofferdam ist eine grossartige Alternative für die zahnärztliche Fotografie im Vergleich zu herkömmlichen farbigen Kofferdamsystemen.

#### Vorteile:

- Pulverfrei • Eiweissarm • Grössere visuelle Klarheit • Eindeutiges Operationsfeld
- Wirksame Barriere für die Infektionseindämmung • Hohe Verschleissstoleranz

Konzipiert, um eine ultimative Kontrastfarbe zu erzielen sowie eine bessere Sicht auf den Zahn oder die Zähne während der Behandlung und Dentalfotografie zu ermöglichen.

#### Sanctuary Pulverfreier Seidenblauer Latex Kofferdam

Speziell entwickelt zur Reduktion der Ermüdung der Augen, ausgelöst durch die Lichtspiegelung während der Behandlung sowie der lange andauernden Konzentration.

Die sanfte blaue Farbe sorgt für Augenkomfort und unterstützt während der Behandlung die Aufrechterhaltung eines guten Sehvermögens.

#### Vorteile:

- Pulverfrei • Eiweissarm • Grössere visuelle Klarheit • Eindeutiges Operationsfeld
- Hohe Verschleissstoleranz

Sanctuary seidenblauer Kofferdam wurde auch für ein optimales fotografisches Ergebnis entwickelt, ein grosser Pluspunkt für den Zahnarzt, um eine bessere und eindeutige Analyse über den jeweiligen Zahn anstellen zu können.

#### Die Sanctuary Dental Dam Lochzange

**Qualitativ hochwertige Lochungen** - Jedes Mal - Der Schlüssel zu einer perfekten Lochung in dem höchst reißfesten Sanctuary Dental Dam ist die gehärtete Kante der Lochzange. Bei Sanctuary wird der rostfreie Edelstahl Typ 304 durch einen speziellen Härtungsprozess noch weiter erhärtet. **Langlebig - auch bei häufiger Benutzung** - Die Sanctuary Dental Dam Lochzange wurde entwickelt, um der wiederholten Belastung bei dem Lochungsvorgang und dem Sterilisierungs-/Reinigungsprozess (mit sterilisierenden Substanzen) zu widerstehen.

**Geeignet für das Autoklavieren** - Die Sanctuary Dental Dam Lochzange ist rostfrei, höchst korrosionsbeständig und hitzebeständig. Daher ist sie geeignet für das Autoklavieren.

#### Sanctuary Dental Dam Klammerzangen

**Leicht und einfach zu greifen** - Sanctuary Dental Dam Klammerzangen sind leicht und einfach zu greifen, was zu erhöhtem Komfort und Sicherheit im Gebrauch führt.

**Langlebig - auch bei häufiger Benutzung** - Die Sanctuary Dental Dam Zange besteht aus Edelstahl Typ 304. Daher ist sie sehr gut geeignet, um der wiederholten Belastung bei der Benutzung und dem Sterilisierungs-/Reinigungsprozess (mit sterilisierenden Substanzen) zu widerstehen. Dank der Eigenschaften des Edelstahl Typ 304 sind Sanctuary Dental Dam Zangen leicht zu reinigen und können für lange Zeit genutzt werden.

**Autoklavierbar** - Die Sanctuary Dental Dam Zange ist rostfrei, höchst korrosionsbeständig und hitzebeständig. Daher ist sie geeignet für das Autoklavieren.

#### Die Sanctuary Dental Dam Klammern

**Gute und dauerhafte Beibehaltung der Form** - Die Sanctuary Dental Dam Klammern gewähren eine gute Rückbildung zur Ausgangsform auch bei häufiger Nutzung. Der Edelstahl Typ 465 weist einen Bruchwiderstand von über 2000 mPa auf, was ihn zum am besten geeigneten Material für die gewünschten Eigenschaften in der Anwendung als Dental Dam Klammer macht.

**Geeignet zum Sterilisieren** - Dental Dam Klammern kommen bei ihrer Nutzung über lange Zeiträume in den Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Blut und Speichel. Daher ist eine sehr gründliche Sterilisation nötig. Sanctuary Dental Dams Klammern wurden entwickelt um den Beanspruchungen während des Sterilisationsprozesses zu widerstehen.

**Widerstandsfähig gegen belastungsbedingte Korrosion** - Sanctuary Dental Dam Klammern sind höchst widerstandsfähig gegen belastungsbedingte Korrosion, was eine längere Nutzung möglich macht.

**Geeignet für das Autoklavieren** - Sanctuary Dental Dam Klammern sind geeignet für das Autoklavieren und resistent gegen Oberflächenoxidation in wasserdampfhaltiger Umgebung.

**Beschreibung** - Bei den Sanctuary Rubber Dam Klammern handelt es sich um ein Werkzeug, das das Latex an der gewünschten Stelle befestigt und vom Rest der freiliegenden Zähne fern hält.

#### Wichtige Unterscheidungspunkte

1. Die Klammern wurden so entwickelt, dass sie auf kein umgebendes weiches Gewebe drücken.
2. Die spezielle Formung ist so gewählt, dass das Rubber Dam einfach mit Dentalinstrumenten entfernt werden kann.
3. Das harte und höchst langlebige Metall der Klammern führt zu einer ausgezeichneten Klammerkraft.

#### Sanctuary Dental Dam Rahmen

Sanctuary Dental Dam Rahmen wurden entwickelt, um die Ränder der Dental Dams zu fixieren. Die Sanctuary Dental Dam Rahmen sind in den Größen 105 mm und 129 mm erhältlich.

Sanctuary Dental Dam Rahmen werden aus dem Edelstahl Typ 304 hergestellt, der eine große Korrosions- und Hitzebeständigkeit aufweist.

## Systeme von Presa Dental

Sanctuario ... es el primer protector bucal libre de polvo de látex de caucho natural, en el mundo.

### Por qué es tan bueno?:

#### Ventaja de vanguardia

El protector dental Sanctuario está especialmente diseñado para ser resistente, tiene una alta tolerancia al estiramiento, que permite una fácil fijación de las abrazaderas. Esta es el primer protector bucal libre de polvo de látex de caucho natural en el mundo y bajo en contenido de proteínas, por lo que es una excelente opción para uso profesional.

#### La importancia de que sea sin polvo y bajo en proteínas

Las proteínas vegetales que contiene el látex natural son fuente de irritación y alergia en algunas personas, provocando reacciones negativas y adversas. Estas reacciones y alergias se reducen significativamente y drásticamente mediante la reducción de los niveles de proteína y eliminando los residuos de polvo de caucho natural durante el proceso de producción, haciendo dichos productos más seguros y más accesibles.

#### Protector libre de polvo sin látex de caucho Sanctuario

El protector bucal Sanctuario está hecho de polisopreno, un material que se asemeja mucho al caucho. Tiene una estructura de polímero y propiedades físicas similares a las del caucho natural, pero sin el potencial alergénico de la proteína del látex.

Diseñado y desarrollado como un producto superior, el protector dental sin látex Sanctuario, ofrece una alta tolerancia al desgarro (una expansión mínima de 10 veces a partir del agujero de perforación original), una gran resistencia a la tracción (por encima de 20 MPa) y un buen nivel de modular (1.0MPa), todos los cuales son cruciales en la aplicación práctica y eficiente en la protección bucal.

#### Elasticidad

Los diques de goma sin latex de Sanctuario están diseñados para alcanzar un alto nivel de elasticidad en conjunto con la buena tolerancia a la rotura.

#### La Presa Dental Sanctuario Black Latex

Formulada y diseñada para obtener resultados fotográficos óptimos. Tener una imagen clara y distintiva del resultado fotográfico es de vital importancia y necesario para que el dentista realice los estudios del diente durante los procedimientos.

La presa dental negra de látex Sanctuario es la mejor alternativa para tomar fotografías dentales en comparación con las protecciones de colores convencionales.

#### Beneficios:

- Libre de polvo • Bajo en proteínas • Mayor claridad visual • Claridad de campo operativo
- Barrera efectiva para el control de infecciones • Alta tolerancia al rasgado

Diseñada para proporcionar un mejor color de contraste y así permitir visualización mucho más clara de los dientes durante los procedimientos y la fotografía dental.

#### La Presa Dental Sanctuario Silk Blue

Especialmente desarrollada para reducir la fatiga ocular por el reflejo de la iluminación durante el procedimiento y las largas horas de concentración.

El suave color es agradable a los ojos y ayuda a mantener una mejor visión durante el procedimiento.

#### Beneficios:

- Libre de polvo • Bajo en proteínas • Mejor confort de vision • Claridad de campo operativo
- Alta tolerancia al rasgado

La presa dental de látex seda azul Sanctuario está también diseñada para obtener un mejor resultado fotográfico, que es una gran ventaja para el dentista resultando en un estudio mejor y más claro del diente en particular.

#### Perforador de Dique dental de goma Sanctuario

**Perforación de Calidad Constante** - La clave para una perforación perfecta en el dique dental de goma Sanctuario de alta tolerancia es el borde afiado endurecido del perforador. En Sanctuario, el acero inoxidable de grado 304 se somete a un proceso especial de "endurecimiento por trabajo" con el fin de endurecer aún más el grado 304.

**Uso repetitivo de larga duración** - El perforador de dique dental de goma Sanctuario está diseñado para soportar el estrés por uso repetitivo en cada perforación y el proceso de esterilización / limpieza que implica sustancias de esterilización.

**Seguro para autoclave** - El perforador de dique dental de goma Sanctuario está hecho a prueba de oxidación, es altamente resistente a la corrosión y tiene una muy alta resistencia al calor. Por lo tanto, es seguro para el tratamiento en autoclave.

#### Sanctuario Dental Presa Fórceps

**Ligero y fácil de sujetar** - El fórceps para dique dental de goma Sanctuario es de peso ligero, tiene un mango de fácil agarre y proporciona comodidad y confianza adicional durante su uso.

**Aplicación repetitiva de larga duración** - El fórceps para dique dental de goma Sanctuario está hecho de acero inoxidable 304. Por tanto, este fórceps puede soportar estrés constante durante su uso y esterilización / proceso de limpieza que implica el uso de sustancias de esterilización. Gracias a las propiedades del material de acero inoxidable 304, el fórceps para dique dental de goma Sanctuario se puede limpiar fácilmente y se puede utilizar durante más tiempo.

**Seguro para autoclave** - El fórceps para dique dental de goma Sanctuario es a prueba de óxido, altamente resistente a la corrosión y tiene una alta resistencia al calor. Por lo tanto, es seguro para el tratamiento en autoclave.

#### Abrazaderas para Dique dental de goma Sanctuario

**Retención fuerte y duradera** - Las abrazaderas para dique dental de goma Sanctuario conservan su forma original aun con el uso repetido. Con el acero inoxidable de grado 465 se logra una resistencia a la tracción superior a 2000 mPa. Así, este material es el más adecuado para mantener la propiedad de retención en el uso de una abrazadera para dique dental de goma.

**Adecuado para esterilización** - Cuando se utilizan las abrazaderas para dique dental de goma entran en contacto con fluidos humanos como la sangre y la saliva durante largos períodos de tiempo. En consecuencia, están sujetas a procesos muy intensos de esterilización. Por tanto, las abrazaderas para dique dental de goma Sanctuario están diseñadas para resistir los procesos de esterilización.

**Resistente a la corrosión por desgaste** - Las abrazaderas para dique dental de goma son altamente resistentes a la corrosión por desgaste, lo que hace que el producto tenga un periodo de desempeño más largo.

**Seguro para autoclave** - Las abrazaderas para dique dental de goma Sanctuario son seguras para la esterilización en autoclave y su superficie es resistente a la oxidación aún en un entorno con vapor.

**Descripción** - La abrazadera para dique dental de goma Sanctuario es una herramienta para mantener el dique dental de goma en la región cervical, aislada del resto de los dientes expuestos.

#### Puntos importantes de diferencia

1. Está diseñada de tal manera que no presiona ningún tejido blando periférico durante su uso.
2. El agujero y surco están diseñados de tal manera que permiten que el dique de goma se retire fácilmente con los instrumentos dentales.
3. Está hecho de un metal duro y muy resistente y tiene una fuerza de cierre superior.

#### Marcos para Dique dental de goma Sanctuario

Los marcos para dique dental de goma Sanctuario están desarrollados para mantener los bordes del dique dental de goma Sanctuario en su posición.

Los marcos para dique dental de goma Sanctuario vienen en dos tamaños, de 105 mm y 129 mm. Los marcos para dique dental de goma Sanctuario están hechos de acero inoxidable 304 de alto grado, que es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas.



## Sistemi de la digue dentaire

Sanctuary... La première digue dentaire en latex de caoutchouc naturel sans poudre au monde. Pourquoi est-ce si bien ?

### Avantage d'avant-garde

La digue dentaire Sanctuary est spécialement conçue pour être élastique, avec une résistance élevée au déchirement afin de faciliter la fixation des crampons.

C'est la première digue dentaire en latex qui est sans poudre et faible en protéines, ce qui fait d'elle un excellent choix pour un usage professionnel.

### L'importance d'être sans poudre et faible en protéines

Les protéines végétales présentes dans le caoutchouc naturel sont une source d'irritation et d'allergie pour certaines personnes, provoquant des réactions néfastes et incommodes. Ces réactions et allergies sont considérablement et radicalement réduites en diminuant la teneur en protéines et en éliminant les résidus de poudre des produits en caoutchouc naturel lors de la production, rendant ainsi ces produits plus sûrs et plus accessibles.

### La digue Sanctuary sans poudre et sans latex de caoutchouc

La digue dentaire sans latex est faite à partir de Polyisoprène, une matière qui ressemble étroitement au caoutchouc. Elle a une structure de polymères et des propriétés physiques similaires au caoutchouc naturel sans les allergènes potentiels des protéines du latex.

Conçu et développé comme un produit de qualité, la digue dentaire Sanctuary sans latex de caoutchouc offre une résistance élevée au déchirement (une capacité minimale d'expansion de 10 fois à partir du trou de poinçon original), une force de traction ultime remarquable (plus de 20MPa) et un bon niveau d'élasticité (1,0MPa), tout ceci étant essentiel pour une application efficace et pratique de la digue dentaire.

### Souplesse

La digue dentaire Sanctuary sans latex est fabriquée avec un degré de souplesse maximum afin de mieux résister aux tensions.

### La digue dentaire Sanctuary Black Latex

Formulé et conçu pour des résultats photographiques optimaux, il est essentiel et indispensable pour le dentiste d'avoir des résultats photographiques clairs et distinctifs et pouvoir effectuer des études efficaces de la dent pendant les procédures.

Digue dentaire noir au latex Sanctuary est une excellente alternative pour la photographie dentaire par rapport aux digues dentaires colorées conventionnelles.

#### Avantages :

- Sans poudre • Faible teneur en protéines • Meilleure d'art visuelle
- Champ opératoire plus Claire • Barrière efficace pour le contrôle des infections
- Tolérance élevée à la déchirure

Conçu pour fournir une meilleure couleur de contraste en permettant au dentiste une vision plus claire de la dent ou des dents pendant les procédures et la photographie dentaire.

### La digue dentaire Sanctuary Silk Blue

Développé spécialement pour aider à réduire la fatigue oculaire due à la réflexion de l'éclairage pendant la procédure et les longues heures de concentration. La couleur bleue douce donne un confort aux yeux et aide à maintenir une meilleure vision pendant la procédure.

#### Avantages :

- Sans poudre • Faible teneur en protéines • Meilleur confort de vision
- Clarté de champ opératoire • Tolérance élevée à la déchirure

Digue dentaire au latex en bleu sole Sanctuary est également conçu pour un meilleur résultat photographique, ce qui est un avantage considérable pour le dentiste qui souhaite une étude plus précise et plus claire de la dent en question.

### Les pinces à digue dentaire Sanctuary

**Un poinçon de qualité à chaque utilisation** - La clé pour un poinçon parfait sur digue dentaire Sanctuary avec résistance élevée est un bord coupant trempé sur la pince. Chez Sanctuary, l'acier inoxydable de grade 304 est installé par un processus «décroissance» spécial dans le but de durcir le grade 304 encore un peu plus.

**Durable dans le cadre d'une application répétitive** - La pince à digue dentaire Sanctuary est conçue pour résister à la tension répétée de l'application lors de chaque poinçon et le processus de nettoyage/stérilisation qui implique des substances spécifiques à la stérilisation.

**Sans risque pour la stérilisation en autoclave** - La pince à digue dentaire Sanctuary est antirouille, résiste hautement à la corrosion et aux hautes températures. Par conséquent, elle est sans danger pour une stérilisation en autoclave.

### Les daviers à digue dentaire Sanctuary

**Poids léger et forme ergonomique** - Le davier à digue dentaire Sanctuary est léger en poids avec des poignets ergonomiques qui favoriseront un confort et une confiance supplémentaires lors de l'utilisation.

**Durable dans le cadre d'une application répétitive** - Le davier à digue dentaire Sanctuary est fait d'acier inoxydable 304. Ainsi, ce davier peut supporter la tension répétitive lors de l'application et le procédé de stérilisation/nettoyage qui implique des substances spécifiques à la stérilisation. Grâce aux propriétés du matériau Acier inoxydable 304, le davier à digue dentaire Sanctuary peut être facilement nettoyé et utilisé pour plus longtemps.

**Sans risque pour la stérilisation en autoclave** - Le davier à digue dentaire Sanctuary est antirouille, résiste hautement à la corrosion et aux hautes températures. Par conséquent, il est sans danger pour une stérilisation en autoclave.

### Les crampons à digue dentaire Sanctuary

**Un maintien solide et durable** - Les crampons à digue dentaire Sanctuary permettent un bon maintien de la forme originale lors des utilisations répétées. L'acier inoxydable de grade 465 a atteint une résistance à la traction supérieure à 2000 mPa. Ainsi, un tel matériau est très approprié pour sa propriété de maintien dans l'application de crampon à digue dentaire.

**Compatible avec la stérilisation** - Les crampons à digue dentaire sont utilisés en contact avec les fluides humains tels que le sang et la salive durant de longue période. De ce fait, ils sont soumis à un procédé de stérilisation intensif. Les crampons à digue dentaire Sanctuary sont donc conçus pour recevoir ce procédé de stérilisation.

**La résistance à la corrosion sous tension** - Les crampons à digue dentaire Sanctuary sont hautement résistants à la corrosion sous tension ce qui permet au produit d'accomplir sa fonction plus longtemps.

**Sans risque pour la stérilisation en autoclave** - Les crampons à digue dentaire Sanctuary sont sans danger pour la stérilisation en autoclave et résistent à l'oxydation de leur surface dans un environnement de vapeur d'eau.

**Description** - Le crampon pour digue en caoutchouc Sanctuary est un instrument qui permet de retenir la digue en caoutchouc vers la région cervicale, loin des autres dents exposées.

#### Éléments de différence importants

1. Il est conçu de telle manière qu'il n'appuie pas sur les tissus mous périphériques pendant l'utilisation.
2. Le trou et le sillon sont formés pour permettre la digue en caoutchouc d'être enlevée facilement avec les instruments dentaires.
3. Fabriqué avec un métal dur et hautement durable, il a une force de clamping supérieure.

### Les cadres à digue dentaire Sanctuary

Les cadres à digue dentaire Sanctuary sont développés pour maintenir les bords de la digue dentaire Sanctuary en position.

Deux dimensions sont disponibles pour les cadres à digue dentaire Sanctuary : 105 mm et 129mm. Les cadres à digue dentaire Sanctuary sont fabriqués à partir d'un acier inoxydable de qualité supérieure grade 304, hautement résistants à la corrosion et aux hautes températures.

## Sistemi di Diga Dentale

Sanctuary... la prima digue dentale au monde en lattice de gomme naturelle sans talco. Perché e' così valida?

### Vantaggi d'avanguardia

La Diga Dentale della Sanctuary e' stata specificatamente progettata per essere resistente, con una elevata tolleranza agli strappi per permette la facile installazione delle grappe. E' la prima digue dentale in lattice al mondo senza talco e a basso contenuto proteico, che la rende la scelta migliore per l'uso professionale.

### L'importanza di essere senza talco ed a basso contenuto proteico

Le proteine della pianta presenti nella gomma naturale sono fonte di irritazioni ed allergie per alcune persone, causa di reazioni negative ed effetti collaterali. Queste reazioni ed allergie vengono ridotte sensibilmente e drasticamente abbassando il livello delle proteine ed eliminando i residui di talco dei prodotti in gomma naturale durante la produzione, il tutto per mantenere tali prodotti piu' sicuri ed accessibili.

### Digue Dentali Sanctuary senza talco e non in gomma di lattice

Le dighe dentali non in lattice della Sanctuary sono prodotte da Polyisoprène, un materiale che assomiglia molto da vicino alla gomma. Ha una struttura polimerica e proprieta' fisiche simili a quelle della gomma tolte le potenzialita' allegiche delle proteine del lattice.

Progettata e sviluppata come prodotto di alta qualita', la Diga Dentale non in lattice della Sanctuary offre un elevate tolleranza agli strappi (una estensione minima di 10 volte dalla perforazione originale) massima forza di tensione (superiore ai 20MPa) ed un buon livello di elasticita' (1,0MPa), tutto cio' essendo essenziale per una pratica ed efficace applicazione della digue dentale.

### Tensione

La digue dentale senza lattice di Sanctuary è stata concepita per resistere a forti tensioni.

### Diga dentale Sanctuary Black Latex

Formulata e progettata per ottenere risultati fotografici ottimali, avere un risultato fotografico chiaro e preciso è fondamentale e necessario per il dentista che voglia effettuare valutazioni efficaci del dente durante le procedure.

La digue dentale nera in lattice Sanctuary è un'ottima alternativa per la fotografia dentale rispetto alle tradizionali dighe dentali colorate.

#### Benefici:

- Senza polvere • Basso contenuto di protein • Maggiore chiarezza visive
- Campo operatorio chiaro • Barriera efficace per il controllo delle infezioni
- Alta tolleranza allo strappo

Progettata per fornire il massimo contrasto cromatico e consentire una visione più chiara del dente o dei denti durante le procedure e la fotografia dentale.

### Diga dentale Sanctuary Silk Blue

Sviluppata appositamente per aiutare a ridurre l'affaticamento dell'occhio dovuto al riflesso dell'illuminazione di procedura e a lunghe ore di concentrazione.

Il colore blu tenue offre comfort agli occhi e aiuta a mantenere una migliore visione durante la procedura.

#### Benefici:

- Senza polvere • Basso contenuto di protein • Migliore comfort di vision
- Campo operatorio chiaro • Alta tolleranza allo strappo

La digue dentale blu in seta è anche progettata per un risultato fotografico ottimale; un grande vantaggio per il dentista che desidera una valutazione migliore e più chiara del singolo dente.

### Sanctuary Perforatore Diga Dentale

**Perforazioni di qualità in ogni momento** - La chiave per una perforazione perfetta sulle Dighe Dentali della Sanctuary ad alta resistenza allo strappo è un bordo tagliente rinforzato nel perforatore. Alla Sanctuary, l'Acciaio Inossidabile di grado 304 viene lavorato attraverso un processo di "indurimento" così da rinforzare ulteriormente il grado 304.

**Durevole per applicazioni ripetute** - Il Perforatore di Diga Dentale della Sanctuary è progettato per lo stress da ripetute applicazioni durante ogni perforazione ed il processo di sterilizzazione/pulizia che coinvolge sostanze sterilizzanti.

**Sicuro per sterilizzazione in autoclave** - I Perforatori di Diga Dentale della Sanctuary Dental sono a prova di ruggine, resistenti agli alti livelli di corrosione ed hanno una elevata resistenza al calore. Di conseguenza, sono sicuri per la sterilizzazione in autoclave.

### Sanctuary Forcipe per Diga Dentale

**Leggero e di Presa Facile** - Il Forcipe per Diga Dentale della Sanctuary è leggero con una impugnatura a presa facile che garantisce una maggiore comodità e maneggevolezza durante l'utilizzo.

**Di lunga durata nelle applicazioni ripetute** - Il Forcipe per Diga Dentale della è prodotto in Acciaio Inossidabile 304. Per questo motivo questo forcipe può sostenere sforzi ripetuti nell'applicazione e nei processi di sterilizzazione/ pulizia che comportano l'utilizzo di sostanze sterilizzanti. Con le proprietà dell'Acciaio Inossidabile 304, il Forcipe per Diga Dentale della Sanctuary può essere pulito facilmente ed utilizzato più a lungo.

**Sicuro per sterilizzazione in autoclave** - Il Forcipe per Diga Dentale della Sanctuary è a prova di ruggine, altamente resistente alla corrosione e altamente resistente alle temperature elevate. Di conseguenza, è sicuro per la sterilizzazione in autoclave.

### Sanctuary Morsetti per Diga Dentale

**Conservazione forte e duratura** - I Morsetti per Diga Dentale della permettono un buon mantenimento della loro forma originale attraverso l'utilizzo ripetuto. L'Acciaio Inossidabile di Grado 465 ha ottenuto una forza di trazione superiore ai 2000 mPa. Per questo motivo, tale materiale è il più adeguato nelle applicazioni dei morsetti per digue dentale grazie alle sue proprietà di conservazione.

**Adatto alla sterilizzazione** - I Morsetti per Diga Dentale vengono utilizzati a contatto di fluidi umani come il sangue e la saliva per lunghi periodi di tempo. Per questo motivo, sono soggetti a processi di sterilizzazione molto intensi. I Morsetti per Diga Dentale della Sanctuary sono di conseguenza progettati per permettere tali processi di sterilizzazione.

**Resistente alla Tensocorrosione** - I Morsetti per Diga Dentale della Sanctuary sono altamente resistenti alla tensocorrosione permettendo al prodotto di eseguire le proprie applicazioni più a lungo.

**Sicuro per sterilizzazione in autoclave** - I Morsetti per Diga Dentale della Sanctuary sono sicuri per la sterilizzazione in autoclave e resistenti all'ossidazione della superficie in ambienti con vapore.

**Descrizione** - Il Morsetto per Diga Dentale in Gomma della Sanctuary è uno strumento per trattenere la digue in gomma nella regione cervicale, lontano dal resto dei denti esposti.

#### Significativi Punti di Differenza

1. È disegnata in modo da non premere su alcun tessuto molle periferico durante l'utilizzo.
2. Il buco ed il solco sono modellati per permettere alla digue di gomma di essere facilmente rimossa dagli strumenti del dentista.
3. Prodotto con metallo resistente ed altamente durevole, possiede una maggiore forza di stringimento.

### Sanctuary Cornice per Diga Dentale

La Cornice per Diga Dentale della Sanctuary è stato sviluppato per mantenere i bordi della Diga Dentale della Sanctuary in posizione.

La Cornice per Diga Dentale della Sanctuary è prodotta in due misure: 105 mm e 129mm.

La Cornice per Diga Dentale della Sanctuary è prodotta con Acciaio Inossidabile 304 ad alto grado che è estremamente resistente alla corrosione ed alle temperature elevate.



Manufactured by:

**Sanctuary Health Sdn Bhd**

No. 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1,  
Kawasan Perindustrian Kanthan,  
31200 Chemor, Perak, Malaysia.

Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7800

Email: [info@sanctuaryhealth.com.my](mailto:info@sanctuaryhealth.com.my)

[www.sanctuary-dental.com](http://www.sanctuary-dental.com)

Corporate Office Address:

**Sanctuary Health Sdn Bhd**

6B, 2nd Floor, Persiaran Greentown 4,  
Greentown Avenue,  
30250 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tel: +605-255 3939 Fax: +605-255 9339

Email: [info@sanctuaryhealth.com.my](mailto:info@sanctuaryhealth.com.my)



**1** in  
Powder  
Free



EC

REP

**Wellkang Ltd**  
Suite B, 29 Harley Street,  
LONDON, W1G 9QR, U.K.  
[www.CE-Marking.EU](http://www.CE-Marking.EU)