



Molift Raiser Pro

Ergonomisch platform voor veilige en actieve sta-op transfer

 **etac**[®]



Molift Raiser Pro

De Molift Raiser Pro zorgt voor een eenvoudige, pro-actieve en veilige transfer van de cliënt en verlicht het werk van de verzorgers.

Natuurlijk bewegingspatroon

De Molift Raiser Pro geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen spierkracht te gebruiken tijdens de transfer. Het natuurlijke bewegingspatroon wordt gestimuleerd en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.

Transfer in kleine ruimte

De Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is, ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro zorgt voor een veilige en actieve steun tijdens een korte transfer.

Geschikt voor alle zorginstellingen

De Molift Raiser Pro helpt bij het revalideren van cliënten in een zorginstelling of tijdens een transfer. De cliënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Molift Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning.



Accessoires Molift Raiser Pro



Handgreep-lussen



Sling



Sling met glijstuk



Belt

Omschrijving

Omschrijving		Artikelnr.
Molift Raiser Pro		E16090204
Molift Handgreep-lussen	2 stuks	E82511
Molift Sling	Maat S/M	E82508
Molift Sling	Maat L/XL	E82509
Molift Sling met glijstuk	Maat S/M	E82528 (E82508 + E82537)
Molift Sling met glijstuk	Maat L/XL	E82529 (E82509 + E82537)
Molift Raiser Belt	Maat S/M	E82964 (E82508 + E82963)
Molift Raiser Belt	Maat L/XL	E82965 (E82509 + E82963)

Gewicht

Totaal gewicht	10.7 kg (Basisplaat 5,4 kg, handgreep 5,3 kg)
Maximaal gebruikersgewicht	170 kg

Afmetingen

Hoogte x Diepte x Breedte	1200 x 630 x 540 mm
---------------------------	---------------------

Materiaal

Gepoedercoat aluminium, plastic, staal, chrome

Wasinstructie Molift Raiser Pro



Reinig met een zachte doek en een standaard schoonmaakmiddel zonder oplosmiddel-en. Zo nodig met 70% alcohol desinfecteren. Kan ontsmet worden op maximaal 70°C gedurende 10 minuten.

Wasinstructie Accessoires



Machinewas op 80°C. Lag temperatuur, max. 50°C, in de droger.

Kenmerken

Elk kleine detail van de Molift Raiser Pro biedt voordelen voor zowel de cliënt als de verzorger.




Ergonomische greep

De zachte handgreep biedt een optimale, comfortabele en veelzijdige grip.



Bevestigingspunten

Maakt het eenvoudig om accessoires te bevestigen aan de zijkant van de handgreep

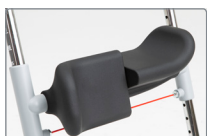

Comfortabele kniesteun

Zachte kniesteun die de beweging volgt van zitten naar staan.



Eénhandige bediending

De zachte kniesteun is eenvoudig met één hand te verstellen

Gebogen zijde

De basisplaat heeft een gebogen zijde zodat de cliënt eenvoudig dicht bij het toilet kan komen.



Centrale rem

Vengrendel de rem eenvoudig, zowel links als recht met één voet, veilig en functioneel



Lage instap

De lage basisplaat van slechts 3,5 cm vergemakkelijkt een eenvoudige instap.

Totale breedte - 540mm

Geschikt voor kleine ruimtes met een totale breedte van 540mm





“Onze Etac R82 hulpmiddelen bieden maximale vrijheid en beweging voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking”

Kijk voor meer informatie op [Etac.com/nl](https://www.etac.com/nl)

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: info.holland@R82.com
W: [Etac.com/nl](https://www.etac.com/nl)

 **etac** | **R82** 