



DERMA LEVEL 345

PROFESSZIONÁLIS
MTS KEZELÉS KOZMETIKUSOKNAK

MIT JELENT AZ MTS KEZELÉS?

A kollagén indukciós terápia (MTS) egy minimálisan invazív eljárás.

A mikrotűs kezelésekkel hatóanyagot juttatunk a bőrbe, a mikrotűk hatására mikroszkopikus sebek alakulnak a bőr felszínén ami arra készteti a szervezetet, hogy a gyógyító reakció beinduljon vagyis a szervezet elkezd a kollagén- és elasztin termelést. Hatására a bőr frissebb, fiatalosabb és simább lesz.

A **DERMATHOD** koreai professzionális márka megalkotta a több szabadalommal védett **multi effektor Derma Level 345 MTS ampullát, amely FDA minősített orvosi akril tűkkel integrált.**

INDIKÁCIÓK

a kezelés jótékony hatásai:

- hatására fokozódik a bőr kollagén és elasztin termelése
- hatására megfelelő mélységben jutnak be az alkalmazott hatóanyagok
- nem okoz fájdalmat
- természetes folyamatokat indít be a szervezetben
- az aknék-, a hegek finomodnak
- a pórusok összehúzódnak
- a finom ráncok eltűnnek, a mélyebb ráncok finomodnak
- biztonságos és hatékony

KONTRAINDIKÁCIÓK

a kezelés ellenjavallatai:

- Akne-, herpesz-, ekcéma
- Rosacea, extra érzékeny bőr esetén
- Keloid, Atrófia hajlam
- Roaccutan vagy más hasonló akne gyógyszer szedése alatt és után 6-12 hónapig
- Botox kezelést követően 6 héten belül
- Ránctöltés után 1 hónapig, arcplasztika után 1 év
- Pacemaker
- Terhesség, szoptatás ideje alatt
- Daganatos betegség, kemoterápia alatt
- Autoimmun betegség esetén
- Cukrobetegség esetén
- Vérzékenység esetén
- Kezeletlen magas vérnyomás esetén
- pikkelysömör, ekcéma,
- gyulladáscsökkentő, antibiotikum szedése 1 héten belül

A BŐR RÉTEGEI, VASTAGSÁG

A bőr anatómiája, szerkezete

Bőrünk nem mindenhol ugyanolyan: vastagsága, felszíne és szerkezete sem állandó, hanem a test felépítése és a testtájak alapján változó 1-5 mm között van.

A BŐR RÉTEGEI

EPIDERMIS

A bőr legfelső rétege a felhám.

Az epidermisz átlagosan körülbelül 0,1 mm vastag, de a szem tájékán ez az érték még jóval kisebb.

IRHA


A középső réteg az irha, vagyis a dermisz.

Az irha vastagsága átlagosan 3 mm.

BŐRALJA


A legalsó réteg a bőralja, vagyis a hipodermisz/subcutis.

Ez a réteg főleg zsírokat, kollagén rostokat, vérereket tartalmaz.

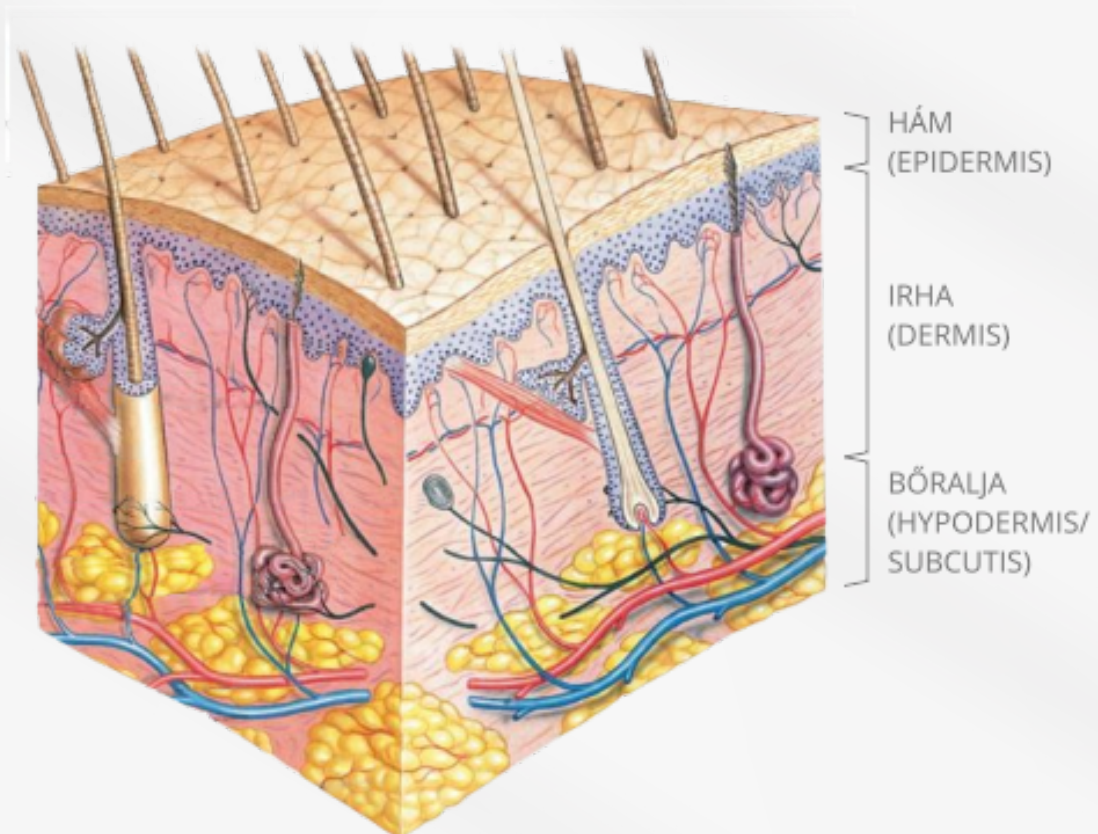

A BŐR RÉTEGEK, TŰ VÁLASZTÁS


A mikrotűs kezelésnél különböző mélységű tűhosszal tudunk dolgozni attól függően, hogy az arc melyik részén dolgozunk.

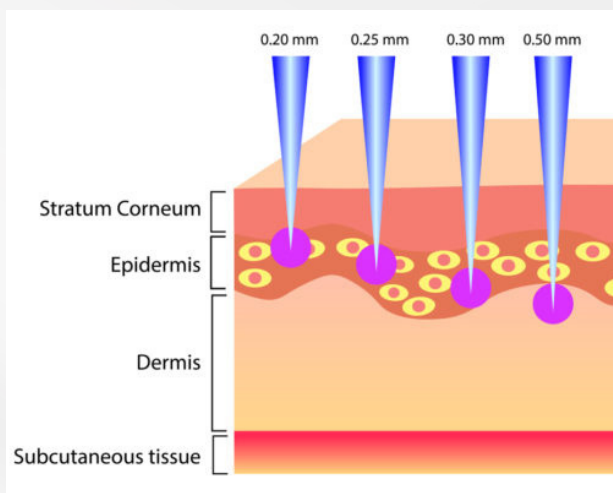

A kozmetikusok által használt MTS gépeknél a biztonságos tűhosszúság legfeljebb 1,0 mm lehet, míg az orvosok akár 2,2 mm-ig használhatják azokat.

A **DERMATHOD hatóanyag ampullás MTS** rendszerének maximális mélysége 0.50mm tehát kozmetikus biztonsággal használhatja a kezeléseiben.

A BŐR RÉTEGEK, TŰ VÁLASZTÁS

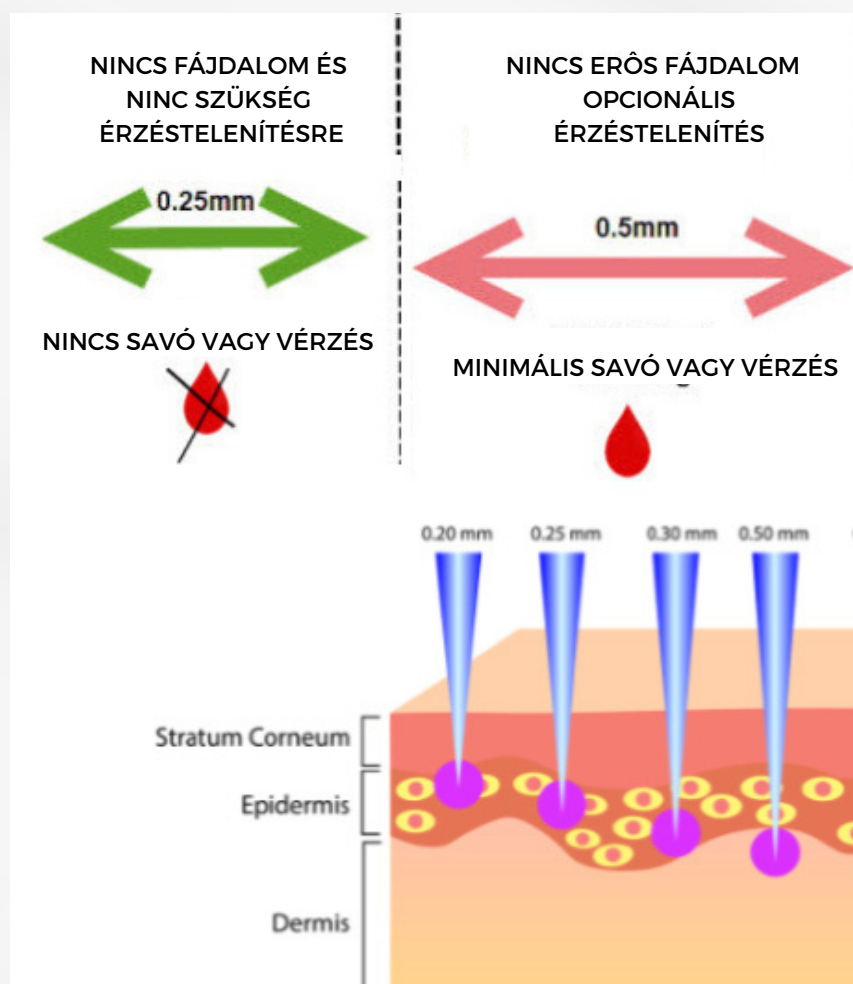

A mikrotűs kezeléseknél különböző mélységben dolgozunk. A tű bőrbehatolási mélysége, testrészenként, bőrtípusonként változó. Egy kezelésen belül is változtatjuk a mélységet, hiszen a szem érzékeny területét kisebb mélységű tűhosszal is hatékonyan kezelhetjük úgy, hogy nem okozunk fájdalmat a vendégnek.

A tű hosszától függően változhat a reakció is. 0,50mm mélység fölött már előfordulhat savó vagy vérzés.

A BŐR RÉTEGEK, TŰ VÁLASZTÁS

A DERMATHOD mikrotűs kezeléseknél különböző mélységben állíthatjuk a tűket attól függően, hogy milyen bőrproblémát kezelünk. A tű bőrbehatolási mélysége, testrészenként és bőrtípusonként változó. A DERMA LEVEL 345 ampullák lehetővé teszik, hogy egy kezelésen belül is változtatni tudjuk a mélységet.



KEZELÉS LÉPÉSEI:

Előkészítés:

Tisztítsuk le a bőrt az általunk használt sminkle mosóval. (Mi ajánljuk a KRX sminkle mosó balzsamot, majd utána a Gentle Enzimes artej használatát)

PEELING KORONG:

A bőr Ph-ját kiegyensúlyozó, hidratáló és egyben peelingező kétoldalú korongokat használjuk. Először a simább nem dombornyomott oldalával körkörösén áttöröljük a bőrt az arc és nyak területén, majd megfordítjuk a korongokat és a dombornyomott oldalával is körkörös mozdulatokkal újra áttöröljük az egész arc és nyak területét. A végén nem kell lemosni! Várjunk 2-3 percet és elkezdhetjük a kezelést.

Eszköz beállítás:

Csavarjuk el a védőkupakot így a kupakon lévő csomagolás matrica leválik róla. Ezután állítsuk be a megfelelő mélységet. Mindig a 0.25 mm indítsunk majd ezután növeljük a megfelelő mélységre az eszközön a tűk hosszát. Ennek beállítása a mellékelt linken a videós anyagban található.

Vegyünk fel egy latex mentes(nitril) kesztyűt és kezdjük el a kezelést.

A kezelés közben adagoljuk a hatóanyagot az eszköz végén az ujjunk segítségével. Tartsuk 90 fokban az eszközt a kezelés alatt. Közben a kezünkkel mindig dolgozzuk el kis simítással az anyagot ami esetlegesen a bőr felszínén marad. Az eszközzel menjünk végig az egész arcon a mélységeknek megfelelően majd térjünk vissza azokra a részekre ahol mélyebb ráncok, redők vannak. Kb. 25-30 perc amit a bőrön (arc, nyak) töltünk az eszközzel, figyelve a vendég reakcióit. A bőr enyhe-közepes pirossága normális, a kezelés végére a fátyolmaszk használata után enyhül, másnapra el is múlik. A kezelés közben bármilyen szokatlan reakciót tapasztalunk, erős égő, viszkető, nagyon duzzadt bőrt a kezelést hagyjuk abba és tegyünk fel egy Dermathod fátyolmaszkot. Amennyiben nem múlnak a reakciók küldjük orvoshoz a vendéget.

A teljes felszívódás után tegyünk fel egy nyugtató hatású **Dermathod Triple Action fátyolmaszkot** az arc és nyak fedésére. 15 perc után távolítsuk el és vékonyak alkalmazzuk a **Dermathod Amisterol** krémet és fényvédőt amennyiben szükséges. (Amennyiben a vendégünk egy téli késő délutáni időpontra érkezett nem kell napfényvédőt használni.)

Világosítsuk fel a vendéget az utóápolásról.

VENDÉG KONZULTÁCIÓ, UTÓÁPOLÁS

Kérdezzük ki a vendéget minden kezelés előtt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy semmilyen kontraindikáció nincs.

Amennyiben van GDPR nyilvántartásunk vezessünk konzultációs lapot amin feljegyezhetjük a vendég adatait és aláírásával beleegyezik a kezelésbe.

Utóápolás:

TILOS a szolárium, szauna, uszoda, közös fürdő használata 24 órán keresztül.

Lehetőség szerint a kezelést követően min. 8 órát ne érje víz a bőrt.

A kezelés napján és másnap NE viseljen a vendég sminket.


A kezelés napján és másnap ne fogyasszon alkoholt.

A kezelés utáni használatra ajánljuk a vendégnek a KRX fényvédelemmel színezett hidratálót.

Pár napig érezhet a vendég feszülő érzést, ez teljesen normális. Bármilyen fájdalmas reakció, bőrkiütés vagy szokatlan reakció esetén keresse fel háziorvosát.


7-10 napig kerülje a savas/hámlasztós lemosók, szérumok használatát.

A kezelés végén dobjuk el az eszközt. Tilos újra felhasználni. Amennyiben leesik az eszköz vagy hozzáütődik valamihez és sérülnek a tűk, az eszközt ki kell cserélni nem folytatható a kezelés. A sérült tűk bőrkárosodást okozhatnak.

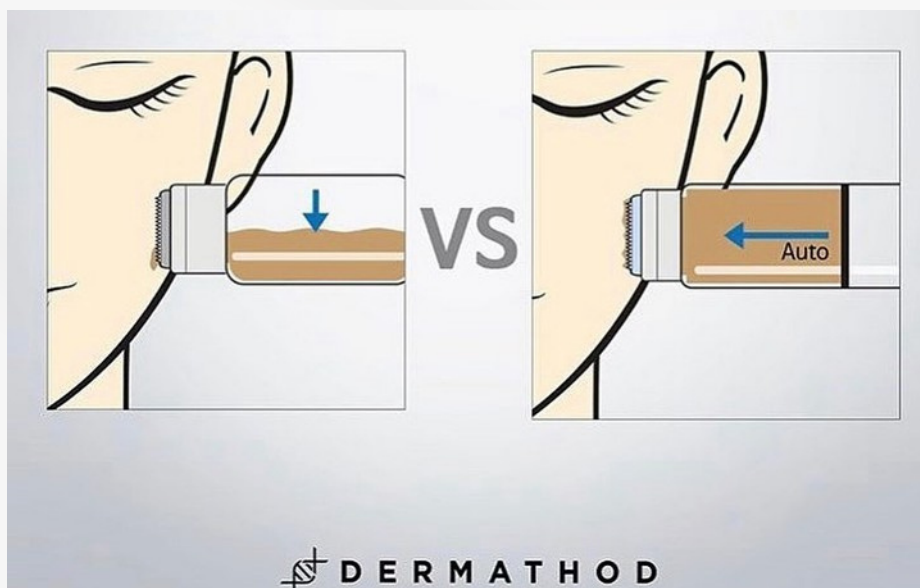


IRÁNYOK: MINDIG A BÉLYEGZŐ MOZGATÓ IRÁNYT HASZNÁLJUK A KEZELÉS ALATT.

1. lépés

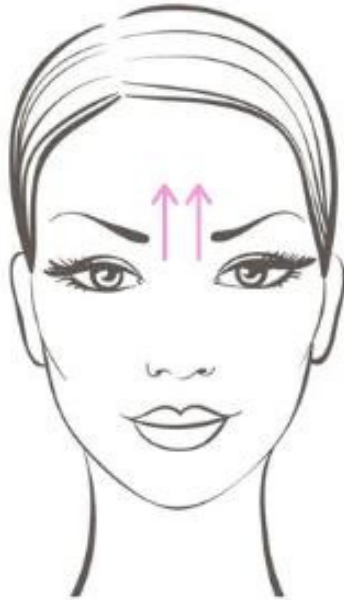

2. lépés

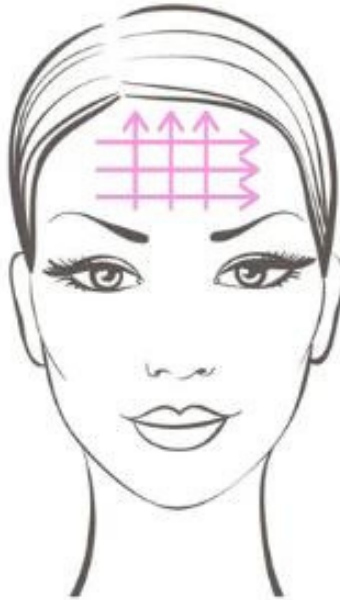

3. lépés



4. lépés



5. lépés



6. lépés



IRÁNYOK:

7. lépés



8. lépés



9. lépés



10. lépés

