

# Agujas Hipodérmicas BD

## Descripción de producto:

Aguja hipodérmica estéril en acero inoxidable . Utilizadas para inyecciones o extracciones de líquidos vía intradérmicas, subcutáneas, intramusculares e intravenosas.

## Características Generales

### Agujas con tecnología BD:

**Aguja Tribiselada PrecisiónGlide™** :  
Presencia de tres biselados en uno , para garantizar una inyección con menor dolor, menor fuerza de penetración y mejor proceso de cicatrización.

### Pulimento electrónico:

Un pulimento electrónico para un esmerilado fino con un terminado libre de irregularidades, que permite un deslizamiento suave a través de la piel y los tejidos, disminuyendo trauma y dolor.


### Paredes regulares estándar:

Las agujas con paredes delgadas tienen menos acero en la pared de la cánula y un diámetro interno proporcionalmente más grande. El diámetro externo es el mismo para las agujas con paredes estándares o delgadas.

### Variedad de biseles:

Con bisel regular, corto o intradérmico para ajustarse a las necesidades de la vía a utilizar.

## Aguja Hipodérmica BD

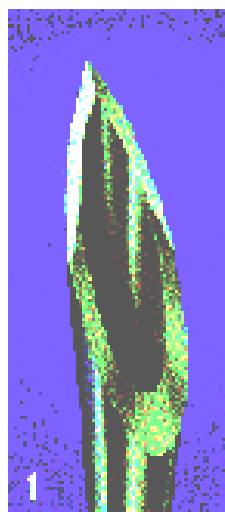

Tribiseladas



**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**  
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.  
PBX 572 40 60 – 268 30 00

1 de 3

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**  
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.  
PBX 572 40 60 – 268 30 00

### **Características Generales**

#### **Novedoso sistema de lubricación :**

Una formula única de siliconización de la totalidad de la cánula que disminuye la fricción, creando una aguja con una superficie más suave.

#### **Variedad de calibres:**

Con amplia línea de calibres para que el usuario seleccione de acuerdo a la vía, tipo de medicación y de paciente.

**Técnica de esterilización:** Oxido de Etileno.

**Vida útil partir de su fabricación:** 5 Años.

Siempre y cuando el empaque se mantenga íntegro y libre de humedad.

**Producto para usarlo una sola vez.**

#### **Condiciones de almacenamiento:**

Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

**Clasificación de Riesgo: IIA**

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.  
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.  
PBX 572 40 60 – 268 30 00**

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.  
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.  
PBX 572 40 60 – 268 30 00**

Referencia	Descripción	Presentación	Registro Sanitario
305108	Aguja hipodérmica estéril 30G x1"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
305107	Aguja hipodérmica estéril 30G x 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302358	Aguja hipodérmica estéril 27G x 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
305111	Aguja hipodérmica estéril 26G x 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302357	Aguja hipodérmica estéril 25G x 5/8"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302355	Aguja hipodérmica estéril 23 G x1"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302354	Aguja hipodérmica estéril 22G x 1 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302353	Aguja hipodérmica estéril 22G x 1"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302351	Aguja hipodérmica estéril 21G x 1"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302352	Aguja hipodérmica estéril 21G x 1 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302349	Aguja hipodérmica estéril 20G x 1"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
305176	Aguja hipodérmica estéril 2oG x 1 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
305189	Aguja hipodérmica estéril 19G x 1 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302346	Aguja hipodérmica estéril 18G x 1"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
302347	Aguja hipodérmica estéril 18G x 1 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
305198	Aguja hipodérmica estéril 16G x 1 1/2"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813
305197	Aguja hipodérmica estéril 16G G x 1"	Caja x 100 Unid	INVIMA 2008V-0001813

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**  
**Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.**  
PBX 572 40 60 – 268 30 00

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**  
**Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.**  
PBX 572 40 60 – 268 30 00