

GamaCide³

**Nettoyant désinfectant
pour équipements
médicaux et dentaires**

DIN 02409380



Élimination à large spectre en 3 minutes

- Élimination en 2 minutes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1), du virus de l'hépatite B du canard (VHBC) et du virus de l'herpès de type 1
- Désinfectant + nettoyant
- Multisurfaces
- Bactéricide, fongicide, virucide, tuberculocide
- Sans parfum

RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

EFFICACE SUR TOUTES VOS SURFACES

Cliniques dentaires • Cliniques médicales • Conciergerie • Nettoyage des services d'urgences • Cliniques vétérinaires • Installations de soins pour les animaux • Studios d'art corporel • Centres sportifs • Spas

Large spectre	Bactéricide, fongicide, virucide, tuberculocide
Surfaces compatibles	Plastique, vinyle lisse/texturé, cuivre/laiton, acier inoxydable, surfaces peintes, plastique acrylique, verre, aluminium brossé
Sécurité	Biodégradable, pochette rechargeable, cote sanitaire « 0 »



Pour obtenir plus de renseignements sur GamaCide ou pour commander, veuillez contacter votre directeur régional des ventes ou appeler Germiphene au 1 800 265-9931. Visitez notre site Web www.germiphene.com.

contrôle des infections | désinfection des surfaces

GamaCide³



Les lingettes GamaCide³ éliminent efficacement les microorganismes suivants à la température de la pièce (20° C) par un contact de trois minutes : *Mycobacterium terrae* 15755, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442, *Salmonella choleraesuis* ATCC 10708, souche de poliovirus de type I Chat ATCC VR-1562, *Trichophyton mentagrophytes* ATCC 9533, et virus de la grippe A, incluant le H1N1. Il suffit de deux minutes pour éliminer le virus de l'hépatite B du canard (VHBC), le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-I), et le virus de l'herpès de type 1.

Utilisez sur les surfaces dures et souples incluant : le plastique, la céramique, l'acier inoxydable, le chrome, l'acrylique, le cuir, le vinyle, le verre, le Plexiglas^{MD}, et l'émail cuit.

Compatible avec la plupart des matériaux d'empreinte dentaire et les prothèses dentaires.

Ne colle pas et ne laisse aucun résidu chimique dangereux lorsqu'il est utilisé selon les indications.


Disposez de façon sécuritaire par les méthodes d'élimination des déchets standard.

Ingrédients actifs :

- Chlorure d'ammonium quaternaire.....0.35 % M/M
- Alcool isopropylique.....20.00 % M/M

Classes de microorganismes * | Désinfection GamaCide³

Le PLUS DIFFICILE à éliminer

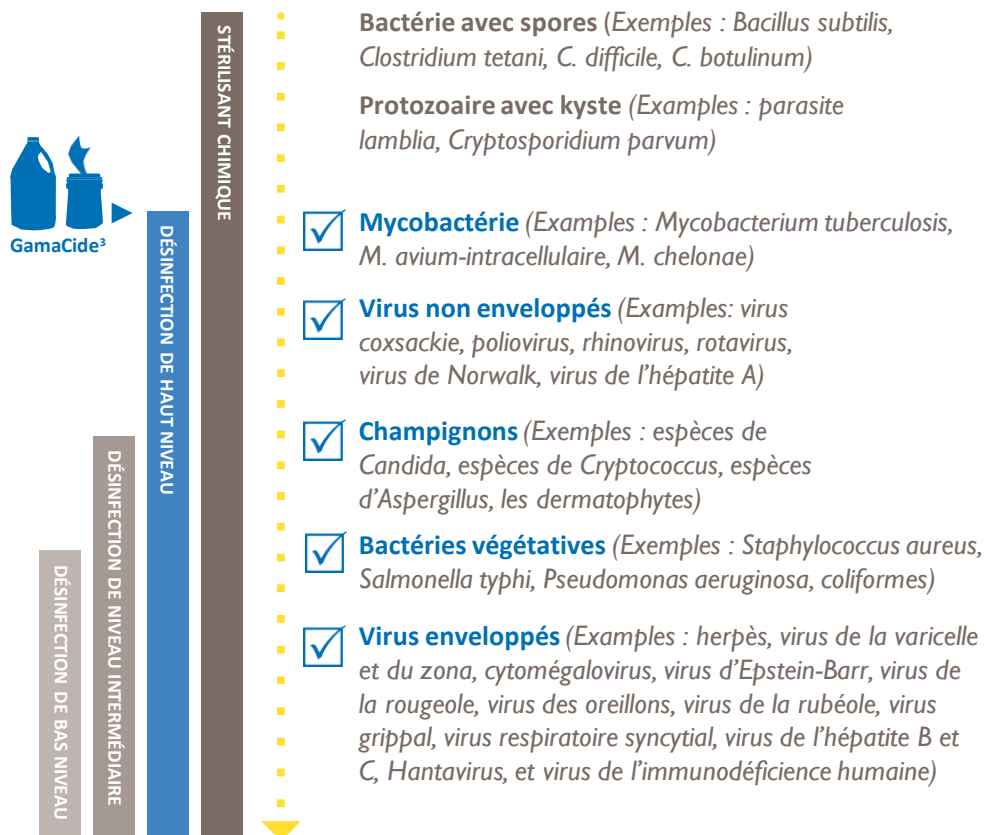

Essayez le liquide et les lingettes pour assurer le contrôle des infections dont vous avez besoin.



160 lingettes de grandeur moyennes (15 x 17 cm) et pochettes recharges de 160 lingettes

Non parfumé

Le PLUS FACILE à éliminer

* Source du graphique : Guide de prévention des infections : lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé.



Pour obtenir plus de renseignements sur GamaCide ou pour commander, veuillez contacter votre directeur régional des ventes ou appeler Germiphene au 1 800 265-9931. Visitez notre site Web www.germiphene.com.

prévention des infections | désinfection des surfaces