



ULTRAMAT S

VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE



SI SIMPLE 3 BOUTONS SEULEMENT

Il comporte 3 options de réglage du temps de trituration, 6, 8 et 10 secondes pour mélanger tous vos matériaux encapsulés. On peut arrêter l'unité à tout moment en appuyant sur ces boutons durant le fonctionnement ou simplement en soulevant le couvercle.

SI FACILE À NETTOYER!

Le capot hygiénique englobant facilite le nettoyage de contrôle des infections et la surface en plastique non poreux peut être nettoyée avec le désinfectant dentaire de votre choix.

FAIBLES VIBRATIONS ET EXTRÊMEMENT SILENCIEUX

À l'encontre de certains vibreurs d'amalgame, l'émission sonore de l'Ultramat S est faible. Une vibration minimale de toutes les parties externes garantie qu'il ne bougera pas de sa position de pose.

ADAPTÉ À TOUTES VOS CAPSULES

Les fourches pliables peuvent s'adapter à une multitude de capsules à extrémité arrondie (capsules d'amalgames) et également à celles à canule protubérante (capsules d'amalgames de ciment d'ionomère vitreux).



CARACTÉRISTIQUES

TRITURATION HOMOGENE ET PRECISE

L'Ultramat S comporte une minuterie à oscillation contrôlée par microprocesseur pour une trituration homogène et précise.

SORTIE HAUTE ENERGIE ET ENTREE BASSE ENERGIE

Possédant une fréquence de mélange de 4550 oscillations par minute [$\pm 1\%$], l'Ultramat S garantit le mélange complet de tout matériau dentaire tout en consommant relativement peu d'énergie.

BI-TENSION

L'Ultramat S fonctionne sur des tensions allant de 100 à 120 V et de 220 à 240 V, 50 et 60 Hz pour une compatibilité avec des tensions et des fréquences à puissances multiples.

0-10
SECONDES UN
MICROPROCESSEUR

4550
OSCILLATIONS

**120 &
240v**

AVANTAGES

Trituration homogène et précise

Faibles vibrations et extrêmement silencieux

Simplicité d'utilisation - 3 boutons seulement

Convient à toutes vos capsules

Safe and simple to use

Facile à nettoyer

Voyant basse puissance et fonction d'arrêt

2 ans de garantie

Bi-tension

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur	217mm	8.5"
Profondeur	173mm	6.75"
Hauteur	180mm	7.12"
Tension	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Poids	2.43kg	5.4lbs

VOYANT BASSE PUISSANCE ET FONCTION D'ARRÊT

Si la puissance devait chuter en dehors des plages permises de 100-120 V et de 220-240 V, le voyant de puissance clignotera en bleu et l'unité ne fonctionnera pas tant que la puissance correcte ne lui est pas appliquée. Ceci empêche que les matériaux soient sous-mélangés.

ATTRIBUT DE SÉCURITÉ

L'Ultramat S s'arrêtera immédiatement de mélanger dès l'ouverture du capot transparent.


POUT TOUS TYPES DE CAPSULES

L'Ultramat S peut être utilisé pour la trituration de tous types de capsules de matériaux dentaires de SDI aussi bien que de toutes autres origines. Le tableau ci dessous liste quelques exemples de capsules de SDI de matériaux dentaire.

MATERIAUX DENTAIRE (CAPSULES)	TEMPS DE TRITURATION (SECONDES) AVEC ULTRAMAT 2
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus / Riva Self Cure [Régulier et Rapide]	10



GAMME DISPONIBLE

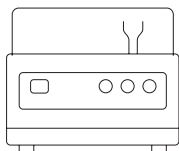

EQUIPMENT

Ultramat S 5546058
 [All countries - includes power cord for the region the product is shipped to]

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE. OUR VISION.



ACN 008 075 581



FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
 Par SDI Limited
 3-15 Brunsdon Street,
 Bayswater, Victoria 3153
www.sdi.com.au

AUSTRALIE 1 800 337 003
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
IRLANDE 01 886 9577

ITALIE 800 780625
NOUVELLE ZÉLANDE 0800 734 034
ESPAGNE 00800 022 55 734
ROYAUME-UNI 00800 022 55 734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166