
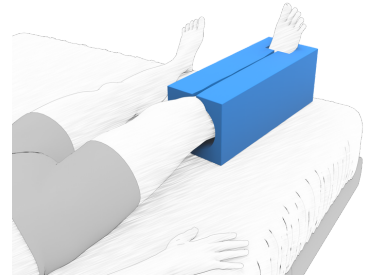
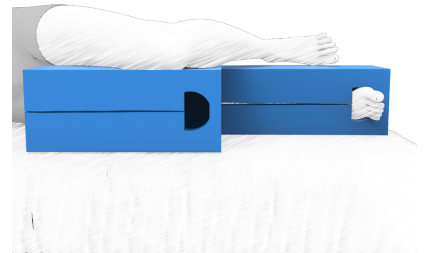
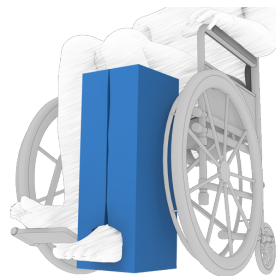


Lassekudden Basic

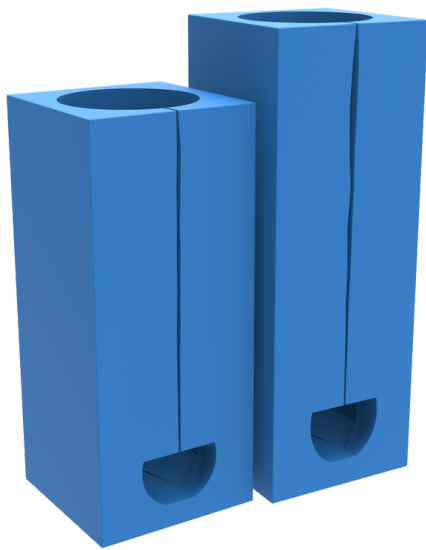

Avlastningskudde för ben

Lassekudden är en avlastningskudde som motverkar och förebygger trycksår, ger stöd samt avlastar hälar. Den är framtagen vid ortopedkliniken på Huddinge sjukhus, av Lars Strömberg (sjuksköterska). Kudden används för att minska risken för hälsår och för att förebygga trycksår hos patienter som ligger mycket. Den används också för akuta höftpatienter, i ambulansen, genom röntgen samt efter operation.

Lassekudden

- ger avlastning vid rygg- och sidoläge samt i sittande position
- motverkar rotation av benet
- behöver inga spännband – ingen risk för trycksador
- medverkar till bättre adduktionsläge efter höftplastiker
- kan anpassas individuellt genom att man skär till önskad modell

Kudden är tillverkad av skumplast. Går att få med löst överdrag, av bomull, alternativt av mjukt och bekvämt PU-material. Hygienöverdraget tas enkelt av/på med hjälp av dragkedja och är lätt att rengöra.

Art nr

- 447-S Lassekudden Basic (47 cm, skumplast)
- 455-S Lassekudden Basic (55 cm, skumplast)
- 447-HS Lassekudden Basic (47 cm, hygienöverdrag)
- 455-HS Lassekudden Basic (55 cm, hygienöverdrag)
- 447-B Lassekudden Basic (47 cm, bomullstrikå)
- 455-B Lassekudden Basic (55 cm, bomullstrikå)

Skötselråd

Se sida 2.

Återvinning

Efter förbrukning lämnas produkten till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

Fakta

Mått: 47 x 20 x 19,

55 x 20 x 19 cm

Garanti: 2 år

(OBS! Garantin gäller ej om skada uppstått på grund av mekanisk påverkan som t.ex. användning av vassa föremål.)

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Material: Skumplast (Polyeter 23kg/m³)

Material i överdrag: Bomull, alt.

Polyuretan, polyester

Svensktillverkad 

Lassekudden Basic

Skötselråd

Vid normal rengöring av Lassekudden i skumplast rengörs produkterna genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. De kan också rengöras med ånga. Produkterna torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).



Överdrag i bomullstrikå

Kan tvättas i maskin 70°C. Torka i rumstemperatur eller i torkskåp.



Hygienskydd

Ett överdrag i polyester och polyuretan. Ett slitstarkt elastiskt överdrag, försett med en vattentät dragkedja. Dragkedjan är böjd i ena kortsidan för att underlätta appliceringen över kudden. Materialet ångandas och fukt transporteras ut från skyddet, bort från användaren. Svetsade sömmar ger en bra barriär mot bakterier.

Rengöring:

Torka av med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Skyddet kan tvättas i maskin 95°C och torktumlas eller dropptorka.

Klor och fenoler kan påverka ytan negativt och bör undvikas.

