


**NOTA INFORMATIVA**
**Denominazione: REFLEXX care L600**
**Data: 14/01/2021 Rev: 02**
**FABBRICANTE**

 REFLEXX SpA  
 Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)  
 Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504  
[info@reflexx.com](mailto:info@reflexx.com)  
[www.reflexx.com](http://www.reflexx.com)

**Imballo**

Cod./	Confez	Carto
L600/ XS (6)	8032891632130	8032891637135
L600/ S (7)	8032891632147	8032891637142
L600/ M (8)	8032891632154	8032891637159
L600/ L (9)	8032891632161	8032891637166
L600/ XL (10)	8032891632178	8032891637173

**DESCRIZIONE:** ■ Guanto monouso senza polvere per ispezione non sterile ■ **Materiale:** : lattice di gomma naturale (contenuto proteico < 50 µg/g) ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** verde ■ **Finitura:** internamente clorinato e trattato con estratto di aloe vera, effetto idratante; superficie esterna microruvida ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

**CONFORMITA' E PRESTAZIONI**
**Dispositivo Protezione Individuale cat III**

0465 ANCI\_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)

Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO C - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009

**Dispositivo Medico**

Reg UE 2017/745 -EN 455 1,2,3 &amp; 4

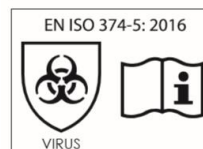
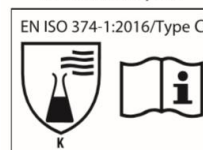
(CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE)

 CE  
 cat III  
 classe I

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min(mm)	Largh. (±5 mm)
L600/ XS (6)	240	75
L600/ S (7)	240	85
L600/ M (8)	240	95
L600/ L (9)	240	106
L600/ XL (10)	240	116

<b>Spessore</b> mm	Palmo (+/- 0.03)	0.12
<b>EN 455-2:2009/A1</b>	Carico di rottura	≥6 N
<b>EN ISO 374-5:2016</b>	Protezione da microrganismi (batteri e funghi)	Protezione da virus ISO 16604:2004
	superata	superata

EN ISO 374-1:2016				
Composto chimico:	COD	EN 16523-1:2015 TIPO C		EN 374-4:2013
		Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
Sodio idrossido 40%	K	6	>480'	1.0%

**REG EU 2016/425**

**EN 420:2003 + A1:2009**

RISCHI DAI QUALI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:

Codice sostanza chimica	Protezione offerta
K Idrossido di sodio 40 %	CAS:1310-73-2 Protezione da uso di basi inorganiche

**CONSIGLI DI UTILIZZO** Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica ■ I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si

raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e IV. In caso di reazione, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su [www.reflexx.com](http://www.reflexx.com)